

riva star

TOOTH DESENSITISING AGENT AND CAVITY CLEANSER

DESENSIBILISIERUNGSMITTEL FÜR ZÄHNE UND KAVITÄTENREINIGER

AGENT DÉSENSIBILISANT DENTAIRE ET NETTOYANT DE CAVITÉ

AGENTE DESENSIBILIZZANTE DENTALE E DETERGENTE PER CAVITÀ

AGENTE DESENSIBILIZANTE DEL DIENTE Y LIMPIADOR BUCAL

AGENTE DESSENSIBILIZANTE PARA OS DENTES E LIMPADOR DE CAVIDADES

ŚRODEK ZNOSZĄCY NADWRAŻLIWOŚĆ ZĘBÓW I PRZEZNACZONY DO CZYSZCZENIA UBYTKÓW

TANDDESENSIBILISATOR EN HOLTEREINIGER

VERKSAM MOT TAND ÖVERKÄNSLIHET OCH FÖR HÅLRENGÖRING

DESENSITIVERINGS- OG KAVITETSRENSSEMIDDEL

AINE HAMPAAAN DESENSITISOINTIIN JA KAVITEETIN PUHDISTUKSEEN

MUNNVANN SOM MOTVIRKER FØLSOMHET OG HULL I TENNENE

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ

DIŞ HASSASIYETİ AZALTICI VE KAVİTE TEMİZLEYİCİ

PROSTŘEDEK KE SNÍŽENÍ CITLIVOSTI ZUBŮ A OČIŠTĚNÍ KAVITY

AGENT DESENSIBILIZANT ȘI SOLUȚIE DE CURĂȚARE A CAVITĂȚILOR DENTARE

ДЕСЕНЗИТИРАЩ АГЕНТ ЗА ЗЪБИ И ПОЧИСТВАЩ КАВИТЕТА АГЕНТ

ZUBNÝ DEAKTIVÁTOR CITLIVOSTI A ČISTIČ DUTINY

FOG ÉRZÉKENYSÉG MEGSZÜNTETŐ ÉS ÜREG-TISZTÍTÓSZER

SREDSTVO PROTIV ZUBNE PREOSJETLJIVOSTI I ZA HIGIJENU USNE ŠUPLJINE


SREDSTVO ZA DESENZIBILIZACIJO IN ČIŠČENJE KAVITETE

DANTŲ JAUTRUMĄ MAŽINANTI MEDŽIAGA IR ERTMIŲ VALOMOJI PRIEMONĖ

LĪDZEKLIS ZOBU JUTĪGUMA MAZINĀŠANAI UN MUTES DOBUMA SKALOŠANAI

DESESIBILISEERIV AINE JA HAMBAAUKUDE PUHASTUSVAHEND

牙齿脱敏剂和窝洞清洗剂

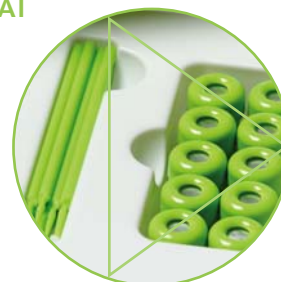

Βιομεμβράνη + παράγοντας εξουδετέρωσης ευαισθησίας



Ένα προϊόν **ΠΟΛΛΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ** που περιέχει τρία ισχυρά συστατικά:

★ **ΑΣΗΜΙ**

★ **ΙΩΔΙΔΙΟ**

★ **ΦΘΟΡΙΔΙΟ**

Όλα αυτά τα συστατικά είναι άκρως αποτελεσματικά για άμεση ανακούφιση από την υπερευαισθησία.

Τρεις νεωτεριστές μαζί

Το προϊόν Riva Star σχεδιάστηκε από τρεις διάσημους Αυστραλούς κλινικούς γιατρούς που συνένωσαν τις κλινικές γνώσεις και τις εμπειρίες τους από τη χρήση αυτών των τριών εξαιρετικών συστατικών και τις συνδύασαν σε ένα προϊόν ΠΟΛΛΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ – στο Riva Star!

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

- Βοηθά στην εξουδετέρωση της βιομεμβράνης¹⁻³
- Αποτρέπει τον σχηματισμό βιομεμβράνης¹⁻³
- Μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από την τερηδόνα⁴


Αποτέλεσμα απευαισθητοποίησης που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια

Οι κλινικές μελέτες υποστηρίζουν το άμεσο αποτέλεσμα του Riva Star που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια⁷.


Αντιβακτηριακή δράση

Το Riva Star είναι ένας αποτελεσματικός παράγοντας εξουδετέρωσης της βιομεμβράνης. Η διαπίστωση αυτή υποστηρίζεται από αποτελέσματα μελετών του πανεπιστημίου Otago (στη Νέα Ζηλανδία) που δείχνουν ότι το Riva Star έχει μεγαλύτερη ζώνη αναστολής της ανάπτυξης τεσσάρων βακτηριακών ειδών σε σύγκριση με το υποχλωριώδες νάτριο.

Αντιμικροβιακή δράση NaClO και SDF/KI έναντι ενδοδοντικών παθογόνων⁸

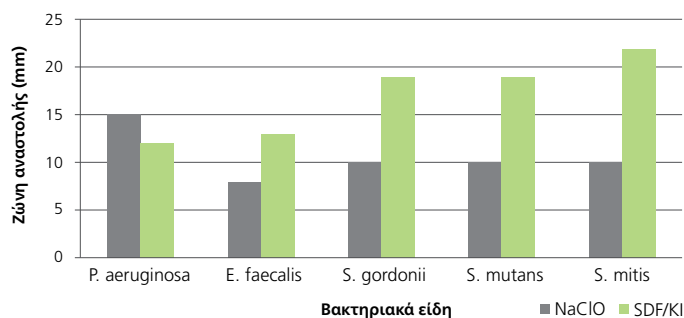

Εκλεκτικό άγαρ σε καλλιέργεια S. mutans

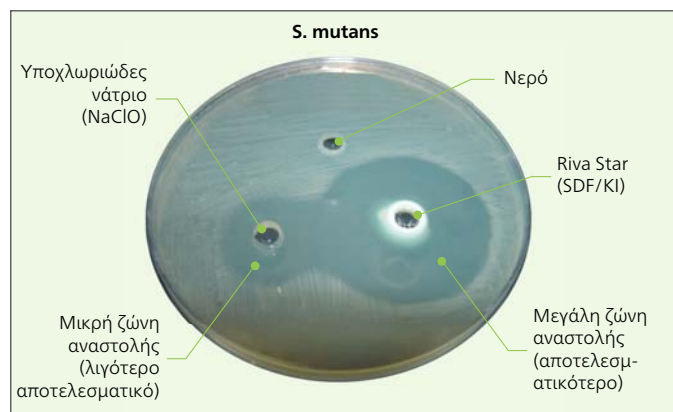

Μη επεμβατική μέθοδος

Το Riva Star είναι απολύτως απαραίτητο για κλινικούς γιατρούς που εφαρμόζουν μεθόδους Ελάχιστα Επεμβατικής Οδοντιατρικής (Minimally Invasive Dentistry (MID))^{1-3,5}. Φροντίζει την οδοντίνη και μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του δοντιού.

Αυξάνει την αντοχή συγκόλλησης υαλοϊονομερών κονιών (GIC).

Η προετοιμασία των επιφανειών του δοντιού με Riva Star αποτελεί ιδανική λύση για την ενίσχυση της πρόσφυσης υαλοϊονομερών στην οδοντίνη⁶.

Πατενταρισμένη διαδικασία

Σε αντίθεση με άλλα συστήματα φθοριούχου αργύρου, με την πατενταρισμένη διαδικασία δύο σταδίων του Riva Star ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος δημιουργίας κηλίδων. Με την εφαρμογή του διαλύματος ιωδιούχου καλίου πάνω από τον φθοριούχο άργυρο, δημιουργείται ένα κρεμώδες λευκό ίζημα ιωδιούχου αργύρου το οποίο και εκπλένεται.

Δεν δημιουργεί κηλίδες

Πριν



Μετά



Ενδείξεις

- Άμεση καταπολέμηση υπερευαισθησίας οδοντικής κοιλότητας
- Καθαρισμός οδοντικής κοιλότητας

riva star



1. Knight GM, McIntyre JM, Craig G, Zilm PS, Gully N.; Inability to form a biofilm of Streptococcus mutans on silver fluoride-and potassium iodide-treated demineralized dentin. Quintessence international (Berlin, Germany: 1985) 2009;40:155.
2. Knight GM.; The Pharmacological management of dentine to protect against plaque microorganism degradation. PhD Thesis University of Adelaide 2008.
3. Knight GM, McIntyre JM, Craig G, Zilm PS, Gully NJ.; Differences between normal and demineralized dentine pretreated with silver fluoride and potassium iodide after an in vitro challenge by Streptococcus mutans. Australian Dental Journal 2007;52:16-21.
4. Knight GM.; Silver Bullet. Australian Dental Journal 2010; Aesthetic update.
5. Knight GM, McIntyre J, Craig G.; Ion uptake into demineralized dentine from glass ionomer cement following pretreatment with silver fluoride and potassium iodide. Australian Dental Journal 2006;51 :23 7 -24I.
6. Knight GM, McIntyre JM.; The effect of silver fluoride and potassium iodide on the bond strength of auto cure glass ionomer cement to dentine. Australian Dental Journal 2006;51:42-45.
7. Craig G. G.; Clinical evaluation of a diamine silver fluoride/potassium iodide as a dentine desensitizing agent: 2-year follow up.
8. Heo J. Tompkins GR, Love RM.; Evaluation of the Antimicrobial Activity of Combined Silver Diamine Fluoride (SDF) and Potassium Iodide (KI) as an Endodontic Medicament; University of Otago, New Zealand, 2010.



Made in Australia by SDI Limited
 Bayswater, Victoria 3153
 Australia 1 800 337 003
 Austria 00800 022 55734
 Brazil 0800 770 1735
 France 00800 022 55 734
 Germany 0800 100 5759
 Ireland 01 886 9577
 Italy 800 780625
 New Zealand 0800 734 034
 Spain 00800 022 55 734
 United Kingdom 00800 022 55 734
 USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

Riva Star kit

10 x Riva Silver Capsules
 10 x Riva Green Capsules
 2 x Gingival Barrier
 παρελκόμενα

Κωδικός επαναληπτικής παραγγελίας 8800501

