

 **SprintRay**







1 IN DENTAL 3D PRINTING

Η δύναμη της SprintRay βρίσκεται στην

Σάρωση, εκτύπωση και μετεπεξεργασία σχεδιασμένες να συνεργάζονται,

Midas Digital Press

Ιδανικό για:


-  Στεφάνες
-  Όψεις
-  Ένθετα
-  Επένθετα

Σάρωση >



Σαρωτής*

Σχεδιασμός >

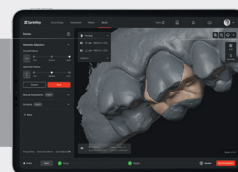











AI Studio

Digital Press

Pro 2 Digital Printer

Ιδανικό για:


-  Οδοντιατρικά Εκμαγεία
-  Απευθείας Εκτυπωμένα Retainer
-  Χειρουργικούς Νάρθηκες
-  Συμβατικές Οδοντοστοιχίες
-  Υβριδικές Οδοντοστοιχίες
-  Δοκιμαστικές Οδοντοστοιχίες
-  Στεφάνες και Γέφυρες
-  Όψεις
-  Νάρθηκες Σύγκλεισης
-  Αθλητικούς Νάρθηκες

Σάρωση >



Σαρωτής*

Σχεδιασμός >

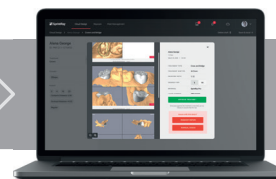


Σχεδιασμός Cloud

Ψηφιακή
εκτύπωση

*Σαρωτής τρίτων, δεν διατίθεται από την SprintRay

Ολοκληρωμένη Επικυρωμένη Ροή Εργασίας

για μια εμπειρία χωρίς προβλήματα.

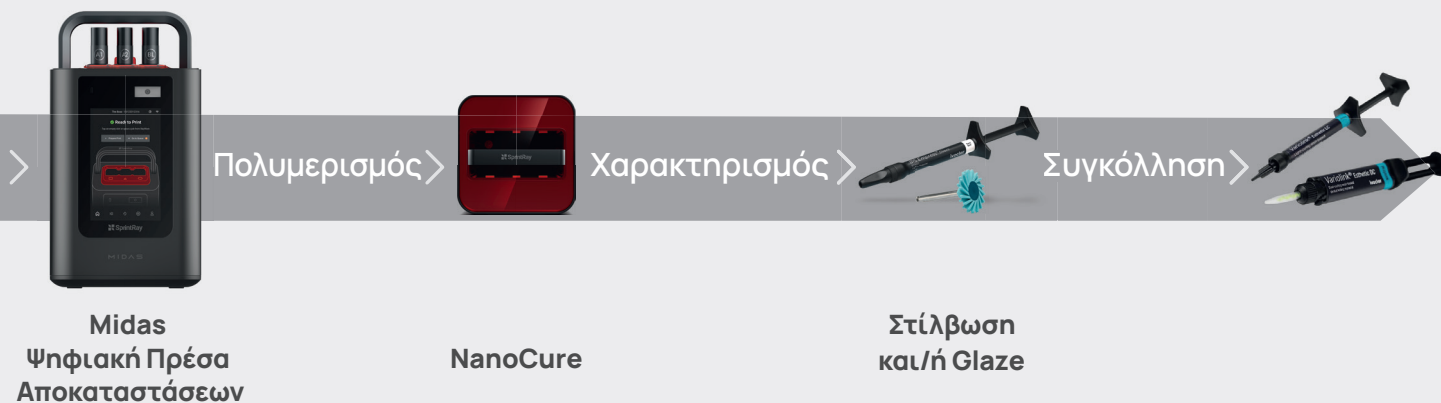

DIGITAL PRESS

MIDAS

ΕΥΦΥΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟ

Digital Press Stereolithography (DPS)

Ο 3D εκτυπωτής Midas είναι μια ολοκαίνουργια λύση για αποκαταστάσεις στο ιατρείο. Το DPS συνδυάζει τη δεξαμενή, τη ρητίνη και την πλατφόρμα σε μία μόνο κάψουλα, επιτρέποντας την εκτύπωση με υλικά έως 10 φορές πιο παχύρρευστα από αυτά των συμβατικών 3D εκτυπωτών.

**Εκτυπώστε μια σειρά
από αποκαταστάσεις σε 10 λεπτά**



Έως
3

Στεφάνες



Έως
6

Ένθετα/Επένθετα



Έως
9

Όψεις

Συνδυασμός εφαρμογών στις 3 κάψουλες



Κάψουλα Midas

Το Midas χωράει
έως και τρεις κάψουλες
ταυτόχρονα.





Μία Κάψουλα, Άπειρες Δυνατότητες

Η Κάψουλα Midas περιέχει όλα όσα χρειάζεστε για εκτύπωση. Οι ρητίνες υψηλού ιξώδους δεν αποτελούν πρόβλημα - συμπεριλαμβανομένων αυτών με κεραμική ενίσχυση και άλλων ρητινών υψηλού ιξώδους με ανόργανα πληρωτικά.

Γρήγορο

Εκτύπωση αποκαταστάσεων χρησιμοποιώντας ρητίνες υψηλού ιξώδους με ανόργανα πληρωτικά, σε λίγα λεπτά με τεχνολογία DPS.

Εύκολο

Σαρώστε μια κάψουλα, τοποθετήστε την και στη συνέχεια η αποκατάστασή σας θα είναι έτοιμη σε λιγότερο από 10 λεπτά.

Ριζικά Διαφορετικό

Πατενταρισμένη μέθοδος εκτύπωσης ξεκλειδώνει μελλοντική καινοτομία βιοϋλικών.



Βήμα 1 Σάρωση

Σαρώστε την κάψουλα χρησιμοποιώντας τον σαρωτή γραμμωτού κώδικα.



Βήμα 2 Τοποθέτηση

Τοποθετήστε την κάψουλα όπου σας υποδεικνύει ο εκτυπωτής.



Βήμα 3 Πίεση

Το Midas θα πιέσει έως και 3 κάψουλες σε 10 λεπτά.



Βήμα 4 Αφαίρεση

Αφαιρέστε την πλατφόρμα κατασκευής - η αποκατάστασή σας είναι έτοιμη.

Σχεδιάστε σε λίγα λεπτά με το AI Studio


Το AI Studio συνδυάζει την ευκολία του AI σχεδιασμού με την ευελιξία του CAD, για να δημιουργήσει μια απλή, βασισμένη σε cloud σουίτα σχεδιασμού.

Ο σχεδιασμός μιας αποκατάστασης με το Studio είναι εύκολος για όλους ενώ οι επιλογές εξατομίκευσης, όπως οι διορθώσεις ορίων και προσαρμογής, βοηθούν στη δημιουργία της τέλει εφαρμογής.


Όταν αγοράζετε το Midas, θα ξεκλειδώσετε πρόσβαση στο AI Studio και σε απεριόριστη σχεδίαση με τεχνητή νοημοσύνη για ένα έτος.



Ανέβασμα σαρώσεων

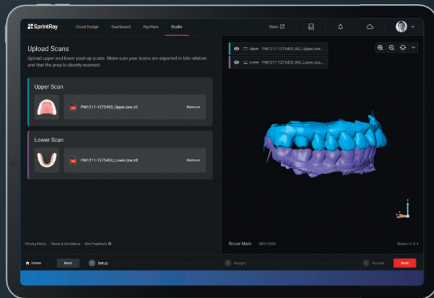

Ανέβασμα σαρώσεων

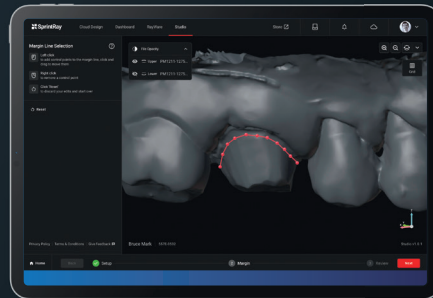

Τελικές ρυθμίσεις



Οι ροές εργασίας για αποκαταστάσεις του Midas υποστηρίζονται από τους αξιόπιστους οδοντιατρικούς συνεργάτες μας:

 DEXIS

exocad

iTero™

ivoclar

MEDIT

3shape▶




Μπορείτε να βρείτε όλους τους οδηγούς σχετικά με την ενσωμάτωση του σαρωτή σας με το σύστημα SprintRay σαρώνοντας τον κωδικό QR.

Τί μπορεί να κάνει το Midas για εσάς;



Παρασκευασμένα
δόντια έτοιμα
για σάρωση

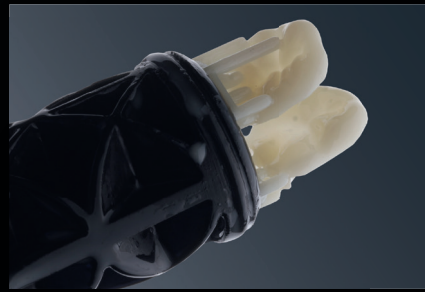

Εκτυπωμένα overlays
σε 10 λεπτά



Μετά το γυάλισμα
και το glazing

Ξεπερνώντας τους περιορισμούς των άμεσων αποκαταστάσεων

Οι άμεσες σύνθετες ρητίνες δεν πολυμερίζονται πλήρως—συνήθως επιτυγχάνουν μόνο περίπου 60% μετατροπή δεσμού. Αυτός ο ατελής πολυμερισμός μπορεί να μειώσει την αντοχή και την αντίσταση στη φθορά, οδηγώντας σε ταχύτερη διάσπαση με την πάροδο του χρόνου.

Ανώτερη Απόδοση με Τρισδιάστατα Εκτυπωμένες Ρητίνες

Χάρη στην προηγμένη χημεία πολυμερών και τα λειτουργικοποιημένα πληρωτικά, οι 3D εκτυπωμένες ρητίνες πολυμερίζονται με υψηλή θερμότητα και έντονο υπεριώδες φως, επιτυγχάνοντας πάνω από 90% μετατροπή δεσμού.




Τελική αποκατάσταση

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Pro 2

Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

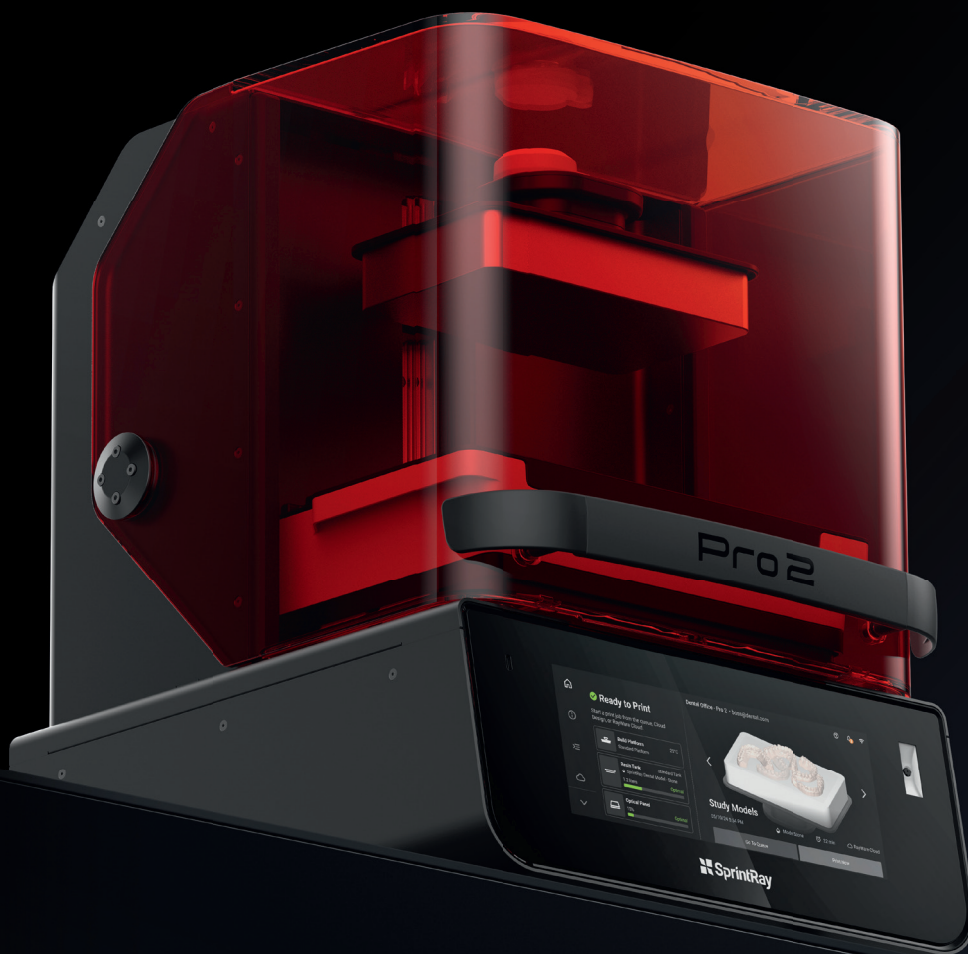

Ακρίβεια 35μm

Η πατενταρισμένη τεχνολογία Optical Panel προσφέρει στο Pro 2 ανάλυση 35μm.

Τετραπλάσια Παραγωγικότητα

Εκτυπώστε έως και 6 οδοντικά τόξα σε μία μόνο εργασία ή χρησιμοποιήστε το Arch Kit για διπλάσια ταχύτητα εκτύπωσης.

15+ Ροές εργασίας

Εκτυπώστε νυχτερινούς νάρθηκες, στεφάνες, εκμαγεία, επιεμφυτευματικές οδοντοστοιχίες και πολλά άλλα.

Η Επανάσταση της Ακρίβειας

Το SprintRay Pro 2 έχει κατασκευαστεί για να είναι ο πιο ακριβής τρισδιάστατος εκτυπωτής στην οδοντιατρική.

Από τα ανακατασκευασμένα προφίλ ρητίνης μέχρι το πατενταρισμένο Οπτικό Πάνελ, κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τα αποτελέσματά σας σε 15+ οδοντιατρικές ενδείξεις.

Βελτιστοποιημένη ροή εργασίας

Με το Pro 2, τίποτα δεν έχει αφηθεί στην τύχη. Σας προσφέρει περισσότερες ενδείξεις σε λιγότερο χρόνο.

Οδοντιατρικά εκμαγεία

6 εκμαγεία
σε 22 λεπτά



Χειρουργικοί νάρθηκες

6 νάρθηκες
σε 33 λεπτά



Νυκτερινοί νάρθηκες

6 νάρθηκες
σε 48 λεπτά



Συμβατικές οδοντοστοιχίες

6 βάσεις
οδοντοστοιχιών
σε 109 λεπτά



Υβριδικές οδοντοστοιχίες

6 υβριδικές
σε 27 λεπτά



Κέντρο ελέγχου ροής εργασίας

Ένας υπολογιστής με οθόνη αφής 12" βοηθά στη ροή εργασίας σας με εύχρηστο περιβάλλον χρήστη και ενσωματωμένο σαρωτή γραμμωτού κώδικα για παρακολούθηση των ιατρικών συσκευών.

Arch Kit

2 φορές ταχύτερες εκτυπώσεις, βελτιστοποιημένο για ταχύτητα. Διαθέτει μικρότερη πλατφόρμα κατασκευής από ανοδιωμένο αλουμίνιο που αντιστέκεται στη διάβρωση και μικρότερη δεξαμενή ρητίνης για τη διατήρηση του υλικού.



Συγκολλούμενες
αποκαταστάσεις
σε 15 λεπτά με το Arch Kit

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Διπλασιάστε την Παραγωγή σας: Εκτυπώστε δύο διαφορετικές odontιατρικές αποκαταστάσεις ταυτόχρονα

Η προσθήκη του **Duo Kit** στον εκτυπωτή σας Pro 2 βελτιστοποιεί τις ροές εργασίας, προσφέρει ευελιξία και μειώνει τα απόβλητα σε πολλαπλές ενδείξεις και αποχρώσεις, καθιστώντας το οδοντιατρείο σας ακόμα πιο παραγωγικό.



Βάση και δόντια οδοντοστοιχίας



Γέφυρες και χειρουργικοί νάρθηκες



Εκμαγείο και αποκατάσταση



Άμεσα Retainer 3D εκτύπωσης

Η ρητίνη της SprintRay Retainer, για νάρθηκες διατήρησης αποτελέσματος, παρέχει υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένα Retainer με εξαιρετική ανθεκτικότητα και διαύγεια. Σχεδιασμένη αποκλειστικά για χρήση με εκτυπωτές SprintRay και τη συσκευή πολυμερισμού NanoCure, αυτή η ρητίνη διασφαλίζει ότι οι ασθενείς σας λαμβάνουν Retainer που όχι μόνο εφαρμόζουν τέλεια αλλά αντέχουν και στη δοκιμασία του χρόνου.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ

>40 MPa

ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

>1000 MPa

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ

>1000 MPa

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ

>35 MPa

Αυτή η ρητίνη αποτελεί μέρος ενός πλήρως επικυρωμένου βιοσυμβατού συστήματος άμεσης εκτύπωσης Retainer.

Με αυτήν την καινοτομία, οι οδοντίατροι μπορούν να προσβλέπουν στην παραγωγή Retainer υψηλής ποιότητας με ακρίβεια και ευκολία.

* Ο χρόνος εκτύπωσης και η χρήση υλικού βασίζονται στη μέση χρήση και μπορούν να διαφέρουν σε ατομική βάση. Οι χρόνοι ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με τις ενημερώσεις των παραμέτρων εκτύπωσης.



22 ΛΕΠΤΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

55 Retainer/500g
35 λεπτά χρόνος εκτύπωσης*

Ρητίνες SprintRay

Η μεγάλη μας ποικιλία οδοντιατρικών υλικών τρισδιάστατης εκτύπωσης έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιεί στο έπακρο το σύστημα SprintRay που διαθέτετε. Αναπτυγμένες και δοκιμασμένες για κορυφαία απόδοση στην ψηφιακή οδοντιατρική, οι ρητίνες SprintRay έχουν κατασκευαστεί για να επιτυγχάνουν ανώτερα αποτελέσματα.

Μόνιμες αποκαταστάσεις

Ceramic Crown

Μια πρωτοποριακή ρητίνη με κυρίαρχη κεραμική σύνθεση που αποτελείται από πάνω από 50% κεραμικό για αποκαταστάσεις σε λιγότερο από μία ώρα.

Οι 3D εκτυπωμένες εργασίες: στεφάνες, ένθετα, επένθετα και όψεις δεν ήταν ποτέ τόσο αισθητικές.

Η ρητίνη με κυρίαρχο συστατικό το κεραμικό, έχει εύκολο φινίρισμα και είναι ακτινοσκιερή.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ: 150 MPa ± 25

ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 7.5



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

για Midas	για Pro2
• Bleach	• Bleach
• A1	• A1
• A2	• A2
• A3	• A3
• B1	• B1
	• C2
	• D2

14 ΛΕΠΤΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ*

70 ΣΤΕΦΑΝΕΣ
ΑΝΑ ΦΙΑΛΗ
250g

3 ΛΕΠΤΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

*Με το Pro 2 Arch Kit

Υβριδικές Οδοντοστοιχίες

OnX Tough 2

Ρητίνη τρισδιάστατης εκτύπωσης κατηγορίας IIa,
εγκεκριμένη για ακίνητες υβριδικές οδοντοστοιχίες

Το υλικό είναι σχεδιασμένο για οπτική απόδοση
και σταθερότητα χρώματος, για φυσική αισθητική.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ: 126 MPa
Υψηλότερη αντοχή στην κάμψη διασφαλίζει ότι
η αποκατάσταση δεν θα σπάσει κατά την κανονική χρήση

ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 4281 MPa
Υψηλότερο μέτρο ελαστικότητας
αποτρέπει την παραμόρφωση,
η οποία μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια
της αποκατάστασης

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΡΑΥΣΗΣ: 1033 J/m²
Υψηλότερη εργασία θραύσης σημαίνει
μεγαλύτερη αντοχή στη θραύση.



Επιτύχετε
τις καλύτερες
εκτυπώσεις
OnX Tough 2
με το Pro 2

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

για Midas	για Pro2
• Bleach	• Bleach
• A1	• Hollywood White
	• A1
	• A2
	• B1



24 ΛΕΠΤΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ*

30 ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΝΑ ΦΙΑΛΗ
500g

5 ΛΕΠΤΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

*Με το Pro 2 Arch Kit

Οδοντιατρικά Εκμαγεία

DENTAL MODEL


Φιάλες 3 Kg, για ογκώδη παραγωγή.

- Άνω του 20% ταχύτεροι χρόνοι εκτύπωσης
- Ενισχυμένες μηχανικές ιδιότητες
- Χρώματα: Γραφίτης, Dune



DIE AND MODEL 2 STUDY MODEL 2

Διατίθενται στα χρώματα Ταν και Γκρι
για εξαιρετικά ακριβή εκμαγεία
ή σε Λευκό για εκμαγεία μελέτης.

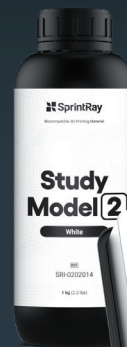

2 ΛΕΠΤΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

56 εκμαγεία/1kg
22 λεπτά
χρόνος εκτύπωσης

Χειρουργικοί νάρθηκες

SURGICAL GUIDE 3

Τοποθετήστε εμφυτεύματα με σιγουριά με διαυγείς χειρουργικούς νάρθηκες και υψηλή αντοχή στην κάμψη και μέτρο ελαστικότητας.



3 ΛΕΠΤΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

56 νάρθηκες/1kg
33 λεπτά
χρόνος εκτύπωσης

Στεφάνες

CROWN

Ρητίνη για 3D εκτύπωση μονών στεφανών, ένθετων, επένθετων και όψεων.



- Υβριδική ρητίνη με κεραμική ενίσχυση
- Υψηλή αντοχή κι αντίσταση στη φθορά
- Αποχρώσεις: A1, A2, A3, B1, B3, C2 και D3

Συσκευασία: 0,5 Kg

Νυκτερινοί νάρθηκες

NIGHTGUARD FLEX NIGHTGUARD FIRM 2

Με το NightGuard Flex παράγονται εύκαμπτοι στη θερμοκρασία του σώματος και ανθεκτικοί στην κρούση νυκτερινοί νάρθηκες.

Με το NightGuard Firm 2 εκτυπώνονται άκαμπτοι νυκτερινοί νάρθηκες για ασθενείς με έντονο βρουξισμό.



4 ΛΕΠΤΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

100 νάρθηκες/1kg
20 λεπτά
χρόνος εκτύπωσης


Προσωρινά στεφάνες & δόντια

TEMPORARY CROWN AND TEETH

Βιοσυμβατό υλικό για προσωρινές στεφάνες, γέφυρες και χρήση στην πρόσθια περιοχή καθώς και για δόντια οδοντοστοιχιών.

Διατίθεται στα χρώματα

A1, A2, A3, A3.5, B1, B2 και Bleach.

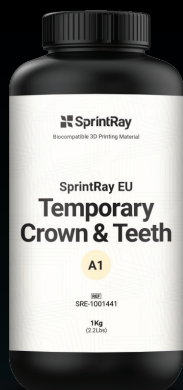

15 ΛΕΠΤΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

85 τόξα/1kg
23 λεπτά
χρόνος εκτύπωσης

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2000 MPa

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ 100 MPa


High Impact Denture Base

ΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

Βάση Οδοντοστοιχίας με υψηλή αντίσταση στην κρούση.

Διατίθεται στις αποχρώσεις:

- πορτοκαλί ροζ
- ανοικτό ροζ
- βαθύ ροζ

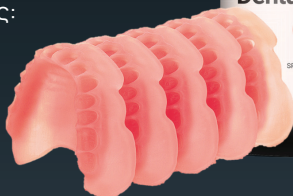

15 ΛΕΠΤΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

55 βάσεις/1kg
109 λεπτά
χρόνος εκτύπωσης

ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 MPa

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ 65 MPa

ΧΥΤΑ

Ρητίνη 3D εκτύπωσης για εξαερώσιμα αντικείμενα (π.χ. για έγχυση κεραμικού/χυτά μεταλλικά κράματα).

Δεν αφήνει υπολείμματα μετά την καύση.



2 ΛΕΠΤΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

200 χυτά/1kg
22 λεπτά
χρόνος εκτύπωσης

**Όλες οι ενδείξεις χρόνου εκτύπωσης και χρήσης υλικού βασίζονται στη μέση χρήση και ενδέχεται να διαφέρουν σε ατομική βάση. Οι χρόνοι ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με τις ενημερώσεις των παραμέτρων εκτύπωσης.*

NEO Crown HT

ΡΗΤΙΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 3D ΕΚΤΥΠΩΤΗ MIDAS ΤΗΣ SPRINTRAY.

Το Crown HT περιέχει >60% κεραμικό υλικό πλήρωσεως για ζωντανή διάχυση φωτός που αντιγράφει τα φυσικά δόντια. Αυτό, καθιστά το υλικό ιδανικό για την κατασκευή μόνιμων αποκαταστάσεων όπως στεφάνες προσθίων καθώς

και ελάχιστα επεμβατικές αποκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή αισθητική όπως ένθετα, επένθετα και όψεις.

Το Crown HT είναι το πρώτο υλικό της SprintRay που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για τον οδοντιατρικό 3D εκτυπωτή Midas και την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία Digital Press Stereolithography (DPS). Διατίθεται σε 6 αποχρώσεις: A1, A2, A3, B1, Λεύκανσης και χωρίς χρωστική.



NEO Apex Base/ Apex Teeth

ΡΗΤΙΝΕΣ 3D ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 3D ΕΚΤΥΠΩΤΗ PRO 2

Το **Apex Base** προορίζεται για την κατασκευή και επισκευή ολικών και μερικών οδοντοστοιχιών και βασικών πλακών. Διατίθεται στις αποχρώσεις: ανοικτό ροζ, κλασικό ροζ, σπάκ κλασικό ροζ και σκούρο κοκκινωπό ροζ.

Το **Apex Teeth** προορίζεται για την κατασκευή τεχνητών δοντιών για ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες.

Διατίθεται στις αποχρώσεις: A1, A2, B2 και Λεύκανσης.

Τα υλικά είναι βιοσυμβατές ρητίνες οι οποίες παρουσιάζουν αντοχή, αποδοτικότητα και βελτιωμένη ημιδιαφάνεια για αισθητικές 3D εκτυπωμένες οδοντοστοιχίες.



Apex Base

7 ΛΕΠΤΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

50 βάσεις/1kg
70 λεπτά
χρόνος εκτύπωσης

Apex Teeth

7 ΛΕΠΤΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

85 τόξα/500g
25 λεπτά
χρόνος εκτύπωσης


ProWash S

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



INTERNATIONAL
DESIGN
EXCELLENCE
AWARD
2021

Σχεδιασμένο για να είναι γρήγορο,
αξιόπιστο και συνδεδεμένο, το
ProWash S καθαρίζει και στεγνώνει
3D εκτυπωμένα οδοντιατρικά
εκμαγεία σε μόλις 9 λεπτά.

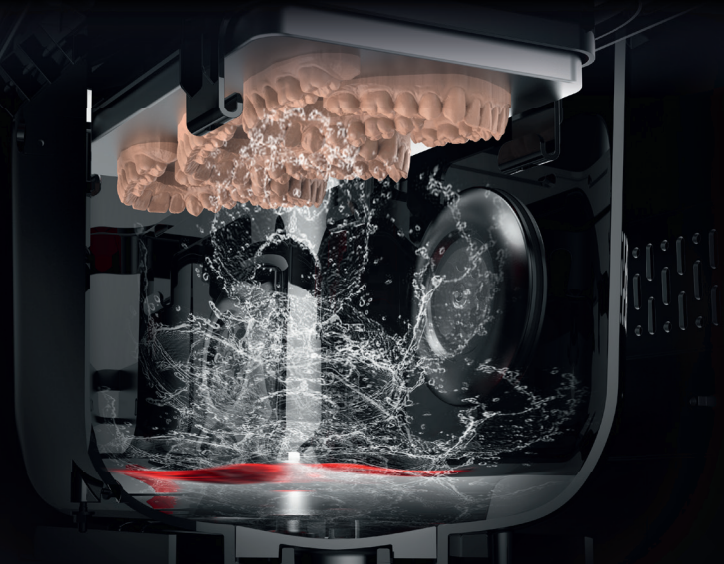

Καθαρό

Πατενταρισμένη Μηχανική
Εκτόξευση για μέγιστο καθαρισμό.

Ευφυές

Συνδεδεμένο σε cloud για
αυτόματη μεταβίβαση εργασιών.

Αποδοτικό

Ειδικό hardware στεγνώματος
και απλή συντήρηση.

Αυτόματα μεταβίβαση

Το ProWash S συνδέεται με εκτυπωτές
και συσκευές πολυμερισμού SprintRay
για μέγιστη ενσωμάτωση ροής εργασίας.



Μεταβίβαση εργασίας από Εκτυπωτή >
Πλύση > Πολυμερισμός

NanoCure

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΒΙΟΪΛΙΚΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ



Ταχύτητα

Ολοκλήρωση πολυμερισμού σε λίγα λεπτά χωρίς να απαιτείται άζωτο.

Ισχύς

Λυχνίες LED 365+385 nm και έξυπνη θερμική διαχείριση.

Χημεία

Ξεκλειδώστε μια ολόκληρη νέα γενιά χημείας υλικών.

Το NanoCure ενσωματώνει την τεχνολογία ταχύτερου πολυμερισμού σε μια μικροσκοπική μορφή, καθιστώντας εύκολη την ολοκλήρωση τρισδιάστατα εκτυπωμένων αντικειμένων σε λίγα μόνο λεπτά.



Το **NanoCure** έχει σχεδιαστεί για τον πολυμερισμό μικρού αριθμού εξαρτημάτων με μέγιστη ταχύτητα, έως και 60% πιο γρήγορα.

60% Ταχύτεροι Χρόνοι Πολυμερισμού



Οδοντοστοιχίες
Base/Teeth: 15 λεπτά*



Νάρθηκες Σύγκλισης
NightGuard Flex/Firm 2: 4 λεπτά*



Οδοντιατρικά Εκμαγεία
Die and Model 2: 2 λεπτά*



Χειρουργικοί Νάρθηκες
Surgical Guide 3: 3 λεπτά*




Στεφάνες
Ceramic Crown: 3 λεπτά*



Όψεις
Ceramic Crown: 3 λεπτά*



Υβριδικές Οδοντοστοιχίες
OnX Tough 2: 5 λεπτά*

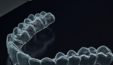

Retainer
Retainer: 22 λεπτά*



* Οι χρόνοι ενδέχεται να αλλάξουν με βάση τις ενημερώσεις των παραμέτρων εκτύπωσης.



Vitsaropoulos

COMPLETE DENTAL SOLUTIONS

Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή

T: 210 65 41 340 F: 210 65 41 618

ask@vitsaropoulos.gr

vitsaropoulos.gr