



dental



Vitsaropoulos
COMPLETE DENTAL SOLUTIONS

2026 ✦ ΥΛΙΚΑ
✦ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

DIGITAL PRESS

MIDAS

3D εκτυπωτής
για το ιατρείο

Digital Press Stereolithography (DPS)

Ο 3D εκτυπωτής Midas είναι μια ολοκαίνουργια λύση για αποκαταστάσεις στο ιατρείο.

Το DPS συνδυάζει τη δεξαμενή, τη ρητίνη και την πλατφόρμα σε μία μόνο κάψουλα, επιτρέποντας την εκτύπωση με υλικά έως 10 φορές πιο παχύρρευστα από αυτά των συμβατικών 3D εκτυπωτών.



 **SprintRay**

ΝΕΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

- Ο πρώτος ενδοστοματικός σαρωτής που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από την εταιρεία DEXIS
- Βάθος πεδίου 25 mm. Αυτό διευκολύνει τη σάρωση βαθύτερων παρασκευών και μεσοδόντιων διαστημάτων.
- Διπλός αισθητήρας εικόνας
- Υψηλότερη πυκνότητα δεδομένων με βελτιωμένο πλέγμα
- Αύξηση 100% στον ρυθμό καρτέ (40 FPS έναντι 20 FPS με το IS 3800W)
- Καταγράφει 3,6 εκατομμύρια σημεία ανά δευτ.
- Υψηλή ακρίβεια: ≤ 10 μικρά
- Λειτουργεί με το λογισμικό IS ScanFlow 2.0
- Πιο ρεαλιστικές εικόνες



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΟΦΕΛΗ

Αυξημένο Βάθος Πεδίου

Το Imprevo διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα διαθέσιμα βάθη πεδίου στα 25 mm (-2 έως +23 mm) στην αγορά. Αυτό διευκολύνει τη σάρωση βαθύτερων παρασκευών και μεσοδόντιων διαστημάτων.

20% λεπτότερος σχεδιασμός

από αυτόν της οικογένειας IS 3800.

Πιο ρεαλιστικές εικόνες

Η χρήση λευκού LED ενισχύει τον ρεαλισμό της απόδοσης χρωμάτων, με αποτέλεσμα πιο* ρεαλιστικές εικόνες της περιοχής σάρωσης. Το λέιζερ βελτιώνει την απόδοση σάρωσης σε ανακλαστικές επιφάνειες.

Μαγνητική προσάρτηση μπαταρίας

Εύκολη εγκατάσταση και αλλαγή της μπαταρίας της συσκευής.

Άκρο αποστειρώσιμο στο αυτόκαυστο

Μικρότερο* άκρο για απλοποιημένη ροή εργασίας σάρωσης.

LED δακτύλιος ένδειξης κατάστασης

Επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει γρήγορα την κατάσταση του σαρωτή και της διαδικασίας σάρωσης.

GeniusControl

Ο τηλεχειρισμός του μενού σάρωσης στην οθόνη, μειώνει τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης και την ανάγκη να αγγίξετε τον υπολογιστή κατά τη διαδικασία σάρωσης.

Υπερταχεία σάρωση

Επιτρέπει στον χρήστη να ολοκληρώσει τη διαδικασία σάρωσης ταχύτερα*, μειώνοντας τον χρόνο στην καρτέλα για τον ασθενή.

Επαγωγική φόρτιση χωρίς επαφή

Επιτρέπει την αξιόπιστη και εύκολη φόρτιση της συσκευής χωρίς να αφαιρείται η μπαταρία.



* Σε σύγκριση με τους προηγούμενους ενδοστοματικούς σαρωτές DEXIS.

Αδροποιητικά δοντιού	9
Απευαισθητοποίησης υλικά	20-21
Απολυμαντικά/Καθαριστικά/Σαπούνι	104-107
Αποστείρωσης στο αυτόκαυστο, σακούλες & δείκτες	91, 99, 149
Αποτυπωτικά υλικά και συσκευή ανάμειξης	34-39, 108-109
Αρθρωτήρες/προσωπικό τόξο	75
Αυτόκαυστα	124
Βαμβακιού προϊόντα και θήκες	96, 145, 178, 179, 180
Βελόνες/Σύριγγες	102, 173
Γάζες	82, 94
Γάντια	103
Γυαλιά προστασίας	86
Διακοσμητικά για τα δόντια	121
Διαμάντια τροχίσματος/φινιρίσματος	118, 120
Διάφορα	73, 85, 100, 116, 144, 145, 146, 147, 176
Δισκάρια αποτύπωσης/Συγκολλητικό δισκαρίων	38, 143
Δισκάρια φθορίωσης	144
Είδη για την τοποθέτηση των οδοντιατρικών υλικών	22, 114, 121, 142, 144, 145, 147
Ελαστικοί απομονωτήρες/Αρπάγες/Πλαίσιο	122, 147, 170, 177
Ελέγχου αρθρώσεως υλικά	158-159
Ενδοδοντίας μικροεργαλεία, υλικά & θήκες	156-157, 162-163, 166-169, 171-176, 183, 184
Ενδορριζικοί άξονες	50, 76-77
Επιθέματα απορρόφησης σάλιου	117, 164
Εργαλεία	112-113, 176, 180
Εργαλείων δίσκοι/κουτιά	100, 151-154, 155
Θερμοπλαστικά φύλλα	160
Καθρέφτες ενδοστοματικής φωτογράφισης και βοηθήματα	150-151
Καλύμματα προστασίας	84, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 99, 141, 182
Κόλλες προσωρινής-μόνιμης συγκόλλησης	17-19, 42, 44-45
Κύπελλα/Διανομέας	90, 96, 146
Λείανσης-στίλβωσης ταινίες, δίσκοι, ελαστικά και βουρτσάκια	73, 132-137, 140, 181
Λεύκανσης προϊόντα	23-25, 53
Μάσκες/Ασπίδες προστασίας του προσώπου	74, 92-93
Μηχανικής έκπλυσης κιτ	83, 88
Μικρομότορ χειρουργικά/αέρα	123, 131
ΜΤΑ	164-165, 183
Νήματα/Υλικά απώθησης των ούλων	43, 180
Οστικά μοσχεύματα και μεμβράνες	190-196
Ουδέτερα στρώματα	46, 184
Πάστες στίλβωσης	51, 114
Πετσέτες ασθενών, θήκες και πετσετοκάτοχα	95, 116, 146, 147
Ράμματα	186-187
Ρόμπες/Σκουφάκια προστασίας	82, 86, 98
Ρύγχη αεροϋδροσύριγγας	141
Ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης και αντάπτορες/Σύστημα αναρρόφησης	84, 102, 142, 177, 178
Σιελαντλίες	91, 96

Σπόγγοι ζελατίνης απορροφήσιμοι	101, 181
Συγκολλητικοί παράγοντες/Σιλάνιο	7, 28-29, 43, 46,47
Σύνθετες ρητίνες εμφράξεων	4-6, 8, 9, 10, 26-27, 30-31, 48-50
Συσκευές διάφορες	22, 125, 131
Συσκευές φωτοπολυμερισμού και εξαρτήματα	11-13, 149
Σύστημα ανασύστασης κατεστραμμένου δοντιού	50
Σφήνες	72
Τάπητες απολύμανσης	85, 98
Τεχνητά τοιχώματα και δακτύλιοι συγκράτησης	54-71, 115
Υαλοϊονομερή υλικά αποκατάστασης	14-16, 17
Υλικά αναγόμενης οδοντοστοιχιών	39, 110
Υλικά κατασκευής προσωρινών προσθετικών εργασιών	40-41, 110
Υλικά προληπτικών εμφράξεων	10, 17
Υλικό διαπύλισης της αρχόμενης τερηδόνας - Icon	52
Υλικά προσωρινής έμφραξης	111, 184
Υπερήχων χειρολαβές/Ξέστρα	131, 148
Φθοριούχα σκευάσματα προστασίας των δοντιών	51
Φρέζες/Φρεζοθήκες	118, 119, 155, 156, 161
Χειρολαβές αερότορ και μικρομότορ/Ταχυσύνδεσμοι/Λιπαντικό	78-79, 126-130
Χειρουργικά πεδία/Χειρουργικά σετ	80-81, 97
Χρωστικές αποκάλυψης πλάκας	114
Χρωστικές τροποποίησης χρώματος σύνθετων ρητινών	32-33

Περιεχόμενα ανά εταιρεία

4D-Rubber	170	DMG	34-53	Neolix	166-169	Reco-Dent	111
Aceonedent	163	Eve	132-137	Nichrominox	150-157	Roeko	174-182
Anios	104-107	Hanel	158-159	Nipro	102	SciCan	124-125
Aseptico	122-123	HuFriedy Group	80-94	Oco	163	SDI	4-25
BioMTA	164-165	Lang	110	Osteobiol	190-196	Septodont	183
Coltene	171-173	Major	108-109	Perfecto	95-101	Twindent	121
Dentatus	75-79	Mani	161-162	Polydentia	54-74	Yamakin	26-33
Dentsply Sirona	184	Maxter	103	Premium Plus	140-149		
Depro	102	Medipac	186-187	Prima	118-120		
Directa	112-117, 121	MK-dent	126-131	Raintree Essix	160		



ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η ρητίνη Stela προσφέρει **απεριόριστο βάθος πολυμερισμού** και πολυμερισμό **χωρίς τάσεις** με μια **διεπιφάνεια χωρίς κενά**.

Δεν υπάρχει ανάγκη για αδροποίηση ή φωτοπολυμερισμό.

Η ρητίνη Stela επιτυγχάνει τις πρωτοποριακές της ιδιότητες μέσω ενός προσαρμοσμένου **συνδυασμού ρητινωδών μονομερών ελεύθερων BPA**, βελτιστοποιημένης ενίσχυσης **ionglass™** (τον αποκλειστικό βιοδραστικό υβριδικό ύαλο της SDI) και νανοσωματιδίων **άμορφου πυριτίου** με ειδική τροποποίηση επιφανείας.

Η τεχνολογία της ρητίνης Stela είναι το εξαιρετικό αποτέλεσμα της **συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων της SDI** (με εμπειρία 50 ετών στην ανάπτυξη οδοντιατρικών υλικών) και **μηχανικών από το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, από το Πανεπιστήμιο του Σύδνεϊ και το Πανεπιστήμιο του Wollongong**.

Αυτά τα τρία κορυφαία στον κόσμο Πανεπιστήμια της Αυστραλίας έχουν πάνω από 170 χρόνια συνδυασμένης ερευνητικής εμπειρίας σε βιομηχανικές σύνθετες ρητίνες υψηλής απόδοσης.

SDI

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Εμφράξεις ομάδας I, II, III και V
- Κατασκευή κολοβωμάτων
- Βάση ή ουδέτερο στρώμα
- Έμφραξη κοιλότητας ενδοδοντικής πρόσβασης

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΑ


Ο **αυτοπολυμερισμός του Stela** ξεκινά από το τοποθετημένο στα τοιχώματα της κοιλότητας Stela Primer, καθώς το primer περιέχει έναν καταλύτη.

Η ακολουθία πολυμερισμού μικροσκοπικά **έλκει την αποκατάσταση προς τα τοιχώματα της κοιλότητας** - και όχι μακριά από αυτά - προσφέροντας αποκαταστάσεις χωρίς κενά κάθε φορά, **μειώνοντας τον κίνδυνο ευαισθησίας και πρόωρης αποτυχίας**.



STELA PRIMER

Το Stela Primer και η ρητίνη Stela έχουν **MDP μονομέρες** εξασφαλίζοντας έναν ισχυρό χημικό δεσμό με το δόντι χωρίς κενά, με σφράγιση των ορίων για αντοχή και αποτροπή ευαισθησίας.

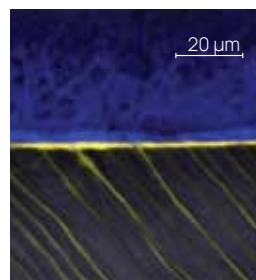

ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ STELA-ΔΟΝΤΙΟΥ (ΑΥΤΟΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)

Μια ομοεστιακή μικρογραφία μιας **διεπιφάνειας Stela-οδοντίνης, χωρίς κενά**, με χρήση του αυτοαδροποιητικού Stela Primer. Παρατηρήστε το βάθος διεισδυσης του Stela Primer (κίτρινο) μέσα στα οδοντινοσωληνάρια.

Ποσοστό αποτυχίας πριν τη δοκιμή: 0%

STELA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΗ ΡΗΤΙΝΗ Όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για εύκολη τοποθέτηση και εξαιρετική προσαρμογή		ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ MDP ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΑ ΚΑΙ ΗΕΜΑ Για αξιόπιστη υψηλή αντοχή συγκόλλησης με την οδοντίνη και την αδαμαντίνη και αποκαταστάσεις μακράς διάρκειας
	ΜΕΤΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΑ Πολυμερίζεται από τα τοιχώματα κι όχι από την ελεύθερη επιφάνεια, για μια σταθερή διεπιφάνεια συγκόλλησης, χωρίς κενά.		ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΘΟΡΙΟ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΡΟΝΤΙΟ Για ενισχυμένες βιοδραστικές ιδιότητες κατά τη διάρκεια επίδρασης οξέων
	ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ Με υψηλό βαθμό μετατροπής για εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες		ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΤΗΤΑ 308% AL* Για υποβοήθηση της διάγνωσης
	ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ Ή ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ Για κάλυψη κάθε κλινικής εφαρμογής με τον καλύτερο χειρισμό		ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΦΘΟΡΑ Μόνο 0,052 mm μετά 200.000 κύκλους για δυνατότητα στίλβωσης μακράς διάρκειας**
	ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ Για αντίσταση στις δυνάμεις κάμψης και προστασία των φυμάτων		ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Υψηλή αναλογία αντίθεσης για μπλοκάρισμα χρώσεων οδοντίνης
	ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΙ ΥΨΗΛΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Για προστασία των δοντιών κατά ισχυρών συγκλεισιακών δυνάμεων		ΑΠΟΧΡΩΣΗ UNIVERSAL ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΑΜΑΙΛΕΟΝΤΙΣΜΟΥ Για καλά αισθητικά αποτελέσματα

* ΠΗΓΗ: SDI Research & Development Department

** ΠΗΓΗ: SDI Research & Development Department, ACTA test 200,000 cycles are equivalent to one year in function

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	STELA ΚΑΨΟΥΛΑ*	STELA AUTOMIX*
Αντοχή στη συμπίεση (MPa) (24 ώρες, Dark Cure)	332.7	330.7
Μέτρο συμπίεσης (GPa) (24 ώρες, Dark Cure)	5.3	4.0
Αντοχή στην κάμψη (MPa) (24 ώρες, Dark Cure)	133.4	142.8
Μέτρο ελαστικότητας (GPa) (24 ώρες, Dark Cure)	14.6	8.6
Επιφανειακή σκληρότητα (VHN) (24 ώρες, Dark Cure)	71.0	45.4

* Κατά μέσο όρο

Πηγή: SDI Research & Development Department

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

STELA AUTOMIX INTRO KIT Κωδ. 864 0002

Περιλαμβάνει:
1x8g σύριγγα αυτόματης ανάμειξης Stela
1x5ml φιαλίδιο Stela Primer
15 ρύγχη ανάμειξης
15 Superfine Points (διανομείς)

STELA CAPSULE INTRO KIT Κωδ. 864 0004

Περιλαμβάνει:
10 κάψουλες Stela
1x5ml φιαλίδιο Stela Primer
15 Superfine Points (διανομείς)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

STELA AUTOMIX Κωδ. 864 0001

Περιλαμβάνει:
1x8g σύριγγα αυτόματης ανάμειξης Stela
15 ρύγχη ανάμειξης

STELA CAPSULE Κωδ. 864 0003

Περιλαμβάνει:
50 κάψουλες Stela

STELA PRIMER Κωδ. 864 0006

Περιλαμβάνει:
1x5ml φιαλίδιο Stela Primer

STELA ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ Κωδ. 864 0005

Περιλαμβάνει:
50 ρύγχη ανάμειξης



LUNA 2

Νανοϋβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης με ανώτερη αντοχή κι αισθητική.



Το Luna 2 είναι η επόμενη γενιά των ρητινών Luna της SDI. Περιέχει ένα μοναδικό μείγμα ενισχυτικών ουσιών, αποτέλεσμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας SDI, το οποίο αποδίδει βελτιωμένο χειρισμό, πολύ υψηλή ακτινοσκοπερότητα κι αξιόπιστες μηχανικές ιδιότητες.


ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Άμεσες αποκαταστάσεις σε πρόσθια και οπίσθια δόντια και όψεις.
- Κατασκευή κολοβωμάτων
- Έμμεσα ένθετα, επένθετα και όψεις
- Ναρθηκοποίηση
- Επιδιόρθωση ρητίνης και πορσελάνης
- Τεχνική σάντουιτς με υαλοϊονομερή

Το Luna 2 είναι εξαιρετικό για δόντια που έχουν λευκανθεί κι αποδίδει εξαιρετικά όταν συνδυάζεται με το συγκολλητικό παράγοντα Zirkbond Universal.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Το Luna 2 διατίθεται στις αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, Incisal, Extra Bleach (ισοδύναμο της απόχρωσης λεύκανσης OM2 της Vita®) και 2x Extra Bleach (ισοδύναμο της απόχρωσης λεύκανσης OM1 της Vita®).

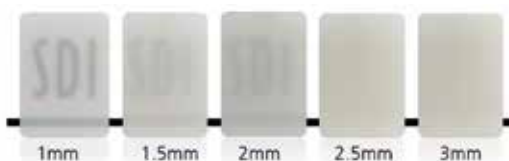

Ημιδιαφάνεια σε διαφορετικά πάχη της απόχρωσης A2 του Luna 2.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Ταχύτερο και ακριβέστερο ταίριασμα αποχρώσεων.**
Το Luna 2 προσφέρει την καινοτόμο τεχνολογία Logical Shade Matching και το Chameleon Effect (χαμαιλεοντισμό) για ευκολότερο κι ακριβέστερο ταίριασμα απόχρωσης. Οι αποχρώσεις αναπτύχθηκαν δίνοντας προτεραιότητα στη φωτεινότητα ενώ οι χρωστικές έχουν κανονισθεί με έναν λογικά αυξανόμενο τρόπο, για απλούστερο και ταχύτερο ταίριασμα στο κλασικό χρωματολόγιο Vita®.
- **Υψηλή αντοχή στη θλίψη 360 MPa.**
Σημαντική μηχανική ιδιότητα για εμφράξεις οπισθίων ώστε να υποστηρίζεται το μαστικό φορτίο χωρίς θραύση.
- **Υψηλή αντοχή στην κάμψη 130 MPa.**
Έτσι, μειώνεται ο κίνδυνος αποτυχίας της έμφραξης σε περιοχές υψηλών πιέσεων όπως οι εμφράξεις V ομάδας ή σε λιγότερο υποστηριγμένες περιοχές όπως φύματα ή όμορα κιβωτίδια.
- **Ιδιότητες όμοιες με το φυσικό δόντι απέναντι σε όλα τα είδη φωτισμού.**
Η τεχνολογία του Luna 2 μιμείται τέλεια την ημιδιαφάνεια και την οπαλινότητα της αδαμαντίνης, καθώς και τον φθορισμό της οδοντίνης του φυσικού δοντιού.
- **Τέλειος κρεμώδης χειρισμός.**
Το Luna 2 έχει βελτιωμένο χειρισμό καθόλου κολλώδη, που επιτρέπει εξαιρετικό στοιβαγμό του υλικού και διαμόρφωση της έμφραξης.
- **Ακτινοσκοπερότητα 250% AL.**
- **Είναι ελεύθερο BPA παράγωγων.**
- **Εξαιρετική στίλβωση.**
Ο συνδυασμός ενισχυτικών ουσιών του Luna 2, επιτρέπει την εξαιρετική του στίλβωση, την αντίσταση στη φθορά και την μακροβιότητα της έμφραξης.

SDI

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανταλλακτική σύριγγα των 4g σε καθεμιά από τις αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, Incisal, Extra Bleach, 2x Extra Bleach.

Ανταλλακτική
σύριγγα

4+2
δώρα

ZIPBOND Universal

Συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης.

Το Zipbond Universal είναι, ενός συστατικού, συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης ο οποίος απελευθερώνει φθόριο και είναι συμβατός με τεχνικές αυτοαδροποίησης, επιλεκτικής αδροποίησης και ολικής αδροποίησης.

Παρουσία ποικίλης οδοντικής δομής και αφθονίας επιλογών αποκατάστασης, το Zipbond Universal επιτυγχάνει αναπαράξιμες και αξιόπιστες αντοχές συγκόλλησης.



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Άμεσες Εφαρμογές

- Φωτοπολυμεριζόμενες αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης
- Φωτοπολυμεριζόμενα compomer
- Σφράγιση κοιλότητας πριν την τοποθέτηση έμμεσων αποκαταστάσεων
- Επισκευή με σύνθετη ρητίνη πορσελάνης και υβριδικών κεραμικών αποκαταστάσεων
- Σφράγιση εκτεθειμένων ριζικών επιφανειών οι οποίες προκαλούν υπερευαισθησία
- Κατασκευές κολοβωμάτων με χρήση φωτοπολυμεριζόμενων σύνθετων ρητινών
- Προστατευτικό βερνίκι για έμφραξη υαλοϊονομερούς

Έμμεσες Εφαρμογές

- Συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Σταθερές δυνάμεις συγκόλλησης.**
- **Συγκόλληση σε υγρή και στεγνή οδοντίνη.**
- **Κατοχυρωμένα συγκολλητικά μονομερή.**
Το Zipbond Universal περιέχει δύο συγκολλητικά μονομερή τα οποία εργάζονται σε αρμονία για να αποδώσουν έναν ανθεκτικό και στιβαρό δεσμό. Ένας κατοχυρωμένος συνδυασμός μονομερών συμπεριλαμβανομένου του μονομερούς MDP, κάνει αποτελεσματική τη συγκόλληση σε αδαμαντίνη, οδοντίνη και σε μια γκάμα έμμεσων υποστρώματων.
- **Προβλέψιμες αντοχές συγκόλλησης σε έμμεσα υποστρώματα.**
Το Zipbond Universal επιτυγχάνει υψηλές αντοχές συγκόλλησης σε σύνθετη ρητίνη, κεραμικά, πορσελάνη και μεταλλικά υποστρώματα.
- **5% νανοενισχυτικές ουσίες - Εξαιρετικός έλεγχος.**
Ελεγχόμενος χειρισμός, ιδανικό πάχος φιλμ και αυξημένη αντοχή συγκόλλησης επιτυγχάνονται με την ενσωμάτωση ενισχυτικών ουσιών μεγέθους νανομικρών. Το Zipbond Universal τοποθετείται εύκολα σε ένα ομοιογενές λεπτό στρώμα: πάχος φιλμ 8 μ.
- **Υψηλή αισθητική.**
Το Zipbond είναι ορατό κατά την τοποθέτηση και γίνεται πρακτικά αόρατο επάνω στην οδοντίνη μετά τον πολυμερισμό. Έτσι, είναι ιδανικό για αποκαταστάσεις στην αισθητική ζώνη.
- **Είναι ελεύθερο BPA και HEMA.**
- **Απελευθερώνει φθόριο.**
Έτσι, προστατεύει τη διεπιφάνεια δοντιού-υλικού αποκατάστασης από απομεταλλικοποίηση, καταπολεμώντας την εμφάνιση δευτερογενούς τερηδόνας.
- **Διατίθεται σε φιαλίδιο που αντιστοιχεί σε 330 σταγόνες.**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ZipBond Universal ανταλλακτικό
1 x 5 ml φιαλίδιο Zipbond Universal

NEO Luna Flow

Γενικής χρήσης ρευστή σύνθετη ρητίνη.

Το Luna Flow είναι ένα μία εξαιρετικά ισχυρή, νανοϋβριδική ρευστή σύνθετη ρητίνη.

Με ένα μείγμα ενισχυτικών ουσιών σε διαφορετικά εξαιρετικά λεπτά μεγέθη για βελτιστοποίηση του χειρισμού, των μηχανικών και οπτικών ιδιοτήτων, το Luna Flow προσφέρει υψηλή ακτινοσκιερότητα, έλεγχο κατά την τοποθέτηση, εύκολη και ακριβή αντιστοίχιση χρωμάτων με σταθερότητα χρώματος, εξαιρετική αντοχή και αντίσταση στη φθορά.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητικές αποκαταστάσεις ομάδας I (συμπεριλαμβανομένων των μαστικών επιφανειών), II, III, IV
- Αποκαταστάσεις ομάδας V (αυκενική αποτριβή, διάβρωση ρίζας, αποκοπή)
- Επισκευή ελαττωμάτων σε αποκαταστάσεις αδαμαντίνης και πορσελάνης
- Προληπτικές εμφράξεις
- Ακτινοσκιερό liner κοιλότητας κάτω από άμεσες αποκαταστάσεις
- Κλείδωμα υποσκαφών
- Επισκευή προσωρινής στεφάνης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρέει και παραμένει στη θέση του τέλεια
- Υψηλή αντοχή στη συμπίεση 421 MPa
- Υψηλή αντοχή στην κάμψη 128 MPa
- Εξαιρετική ακτινοσκιερότητα 265% AI
- Ιδιότητες όμοιες με τα φυσικά δόντια απέναντι σε όλα τα είδη φωτισμού



Ανταλλακτική
σύριγγα

4+1
δωρό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανταλλακτικό

1x2g σύριγγα Luna Flow στις αποχρώσεις:
Vita® A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, Incical,
Extra bleach, 2x Extra bleach.

Aura Bulk Fill

Σύνθετη ρητίνη για ογκώδη πλήρωση έως 5 mm.

Το Aura Bulk Fill είναι μια νανοϋβριδική ρητίνη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την καθιστούν κατάλληλη για ογκώδη πλήρωση των πίσω δοντιών έως 5 mm, με φωτοπολυμερισμό 20 δευτερολέπτων.

- Φυσικό φινίρισμα με μία μόνο γενική απόχρωση
- Υψηλό βάθος πολυμερισμού χωρίς να απαιτείται ένα στρώμα κάλυψης
- Εύκολη τοποθέτηση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
- Η κηρώδης σύσταση κάνει το προϊόν να τοποθετείται εύκολα και να μην είναι κολλώδες οπότε βελτιστοποιείται ο χειρισμός του.



3+1
δώρα

2.21%

**Χαμηλή ογκομετρική
συρρίκνωση**

Αποδίδει μειωμένη καταπόνηση,
για αποκαταστάσεις μακράς
διάρκειας.

115
MPa

**Άριστη αντοχή
στην κάμψη**

Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή
σε σοβαρές παραμορφώσεις.

375
MPa

**Υψηλή αντοχή
στη συμπίεση**

Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή
στις δυνάμεις υψηλής συμπίεσης
μέσα στο στόμα

Super Etch

Αδροποιητικό ζελέ, 37% φωσφορικού οξέος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλό ιξώδες και εύκολα ελεγχόμενη ροή επιτρέπουν ακριβή τοποθέτηση
- Θιξετροπικό ζελέ, ρέει ελεγχόμενα κάτω από πίεση για επιλεκτική τοποθέτηση
- Ευκολόχρηστη σύριγγα, χωρίς διαρροές



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

3 σύριγγες των 2ml ζελέ και 25 βελόνες μιας χρήσης

10 σύριγγες των 2ml ζελέ και 50 βελόνες μιας χρήσης

Jumbo: 2 σύριγγες των 25 ml και 50 βελόνες μιας χρήσης

Wave

Ρευστή φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη, ακτινοσκιερή, η οποία απελευθερώνει φθόριο. Διατίθεται σε δύο ιξώδη.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποκαταστάσεις ομάδας V
- Μικρές αποκαταστάσεις ομάδας I, II, III, IV
- Παρασκευές με αερο-αποτριβή
- Προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών
- Συγκόλληση κοσμημάτων στα δόντια
- Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια
- Μπλοκάρισμα υποσκαφών σε παρασκευές ένθετων επένθετων/στεφανών

Διατίθενται σε 2 ιξώδη:

- Wave (χαμηλό ιξώδες) • Wave hv (υψηλό ιξώδες)



Προσφορά

Αγοράζοντας
3 ανταλλακτικές
σύριγγες

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανταλλακτικό

1x1g σύριγγα σε καθμία από τις αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, OA2 (υπάρχει μόνο στο Wave), ουλική, λεύκανσης και 5 ρύγχη.

SDI

Conseal f

Φωτοπολυμεριζόμενο εμφρακτικό οπών και σχισμών το οποίο απελευθερώνει φθόριο.

Διατίθεται σε σύριγγα με πολύ λεπτό ρύγχος.

Χρώμα: Λευκό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 3 x 1 g σύριγγες Conseal f
- 1 x 1 ml σύριγγα αδροποιητικό Super Etch Low Viscosity
- 20 ρύγχη μιας χρήσης



Radii-CAL CX

Ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού LED με ευθυγραμμισμένη δέσμη φωτός.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Ευθυγραμμισμένη δέσμη φωτός και ομοιομορφία κατανομής του**
Παρέχει ομοιομορφία πολυμερισμού σε όλα τα βάθη πολυμερισμού. Αυτό εξασφαλίζει ένα γρήγορο και προβλέψιμο πολυμερισμό για όλες τις αποκαταστάσεις.
- **Τεχνολογία παλμών** = Υψηλή ένταση 1200 mW/cm²
- **Ενσωματωμένη λειτουργία ramp**
- **Τεχνολογία απαγωγής θερμότητας.**
Αυτή η τεχνολογία προστατεύει τη λυχνία LED από την καταστροφική θερμότητα. Έτσι, επιτρέπει συνεχείς διαδοχικούς πολυμερισμούς χωρίς την ανάγκη για υποχρεωτική ψύξη. Αυτό, παρατείνει επίσης τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
- **Ανθεκτική μπαταρία μακράς διάρκειας**
Το Radii-Cal CX δεν απαιτεί συχνή επαναφόρτιση μεταξύ των χρήσεων. Όταν φορτιστεί πλήρως, το Radii-Cal CX προσφέρει 1.200 πολυμερισμούς των 10 δευτερολέπτων.
- **Ενσωματωμένο φωτόμετρο**
- **Ελαφριά και εργονομική συσκευή**
- **Εγγύηση 2 έτη**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ (μπαταρία, τμήμα ελέγχου και στάνταρ LED)

- Εύρος μήκους κύματος: 440 nm – 480 nm
- Μέγιστο εύρος μήκους κύματος: 460 nm
- Εκθετική αύξηση (Ramp) έως την πλήρη ένταση: 5 δευτερόλεπτα
- Ένταση φωτός: 1200 mW/cm² (μέγιστο)
- Διάρκεια συνεχούς χρήσης 20 δευτερόλεπτα
- Συνολικός χρόνος συνεχούς λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 3 ώρες, 20 λεπτά
- Διαστάσεις: διάμετρος 22 mm x μήκος 243 mm
- Βάρος: 144 g
- Μπαταρία: Li-ion 7,4V/14 Wh

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 60 – 180 λεπτά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 10°C - 40°C
- Συνολικό ύψος με τοποθετημένη χειρολαβή :255 mm
- Διαστάσεις: 70 mm (Π) x 40 mm (Υ) x 130 mm (Μ)
- Βάρος: 84 g



ΔΩΡΕΑΝ

με αγορά υλικών της εταιρείας SDI

αξίας

1.000 €

SDI

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
- 1 Φως πολυμερισμού LED Radii-Cal CX - 1 Φορτιστής - 1 Μετασχηματιστής - 3 Ανταλλακτικά καλύμματα φακών - Αξεσουάρ	5600110
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	
Ανταλλακτικά καλύμματα φακών (συσκευασία των 5)	5600310
Μανίκια προστασίας (συσκευασία των 1000)	5600005
Ασπίδα φωτός (συσκευασία των 5)	5600056
Τμήμα ελέγχου Radii-Cal CX	5600117
Μπαταρία Radii-Cal CX	5600062
Φορτιστής Radii-Cal CX (περιλαμβάνει την πρίζα)	5600118

Radii Xpert

Ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού LED.

Εξυπνότερη σχεδίαση.

Ιδανικός πολυμερισμός κάθε φορά.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Μοναδική υποβοήθηση στόχου για πολυμερισμό ακρίβειας**

Η μοναδική τεχνολογία υποβοήθησης στόχου του Radii Xpert σας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε σωστά το φως και να είστε σίγουροι για τη γωνίωση πριν από τον φωτοπολυμερισμό.

Μια πηγή φωτός πρέπει να βρίσκεται κοντά και κάθετα σε μια αποκατάσταση για αποφυγή ατελούς πολυμερισμού. Ενεργοποιώντας το φως τοποθέτησης που διαθέτει το Radii Xpert, τοποθετείτε το άκρο του ρύγχους στην σωστή θέση και τότε ενεργοποιείτε το φως εξασφαλίζοντας τον πλήρη πολυμερισμό της αποκατάστασης.

- **Ιδανικά ευθυγραμμισμένη δέσμη**



Το Radii Xpert είναι η ιδανική επιλογή για αποκαταστάσεις όλων των μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων των αποκαταστάσεων ογκώδους πλήρωσης που απαιτούν πολυμερισμό σε βάθος. Η ευθυγραμμισμένη δέσμη εξασφαλίζει τη διατήρηση της έντασης φωτός στην αποκατάσταση που φωτοπολυμερίζεται.

- **Συνεχής ένταση φωτός**

Το Radii Xpert έχει καλύτερη απόδοση λόγω του ότι η ένταση φωτός του παραμένει σταθερή πάνω από κλινικά σχετικές αποστάσεις. Η σταθερή ένταση εξασφαλίζει ότι το φως θα διεισδύσει στα υποκείμενα στρώματα της αποκατάστασης, με περιορισμένη μείωση, εξασφαλίζοντας τον πλήρη πολυμερισμό της αποκατάστασης έως τα βαθύτερα στρώματα.

- **Σταθερό και ομοιόμορφο προφίλ δέσμης φωτός για ομοιόμορφη κατανομή ενέργειας.**

- **Έξυπνη τεχνολογία για εύκολη χρήση**

Μια οθόνη LCD με χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης παρέχει ακρίβεια κατά τη διάρκεια ενός κύκλου φωτοπολυμερισμού. Το Radii Xpert σας δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης της αγαπημένης σας ρύθμισης και οι πολύχρωμοι δακτύλιοι κατάστασης προσφέρουν μια οπτική αναπαράσταση όταν πρέπει να φορτίσετε ή όταν ο φωτοπολυμερισμός είναι σε εξέλιξη.

- **Ενσωματωμένος δείκτης έντασης στη βάση του Radii Xpert**

- **Πολυμερίζει όλες τις σύνθετες ρητίνες** συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχουν καμφοροκινόνη και Ivocerin®.

- **Ενισχυμένη διαχείριση θερμότητας** με ενσωματωμένη ψύκτρα που μειώνει το ποσό εκπομπής θερμότητας.

- **Παλμική τεχνολογία**

Το Radii Xpert χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό παλμικής τεχνολογίας και σταθερού ρεύματος για να μειώσει περαιτέρω την εκπεμπόμενη θερμότητα στο δόντι.

- **Διαθέτει εργονομικά καλά ισορροπημένο κράτημα και λεπτή σχεδίαση**

- **Το ρύγχος του περιστρέφεται κατά 360°**

- **Διαθέτει εναλλάξιμο ρύγχη:** κανονικό διαγνωστικό, ορθοδοντικό και λεύκανσης ολόκληρου τόξου.

- **Ασύρματη συσκευή** κατασκευασμένη από πολυμερές υλικό υψηλής αντοχής, για μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΔΩΡΕΑΝ

με αγορά υλικών της εταιρείας SDI

αξίας

1.500 €

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RADII ΧPERT-ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ

Μήκος κύματος	440nm-480nm
Κορυφαίο μήκος κύματος	460nm
Ένταση φωτός	1500 mW/cm ² * (+5%, - 15%)
Μέγιστη διάρκεια συνεχούς χρήσης	20 δευτερόλεπτα
Συνεχής χρόνος λειτουργίας μέχρι την επαναφόρτιση	2 ώρες και 30 λεπτά/ 900 φωτοπολυμερισμοί των 10 δευτ.
Χρόνος φόρτισης άδειας μπαταρίας	3-5 ώρες
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας (γενική χρήση)	60-180 λεπτά
Μπαταρία	1x 3,7V 2600 mAh
Βάρος	185g
Συνολικό ύψος με τη χειρολαβή	290mm

Η συσκευή Radii Χpert έχει εγγύηση 3 χρόνια.

Η μπαταρία της έχει εγγύηση 2 χρόνια.

* Η ακτινοβολία όπως μετρήθηκε χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα διαμέτρου 4 mm που είναι κεντραρισμένος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΚΩΔΙΚΟΣ
Αρχική Συσκευασία Radii Χpert Περιλαμβάνει: 1 Radii Χpert, 1 φορτιστή, 1 πρίζα, 5 μικρές ασπίδες φωτός, 1 μεγάλη ασπίδα φωτός, 3 καπάκια για το φακό, 100 προστατευτικά μανίκια.		5600300
ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ		ΚΩΔΙΚΟΣ
Radii Χpert στάνταρ ρύγχος		5600301
Radii Χpert διαγνωστικό ρύγχος		5600306
Radii Χpert ορθοδοντικό ρύγχος		5600307
Radii Χpert ρύγχος λεύκανσης ολόκληρου τόξου		5600308
Radii Χpert ανταλλακτικό μπαταρίας		5600305
Ανταλλακτικά καπάκια για το φακό, 5 τεμάχια		5600310
Radii Χpert προστατευτικά μανίκια, 1000 τεμάχια		5600309
Radii Χpert μεγάλη ασπίδα φωτός, 1 τεμάχιο		5600089
Radii Χpert μικρή ασπίδα φωτός, 5 τεμάχια		5600056

Riva Self Cure HV

Αυτοπολυμεριζόμενο υαλοϊονομερές υλικό αποκατάστασης, με υψηλό ιξώδες.

Το υψηλό ιξώδες επιτρέπει εξαιρετική τοποθέτηση του υλικού σε ποσότητα και εύκολη διαμόρφωση.



ionglass
BIOMIMETIC FORMULA

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποκαταστάσεις I & II ομάδας σε περιοχές χωρίς πίεση
- Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια
- Αποκαταστάσεις σε ηλικιωμένα άτομα Ενδιάμεσο υλικό και βάση για κοιλότητες I & II ομάδας χρησιμοποιώντας την τεχνική σάντουιτς
- Αποκαταστάσεις ομάδας V
- Κατασκευή κολοβωμάτων
- Προσωρινές εμφράξεις
- Αντικατάσταση οδοντίνης



SDI

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Το ανθεκτικότερο υλικό για την αντικατάσταση οδοντίνης**
Το Riva Self Cure HV έχει υψηλή αντοχή στη συμπίεση, 370 MPa, εξασφαλίζοντας ότι θα αντέξει τις μακροχρόνιες μαστικές δυνάμεις.
- **Ιδανικό για την ελάχιστη επεμβατική Οδοντιατρική**
Είναι ένα βιοδραστικό υλικό που συγκολλάται στην οδοντική ουσία χωρίς να χρειάζεται συγκολλητικούς παράγοντες κι απελευθερώνει φθόριο εμποδίζοντας τη δημιουργία νέας τερηδόνας. Έτσι, δεν απαιτούνται μεγάλες κοιλότητες ούτε σημεία συγκράτησης
- **Πολύ καλή εφαρμογή στα όρια και καθόλου συστολή**
- **Υψηλή απελευθέρωση φθορίου 3,01 μg/cm²**
Χάρη στη βιοδραστική, πατενταρισμένη τεχνολογία **ionglass** το Riva Self Cure HV απελευθερώνει σημαντικά περισσότερο φθόριο, βοηθώντας την επαναμεταλλικοποίηση του δοντιού
- **Ελεύθερο BPA**
- **Επιφανειακή σκληρότητα**
- **Αντοχή στη διάβρωση από οξέα 0,07 mm**
- **Τοποθετείται σε ποσότητα και διαμορφώνεται εξαιρετικά εύκολα, χάρη στο υψηλό ιξώδες του**
- **Υψηλή ακτινοσκιερότητα 290%**

Το Riva Self Cure HV διατίθεται σε κάψουλες στις αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5.

Προσφορά

Αγοράζοντας
2 συσκευασίες
50 κάψουλών

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Riva Self Cure HV - κάψουλες.

50 κάψουλες Riva Self Cure HV μεμονωμένα σε καθεμία από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5.

Riva Self Cure - συσκευασία σκόνης/υγρού.

(Διατίθεται μόνο σε Riva Self Cure κανονικού ιξώδους)
Περιλαμβάνει 15g φιαλίδιο σκόνης και 6,9 ml (8g) φιαλίδιο υγρού σε καθεμία από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5

Riva Light Cure HV

Φωτοπολυμεριζόμενο υαλοϊονομερές υλικό αποκατάστασης με υψηλό ιξώδες.

Το υψηλότερο ιξώδες επιτρέπει τον ευκολότερο χειρισμό του υλικού, αμέσως μετά την ανάμειξη.

Το υλικό διαμορφώνεται εξαιρετικά και δεν κολλά στα εργαλεία, ούτε ανασκώνεται μετά την τοποθέτηση, ιδιαίτερα στην άνω γνάθο.



ionglass
BIOMIMETIC FORMULA

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποκαταστάσεις I & II ομάδας σε περιοχές χωρίς πίεση
- Αποκαταστάσεις III ομάδας
- Αυχενικές αποκαταστάσεις
- Αποκαταστάσεις σε νεογιά δόντια
- Αποκαταστάσεις σε ηλικιωμένα άτομα
- Κατασκευή κολοβωμάτων
- Προσωρινές εμφράξεις
- Χρήση ως βάση/αντικατάσταση οδοντίνης
- Αποκαταστάσεις σε επιφάνεια ρίζας



Προσφορά

Αγοράζοντας
2 συσκευασίες
50 κάψουλων

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Συνδυασμός των πλεονεκτημάτων των υαλοϊονομερών και των σύνθετων ρητινών.**
Συνδυάζει πολύ καλή αισθητική με απελευθέρωση φθορίου και χημικό δεσμό με τις οδοντικές ουσίες.
- **Εξαιρετικός χειρισμός λόγω του υψηλού ιξώδους.**
Δεν κολλά στα εργαλεία κατά την τοποθέτηση ούτε δημιουργεί ίνες επάνω τους.
- **Πολύ καλή εφαρμογή στα όρια και μακροχρόνια προστασία από τη μικροδιαρροή.**
- **Υψηλή απελευθέρωση φθορίου.**
Χάρη στη βιοδραστική, πατενταρισμένη τεχνολογία **ionglass**, το Riva Light Cure HV απελευθερώνει υψηλή ποσότητα φθορίου, βοηθώντας την επαναμεταλλικοποίηση του δοντιού.
- **Ελεύθερο BPA.**
- **Υψηλή σταθερότητα χρώματος.**
- **Μακροχρόνια αντίσταση στην αποτριβή.**
- **Υψηλή αντοχή στην κάμψη**

Το Riva Light Cure HV διατίθεται σε κάψουλες, στις αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5 και B1.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Riva Light Cure HV - κάψουλες.

50 κάψουλες μεμονωμένα στις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B1

Riva Light Cure - συσκευασία σκόνης/υγρού.

(Διατίθεται μόνο σε Riva Light Cure κανονικού ιξώδους)

Περιλαμβάνει φιαλίδιο σκόνης 15g, φιαλίδιο υγρού 7,2 ml (8g) και βοηθήματα.

Διατίθεται σε καθεμία από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5

Riva Silver

Ενισχυμένο με άργυρο, υαλοϊονομερές υλικό αποκατάστασης.

- Υψηλή απελευθέρωση φθορίου
- Υψηλή πρώιμη αντοχή στη συμπίεση (134 MPa σε 1 ώρα)

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Κατασκευές κολοβωμάτων
- Μικρές αποκαταστάσεις I και II ομάδας
- Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια
- Αποκαταστάσεις σε ηλικιωμένους ασθενείς
- Χρήση σαν υλικό βάσης για κοιλότητες I και II ομάδας με την τεχνική σάντουιτς
- Αποκαταστάσεις V ομάδας, όπου δεν υπάρχει ζήτημα αισθητικής



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Riva Silver κάψουλες.
Περιλαμβάνει 50 κάψουλες

Riva Conditioner

Ζελέ για τον καθαρισμό οδοντίνης και αδαμαντίνης πριν την τοποθέτηση των υαλοϊονομερών.



SDI

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιαλίδιο των 10 ml

Riva Coat

Υλικό για την επάλειψη της έμφραξης υαλοϊονομερούς και την προστασία της από την υγρασία το πρώτο 24ωρο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιαλίδιο των 5 ml

Riva Applicator 2

Εργαλείο-διανομέας για τις κάψουλες όλων των προϊόντων Riva.

Αποστειρώσιμο στο αυτόκαυστο.



ΔΩΡΟ

Με 2 συσκευασίες οποιωνδήποτε προϊόντων Riva 50 καψουλών

Riva Protect



Υαλοϊονομερές, προστατευτικό επιφάνειας ενισχυμένο με ACP.

Το ACP [άμορφο φωσφορικό ασβέστιο $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$] είναι ένα νανομερές πρόσθετο στην ενίσχυση του Riva Protect το οποίο προσθέτει στην οδοντική επιφάνεια επιπλέον ασβέστιο και φώσφορο και συνδυαζόμενο με το φθόριο του γυαλιού στο Riva Protect ενισχύει την επαναμεταλλικοποίηση του δοντιού.

Έτσι, το Riva Protect ενδυναμώνει την υποκείμενη οδοντική επιφάνεια, σταθεροποιεί οποιαδήποτε αρχόμενη τερηδόνα και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ασθενείς επιρρεπείς προς την τερηδόνα.

Το Riva Protect:

- Προσκολλάται απευθείας στις οδοντικές ουσίες
- Απελευθερώνει υψηλή ποσότητα φθορίου
- Έχει χαμηλό ιξώδες για εύκολη διεύθυνση στις σπές/σχισμές
- Είναι ακτινοσκιερό



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών
- Προστασία της επιφάνειας ρίζας / δοντιού
- Πρόληψη της υπερευαισθησίας
- Προσωρινή έμφραξη δοντιού που υπόκειται σε ενδοδοντική θεραπεία
- Προσωρινές εμφράξεις

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Riva Protect κάψουλες.

50 κάψουλες Riva Protect σε απόχρωση λευκή.

Riva Luting



Υαλοϊονομερές κονία συγκόλλησης με υψηλή απελευθέρωση φθορίου.

Αυτοπολυμεριζόμενη και ακτινοσκιερή.

- Υψηλή απελευθέρωση φθορίου
- Πολύ μικρό πάχος στρώματος.
- Χαμηλή διαλυτότητα στο νερό

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συγκόλληση μεταλλικών ή μεταλλοκεραμικών ένθετων, επένθετων και στεφανών
- Συγκόλληση στεφανών από ανοξείδωτο ατσάλι
- Συγκόλληση αξόνων
- Συγκόλληση μεταλλικών ορθοδοντικών δακτυλίων
- Χρήση ως ουδέτερο στρώμα ή υλικό βάσης.

Το Riva Luting διατίθεται σε universal ανοικτή κίτρινη απόχρωση.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Riva Luting κάψουλες.

Περιλαμβάνει 50 κάψουλες Riva Luting

Riva Luting μεγάλη συσκευασία σκόνης/υγρού.

Περιλαμβάνει φιαλίδιο σκόνης 35 g, φιαλίδιο υγρού 25 g (24,3 ml) και βοηθήματα

Προσφορά

Συσκευασία σκόνης/υγρού:

Αγοράζοντας
2 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Riva Cem Automix

Αυτοπολυμεριζόμενο, ακτινοσκιερό, ρητινωδώς τροποποιημένο υαλοϊονομερές υλικό συγκόλλησης προσθετικών εργασιών.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Μεταλλοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες
- Ενδορριζικοί άξονες προκατασκευασμένοι/χυτοί
- Μεταλλικές στεφάνες, γέφυρες, ένθετα, επένθετα, ορθοδοντικές συσκευές και άξονες
- Στεφάνες, γέφυρες, ένθετα κι επένθετα από κεραμικά υψηλής αντοχής
- Ένθετα από κεραμικά χαμηλής αντοχής

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 x 4 g σύριγγες Riva Cem Automix και 16 ρύγχη ανάμειξης.

ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA

DA
DENTAL ADVISOR
++++½



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Δυνατότητα στιγμιαίου φωτοπολυμερισμού για εύκολη αφαίρεση των περισεσιών.**
Φωτοπολυμερίζετε τις περισεσίες του υλικού για 5 δευτερόλεπτα ανά επιφάνεια, με ένα υψηλής έντασης φως LED και κατόπιν αυτές αφαιρούνται εύκολα με ένα δρέπανο ή ανιχνευτήρα.
- Υψηλή αντοχή συγκόλλησης με οδοντίνη και αδαμαντίνη
- Υψηλή αντοχή στην κάμψη: 49,3 MPa
- Παρατεταμένη απελευθέρωση φθορίου χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία ionglass.
- Χωρίς BPA
- Χρωματική σταθερότητα
- Ρύγχη ανάμειξης με λιγότερη απώλεια υλικού

Το Riva cem διατίθεται σε ανοικτή κίτρινη απόχρωση.

SDI

Riva Luting Plus

Ρητινωδώς τροποποιημένη, υαλοϊονομερής κονία συγκόλλησης προσθετικών εργασιών, αυτοπολυμεριζόμενη.

- Υψηλή απελευθέρωση φθορίου
- Κλινικά αδιάλυτο όταν πήζει
- Υψηλή αντοχή στην κάμψη
- Πολύ μικρό πάχος φιλμ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συγκόλληση ρητινωδών, μεταλλικών ή μεταλλοκεραμικών στεφανών και γεφυρών, ένθετων και επένθετων
- Συγκόλληση κεραμικών ένθετων
- Συγκόλληση ενδορριζικών αξόνων
- Συγκόλληση ενισχυμένων ολοκεραμικών στεφανών
- Το Riva Luting Plus διατίθεται σε universal ανοικτή κίτρινη απόχρωση.



ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA

Προσφορά

Συσκευασία
σκόνης/υγρού:
Αγοράζοντας
3 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Riva Luting Plus κάψουλες.
Περιλαμβάνει 50 κάψουλες

Riva Luting Plus σκόνη/υγρό.
Περιλαμβάνει 10 g (8,95 ml) φιαλίδιο υγρού,
25 g βάζο σκόνης και βοηθήματα

set PP

Ενός βήματος, ρητινώδης κόλλα για τη συγκόλληση προσθετικών εργασιών.

Αυτοαδροποιητική, αυτοσυγκολλητική και διπλού πολυμερισμού.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συγκόλληση μεταλλικών, ρητινώδων, ολοκεραμικών και βασισμένων σε κεραμικά ένθετων, επένθετων, στεφανών και γεφυρών.
- Συγκόλληση ενδορριζικών αξόνων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Είναι εύκολη και γρήγορη στη χρήση της.**
Είναι αυτοαδροποιητική και αυτοσυγκολλητική κόλλα. Έτσι, απλά τοποθετείται στην προσθετική εργασία και η εργασία εφαρμόζεται στη θέση της.
- **Είναι διπλού πολυμερισμού.**
Το υλικό σκληραίνει από μόνο του σε 5 λεπτά ή σε μόλις 20 δευτερόλεπτα με λυχνία φωτοπολυμερισμού.
- **Απελευθερώνει φθόριο** σε μια σταθερή υψηλή δόση, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- **Έχει 5 αποχρώσεις:** διαφανή, A1, A2, OA3 και λευκή αδιαφανή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ασορτί συσκευασία 5 συριγγών (35 g):

Περιλαμβάνει 1 x 7g σύριγγα σε κάθε απόχρωση A1, A2, OA3, λευκή αδιαφανή, διαφανή και 70 ρύγχη αυτόματης ανάμειξης.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

2 x 7g σύριγγες seT PP, μεμονωμένα στις αποχρώσεις A1, A2, OA3, λευκή αδιαφανή, διαφανή και 28 ρύγχη αυτόματης ανάμειξης.



Προσφορά

Αγοράζοντας
2 ανταλλακτικά

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

SDI

Riva Star

Παράγοντας απευαισθητοποίησης των δοντιών, βασισμένος στο SDF (Φθοριούχος Διαμινικός Αργυρος).

Περιέχει τρία ισχυρά συστατικά:

- άργυρο • ιωδιούχα • φθοριούχα

Το Riva Star τοποθετείται σε δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα τοποθετείται ο φθοριούχος άργυρος κι αμέσως μετά επάνω του τοποθετείται το ιωδιούχο κάλιο το οποίο σε συνδυασμό με το φθοριούχο άργυρο, δημιουργεί ένα ίζημα ιωδιούχου αργύρου που εισέρχεται στα οδοντινοσωληνάκια και τα σφραγίζει, οδηγώντας στην εξάλειψη της ευαισθησίας.

Το Riva Star, χάρη στον φθοριούχο άργυρο, βοηθά στην εξουδετέρωση του βιούμνιου κι επίσης αποτρέπει το σχηματισμό του. Με τη δράση του αυτή είναι ένα εξαιρετικό καθαριστικό της οδοντικής κοιλότητας.




SDI

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Αποτέλεσμα απευαισθητοποίησης που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια**
Οι κλινικές μελέτες υποστηρίζουν το άμεσο αποτέλεσμα του Riva Star που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια
- **Αντιβακτηριακή δράση**
Το Riva Star είναι ένας αποτελεσματικός αναστολέας του βιούμνιου. Η διαπίστωση αυτή υποστηρίζεται από αποτελέσματα μελετών του πανεπιστημίου Otago (στη Νέα Ζηλανδία) που δείχνουν ότι το Riva Star έχει μεγαλύτερη ζώνη αναστολής της ανάπτυξης τεσσάρων βακτηριακών ειδών σε σύγκριση με το υποχλωριώδες νάτριο.
- **Μη επεμβατική μέθοδος**
Το Riva Star είναι απολύτως απαραίτητο για κλινικούς γιατρούς που εφαρμόζουν μεθόδους Ελάχιστη Επεμβατικής Οδοντιατρικής [Minimally Invasive Dentistry (MID)]. Φροντίζει την οδοντίνη και μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του δοντιού.
- **Αυξάνει την αντοχή συγκόλλησης υαλοϊονομερών κονιών.**
Η προετοιμασία των επιφανειών του δοντιού με Riva Star αποτελεί ιδανική λύση για την ενίσχυση της πρόσφυσης υαλοϊονομερών στην οδοντίνη.
- **Πατενταρισμένη διαδικασία**
Σε αντίθεση με άλλα συστήματα φθοριούχου αργύρου, η πατενταρισμένη διαδικασία δύο σταδίων του Riva Star, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο δημιουργίας κηλίδων. Με την εφαρμογή του διαλύματος ιωδιούχου καλίου πάνω από τον φθοριούχο άργυρο, δημιουργείται ένα κρεμώδες λευκό ίζημα ιωδιούχου αργύρου το οποίο και εκπλένεται.

Αντιμικροβιακή δράση NaClO και SDF/KI έναντι ενδοδοντικών παθογόνων

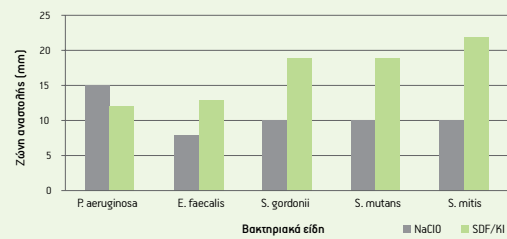

Πλάκα άγαρ με καλλιέργεια S. mutans

Πλάκα άγαρ με καλλιέργεια S. mutans



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 10 ασημί κάψουλες Riva Star
- 10 πράσινες κάψουλες Riva Star
- Βοηθήματα

Riva Star Aqua



Παράγοντας απευαισθητοποίησης δοντιών
βασισμένος στον φθοριούχο άργυρο.

Το Riva Star Aqua είναι ένα υδατικό διάλυμα φθοριούχου
αργύρου χωρίς τη βάση αμμωνίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Άμεση ανακούφιση από την υπερευαισθησία**
Ο φθοριούχος άργυρος και το ιωδιούχο ασβέστιο στο Riva Star Aqua αντιδρούν και δημιουργείται ένα ίζημα χαμηλής διαλυτότητας το οποίο μπλοκάρει τα οδοντινοσωληνάκια και προσδίδει άμεση ανακούφιση από την ευαισθησία.
- **Μείωση του αποχρωματισμού**
Όπως και το Riva Star, το Riva Star Aqua περιλαμβάνει μια διαδικασία δύο βημάτων που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο του χρωματισμού. Περιλαμβάνει Ιωδιούχο Κάλιο (KI) που εφαρμόζεται ως δεύτερο βήμα μετά τον Φθοριούχο Άργυρο (AgF) και μειώνει σημαντικά την πιθανότητα χρώσης.
- **Αποτέλεσμα απευαισθητοποίησης για 2 χρόνια**
- **Κανένας κίνδυνος εγκαύματος ιστού**
Το Riva Star Aqua βασίζεται στο νερό και δεν περιέχει αμμωνία.
Το γεγονός αυτό μειώνει τον ερεθισμό των μαλακών ιστών, εξαλείφει οσμές και βελτιώνει τη σταθερότητα αποθήκευσης.
- **Δεν απαιτείται προστασία των ούλων**
Με την απουσία αμμωνίας, το Riva Star Aqua μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς προστατευτικό των ούλων καθώς ο ερεθισμός των μαλακών ιστών είναι σημαντικά μειωμένος.
- **Κλινική αντιστοίχιση με το SDF**
Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο φθοριούχος άργυρος (AgF) σε ποσοστό 38% του Riva Star Aqua είναι επίσης αποτελεσματικός στην αναχαίτηση των αλλοιώσεων τερηδόνας όπως το διάλυμα SDF Riva Star που επίσης περιέχει 38% φθοριούχο άργυρο.
- **Αποτελεσματικός αναστολέας του βιοϋμένιου**
Μελέτες υποστηρίζουν ότι το Riva Star Aqua είναι ένας αποτελεσματικός αναστολέας του βιοϋμένιου. Εμφανίζει μεγαλύτερη ζώνη αναστολής της ανάπτυξης τεσσάρων βακτηριακών ειδών συγκριτικά με το υποκλωριώδες νάτριο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Riva Star Aqua Bottle Kit

Περιλαμβάνει:

- 1 x 1,5 ml φιαλίδιο Βήματος 1
- 1 x 3 ml φιαλίδιο Βήματος 2

Ultramat 2

Ηλεκτρονικός δονητής αμαλγάματος.

- Το υψηλής ακρίβειας χρονόμετρο του ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και δίνει σταθερές και ακριβείς περιόδους ανάμειξης.
- Ενεργοποιείται με την αφή και ρυθμίζεται από 1-16 δευτερόλεπτα.
- Ο Ultramat 2 έχει συχνότητα ταλαντεύσεων 4.600/λεπτό $\pm 1\%$.
- Κατασκευάζεται από ασάλι επενδεδυμένο με υψηλής ποιότητας συνθετικό υλικό και έχει πολύ ανθεκτικά πλαστικά μέρη.
- Κάνει ελάχιστο θόρυβο.
- Έχει 5 χρόνια εγγύηση.



Points

Βουρτσάκια μιας χρήσης, για τη γρήγορη μεταφορά μικρών ποσοτήτων υλικών στην κοιλότητα του δοντιού.

SDI

Διατίθενται σε 3 μεγέθη, χρωματικά κωδικοποιημένα:

- medium - μπλε
- fine - ανοικτά πράσινα
- superfine - μωβ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100 τεμάχια ενός μεγέθους



medium

fine

superfine

Pola Light



**Νέο, προηγμένο σύστημα
λεύκανσης των δοντιών στο σπίτι
με την τεχνολογία φωτισμού LED.**

Το Pola Light είναι ένα προηγμένο σύστημα λεύκανσης των δοντιών που συνδυάζει τη βραβευμένη φόρμουλα λεύκανσης του Pola κι ένα επιστόμιο με φωτισμό LED για ταχύτερη θεραπεία λεύκανσης.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σύστημα ταχείας δράσης, για λευκότερα δόντια **σε μόλις 5 ημέρες.**
- Το σύστημα Pola Light χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ζελέ Pola Day 6%.
- Φορητό κι επαναφορτιζόμενο σύστημα και εύχρηστο επιστόμιο χωρίς καλώδιο.
- Το επιστόμιο του Pola με φωτισμό LED έχει διπλό τόξο και ενιαίο μέγεθος για όλους.
- Με τα παχύρρευστα ζελέ λεύκανσης των δοντιών με ουδέτερο PH διασφαλίζεται η μέγιστη άνεση του ασθενούς σε ένα κιτ για χρήση στο σπίτι.
- Το μοναδικό μείγμα καταπραυντικών συστατικών περιποίησης με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, συμβάλλει στη μείωση της ευαισθησίας.



**ΑΠΟ ΜΟΛΙΣ 20 ΛΕΠΤΑ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.**

**ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 2x10 ή 2x15
ΛΕΠΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ**

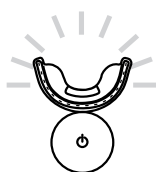

ΕΥΧΡΗΣΤΟ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 x επιστόμιο Pola με φωτισμό LED
- 4 x 3g σύριγγες Pola Day 6% υπεροξείδιο του υδρογόνου
- 1 x καλώδιο φόρτισης μέσω USB
- 1 x εγχειρίδιο οδηγιών

Pola Day - Pola Night

Σύστημα λεύκανσης σπιτιού.

Διακρίνεται σε δύο τύπους:

1. Pola Day: Ζελέ, 6% υπεροξειδίου του υδρογόνου, για χρήση στο σπίτι.
2. Pola Night: Ζελέ, 10% ή 16% υπεροξειδίου του καρβαμιδίου, για χρήση στο σπίτι.

Τα ζελέ Pola Day και Pola Night διατίθενται σε σύριγγες των 1,3 g.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Απελευθερώνουν φθόριο.** Η προσθήκη φθορίου καθιστά δυνατή την επανασβεσίωση του δοντιού και βοηθά στη μείωση της ευαισθησίας μετά τη θεραπεία.
- **Έχουν ουδέτερο pH**
- **Περιέχουν ένα μείγμα καταπραυντικών και ρυθμιστικών παραγόντων** που εμποδίζει τη δημιουργία πλάκας και βοηθά την απορρόφηση ασβεστίου ώστε να μειωθεί κι άλλο η ευαισθησία και η απώλεια ιόντων από την αδαμαντίνη
- **Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό** γεγονός που μειώνει την αφυδάτωση της αδαμαντίνης και την ευαισθησία του ασθενή
- **Το ζελέ τους έχει υψηλό ιξώδες** και εξασφαλίζει ότι εύκολα και με ασφάλεια τοποθετείται στο δισκίο και παραμένει εκεί για όλη τη διαδικασία
- **Έχουν ευχάριστη γεύση δυόσμου και είναι διαφανή**

SDI

Προσφορά

Αγοράζοντας
2 συσκευασίες
Pola Day ή Pola Night
10 συριγγών

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
POLA DAY	
Pola Day 10 Syringe Kit (σε 6% υπεροξειδίου του υδρογόνου). Περιλαμβάνει: 10 x 1,3 g σύριγγες Pola Day και βοηθήματα.	6%
Pola Day Mini Kit (σε 6% υπεροξειδίου του υδρογόνου). Περιλαμβάνει: 4 x 1,3 g σύριγγες Pola Day και βοηθήματα.	6%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
POLA NIGHT	
Pola Night 10 Syringe Kit (σε 10% ή 16% υπεροξειδίου του καρβαμιδίου). Περιλαμβάνει: 10x1,3g σύριγγες Pola Night και βοηθήματα.	10%
	16%
Pola Night Mini Kit (σε 10% ή 16% υπεροξειδίου του καρβαμιδίου). Περιλαμβάνει: 4x1,3g σύριγγες Pola Night και βοηθήματα.	10%
	16%

Pola Office+

Σύστημα αποκατάστασης του χρώματος των δοντιών, στο ιατρείο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ γρήγορο
- Δεν χρειάζεται φως
- Ουδέτερο pH
- Περιέχει απευαισθητοποιητικό παράγοντα
- Πολύ απλός τρόπος εφαρμογής
- Διατηρείται στο ψυγείο στους 2-8° C

Προσφορά

Αγοράζοντας
1 συσκευασία
Pola Office+
3 ασθενών

ΔΩΡΟ

1 συσκευασία
Pola Office+
1 ασθενή



SDI

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Pola Office+ Συσκευασία 3 ασθενών - χωρίς παρεοικόταχο

- 3 x 2,8 ml σύριγγες Pola Office+
- 3 x 1 g σύριγγες Gingival Barrier και βοηθήματα

Pola Office+ Συσκευασία 1 ασθενή - χωρίς παρεοικόταχο

- 1 x 2,8 ml σύριγγα Pola Office+
- 1 x 1 g σύριγγα Gingival Barrier και βοηθήματα





TMR SERIES

TMR ZFill 10.

Σειρά νανοϋβριδικών ρητινών προηγμένης τεχνολογίας

Διατίθενται σε: Universal πάστα, Flow ρευστή και Low Flow παχύρρευστη.





1

Επιτυγχάνει παρατεταμένη απελευθέρωση Φθορίου και Αντοχή

C.C.F.

Χρησιμοποιώντας ειδική τεχνολογία ενίσχυσης, όχι μόνο επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα παρατεταμένη απελευθέρωση φθορίου αλλά επίσης και υψηλή δύναμη και αντοχή. Έχει χαρακτηριστικά επαναφόρτισης φθορίου, λαμβάνοντας το φθόριο που περιέχεται στην οδοντόπαστα και το στοματόπλυμα κι απελευθερώνοντάς το όταν απαιτείται.

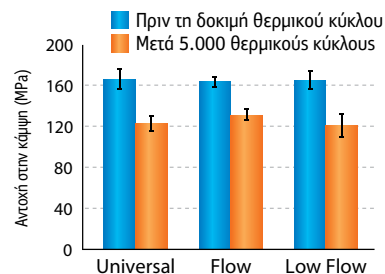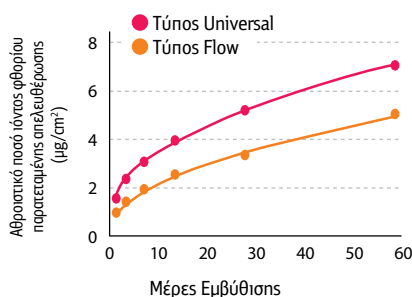

Σημείωση: ISO 4049:2009
Οδοντιατρική-Βασισμένα σε πολυμερή υλικά αποκατάστασης

2

Εξαιρετική Χρηστικότητα

C.C.F.

Το Universal απομακρύνεται εύκολα από τη σπάτουλα αλλά το ιξώδες του τού επιτρέπει να εκτείνεται ομαλά. Επιπλέον, καθώς το Flow και το Low Flow έχουν κατάλληλη ρευστότητα, είναι εύκολο να τοποθετηθούν όπως είναι επιθυμητό.



Δυνατότητα διαμόρφωσης του Universal



Ρευστότητα του Flow (αριστερά) Low Flow (δεξιά)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ YAMAKIN

Ενίσχυση συστοιχίας κεραμικών

Η ενίσχυση συστοιχίας κεραμικών (Ceramics cluster filler C.C.F.) είναι πρωτότυπη τεχνολογία της εταιρείας YAMAKIN.

Η ενίσχυση αποτελείται από τρία είδη ενισχυτικών ουσιών των οποίων οι ανομοιόμορφες επιφάνειες συνυφαινονται μεταξύ τους και αποδίδουν υψηλή αντοχή.

Έχει επιπλέον προστεθεί και ενίσχυση υάλου που απελευθερώνει φθόριο.

3 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



Σε συνδυασμό με την τεχνολογία ενίσχυσης, επιτεύχθηκε εξαιρετική ιδιότητα σκέδασης του φωτός.

Από το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να αναμένεται ένα αποτέλεσμα χαμαιλεοντισμού καθώς το φως σκεδάζεται έτσι ώστε τα περιβάλλοντα χρώματα γίνονται πιο φυσικά. Επιπλέον, οι αποχρώσεις A5 και OA5 έχουν προστεθεί στην γκάμα του Z Fill 10 και μπορεί να επιτευχθεί καλή αισθητική ακόμα και σε αυχενικές περιοχές μεγαλύτερων σε ηλικία ασθενών ή σε μικρές κοιλότητες.

Σειρά αποχρώσεων

Όνομα προϊόντος	Κατηγορία	A1	A2	A3	A3.5	A4	A5	B1	B2	B3	C2	C3	D2	Άλλα	Ποσότητα αποχρώσεων	Περιεχόμενα
Z Fill 10. Universal	Οδοντίνη	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	BW, E, OW	17	3.8g (2mL)
	Αδιαφάνεια		•	•												
Z Fill 10. Flow	Οδοντίνη	•	•	•	•	•	•							BW, E, OW	14	2.6g (1.5mL)
	Αδιαφάνεια		•	•	•	•	•									
Z Fill 10. Low Flow	Οδοντίνη	•	•	•	•	•	•							BW, E, OW	14	2.6g (1.5mL)
	Αδιαφάνεια		•	•	•	•	•									

BW: Λευκό Λεύκανσης E: Αδαμαντίνη OW: Λευκό αδιαφάνεια



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

TMR-Z Fill 10. Universal σύριγγα 3,8g (2mL)

Διατίθεται σε καθεμιά από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, C2, C3, D2, OA2, OA3, OW (οπτάκ λευκό), BW (λευκό λεύκανσης), E (αδαμαντίνη).

TMR-Z Fill 10. Flow σύριγγα 2,6g (1,5mL),

10 άκρα βελόνες

Διατίθεται σε καθεμιά από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OA5, OW, BW, E.

TMR-Z Fill 10. Low Flow σύριγγα 2,6g (1,5mL),

10 άκρα βελόνες

Διατίθεται σε καθεμιά από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OA5, OW, BW, E.



4+1
δωρο


TMR AQUA BOND 0

Αυτοαδροποιτικός συγκολλητικός παράγοντας οδοντίνης και αδαμαντίνης
(κατάλληλος επίσης για κεραμικά και μέταλλα)

1 Προηγμένη Συγκόλληση και Ταχύτητα




Η υγρασία είναι απαραίτητη στη συγκόλληση για την απομεταλλικοποίηση και τη διαπερατότητα της οδοντικής ουσίας. Όμως, είναι γνωστό ότι η υπερβολική υγρασία επηρεάζει αρνητικά τη συγκόλληση. Το AQUA BOND 0 επιτυγχάνει σταθερή συγκόλληση χωρίς ευαισθησία σε συνθήκες υγρασίας, δηλ. τόσο σε στεγνές όσο και σε υγρές συνθήκες, με πρωτόκολλα εφαρμογής φιλικά προς το χρήστη λόγω της δράσης ενός από τα συστατικά του, του M-TEG-P. Πρόκειται επομένως για έναν συγκολλητικό παράγοντα που εμποδίζει τη μείωση της αντοχής συγκόλλησης που προκαλείται από την υγρασία (η οποία δεν μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως σε κλινικές συνθήκες).

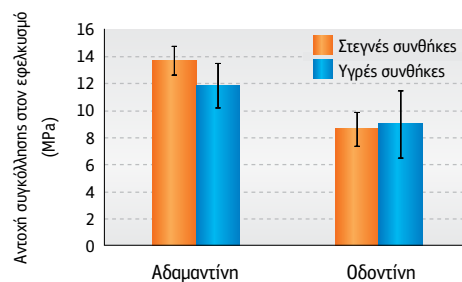

2 Καθόλου χρόνος αναμονής για Απομεταλλικοποίηση (Το δόντι απομεταλλικοποιείται γρήγορα μετά την εφαρμογή.)

Ένα υγρό, ένα βήμα. Χρησιμοποιείται ένα απλοποιημένο βήμα συγκόλλησης. Δεν απαιτείται χρόνος αναμονής για “απομεταλλικοποίηση” και έτσι μειώνεται η δυσφορία του ασθενή.

Το AQUA BOND 0 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες εφαρμογές όπως σε παιδιά ή ηλικιωμένους, εξαιτίας του μειωμένου χρόνου εργασίας.

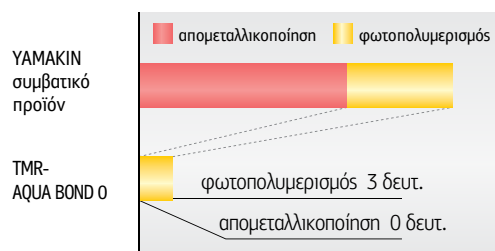


Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται φως LED έντασης 2. 400mW/cm².

3 Κανένας Διαχωρισμός μετά την απομάκρυνσή του από το φιαλίδιο




Με ακριβή έλεγχο του συνδυασμού συστατικών και το M-TEG-P, ακόμη και μετά από 30 λεπτά, σε συνθήκες προστασίας από το φως, δεν συμβαίνει κανένας διαχωρισμός φάσης μεταξύ των λιπόφιλων μονομερών και του νερού και έτσι, επιτρέπεται στα αποτελεσματικά για τη συγκόλληση συστατικά να τοποθετούνται ομοιόμορφα.

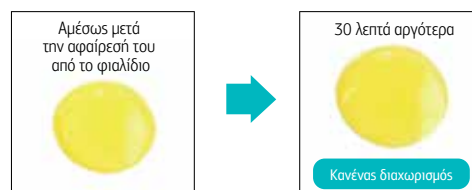

4 Βελτιώνει την Αντοχή Συγκόλλησης της σύνθετης ρητίνης

Εμφράσσοντας μικρές αδρότητες επάνω στην οδοντική επιφάνεια που δημιουργούνται κατά τον τροχισμό και αποδίδοντας στρώματα συγκόλλησης ομαλής επιφάνειας, επιτρέπει στη σύνθετη ρητίνη να προσαρτηθεί σφικτά. Επιπλέον, καθιστά εφικτή τη δημιουργία ενός στρώματος συγκόλλησης (5 έως 10 μm) το οποίο είναι όσο το δυνατόν λεπτό και ομοιόμορφο, γεγονός που επιτρέπει στη σύνθετη ρητίνη να επιδείξει πλήρως τη φυσική αντοχή της.

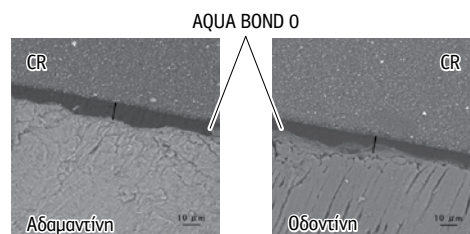



5 Συγκολλάται με διάφορα υλικά



Χάρη στο M-TEG-P και άλλα συστατικά συγκόλλησης, το TMR-AQUA BOND 0 μπορεί να συγκολληθεί σε μια ευρεία γκάμα υλικών, από τις οδοντικές ουσίες έως τη ζirkονία, το τιτάνιο και τα πολύτιμα μέταλλα κατά τη θεραπεία εμφράξεων και ενδοστοματικής επιδιόρθωσης. Μπορεί επίσης να συγκολληθεί σε πορσελάνη, στεφάνες, CAD/CAM και ρητινώδη υλικά που περιέχουν ανόργανη ενίσχυση κατά την ενδοστοματική επιδιόρθωσή τους, με χρήση του **Multi Primer LIQUID** ως προετοιμασία.

Συσκευασία: Φιαλίδιο 5 ml.

Τα περιεχόμενα στον πίνακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν

	Οδοντική ουσία	Ζirkονία	Τιτάνιο	Κράμιο Χρυσού	Κράμιο Αργύρου	Κράμιο Χρυσού-Αργύρου-Γαλλίου	Σύνθετη Ρητίνη (συμπεριλαμβανομένης ενίσχυσης με σφαιρίδια)	Πορσελάνη
TMR-AQUA BOND 0	○	○	○	○	○	○	—	—
Multi Primer LIQUID + TMR-AQUA BOND 0	—	—	—	—	—	—	○	○

Multi Primer Liquid

Ένα διάλυμα σε αιθανόλη με 2 βασικές λειτουργίες:


- **ως primer** για την προετοιμασία πολύτιμων μετάλλων για να συγκολληθούν με ρητίνη.
- **ως σιλάνιο** για την προετοιμασία μη-πολύτιμων μετάλλων, πορσελάνης και παλιά πολυμερισμένης έμφραξης σύνθετης ρητίνης για να συγκολληθούν με ρητίνη.

Συσκευασία: Φιαλίδιο 7 ml.



Μοναδική τεχνολογία χρωματικής προσαρμογής “Καμουφλάζ Εφέ”

1. Επιδίδοντας μια ισορροπία μεταξύ της διάχυσης του φωτός και της μετάδοσης του φωτός.

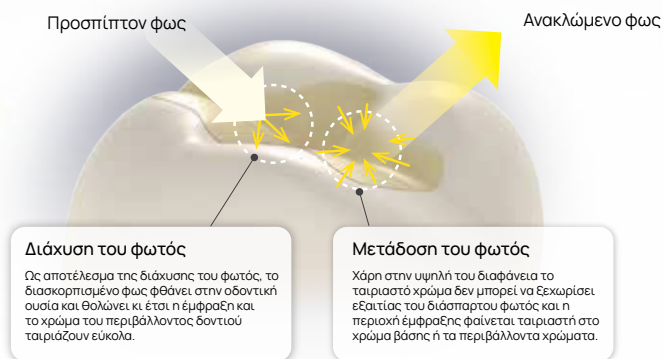

2. Η χρυσή αναλογία διαφάνειας, καλυπτικής ιδιότητας κι έντασης της Yamakin

Εάν η διαφάνεια είναι πολύ χαμηλή, η περιοχική έμφραξη μπορεί να γίνει εμφανής λόγω της έλλειψης διαφάνειας όταν χρησιμοποιείται στο κοπτικό (Αδαμαντίνη).

Εάν η ιδιότητα κάλυψης δεν είναι επαρκής, για παράδειγμα ένας αποχρωματισμός στον πυθμένα βοθρίου μπορεί να μην καλυφθεί από ένα χρώμα.

Εάν η ένταση είναι αναποτελεσματική, το πιο πιθανό είναι η περιοχική έμφραξη να φαίνεται λευκή, όταν η κοιλότητα είναι μεγάλη.

Η ρητίνη A·UNO αναπτύχθηκε με βελτιστοποιημένη την ισορροπία διαφάνειας, καλυπτικής ιδιότητας κι έντασης. Αναπτύχθηκε επίσης για να επικεντρώνεται στη σχεδίαση χρωματικών τόνων έτσι ώστε το ένα χρώμα να καλύπτει πολλές περιπτώσεις με απλό τρόπο.

Το A·UNO έχει μόνο μια απόχρωση.



Η μοναδική τεχνολογία χρωματικής προσαρμογής ‘Καμουφλάζ Εφέ’ βοηθά στο συνταίριασμα με το περιβάλλον χρώμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μηχανική αντοχή

Με την ενίσχυση της αντοχής στο νερό των συστατικών της ρητίνης στη μήτρα και στα υλικά ενίσχυσης, τόσο η αρχική αντοχή όσο και η ανθεκτικότητα βελτιώνονται σε σύγκριση με τη ρητίνη TMR-Z Fill 10.

Ιδιότητα παρατεταμένης απελευθέρωσης φθορίου

Χάρη στις ενισχυτικές του ουσίες με παρατεταμένη απελευθέρωση φθορίου, το A·UNO απελευθερώνει ιόντα φθορίου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, έχει χαρακτηριστικά επαναφόρτισης φθορίου. Ως εκ τούτου, προσλαμβάνει φθόριο που περιέχεται στην οδοντόκρεμα και το στοματικό διάλυμα και το απελευθερώνει.

Αντίσταση στην αποτριβή

Χάρη στα υψηλής ενίσχυσης Ceramics Cluster Fillers που είναι μοναδική τεχνολογία της Yamakin, και τη λεπτόκοκκη ανόργανη ενίσχυση, η αντοχή στην αποτριβή κατά τη σύγκλειση με οδοντική ουσία έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με τα υπάρχοντα προϊόντα. Επιπλέον, το δόντι ανταγωνιστής δεν θα φθαρεί τόσο πολύ από το πολυμερισμένο προϊόν.

Δυνατότητα στίλβωσης

Η μοναδική τεχνολογία ενίσχυσης συστοιχίας κεραμικών (Ceramic Cluster Fillers) και λεπτόκοκκες ανόργανες ενισχυτικές ουσίες, κάνουν ευκολότερη τη στίλβωση.

Αποκατάσταση κοιλότητας με χρήση A•UNO

Το A•UNO αναπτύχθηκε με την επιδίωξη της ισορροπίας καλυπτικής ιδιότητας και έντασης.

Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποχρωματισμένα δόντια ή για πρόσθια δόντια χωρίς ενδιαμέσο υλικό.

Επιπλέον, έχει βέλτιστη διαφάνεια και μπορεί επίσης να αναπαράγει το κοπτικό άκρο.



Κοιλότητα I ομάδας

Με αποχρωματισμό στον πυθμένα του βοθρίου.
Χρώμα μοντέλου δοντιού: A3

Αναπαράγει τη φυσική εμφάνιση με βέλτιστη καλυπτική ιδιότητα για τις αποχρωματισμένες περιοχές.

Διατίθεται σε τρεις τύπους πάστας

Τύπος Universal ο οποίος είναι λιγότερο κολλώδης και έχει καλή διατήρηση σχήματος, τύπος **Low Flow** ο οποίος έχει χαμηλή ρευστότητα και επίσης την ιδιότητα διατήρησης σχήματος και τύπος **Flow** ο οποίος μπορεί να ρέει στο εσωτερικό της κοιλότητας.



15 λεπτά
μετά τη
διαμόρφωση

10 δευτ.
μετά την
εξώθηση

10 δευτ.
μετά την
εξώθηση



Κοιλότητα II ομάδας

Με ένα μεταλλικό διπλανό δόντι
Χρώμα μοντέλου δοντιού: A3

Μειώνει την επίδραση του γκρι χρώματος του μετάλλου και αναπαράγει το φυσικό χρώμα του δοντιού.



Κοιλότητα IV ομάδας

Κοιλότητα χωρίς επίχρυσμα
Χρώμα μοντέλου δοντιού: A2

Το όριο με την οδοντική ουσία αναπαράγεται φυσικά επίσης, ενώ το χρώμα του φόντου καλύπτεται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

A•UNO Universal St
απόχρωση Basic
σύριγγα 4.0g (2mL)



ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

A•UNO Low Flow St
απόχρωση Basic
σύριγγα 2,8g (1,5ml)
Βοηθήματα
10 τεμάχια άκρα βελόνας



4+1
δωρο

ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

A•UNO Flow St
απόχρωση Basic
σύριγγα 2,8g (1,5ml)
Βοηθήματα
10 τεμάχια άκρα βελόνας



Nu:le Coat

Σύστημα για χαρακτηρισμό και στίλβωση σύνθετων ρητινών.

Το σύστημα Nu:le Coat αποτελείται από υγρά για στίλβωση και χαρακτηρισμό σύνθετων ρητινών και ένα ζελέ για σημεία που θέλουμε να αυξηθεί λίγο πάχος.



Χαμηλό ιξώδες για εύκολη τοποθέτηση



Διαφανής γυαλιστερή επίστρωση



Εξαιρετική αντοχή



Για ευέλικτη ρύθμιση χρώματος

Nu:le Coat Clear

Χρησιμοποιείται για τη στίλβωση της αποκατάστασης

- **Δεν επηρεάζει την απόχρωση της αποκατάστασης**
Το Nu:le Coat Liquid Clear (στο εξής θα αναφέρεται ως Clear) είναι διαυγές ακόμα και αμέσως μετά τον φωτοπολυμερισμό, έτσι είναι δύσκολο να επηρεάσει τον αρχικό χρωματικό τόνο της αποκατάστασης ακόμα και εάν τοποθετηθεί σε μεγάλη ποσότητα. Γι' αυτό, το Clear μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αποχρώσεις λεύκανσης.
- **Έχει μικρή τάση πολυμερισμού**
Έτσι, ακόμα κι αν το στρώμα που τοποθετείται είναι παχύτερο, είναι απίθανο να παρουσιάσει ρωγμές ή επιπλέον επιφάνεια.
- **Έχει εξαιρετική αντοχή**
Στην αξιολόγηση του τεστ αποτριβής από την

οδοντόβουρτσα (50.000 φορές)*1 βρέθηκε ισότιμο ή και καλύτερο από το φινιρίσμα στίλβωσης κι επέδειξε εξαιρετική αντίσταση στην αποτριβή.

Έχει αναφερθεί ότι η προσκόλληση πλάκας αυξάνεται γρήγορα όταν η αδρότητα επιφάνειας ξεπερνά τα 0,2 μm².

Ωστόσο, η επιφανειακή αδρότητα της επιφάνειας που επαλείφθηκε με Nu:le Coat είναι μικρότερη του 0,1 μm ακόμα και μετά από τις 50.000 φορές του τεστ αποτριβής από την οδοντόβουρτσα.


- **Έχει χαμηλό ιξώδες κι εύκολη τοποθέτηση**
- **Μειώνει τον χρόνο στίλβωσης κατά 1/3** αυτού που θα χρειαζόταν για στίλβωση με άλλα μέσα

Nu:le Coat χρωματικές σειρές

Χρησιμοποιούνται για χαρακτηρισμό και τροποποίηση χρώματος

1. ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΣΤΕΦΑΝΩΝ

Λευκό, Γκρι, Καφέ, Κίτρινο, Πορτοκαλί, Μπλε

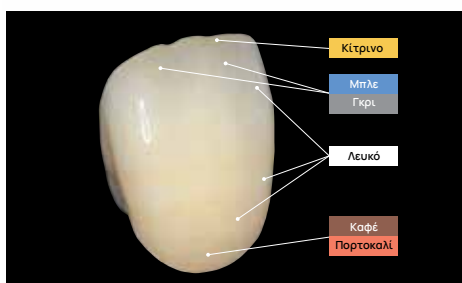

2. SHADE PLUS

Επιπλέον, διατίθεται η σειρά A plus, B plus, C plus, D plus που επιτρέπει μικρή τροποποίηση της απόχρωσης.



A2 Στεφάνη Τοποθετημένο 1 στρώμα A plus



B2 Στεφάνη Τοποθετημένο 1 στρώμα B plus

3. ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΟΥΛΩΝ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ για χρήση στο ιατρείο



Σύνθετη ρητίνη έμφραξης



Μετά τον φωτοπολυμερισμό, την τροποποίηση σχήματος και το αγγίεμα της επιφάνειας.



Τοποθέτηση του Nu:le Coat (γυάλισμα)



Φωτοπολυμερισμός

Οι συσκευές φωτοπολυμερισμού θα πρέπει να έχουν κορυφαίο μήκος κύματος εξόδου 400±20 nm κι επίσης θα πρέπει να περιέχουν το μωβ LED.



Ολοκλήρωση

Σημείωση

Το Gel συστήνεται για χρήση για τα μέρη που χρειάζονται πάχος.



1

Τοποθετήστε ένα στρώμα Clear σαν βασική επίστρωση και φωτοπολυμερίστε.



2

Τοποθετήστε Gel και φωτοπολυμερίστε.



Στους χρωματιστούς τύπους, ανακινήστε πολύ καλά το φιαλίδιο πριν τη χρήση, καθώς το χρώμα μπορεί να κατακαθίσει. Αποφύγετε τη χρήση αυτού του προϊόντος σε μασπτικές περιοχές όπου ασκείται πίεση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ NU:LE COAT



Μονή Συσκευασία

Nu:le Coat Liquid Clear, φιαλίδιο 6ml

Nu:le Coat Liquid, φιαλίδιο 4ml στα χρώματα:

Λευκό, Γκρι, Καφέ, Κίτρινο, Πορτοκαλί, Μπλε, Σκούρο καφέ HV, Κόκκινο, Ροζ, Gum, Μαύρο, A plus, B plus, C plus, D plus



Μονή Συσκευασία

Nu:le Coat Gel, σύριγγα 2ml

Διαφανές

Honigum® Putty

Πολυβινυλοσιλοξάνη στοκώδους σύστασης.

Διατίθεται στους τύπους:

- **Honigum Putty Rigid Fast** για διορθωτικά αποτυπώματα
- **Honigum Putty Soft** για την τεχνική της ταυτόχρονης διπλής μείξης σε συνδυασμό με το Honigum Light
- **Honigum Putty Soft Fast** για την τεχνική της ταυτόχρονης διπλής μείξης σε συνδυασμό με το Honigum Light Fast

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, αποτυπώματα ένθετων και επένθετων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Soft	Soft Fast	Rigid Fast
Χρόνος ανάμειξης (λεπτά)	0:30	0:30	0:30
Χρόνος εργασίας (λεπτά)	3:15	1:15	1:45
Χρόνος μέσα στο στόμα	3:15	1:15	1:45
Χρώμα	■	■	■
Shore-A σκληρότητα	≈ 62	≈ 62	≈ 70



Προσφορά

Αγοράζοντας
2 συσκευασίες **Honigum Putty**

ΔΩΡΟ

1 συσκευασία του λεπτόρρευστου
αποτυπωτικού **Honigum Light**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 βάζα των 450 ml, βάση και καταλύτης

DMG

Honigum® Light

Πολυβινυλοσιλοξάνη λεπτόρρευστη,
για αποτύπωση ακριβείας.

Συνδυάζεται με όλες τις γνωστές πολυβινυλοσιλοξάνες.
Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα αυτόματης ανάμειξης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Υλικό για διορθωτικό αποτύπωμα σε όλες τις τεχνικές αποτύπωσης δύο φάσεων.

Ενδείκνυται για αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών,
ένθετων και επένθετων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Light	Fast
Χρόνος εργασίας (λεπτά)	2:15	1:30
Χρόνος μέσα στο στόμα (λεπτά)	3:30	2:00
Χρώμα	■	■
Shore-A σκληρότητα	≈ 47	≈ 47



Προσφορά

Αγοράζοντας
2 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 φύσιγγες των 50 ml, 12 ρύγχη ανάμειξης,
12 ενδοστοματικά ρύγχη

Honigum® MixStar Heavy

Πολυβινυλοσιλοξάνη παχύρρευστη, σαν πρώτο υλικό σε αποτύπωση δύο φάσεων.





Διατίθεται σε 5:1 φύσιγγα για τις συσκευές MixStar.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων και για αποτυπώματα εμφυτευμάτων.

Συνδυάζεται τέλεια με το Honigum Light.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		 Fast
Χρόνος εργασίας (λεπτά)	2:15	1:15
Χρόνος μέσα στο στόμα (λεπτά)	3:15	2:00
Χρώμα		
Shore-A σκληρότητα	≈ 67	≈ 67



Προσφορά

Αγοράζοντας 2 συσκευασίες Honigum MixStar Heavy

ΔΩΡΟ

1 συσκευασία του λεπτόρρευστου αποτυπωτικού Honigum Light

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 φύσιγγα των 380 ml, 10 ρύγχη ανάμειξης

Honigum® Automix Heavy

Πολυβινυλοσιλοξάνη παχύρρευστη, σαν πρώτο υλικό σε αποτύπωση δύο φάσεων.





Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα για πιστόλι 50 1:1

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων και για αποτυπώματα εμφυτευμάτων.

Συνδυάζεται τέλεια με το Honigum Light.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

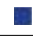		 Fast
Χρόνος εργασίας (λεπτά)	2:00	1:15
Χρόνος μέσα στο στόμα (λεπτά)	3:15	2:00
Χρώμα		
Shore-A σκληρότητα	≈ 67	≈ 67



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 φύσιγγες των 50 ml, 4 ρύγχη ανάμειξης

Honigum® MixStar Mono

Πολυβινυλοσιλοξάνη παχύρρευστη,
για αποτύπωση ακριβείας σε μια φάση.

Διατίθεται σε 5:1 φύσιγγα, για τις συσκευές MixStar.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων,
λειτουργικά και αποτυπώματα για εμφυτεύματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρόνος εργασίας: 2:00 λεπτά

Χρόνος μέσα στο στόμα: 3:15 λεπτά

Χρώμα: ■

Shore-A σκληρότητα: ≈ 47



Προσφορά

Αγοράζοντας
2 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 φύσιγγα των 380 ml πάστα, 10 ρύγχη ανάμειξης

Honigum® Automix Mono

Πολυβινυλοσιλοξάνη, μονοφασικό υλικό
αποτύπωσης ακριβείας, σε διπλή φύσιγγα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων,
λειτουργικά και αποτυπώματα για εμφυτεύματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρόνος εργασίας: 2:15 λεπτά

Χρόνος μέσα στο στόμα: 2:30 λεπτά

Χρώμα: ■

Shore-A σκληρότητα: ≈ 47



Προσφορά

Αγοράζοντας
2 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 φύσιγγες των 50ml, 4 ρύγχη ανάμειξης,
4 ενδοστοματικά ρύγχη

Honigum® MixStar Putty

Πολυβινυλοσιλοξάνη στοκώδους σύστασης.

Διατίθεται σε φύσιγγα 5:1 για τις συσκευές MixStar.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων και επένθετων.

Συνδυάζεται τέλεια με το Honigum Light.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρόνος εργασίας: 1:45 λεπτά

Χρόνος μέσα στο στόμα: 3:15 λεπτά

Χρώμα: ■

Shore-A σκληρότητα: ≈ 66



Προσφορά

Αγοράζοντας
2 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 φύσιγγα των 380 ml, 10 ρύγχη ανάμειξης

StatusBlue® MixStar

Πολυβινυλοσιλοξάνη για όλα τα αποτυπώματα στα οποία ενδείκνυται αλγινικό.

Διατίθεται σε 5:1 φύσιγγα για τις συσκευές MixStar.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρόνος εργασίας: 1:15 λεπτά

Χρόνος μέσα στο στόμα: 1:45 λεπτά

Χρώμα: ■

Shore-A σκληρότητα: ≈ 40



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 φύσιγγα των 380 ml, 10 ρύγχη ανάμειξης

O-Bite

Υλικό καταγραφής δήξης,
πολυβινυλοσιλοξάνη,
με πολύ υψηλή τελική σκληρότητα.

Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Έχει πολύ υψηλή τελική σκληρότητα μετά μία ώρα: Shore-A σκληρότητα 93.
- Έχει υψηλή αντίσταση στο σπάσιμο. Το αποτύπωμα δήξης με O-Bite δεν σπάει ούτε κατά την απομάκρυνση από το στόμα και την αφαίρεση των περισεσιών ούτε και κατά την ανάρτηση των εκμαγείων
- Οι περισεσιές του κόβονται εξαιρετικά με ένα νυστέρι
- Έχει έντονο πορτοκαλί χρώμα για να ξεχωρίζει στο στόμα
- Έχει άρωμα φρέσκου πορτοκαλιού
- Χρόνος πήξης: 1:30 λεπτά

**3+1
δώρα**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 φύσιγγες των 50ml, 12 ρύγχη ανάμειξης

DMG

LuxaBite®

Πρωτοποριακό υλικό για καταγραφή δήξης,
βασισμένο στα δισ-ακρυλικά.
Σκληρό και ακριβές.

Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καταγραφή δήξης. Επίσης, χρησιμοποιείται και για σταθεροποίηση των εξαρτημάτων αποτύπωσης των εμφυτευμάτων στο δισκάριο κατά την αποτύπωση ανοικτού δισκαρίου.

Χρώμα: μπλε.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 φύσιγγα των 50ml, 15 ρύγχη ανάμειξης.

Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με πιστόλι 10:1.

Tray-Adhesive

Συγκολλητικό δισκαρίων αποτύπωσης
για όλες τις πολυβινυλοσιλοξάνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 φιαλίδιο των 10 ml



MixStar e-Motion

Συσκευή ανάμειξης αποτυπωτικών υλικών,
γρήγορη, εύκολη, ευέλικτη.

Πλήρως αυτόματη ανάμειξη με ηλεκτρονική
τελειότητα.



Κουμπιά
για την έναρξη
και το σταμάτημα
της ανάμειξης
και για τη
μετακίνηση
των εμβόλων.



- 2 χρονόμετρα
- 3 επίπεδα ταχύτητας



Θύρα USB
για αναβάθμιση
του software.

Προσφορά

ΔΩΡΟ

με αγορά υλικών
της εταιρείας DMG

αξίας

1.500 €



DMG

Silagum® Comfort

Πολυβινυλοσιλοξάνη για αναγόμευση
οδοντοστοιχιών.

Χρώμα: Ροζ



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αναγόμευση ολικών, μερικών και επιεμφυτευματικών
οδοντοστοιχιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

1 φύσιγγα Silagum-Comfort των 25 ml, 5 ρύγχη ανάμειξης

1 φύσιγγα Silagum-Comfort των 50 ml, 12 ρύγχη ανάμειξης

Primer: 1 φιαλίδιο των 5 ml

Varnish: 2 φιαλίδια των 10 ml

Luxatemp Star

Αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη κατασκευής προσωρινών στεφανών και γεφυρών.

- Εξαιρετική αντοχή στην κάμψη και αντίσταση στη θραύση.
- Υψηλότερη αρχική σκληρότητα.
- Χρωματική σταθερότητα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Προσωρινές στεφάνες και γέφυρες
- Προσωρινά ένθετα και επένθετα
- Προσωρινές αποκαταστάσεις μεγάλης διάρκειας
- Προσωρινά veneers

Έχει 6 αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B1, Bleach Light



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 διπλή φύσιγγα των 76g και 15 ρύχνη ανάμειξης.
Διαθέσιμες αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B1, Bleach Light.
Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με πιστόλι 10:1.

Προσφορά

Αγοράζοντας
2 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

DMG

LuxaFlow Star

Ρευστή φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη.
Ειδικά σχεδιασμένη για επιδιορθώσεις στο Luxatemp Star.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Προσθήκες κι επιδιορθώσεις προσωρινών
- Μικρές εμφράξεις III, IV και V ομάδας
- Αποκαταστάσεις ελάχιστης επέμβασης
- Κάτω από εμφράξεις



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 σύριγγες του 1,5 g, 10 ρύχνη, σε καθεμιά από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B1

Luxatemp® Glaze & Bond

Φωτοπολυμεριζόμενο βερνίκι για την επισκευή και το κλείσιμο των πόρων των προσωρινών στεφανών και γεφυρών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιαλίδιο 5 ml, 25 πινελάκια



NEO LuxaTemp MaxProtect

Υλικό προσωρινών αποκαταστάσεων μακράς διάρκειας.

Κλινικά επιβεβαιωμένο για διάρκεια 1 έτους.

Το Luxatemp MaxProtect είναι ένα υλικό με σταθερότητα μακράς διάρκειας και βελτιστοποιημένες μηχανικές ιδιότητες. Η αντοχή του έχει επιβεβαιωθεί από κλινική μελέτη. Το Luxatemp MaxProtect είναι το προϊόν επιλογής σας, ειδικά όταν:

- Η περίπτωση που θεραπεύετε απαιτεί μια εκτεταμένη φάση επούλωσης (π.χ. μετά από μια επιεμφυτευματική αποκατάσταση, περιοδοντίτιδα ή ενδοδοντική θεραπεία).
- Αναζητάτε μια αισθητική λύση που να είναι προσιτή για τον ασθενή και με υψηλή ανθεκτικότητα.

Μηχανική σταθερότητα και αισθητική

Το Luxatemp MaxProtect αποτελεί την επόμενη γενιά προσωρινών αποκαταστάσεων υψηλής ποιότητας. Ο προκάτοχος του, το δοκιμασμένο Luxatemp έχει βελτιστοποιηθεί περαιτέρω μέσω συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης για να πληρώσει τα υψηλότερα πρότυπα. Εκτός από τη μηχανική σταθερότητα, η οποία διασφαλίζει ότι κάθε εναπομένονσα δομή δοντιού προστατεύεται και αποκαθίσταται η λειτουργία του δοντιού, το Luxatemp MaxProtect προσφέρει εξαιρετικές οπτικές ιδιότητες.

Τα δεδομένα κλινικών μελετών επιβεβαιώνουν επίσης την απόδοση σε διάστημα ενός έτους και την πολύ υψηλή ικανοποίηση των ασθενών. Luxatemp MaxProtect – μέγιστη προστασία και εξαιρετική αισθητική για μακροχρόνιες προσωρινές αποκαταστάσεις.

Πηγή: κλινική μελέτη (Αριθμός Μητρώου NCT03160950)

Ξεπερνά τον ανταγωνισμό

Το Luxatemp MaxProtect ξεπερνά συγκρίσιμους ανταγωνιστές σε ιδιότητες που υποδηλώνουν εξαιρετική ανθεκτικότητα και αισθητική. Η αντοχή σε κάμψη 118 MPa και η σταθερότητα απόχρωσης (ΔΕ) 0,48 καθιστούν το Luxatemp MaxProtect σαφώς πρωτοπόρο. Αυτές οι εξαιρετικές τιμές δείχνουν ότι το Luxatemp MaxProtect όχι μόνο αντέχει στις πιο απαιτητικές συνθήκες, αλλά διατηρεί και την αισθητική του εμφάνιση μακροπρόθεσμα. Παρουσιάζει επίσης μια εξαιρετικά λεία επιφάνεια που τονίζει την υψηλή ποιότητα υλικού του Luxatemp MaxProtect και αποτελεί τη βέλτιστη βάση για στίλβωση.



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Κατάγματα δοντιών
- Ενδοδοντική θεραπεία
- Κενά μεταξύ των δοντιών
- Διόρθωση κακής θέσης των δοντιών
- Αισθητικές αποκαταστάσεις
- Φάσεις επούλωσης (σε περιοδοντική θεραπεία / επιεμφυτευματική αποκατάσταση).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική σταθερότητα,
- Εξαιρετική αισθητική
- 1 συνεδρία. Χρειάζονται 5 λεπτά για την κατασκευή μιας στεφάνης
- Υποστηρίζεται από μελέτες και είναι κλινικά δοκιμασμένο.
- Προσφέρει 1 έτος χρήσης
- Έχει αντοχή στην κάμψη 118 MPa
- Έχει μακροχρόνια σταθερότητα απόχρωσης ΔΕ=0,48
- Διαθέτει 6 αποχρώσεις : BL, A1, A2, A3, A3.5, B1
- 1 φύσιγγα παράγει 36 στεφάνες

Προσφορά

Αγοράζοντας
2 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 Φύσιγγα @ 50ml, 15 ρύγχη αυτόματης ανάμειξης, σε κάθε μία από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B1, BL

TempoCem® NE Automix

Κόλλα προσωρινής συγκόλλησης προσθετικών εργασιών, χωρίς ευγενόλη.

Βασίζεται στο οξείδιο του ψευδαργύρου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 φύσιγγα των 60 g πάστα, 35 ρύγχη αυτόματης ανάμειξης.

Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με το πιστόλι Τύπος 25 της DMG.



TempoCem® NE Smartmix

Κόλλα προσωρινής συγκόλλησης προσθετικών εργασιών, χωρίς ευγενόλη.

Βασίζεται στο οξείδιο του ψευδαργύρου.

Προσφορά

Αγοράζοντας
2 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 σύριγγες Smartmix των 11 g, 20 ρύγχη ανάμειξης



DMG

TempoCem® Automix

Κόλλα προσωρινής συγκόλλησης προσθετικών εργασιών, βασισμένη στο οξείδιο του ψευδαργύρου, με ευγενόλη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 φύσιγγα των 63 g πάστα, 35 ρύγχη αυτόματης ανάμειξης.

Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με το πιστόλι Τύπος 25 της DMG.



TempoCem® ID

Αισθητική διαφανής κόλλα προσωρινής συγκόλλησης προσθετικών εργασιών.

Είναι ρητινώδης και διπλού πολυμερισμού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Είναι αόρατη κάτω από τις αποκαταστάσεις, όμως αναγνωρίσιμη για εύκολη, αξιόπιστη αφαίρεση των περισεσιών.
- Ιδανική διαφάνεια για αποτελέσματα υψηλής αισθητικής
- Ιδανική συγκόλληση, εύκολη αφαίρεση
- Προσωρινή συγκόλληση, αξιολοπιστία ημιμόνιμης συγκόλλησης

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Προσωρινή συγκόλληση προσωρινών και ημιμόνιμων στεφανών, γεφυρών, ένθετων, επένθετων, όψεων και επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 σύριγγα Smartmix των 5 ml, 10 ρύγχη ανάμειξης.



Vitique Silane

Συγκολλητικός παράγοντας για δημιουργία δεσμού μεταξύ έμμεσων αποκαταστάσεων και ρητινωδών συστημάτων συγκόλλησης.

Το DMG Silane είναι ένα προϊόν δύο συστατικών για δημιουργία δεσμού μεταξύ πυριτιούχων κεραμικών αποκαταστάσεων και των ρητινωδών συγκολλητικών συστημάτων.

Το DMG Silane αποτελείται από ένα συγκολλητικό σιλάνιο και έναν ενεργοποιητή.

Τα συστατικά αναμειγνύονται σε μια αναλογία 1:1 αμέσως πριν από κάθε τοποθέτηση.

Πλεονέκτημα συγκριτικά με τα συστήματα ενός φιαλιδίου: το φρεσκοαναμειγμένο υλικό για κάθε εφαρμογή, προσφέρει ένα καλύτερο δεσμό.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Προετοιμασία των πυριτιούχων κεραμικών επιφανειών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αξιόπιστος δεσμός
- 1:1 αναλογία ανάμειξης
- Ένα φρέσκο μείγμα σε κάθε τοποθέτηση χάρη στο σύστημα 2 συστατικών



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 φιαλίδιο των 3 ml συγκολλητικό σιλάνιο
- 1 φιαλίδιο των 3 ml ενεργοποιητής
- Βοηθήματα

Retraction Paste

Πάστα απώθησης των ούλων με στυπτική δράση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Προσωρινή απώθηση των ουλικών ορίων κι εγκατάσταση στεγνού περιβάλλοντος στην ουλοδοντική σχισμή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συνδυάζεται με νήμα απώθησης ούλων
- Διατίθεται σε κάψουλα από ειδική ρητίνη με εύκαμπτο ρύγχος που μπορεί να καμφθεί όπως είναι επιθυμητό σε κάθε περίπτωση
- Η ιδανική σύσταση της πάστας της επιτρέπει να μένει σταθερά στην ουλοδοντική σχισμή
- Κατασκευάζεται από μια βάση φυσικής αλουμίνας
- Έχει καλή αντίθεση χρώματος
- Έχει φρέσκια γεύση μέντας

Σύνθεση: Καολίνη, εξαένυδρο χλωριούχο αργίλιο, νερό, χρωστικές, άρωμα



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25 κάψουλες των 0,37 g πάστας

PermaCem 2.0



Αυτοσυγκολλητική ρητινώδης κόλλα. Εξαιρετική για ζirkονία.

Διπλού πολυμερισμού, αυτοσυγκολλητική ρητινώδης κόλλα για τη μόνιμη συγκόλληση στεφανών, γεφυρών, ένθετων, επένθετων και αξόνων, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως αδροποίηση και συγκολλητικός παράγοντας.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μόνιμη συγκόλληση ένθετων, επένθετων, στεφανών, γεφυρών και αξόνων από:

- μέταλλα και μεταλλικά κράματα (ανοξειδωτα και μη), μεταλλοκεραμικά και σύνθετες ρητίνες
- ολοκεραμικά όπως οξειδίο του ζirkονίου, οξειδίο του αργιλίου κι όλα τα πυριτιούχα κεραμικά, π.χ. διπυριτικό λίθιο
- σύνθετες ρητίνες ενισχυμένες με υαλονήματα (άξονες)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Νέα φόρμουλα συγκολλητικού μονομερούς.** Εξασφαλίζει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης με ζirkονία (21,6 MPa σύμφωνα με εσωτερικές μετρήσεις της DMG), πυριτιούχα κεραμικά και κεραμικά οξειδίου, δυνατή συγκόλληση με μέταλλα και μεταλλικά κράματα, αξιόπιστη συγκόλληση με ρητινώδη υλικά και άξονες υαλονημάτων και μόνιμη συγκόλληση με αδαμαντίνη και οδοντίνη
- **Εξαιρετική ροή.** Συνδυάζει σταθερότητα κατά την τοποθέτηση στην προσθετική εργασία κι εξαιρετική ροή κάτω από πίεση
- **Ελάχιστη απορρόφηση νερού.** Προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία και έλεγχο των δυνάμεων διαστολής
- **Εξαιρετική αντοχή στη συμπίεση:** 249 MPa (βάση εσωτερικών μετρήσεων της DMG)
- **Ακτινοσκοιρότητα**
- **Καλή σταθερότητα απόχρωσης**

Το PermaCem 2.0 διατίθεται στις αποχρώσεις: A2, A3 Opaque και διαφανή.



Προσφορά

Αγοράζοντας
2 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 σύριγγα Smartmix των 9 g, 15 ρύγχη Smartmix κοντά, 5 ρύγχη Smartmix Endo M, σε καθεμιά από τις αποχρώσεις A2, A3 opaque και διαφανή.

PermaCem Universal

Διπλού πολυμερισμού ρητινώδης κόλλα γενικής χρήσης.

Μέγιστη δύναμη συγκόλλησης, εύκολος χειρισμός και καλή αισθητική, κάνουν την PermaCem Universal ιδανική κόλλα γενικής χρήσης για το ιατρείο.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Μόνιμη συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων (ένθετα, επένθετα, στεφάνες και γέφυρες) από:
 - μέταλλα και μεταλλικά κράματα (πολύτιμα και βασικά μέταλλα)
 - κεραμικά οξειδίων (οξειδίο του ζirkονίου και του αργιλίου)
 - πυριτιούχα κεραμικά
 - ρητίνες και ρητίνες ενισχυμένες με ίνες
- Μόνιμη συγκόλληση κεραμικών ή ρητινωδών όψεων
- Μόνιμη συγκόλληση κεραμικών οξειδίων, πυριτιούχων κεραμικών και ρητινωδών ή μεταλλικών αποκαταστάσεων πάνω σε abutments εμφυτευμάτων.
- Συγκόλληση αξόνων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχυρή συγκόλληση σε όλες τις κλινικές καταστάσεις
- Γενικής χρήσης: κατάλληλο τόσο για όλα τα κεραμικά όσο και για ρητίνες ή μέταλλα.
- Κλινικά τεκμηριωμένο για χρήση με όλα τα στάνταρ υλικά CAD/CAM
- Υψηλή αντίσταση στην αποτριβή για αξιόπιστα καλή ποιότητα ορίων και μακροβιότητα της αποκατάστασης
- Εύκολη απομάκρυνση των περισσειών σε ένα τεμάχιο
- 5 αισθητικές αποχρώσεις με δυνατότητα δοκιμαστικών παστών από το Vitique Veneer Cementation System. Πρόκειται για 5 ακτινοσκοπικές αποχρώσεις (A1, A2.5, A4, Διαφανή και Λεύκανσης) με υψηλή σταθερότητα απόχρωσης και ιδανικό φθορισμό
- Ελάχιστη απορρόφηση νερού διασφαλίζει υψηλή αισθητική και καλό έλεγχο των δυνάμεων διαστολής



Συνδυάζεται ιδανικά με τον συγκολλητικό παράγοντα LuxaBond Universal.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Περιλαμβάνει: 1 σύριγγα Smartmix των 9 g και 10 ρύγχη Smartmix, σε καθεμία από τις αποχρώσεις A1, A, 2.5, A4, TR, BL.

Ionosit® Baseline

Φωτοπολυμεριζόμενο ουδέτερο στρώμα.



- Επανορθώνει μοναδικά τη συστολή πολυμερισμού των συνθέτων ρητινών με ελεγχόμενη διαστολή
- Απελευθερώνει συνεχώς φθόριο
- Περιλαμβάνει βακτηριοκτόνα ιόντα ψευδαργύρου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20 μικροσύριγγες, 0,33g η καθεμία

Ecosite-Bond

Φωτοπολυμεριζόμενος, ενός συστατικού, συγκολλητικός παράγοντας αδαμαντίνης και οδοντίνης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις τεχνικές αυτο-αδροποίησης, επιλεκτικής αδροποίησης ή ολικής αδροποίησης, σε συνδυασμό με φωτοπολυμεριζόμενα υλικά αποκατάστασης.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 φιαλίδιο των 5ml Ecosite-Bond

LuxaBond Universal

Διπλού πολυμερισμού συγκολλητικός παράγοντας 2 φιαλιδίων για οδοντίνη και αδαμαντίνη ο οποίος λειτουργεί και ως primer για έμμεσες αποκαταστάσεις.

- Περιέχει μονομερές MDP και εξασφαλίζει ισχυρή συγκόλληση.
- Είναι πραγματικά γενικής χρήσης.
- Ελαχιστοποιεί τις πιθανές πηγές λαθών κατά τις διαδικασίες αδροποίησης/συγκόλλησης.

Η ονομασία Universal (γενικής χρήσης) είναι πραγματική:

1. Ελεύθερη επιλογή μεθόδου αδροποίησης στις σκληρές οδοντικές ουσίες: αυτοαδροποίηση, επιλεκτική αδροποίηση, ολική αδροποίηση
2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άμεσες ή έμμεσες αποκαταστάσεις
3. Είναι κατάλληλο για φωτοπολυμεριζόμενα, αυτοπολυμεριζόμενα και διπλού πολυμερισμού υλικά
4. Είναι διπλού πολυμερισμού

MDP μονομερές: ένας σπесиαλίστας στη γενική συγκόλληση.

Το MDP μονομερές εντός του LuxaBond Universal καθιστά εφικτή την ισχυρή συγκόλληση με όλα τα συστατικά: κεραμικά οξειδίων και πυριτιούχα, μεταλλικά κράματα, οδοντίνη, αδαμαντίνη και σύνθετες ρητίνες (εμφράξεων και κόλλες).

Το LuxaBond Universal ταιριάζει τέλεια με τη ρητίνη κατασκευής κολοβωμάτων **LuxaCore Z** και με τη ρητινώδη κόλλα **PermaCem Universal**.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- **Ως συγκολλητικός παράγοντας**
Χρησιμοποιείται σε άμεσες αποκαταστάσεις με φωτοπολυμεριζόμενες σύνθετες ρητίνες και composites, με φωτοπολυμεριζόμενα υλικά προληπτικών εμφράξεων, με φωτοπολυμεριζόμενα και διπλού πολυμερισμού υλικά κατασκευής κολοβωμάτων. Επίσης, χρησιμοποιείται σε συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων και αξόνων με ρητινώδεις κόλλες (φωτοπολυμεριζόμενες, αυτοπολυμεριζόμενες και διπλού πολυμερισμού) και σε συγκόλληση όψεων με ρητινώδεις κόλλες (σε συνδυασμό με αδροποίηση της αδαμαντίνης).
- **Ως primer**
Χρησιμοποιείται για έμμεσες αποκαταστάσεις από: μέταλλα (πολύτιμα και μη), ζirkονία, οξειδίο του οργιλίου, πυριτιούχα κεραμικά, ρητίνες.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Περιλαμβάνει:

- 1 φιαλίδιο των 5 ml Bond A
- 1 φιαλίδιο των 4,5 ml Bond B,
- 25 λευκά πινέλα μιας χρήσης
- 25 Endobrushes μαύρα,
- 1 ιγδύο ανάμειξης

Ecosite Elements

Σύστημα νανοϋβριδικών ρητινών με καινοτόμο δομή υλικού, έξυπνη επιλογή αποχρώσεων κι εξαιρετικό χειρισμό.

- Ευκολονόητο, αισθητικό κι αξιόπιστο σύστημα
- Κατάλληλο για πρόσθια κι οπίσθια δόντια
- 98% όλων των τυπικών θεραπειών με μόνο ένα υλικό
- Ευκολονόητο και σαφές σύστημα αποχρώσεων
- Εξαιρετικός χειρισμός για μέγιστη ασφάλεια κι ακρίβεια




ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Τα Ecosite Elements χαρακτηρίζονται από ένα έξυπνα σχεδιασμένο συνδυασμό αποχρώσεων που απαρτίζεται από 3 ενότητες. Ο συνδυασμός αυτός αποδίδει φυσικά αισθητικές αποκαταστάσεις με οποιαδήποτε τεχνική εργασίας.

PURE

Πέντε αποχρώσεις VITA

Αμιγείς αποχρώσεις ως υποκατάστατο φυσικής εμφάνισης για την οδοντίνη ή την αδαμαντίνη.

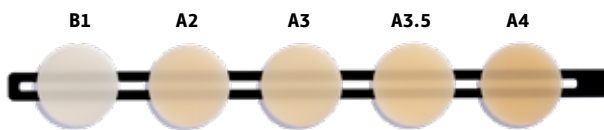

LAYER

Τέσσερις αποχρώσεις αδαμαντίνης


Στρώμα ως αντικατάσταση αδαμαντίνης ή για τεχνική διαστρωμάτωση σε συνδυασμό με τις αποχρώσεις Pure στη θέση της οδοντίνης.



HIGHLIGHT

Τέσσερις αποχρώσεις χαρακτηρισμού

Σημαντικές αποχρώσεις για εξατομίκευση και για κάλυψη δυσχρωμιών.

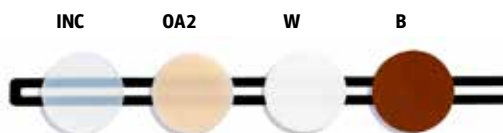

Οι σειρές **Pure & Layer** είναι φωτοπολυμεριζόμενες, ακτινοσκιερές νανοϋβριδικές ρητίνες σε πάστα.

Η σειρά **Highlight** αποτελείται από τις, ιδανικής ροής, ακτινοσκιερές ρητίνες OA2 και INC (κοπτικό) και τις ρευστές ρητίνες W (λευκό) και B (καφέ).

Pure & Layer αποχρώσεις:

- Αποκαταστάσεις όλων των ομάδων σε κάθε οδοντοφυΐα
- Άμεσα ένθετα, επένθετα, όψεις και μασητικοί φλοιοί
- Κατασκευή κολοβώματος
- Ναρθηκοποίηση χαλαρών δοντιών
- Επισκευές

Highlight OA2 και INC (κοπτικό):

- Αποκαταστάσεις όλων των ομάδων σε κάθε οδοντοφυΐα
- Ουδέτερο στρώμα
- Απόφραξη σχισμών
- Ναρθηκοποίηση χαλαρών δοντιών
- Επισκευές

Highlight W (λευκό) και B (καφέ):

- Εξατομίκευση σε αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία NC1 (non-clustering, μη συσσωμάτωσης), αυτή η νανοϋβριδική ρητίνη παρουσιάζει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, γεγονός που την καθιστά ιδανική για αποκαταστάσεις τόσο προσθίων όσο και οπίσθιων δοντιών.

Με την ακριβή σιτανίωση των μεμονωμένων υπέρλεπτων στοιχείων της ενίσχυσης, η τεχνολογία NC1 επιτρέπει μια ιδιαίτερα ομοιογενή κατανομή που έχει ως αποτέλεσμα ιδανικά χαρακτηριστικά εργασίας και εξαιρετικά αποτελέσματα στίλβωσης και λάμψης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ PUSH AND FLOW

Η ρητίνη έχει αρχικά σφικτή σύσταση που διευκολύνει τη συμπίεσή της κατά τη διάρκεια της οποίας τα βαθύτερα στρώματα μαλακώνουν και προσαρμόζονται τέλεια στα τοιχώματα και την ανατομία της κοιλότητας. Η ιδιότητα αυτή εμποδίζει επίσης τη δημιουργία φυσαλίδων μεταξύ των στρωμάτων της ρητίνης.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Οι ενόπτες αποχρώσεων των Ecosite Elements έχουν μειωθεί στα ουσιώδη και είναι ιδανικά σχεδιασμένες και συντονισμένες να συμπληρώνουν η μία την άλλη τέλεια!

Το γεγονός αυτό, κάνει την εργασία απλούστερη και απαιτεί πολύ λιγότερο χώρο αποθήκευσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σετ Pure αποχρώσεις, 5 σύριγγες των 4 g (B1, A2, A3, A3.5, A4)

Σετ Layer, 4 σύριγγες των 4 g (EB, EL, EM, ED)

Σετ Highlight, 4 σύριγγες των 2 g (INC, OA2, W, B)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

1 σύριγγα των 4 g σε κάθε μία από τις αποχρώσεις **Pure**: B1, A2, A3, A3.5, A4

1 σύριγγα των 4 g σε κάθε μία από τις αποχρώσεις **Layer**: EB, (Enamel Bleach), EL (Enamel Light), EM (Enamel Medium), ED (Enamel Dark)

1 σύριγγα των 2 g σε κάθε μία από τις αποχρώσεις **Highlight**: INC (Incisal), OA2 (Opaque A2), W (White), B (Brown)

LuxaCore® Z-Dual

Ρητίνη πλησιέστερη στο φυσικό δόντι, με οξείδιο του ζirkονίου και нанοτεχνολογία, για κατασκευή κολοβωμάτων και συγκόλληση αξόνων.

- Είναι ρευστή και διπλού πολυμερισμού.
- Τροχίζεται όπως η οδοντίνη
- Έχει εξαιρετικά υψηλή αντοχή στη συμπίεση και πολύ καλή ροή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

LuxaCore Z-Dual Smartmix

Περιλαμβάνει: 2 σύριγγες Smartmix των 9g, 20 ρύγχη Smartmix, 10 ενδοστοματικά ρύγχη, 10 Endo-Tips, μεμονωμένα στις αποχρώσεις A3 και Light opaque.

LuxaCore Z-Dual Automix

Περιλαμβάνει: 1 διπλή φύσιγγα των 48 g, 30 ρύγχη ανάμειξης, 20 ενδοστοματικά ρύγχη και 10 Endo-Tips (ενδοδοντικά ρύγχη). Διατίθεται μεμονωμένα στις αποχρώσεις: A3 και Light opaque.

Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με το πιστόλι Τύπος 25.



Προσφορά

Αγοράζοντας
2 συσκευασίες
LuxaCore Z-Dual Smartmix

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%



LuxaPost

Ενισχυμένος με υαλονήματα ρητινώδης άξονας, προσιλανιομένος.

Διατίθεται στις διαμέτρους: 1.25, 1.375, 1.5 και 1.75 mm



Προσφορά

Αγοράζοντας
2 ανταλλακτικά

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

5 άξονες σε κάθε μία από τις διαμέτρους

LuxaCore Z-Post System

Ένα πλήρες σύστημα για την ανασύσταση κατεστραμμένου δοντιού, με τοποθέτηση άξονα και κατασκευή κολοβώματος.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Περιλαμβάνει:

- **LuxaPost**
5 άξονες ϕ 1,25 mm, 1 τρύπανο ϕ 1,25 mm
- **LuxaBond - Total Etch**
- **LuxaCore Z-Dual**
1 σύριγγα Smartmix των 9 g πάστα απόχρωσης A3
- **Αδροποιητικό Ζελέ**
1 σύριγγα των 2 ml και 3 άκρα για τη σύριγγα
- **Βοηθήματα**

Flairesse Paste

Πάστα στίλβωσης.



Απομακρύνει χρωστικές, πλάκα και στιλβώνει την οδοντική επιφάνεια

- Διατίθεται σε 3 αδρότητες: αδρόκοκκη, μεσαία, λεπτόκοκκη
- Περιέχει **ξυλιτόλη** και **φθόριο**
- Διατίθεται σε 2 γεύσεις: μέντα και πεπόνι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΓΕΥΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
200 Μονές δόσεις των 1.8 g 1 αποστειρώσιμος στο αυτόκαυστο συγκρατητήρας	Μέντα, λεπτόκοκκη πάστα	220414
	Μέντα, μεσαία πάστα	220415
	Μέντα, αδρόκοκκη πάστα	220416
1 Σωληνάριο των 75 ml	Μέντα, λεπτόκοκκη πάστα	220417
	Μέντα, μεσαία πάστα	220418
	Μέντα, αδρόκοκκη πάστα	220419
	Πεπόνι, λεπτόκοκκη πάστα	220423
	Πεπόνι, μεσαία πάστα	220424
	Πεπόνι, αδρόκοκκη πάστα	220425

Flairesse Gel

Ζελέ φθορίωσης.

Δεν περιέχει διοξείδιο του τιτανίου, ζωικά προϊόντα, μικροπλαστικά.

- Προάγει την επαναμεταλλικοποίηση της οδοντικής επιφάνειας
- Περιέχει **ξυλιτόλη** και **φθόριο** (φθοριούχο νάτριο 2,72% αντιστοιχεί σε 1,23% ιόντα φθορίου)
- Έχει βραχύ χρόνο εφαρμογής: μόνο 1 λεπτό
- Έχει νέα βελτιωμένη φόρμουλα με υψηλότερο ιξώδες
- Είναι κατάλληλο για vegan
- Η συσκευασία του είναι από ανακυκλώσιμο πλαστικό και χαρτί



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΓΕΥΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1 φιάλη των 480 ml	Μέντα	220411
	Πεπόνι	220412
	Φράουλα	220413

Flairesse Foam

Αφρός φθορίωσης.

Είναι ιδιαίτερα αγαπητός στα παιδιά για την ευχάριστη αίσθηση μέσα στο στόμα

- Αυξάνει την αντίσταση της αδαμαντίνης στις επιθέσεις οξέων
- Περιέχει **ξυλιτόλη** και **φθόριο** (φθοριούχο νάτριο 2,72% αντιστοιχεί σε 1,23% ιόντα φθορίου)
- Έχει βραχύ χρόνο εφαρμογής: μόνο 1 λεπτό
- Διατίθεται σε 3 γεύσεις: μέντα, πεπόνι και φράουλα



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΓΕΥΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1 φιάλη των 125 g	Μέντα	220408
	Πεπόνι	220405
	Φράουλα	220410

Flairesse Varnish

Φθοριούχο βερνίκι.

Το Flairesse Varnish σφραγίζει τα οδοντινοσωληνάκια αξιόπιστα. Έτσι απευαισθητοποιεί τα ευαίσθητα δόντια.

- Περιέχει **ξυλιτόλη** και **φθόριο** (φθοριούχο νάτριο 5%, αντιστοιχεί σε 2,26% ιόντα φθορίου)
- Είναι διαφανές και γίνεται αόρατο πάνω στα δόντια
- Διατίθεται σε 2 γεύσεις: μέντα και πεπόνι
- Διατίθεται σε μεμονωμένη συσκευασία μιας χρήσης που περιλαμβάνει και πινέλο



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΓΕΥΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
35 μονές δόσεις των 0,4 ml	Μέντα	220404
	Πεπόνι	220405

Icon

Σύστημα Θεραπείας της αρχόμενης τερηδόνας χωρίς τροχό και αισθητικής Θεραπείας των δομικών κηλίδων της αδαμαντίνης.



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αρχόμενες τερηδονικές αλλοιώσεις με μορφή λευκής ή καφέ κηλίδας, χωρίς καθόλου κοιλότητα. Οι αλλοιώσεις αυτές μπορεί ακτινογραφικά να βρίσκονται στην αδαμαντίνη ή να έχουν προχωρήσει έως το πρώτο τριτημώριο της οδοντίνης. Το Icon είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την αντιμετώπιση των λευκών κηλίδων που εμφανίζονται στα δόντια μετά από ορθοδοντική θεραπεία.
- Αναπτυξιακές κηλίδες αδαμαντίνης



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Η εξελισσόμενη τερηδόνα μπορεί να σταματήσει επί μακρόν.
- Διατηρείται ο υγιής, σκληρός οδοντικός ιστός.
- Η επιφάνεια δείχνει όπως η υγιής αδαμαντίνη.
- Παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης του δοντιού.
- Ανώδυνη τεχνική, χωρίς αναισθησία ή τροχό.
- Εύκολη θεραπεία σε μία μόνο συνεδρία.
- Μη συνεργάσιμοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν σε πρώιμο στάδιο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 κουτιά Θεραπείας που το καθένα περιλαμβάνει:

- 1 σύριγγα των 0,30 ml Icon-αδροποιητικό
- 1 σύριγγα των 0,45 ml Icon-στεγνωτικό
- 1 σύριγγα των 0,45 ml Icon-παράγοντα διαπότισης
- 6 άκρα εφαρμογής
- 1 άκρο με μορφή βελόνας
- 4 οδοντιατρικές σφήνες

Η αρχική συσκευασία διατίθεται σε δύο τύπους:

- για όμορες επιφάνειες (αρκεί για 4 αλλοιώσεις)
- για προστομιακές επιφάνειες (αρκεί για 4-6 αλλοιώσεις)



Κλινικό παράδειγμα, αρχική κατάσταση.



Το αποτέλεσμα της Θεραπείας, ένα χρόνο μετά.

Για τις δομικές κηλίδες της αδαμαντίνης είναι σημαντικό να σας ενημερώσουμε ατομικά για το τροποποιημένο πρωτόκολλο.
Τηλ. επικοινωνίας: 210 65 41340.

NEO Flairesse Bleaching Gel CP5%, CP10%

**Ζελέ λεύκανσης, εγκεκριμένο
ως ιατροτεχνολογικό προϊόν,
για χρήση και σε νεαρά άτομα.**

Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των δομικών κηλίδων της αδαμαντίνης σε συνδυασμό με το **Icon Vestibular**.

Το Ζελέ λεύκανσης Flairesse Bleaching Gel αποτελεί το **πρώτο βήμα** στην ήπια και αποτελεσματική θεραπεία των αναπτυξιακών κηλίδων της αδαμαντίνης που μπορεί να εμφανιστούν στα μόνιμα δόντια παιδιών και εφήβων.

Οι αναπτυξιακές κηλίδες της αδαμαντίνης είναι ιδιαίτερα προβληματικές στην παιδική ηλικία, καθώς η αλλοιωμένη δομή της αδαμαντίνης των δοντιών είναι σαφώς ορατή. Τα προσβεβλημένα πρόσθια δόντια εμφανίζουν αδιαφάνειες που κυμαίνονται από έντονο λευκό ή κρεμ έως κίτρινο ή καφέ. Αυτές οι αλλοιωμένες αδιαφάνειες προκαλούν αισθητικά προβλήματα ιδιαίτερα στα νεαρά άτομα.

Οι αναπτυξιακές κηλίδες της αδαμαντίνης περιέχουν υψηλό επίπεδο οργανικών πρωτεϊνικών δομών, αναγνωρίσιμων από το κίτρινο έως καφέ χρώμα τους. Αυτό μπορεί να μειωθεί με την εκ των προτέρων επεξεργασία της πληγείσας περιοχής με το Flairesse Bleaching Gel, το οποίο προσαρμόζει το χρώμα της, κάνοντάς την να μοιάζει περισσότερο με την περιβάλλουσα υγιή αδαμαντίνη.

Τα Ζελέ λεύκανσης Flairesse CP 5% και CP 10% επιτυγχάνουν τις ιδιότητες υλικού που απαιτούνται από το πρότυπο DIN EN ISO 28399 με χρόνο εφαρμογής **μόλις μία ώρα την ημέρα για διάστημα 10 ημερών**.

Είναι αποτελεσματικά αλλά και ήπια για τα δόντια.

Το υπεροξειδίο του καρβαμιδίου αποτελείται από υπεροξειδίο του υδρογόνου και ουρία. Όταν εφαρμόζεται, διασπάται αργά, απελευθερώνοντας υπεροξειδίο του υδρογόνου στη διαδικασία. Χάρη στην πιο αργή απελευθέρωση του υπεροξειδίου του υδρογόνου, η λεύκανση είναι λιγότερο επιθετική και πιο ήπια.

Η μέθοδος διαπότισης με χρήση του Icon Vestibular αποτελεί το **δεύτερο βήμα** για την αποτελεσματική θεραπεία των αναπτυξιακών κηλίδων της αδαμαντίνης στα μόνιμα δόντια παιδιών και εφήβων.

Η εφαρμογή του λευκαντικού Ζελέ έχει ως αποτέλεσμα όλα τα δόντια να φαίνονται συνολικά λευκότερα.

Ωστόσο, στην περίπτωση των αναπτυξιακών κηλίδων της αδαμαντίνης, η πορώδης αδαμαντίνη έχει διαφορετικό δείκτη διάθλασης από την περιβάλλουσα υγιή αδαμαντίνη, γεγονός που σημαίνει ότι οι λευκές κηλίδες συχνά παραμένουν ορατές.

Για μια αρμονική συνολική εμφάνιση, η θεραπεία διαπότισης με Icon Vestibular είναι μια πρακτική και συχνά απαραίτητη προσθήκη. Η θεραπεία διαπότισης με Icon Vestibular είναι μια ελάχιστη επεμβατική αλλά αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση των κηλίδων της αδαμαντίνης, με μέγιστη διατήρηση της οδοντικής ουσίας.

Μελέτες δείχνουν θετικό αποτέλεσμα μέσω της συνδυασμένης θεραπείας λεύκανσης στο σπίτι και διαπότισης με ρητίνη (ICON) για τις κηλίδες φθορίασης και, επομένως, βελτίωση της αισθητικής και της αυτοπεποίθησης των νεαρών ατόμων.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εγκεκριμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν, κατάλληλο για νεαρούς ασθενείς
- Ειδικά σχεδιασμένο για την υποστηρικτική θεραπεία των αναπτυξιακών κηλίδων της αδαμαντίνης. Η λεύκανση των αναπτυξιακών αδιαφανειών της αδαμαντίνης πριν από τη θεραπεία, προετοιμάζει ιδανικά τις πλούσιες σε πρωτεΐνες βλάβες για να δεχθούν τη θεραπεία διαπότισης με ρητίνη (Icon)
- Περιέχει ξυλιτόλη και νιτρικό κάλιο
- Μία σύριγγα Flairesse Bleaching Gel (5 ml) αρκεί για μια 10ήμερη εφαρμογή (χρησιμοποιείται 1 φορά την ημέρα) στα δόντια 5 έως 5 της άνω και κάτω γνάθου
- Έχει ήπια γεύση μέντας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Αρχική συσκευασία:	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 σύριγγα 5 ml Flairesse Bleaching Gel CP 5% • 1 κουτί για το δισκίο λεύκανσης 	220550
Αρχική συσκευασία:	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 σύριγγα 5 ml Flairesse Bleaching Gel CP 10% • 1 κουτί για το δισκίο λεύκανσης 	220551
Αρχική συσκευασία:	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 σύριγγα 5 ml Flairesse Bleaching Gel CP 16% • 1 κουτί για το δισκίο λεύκανσης 	310000
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1 σύριγγα 5 ml Flairesse Bleaching Gel CP 5%	220552
1 σύριγγα 5 ml Flairesse Bleaching Gel CP 10%	220553
1 σύριγγα 5 ml Flairesse Bleaching Gel CP 16%	310001

QuickmatFIT

Ανατομικά ενισχυμένα τμηματικά τοιχώματα για εμφράξεις II ομάδας.



polydentia
swiss manufacture

Τα QuickmatFIT είναι ανατομικά ενισχυμένα, ανοξειδωτα τμηματικά τοιχώματα πάχους 0,04 mm. Διατίθενται σε τρία ανατομικά σχήματα που καλύπτουν όλους τους τύπους των οπίσθιων αποκαταστάσεων II ομάδας.

Τα τοιχώματα QuickmatFIT ενδείκνυνται ειδικά για μεγάλες κοιλοότητες και ευρύ μεσοδόντιο διάστημα. Είναι εύκολα στον χειρισμό χάρη στα πτερύγια τοποθέτησης και έχουν μια καμπύλη μαστική ακμή για εύκολη αποκατάσταση της οριακής ακρολοφίας.

Η τοτισμένη καμπυλότητα του τοιχώματος QuickmatFIT εφαρμόζει σφικτά γύρω από το δόντι, για βελτιωμένη εφαρμογή και σταθερότητα, διευκολύνοντας έτσι την επίτευξη μιας κατάλληλης ανατομίας της αποκατάστασης. Έτσι απαιτούνται λιγότερα βήματα φινιρίσματος.

Σύγκριση

Προσαρμογή τοιχώματος σε μοντέλο δοντιών



LumiContrast
Τμηματικό τοίχωμα που ενδείκνυται σε περιπτώσεις κανονικών μεσοδόντιων διαστημάτων και κοιλοτήτων.



QuickmatFIT
Ανατομικό τμηματικό τοίχωμα που ενδείκνυται σε περιπτώσεις ευρέων μεσοδόντιων διαστημάτων και μεγάλων κοιλοτήτων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	QuickmatFIT ανατομικά τμηματικά τοιχώματα προγομφίων 0.04 mm	50	5805
	QuickmatFIT ανατομικά τμηματικά τοιχώματα γομφίων 0.04 mm	50	5806
	QuickmatFIT ανατομικά τμηματικά τοιχώματα γομφίων βαθιά 0.04 mm	25	5846
	QuickmatFIT ανατομικά τμηματικά τοιχώματα προγομφίων 0.04 mm	100	5835
	QuickmatFIT ανατομικά τμηματικά τοιχώματα γομφίων 0.04 mm	100	5836
	QuickmatFIT ανατομικά τμηματικά τοιχώματα γομφίων βαθιά 0.04 mm	50	5856

NEO myQuickmat Prime

Νέο σύστημα τμηματικών τοιχωμάτων και δακτυλίου συγκράτησης που έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί τη συνολική διαδικασία αποκατάστασης II ομάδας.

Τα άκρα του δακτυλίου έχουν ενσωματωμένη σφήνα.

Το σύστημα είναι ένα καθαρό παράδειγμα απλότητας χωρίς συμβιβασμούς αποτελούμενο από ένα δακτύλιο διαχωρισμού (myRing Prime), άκρα του δακτυλίου με ενσωματωμένη σφήνα (myTines Prime) και ένα περιγεγραμμένο τοίχωμα, το ίδιο για προγόμφιους και γομφίους (Quickmat Prime anatomical sectional matrices).

Το βελτιστοποιημένο μέγεθος της γκάμας και η απομάκρυνση της σφήνας ως μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης κάνει το σύστημα απλούστερο, ταχύτερο και ευφύεστερο.



Το σύστημα αποτελείται από τα:

1. myRing Prime

Δακτύλιος συγκράτησης τμηματικών τοιχωμάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι
Είναι κεκαμμένος δακτύλιος ώστε να μην παρεμβαίνει με τα παρακείμενα δόντια



2. myTines Prime

Σφηνοειδή επαναχρησιμοποιήσιμα και αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο άκρο για το myRing Prime

Έχουν αμφίπλευρα ενσωματωμένες σφήνες που:

- κάνουν αυτοκεντράρισμα και καθοδηγούν φυσικά την εισαγωγή
- διαχωρίζουν αποτελεσματικά τα παρακείμενα δόντια διαμορφώνουν το τοίχωμα στα αυχενικά τοιχώματα
- εμποδίζουν τον δακτύλιο να γλιστρήσει έξω



3. Quickmat Prime

Ανατομικά τμηματικά τοιχώματα, με περίγραμμα από αυχενικά έως μασπτικά

- ακριβής θέση του σημείου επαφής
- ένα μέγεθος για προγόμφιους και γομφίους
- κεντρική άνω γλωττίδα για εύκολη τοποθέτηση
- άκαμπτα αλλά εύκολα στη διαμόρφωση




ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
myQuickmat Prime Κιτ	<ul style="list-style-type: none">• 2 τεμ. myRing Prime• 10 ζεύγη myTines Prime• 100 τεμ. τοιχώματα Quickmat Prime	6890
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
myRing Prime	2 τεμ. myRing Prime, 4 ζεύγη myTines Prime	6891
myTines Prime	6 ζεύγη myTines Prime	6892
Quickmat Prime	100 τεμ. ανατομικά τμηματικά τοιχώματα	6893



myQuickmat Forte kit

Πλήρες σύστημα τμηματικών τοιχωμάτων και δακτυλίου συγκράτησης, σχεδιασμένο να προσφέρει δυνατό διαχωρισμό των δοντιών, με σκοπό τη δημιουργία εξαιρετικών σημείων επαφής σε αποκαταστάσεις II ομάδας.

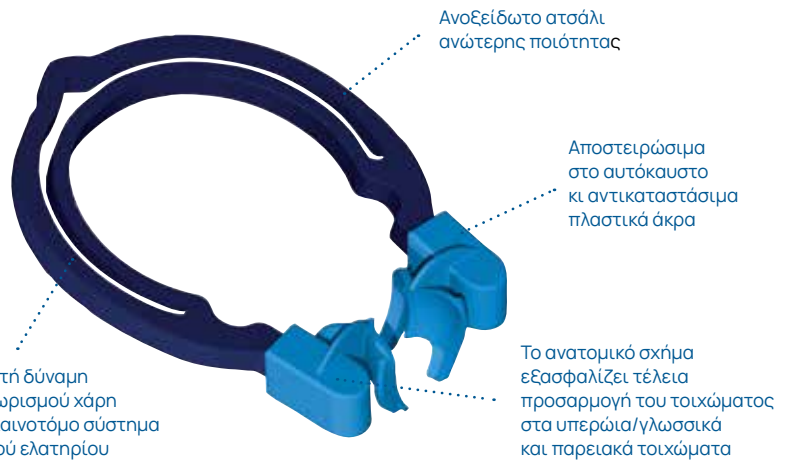

Για περισσότερες πληροφορίες

Άκρα

Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο και αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα



LumiContrast

Σκούρα μπλε τοιχώματα τα οποία αυξάνουν σημαντικά την αντίθεση και μειώνουν την ανακλώμενη λάμψη, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται μεγεθυντικοί φακοί ή μικροσκόπιο



myForceps

Ο αρπαγοφόρος myForceps είναι το απαραίτητο εργαλείο για την ασφαλή τοποθέτηση και αφαίρεση όλων των δακτυλίων συγκράτησης τμηματικών τοιχωμάτων της Polydentia



myWedge

Σφήνα σχήματος V από πλαστικό υλικό υψηλής τεχνολογίας. Συμπιέζεται τέλεια και προσαρμόζεται στη μεσοδόντια ανατομία των δοντιών



Προσφορά

Με την αγορά 15 συριγγών ρητίνης των εταιρειών Yamakin ή SDI

ΔΩΡΟ

Η συσκευασία myQuickmat Forte starter kit

Προσφορά

Με την αγορά ενός myQuickmat Forte starter kit

ΔΩΡΟ

Η συσκευασία myTines GO

Το kit αυτό, περιλαμβάνει το myRing Forte της Polydentia, έναν δυνατό δακτύλιο διαχωρισμού που προσφέρει ιδανική δύναμη διαχωρισμού.

Τα αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα του, εξασφαλίζουν μια τέλεια προσαρμογή του τοιχώματος στα υπερώια/γλωσσικά και παρειακά τοιχώματα.

Το kit περιλαμβάνει μια συλλογή των myWedge, υψηλής ποιότητας, ανατομικών πλαστικών σφηνών.

Τα τμηματικά τοιχώματα LumiContrast ολοκληρώνουν τη συλλογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

myQuickmat Forte starter kit - ΚΩΔ. 6883

Περιλαμβάνει:

- 2 τεμάχια myRing Forte
- 2 Ζευγάρια myTines Small, 1 Ζευγάρι myTines Medium, 1 Ζευγάρι myTines Large
- 10 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα QuickmatFLEX προγομφίων 0,03 mm/ 5 mm ύψος
- 10 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα QuickmatFLEX γομφίων 0,03 mm/ 6,4 mm ύψος
- 5 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα QuickmatFLEX γομφίων βαθιά 0,03 mm/ 6,4 mm ύψος + επέκταση
- 10 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
- 10 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
- 5 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων βαθιά 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
- 10 τεμάχια σφήνες myWedge Extrasmall (XS)
- 10 τεμάχια σφήνες myWedge Small (S)
- 10 τεμάχια σφήνες myWedge Medium (M)
- 10 τεμάχια σφήνες myWedge Large (L)

myQuickmat Forte kit

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

myQuickmat Forte kit - ΚΩΔ. 6803

Περιλαμβάνει:

- 2 τεμάχια myRing Forte
- 1 ζευγάρι myTines Small, 2 ζευγάρια myTines Medium, 1 ζευγάρι myTines Large
- 50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
- 50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
- 20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat με επέκταση, 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
- 20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
- 20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
- 20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast με επέκταση 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
- 50 τεμ. myWedge Extrasmall (XS)
- 50 τεμ. myWedge Small (S)
- 40 τεμ. myWedge Medium (M)
- 40 τεμ. myWedge Large (L)
- 1 αρπαγοφόρο myForceps




myTines

Πολυχρηστικά άκρα για τα myRing Forte και myClip 2.0

myTines Small & Medium

Αναπτύχθηκαν για την ακριβή προσαρμογή των τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων σε μια ευρεία γκάμα κλινικών περιπτώσεων και δοντιών με διαφορετικά ύψη μύλης.

Σε περιπτώσεις δοντιών ανόμοιας μορφολογίας, δίνεται η δυνατότητα να συνδυαστούν στον ίδιο δακτύλιο myTines Small και myTines Medium, για βελτιωμένη προσαρμογή του τεχνητού τοιχώματος και μείωση των προεξοχών σύνθετης ρητίνης.

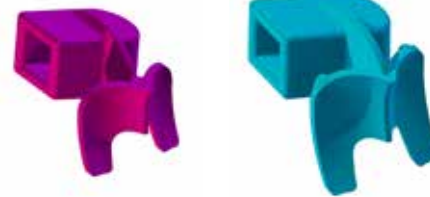

myTines Large

Δημιουργήθηκαν για να βελτιώσουν τη σταθερότητα των δακτυλίων σε ευρείες κοιλότητες ακόμα και σε περιπτώσεις που έχει χαθεί ένα φύμα.

Τα πτερύγιά τους είναι ασύμμετρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τέλεια προσαρμογή του τμηματικού τεχνητού τοιχώματος σε άπω και εγγύς κοιλότητες απλώς με αντιστροφή της θέσης των άκρων στον δακτύλιο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
myTines Small	6 Ζεύγη	6304
myTines Medium	6 Ζεύγη	6303
myTines Large	6 Ζεύγη	6306
myTines Ασορτί	6 Ζεύγη (Small, Medium, Large)	6310

NEO MyTines GO

σε συνεργασία με
STYLE ITALIANO™

Νέα άκρα για τους δακτυλίους myRing Forte & myClip 2.0, ιδανικά για περιπτώσεις ευρέων κοιλοτήτων και ελλειπόντων φυμάτων.


Τα myTines GO είναι ευέλικτα άκρα για τους δακτυλίους τμηματικών τοιχωμάτων myRing Forte & myClip 2.0.

Τα myTines GO έχουν αναπτυχθεί για την ακριβή προσαρμογή των τμηματικών τοιχωμάτων της Polydentia σε ένα ευρύ φάσμα κλινικών καταστάσεων και σε δόντια διαφορετικού ύψους μύλης.

Με ένδειξη ιδιαίτερα σε περίπτωση ευρέων και εξαιρετικά ευρέων κοιλοτήτων ελλειπόντων φυμάτων και μη ευθυγραμμισμένων δοντιών*, τα myTines GO συγκρατούν τα δόντια μακριά από το σημείο επαφής, βελτιστοποιώντας έτσι τη σταθερότητα και επιτρέποντας μια αρμονική κόιλανση του τμηματικού τοιχώματος.

Σε περίπτωση ανόμοιας μορφολογίας δοντιού, τα myTines GO μπορούν να συνδυαστούν με τα myTines Small και Medium στον ίδιο δακτύλιο.

* σφηνώνουν στη θέση τους χειλικά προς υπερώια

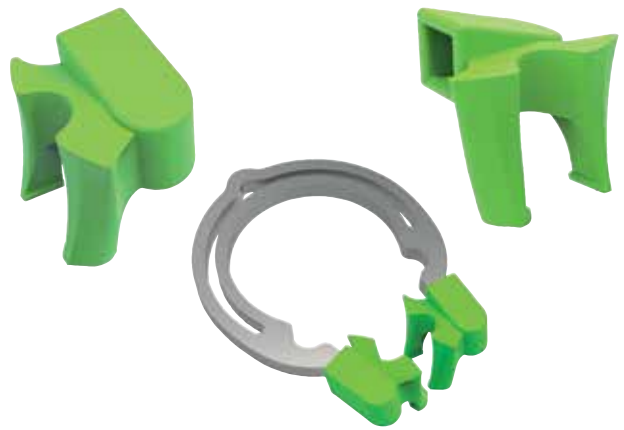

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αντικαταστάσιμα, εναλλάξιμα και αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο πλαστικό άκρα
- Αυξημένη σταθερότητα του δακτυλίου (σε σύγκριση με τα myTines S, M και L), ειδικά σε περίπτωση μεγάλων και εξαιρετικά μεγάλων κοιλοτήτων, ελλειπόντων φυμάτων και μη ευθυγραμμισμένων δοντιών
- Σφιχτό κράτημα στα δόντια μακριά από το σημείο επαφής: βελτιστοποίηση της σταθερότητας και αρμονική κόιλανση του τμηματικού τοιχώματος
- Σχήμα V για καλύτερη τοποθέτηση πάνω από την σφήνα



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6 ζεύγη myTines GO - ΚΩΔ. 6307

ΠΟΙΑ ΑΚΡΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ?



**ΔΟΝΤΙΑ
ΜΕ ΚΟΝΤΗ ΜΥΛΗ**

Χρησιμοποιήστε
MyTines Small



**ΔΟΝΤΙΑ
ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΥΨΟΣ ΜΥΛΗΣ**

Χρησιμοποιήστε
MyTines Medium



**ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ
ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ
/ ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΥΜΑΤΟΣ**

Χρησιμοποιήστε
MyTines Large



**ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ
/ ΣΤΡΑΒΑ ΔΟΝΤΙΑ
/ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΦΥΜΑΤΑ**

Χρησιμοποιήστε
MyTines GO

myClip 2.0

**Συγκρατητήρας
τμηματικών τεχνητών
τοιχωμάτων
ο οποίος συνδυάζει τη
λειτουργία
του δακτυλίου
και του αρπαγοφόρου.**




Για περισσότερες
πληροφορίες

Συγκρατητήρας τμηματικών τοιχωμάτων που συνδυάζει τη λειτουργία δακτυλίου κι αρπαγοφόρου και τοποθετείται εύκολα με το ένα χέρι.

Τα αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο πλαστικά άκρα του εξασφαλίζουν τέλεια προσαρμογή του τοιχώματος στα υπερώρια/γλωσσικά και παρειακά τοιχώματα, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη για φινίρισμα και εξοικονομώντας χρόνο.

Αυτά τα ανατομικού σχήματος άκρα αντικαθίστανται, επιτρέποντας να ωφεληθείτε από τη μεγάλη διάρκεια ζωής αυτού του συγκρατητήρα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι.

Η δύναμη διαχωρισμού του myClip 2.0 επιτρέπει τη δημιουργία εξαιρετικών σημείων επαφής κατά την αποκατάσταση κοιλοτήτων II ομάδας.

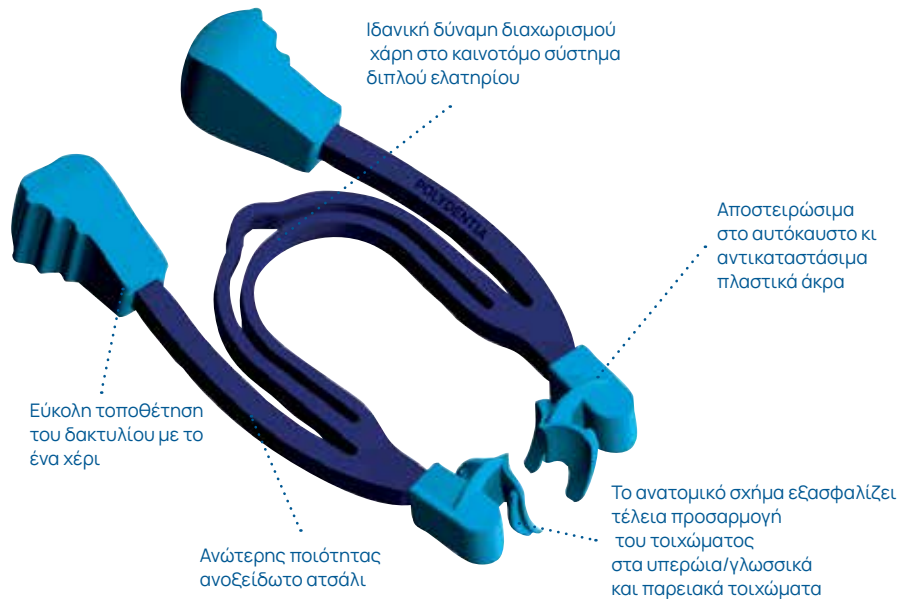

Άκρα

Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο και αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα



LumiContrast

Σκούρα μπλε τοιχώματα τα οποία αυξάνουν σημαντικά την αντίθεση και μειώνουν την ανακλώμενη λάμψη, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται μεγεθυντικοί φακοί ή μικροσκόπιο



Ξύλινες σφήνες

Μεσοδόντιες Ξύλινες σφήνες από ξύλο σφενδάμου, από σουηδικά δάση βιώσιμης διαχείρισης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

myClip 2.0 - Κωδ. 6305

Περιλαμβάνει:

- 1 myClip 2.0
- 1 Ζευγάρι myTines Small, 1 Ζευγάρι myTines Medium, 1 Ζευγάρι myTines Large
- 5 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0.04 mm/5 mm ύψος
- 5 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων 0.04 mm/6.4 mm ύψος
- 10 τεμ. Ξύλινες σφήνες Pinky 11 mm (XS)
- 10 τεμ. Ξύλινες σφήνες 12 mm (S)




myQuickmat Classico kit

Πλήρες σύστημα τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων και δακτύλιου συγκράτησης, σχεδιασμένο να προσφέρει απαλό διαχωρισμό των δοντιών, με σκοπό τη δημιουργία εξαιρετικών σημείων επαφής σε II ομάδας.

Αποστειρώσιμοι στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμοι σωληνίσκοι Δέλτα.

Δακτύλιος νικελίου-τιτανίου με ενίσχυση.

Τριγωνικοί σιλικονούχοι σωληνίσκοι επιτρέπουν τέλεια προσαρμογή του τεχνητού τοιχώματος.

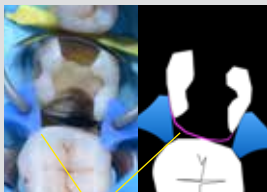

Για περισσότερες πληροφορίες

Το kit αυτό, περιλαμβάνει τον κλασικό δακτύλιο συγκράτησης τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων myRing Classico της Polydentia, κατασκευασμένο από νικέλιο-τιτάνιο. Είναι ενισχυμένος για να προσφέρει μια ιδανική και απαλή δύναμη διαχωρισμού, σε συνδυασμό με τις συμπεριλαμβανόμενες ξύλινες σφήνες.

Το kit περιλαμβάνει επίσης τους σιλικονούχους σωληνίσκους Δέλτα και τα τμηματικά τοιχώματα LumiContrast.



Ατσάλινα τοιχώματα

Για αυχενικές, υποουλικές αποκαταστάσεις.



Ξύλινες σφήνες

Μεσοδόντιες ξύλινες σφήνες από ξύλο σφενδάμου, από σουηδικά δάση βιώσιμης διαχείρισης



LumiContrast

Σκούρα μπλε τοιχώματα τα οποία αυξάνουν σημαντικά την αντίθεση και μειώνουν την ανακλώμενη λάμψη, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται μεγεθυντικοί φακοί ή μικροσκόπιο.



Σωληνίσκοι Δέλτα

Ανατομικά διαμορφωμένοι σιλικονούχοι σωληνίσκοι οι οποίοι εξασφαλίζουν ιδανική συγκράτηση του τοιχώματος και προσαρμογή στην ανατομία του δοντιού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

myQuickmat Classico kit - ΚΩΔ. 6801

Περιλαμβάνει:

- 2 τεμάχια myRing Classico
- 6 ζευγάρια σωληνίσκους Delta
- 50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
- 50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
- 20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat με επέκταση, 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
- 20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
- 20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
- 20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast με επέκταση 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
- 50 τεμ. ξύλινες σφήνες Pinky 11 mm (XS)
- 50 τεμ. ξύλινες σφήνες 12 mm (S)
- 40 τεμ. ξύλινες σφήνες 13 mm (M)
- 40 τεμ. ξύλινες σφήνες 15 mm (L)



diamond²⁴

Σωληνίσκοι ανατομικού σχεδίου, δίνουν 24 λύσεις στη διαμόρφωση εμφράξεων II ομάδας.



Οι diamond24 είναι σωληνίσκοι ανατομικού σχεδίου, σχεδιασμένοι από το Style Italiano. Τοποθετούνται στα άκρα του δακτυλίου συγκράτησης τμηματικών τεχνητών τοιχώματων **myRing Classicco**. Μπορούν να προσανατολιστούν σε 24 διαφορετικούς συνδυασμούς σχήματος και μήκους, βοηθώντας στην τελειότερη προσαρμογή και συγκράτηση του τεχνητού τοιχώματος στα όμορα τοιχώματα των κοιλοτήτων II ομάδας, ακόμα και στις δυσκολότερες κλινικές καταστάσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκαμπτοι ώστε να επιτρέπουν την προσεκτική κάμψη του τοιχώματος ώστε να δώσει σχήμα χωρίς να καταρρεύσει μέσα στην κοιλότητα
- Δημιουργούν εξαιρετικά σημεία επαφής
- 24 συνδυασμοί ενισχύουν την προσαρμογή του τοιχώματος σε κάθε κλινική περίπτωση
- Αποστειρώσιμοι στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμοι
- Εξατομικεύονται με κοπή τους κατά περίπτωση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Diamond24 - 15 Ζεύγη - Κωδ. 6312

PolydentiaPRO

Τεχνητό τοίχωμα προστασίας όμορων επιφανειών από χαρακίες φρέζας, κατά την παρασκευή κοιλοτήτων II ομάδας.

Το PolydentiaPRO είναι ένα προσχηματισμένο, διαμορφωμένο προστατευτικό τοίχωμα (πάχους 0,05 mm), σχεδιασμένο να εμποδίζει τη ζημιά στο διπλανό δόντι που συμβαίνει συχνά κατά την παρασκευή κοιλοτήτων II ομάδας.

Το περίγραμμα και τα δύο άκρα έχουν διαμορφωθεί ειδικά για να ολισθαίνουν εύκολα ανάμεσα στο αυχενικό όριο και το σημείο επαφής διευκολύνοντας την τοποθέτηση του τοιχώματος.




ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
PolydentiaPRO	100 τεμάχια	5720

QuickmatFlex sectional matrices



Πολύ λεπτά, τεχνητά τοιχώματα τιτανίου με εξαιρετική ελαστική μνήμη.

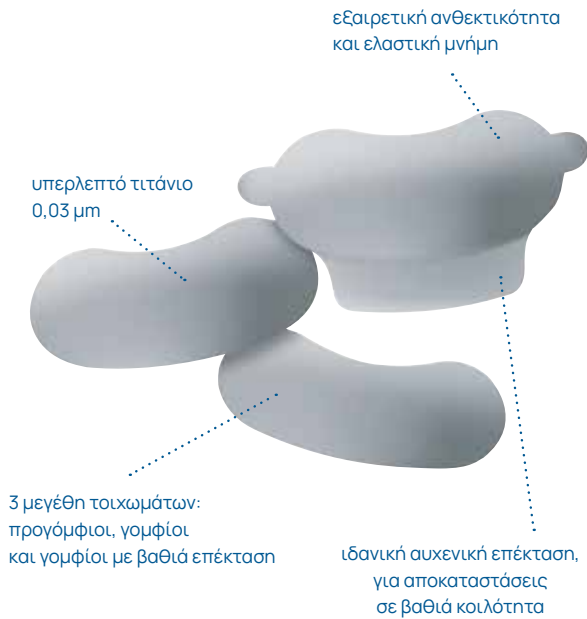

Τα τοιχώματα QuickmatFLEX είναι ιδανικά τόσο για οπίσθιες όσο και για πρόσθιες αποκαταστάσεις.

Σύγκριση μεταξύ QuickmatFLEX και τοιχωμάτων από ανοξείδωτο ατσάλι



QuickmatFLEX τμηματικά τοιχώματα



Ατσάλινα τμηματικά τοιχώματα

Τα QuickmatFLEX είναι πολύ λεπτά (0,03 mm) τμηματικά τεχνητά τοιχώματα τιτανίου με εξαιρετική ελαστική μνήμη.

Εύκολα στο χειρισμό, προσφέρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ ευκαμψίας και σκληρότητας για ιδανική τοποθέτηση και προσαρμογή σε στενά μεσοδόντια διαστήματα.

Χάρη στο μειωμένο πάχος τους και το βελτιωμένο κράμα μετάλλων, τα τοιχώματα αντιστέκονται στην παραμόρφωση καθώς παρουσιάζουν επαναφορά στο αρχικό σχήμα τους.

Θεραπείες II ομάδας με QuickmatFLEX τοιχώματα σε συνδυασμό με δακτυλίους Quickmat της Polydentia, οδηγούν σε προβλέψιμες αποκαταστάσεις με σωστή ανατομία, σφικτά σημεία επαφής και λείες επιφάνειες σύνθετης ρητίνης που απαιτούν λιγότερα βήματα φινιρίσματος.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
QuickmatFLEX προγομφίων 0,03mm/5mm	100 τεμάχια	6785
QuickmatFLEX γομφίων 0,03mm/6,4mm	100 τεμάχια	6786
QuickmatFLEX γομφίων βαθιά 0,03mm/6,4mm + επέκταση	50 τεμάχια	6787



ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ



ΚΩΔ. 6805
myClip 2.0 / 2 τεμ.
myTines M / 2 ζεύγη
myTines S / 1 ζεύγος
myTines L / 1 ζεύγος



ΚΩΔ. 6804
myRing Classico / 2 τεμ.
Σωληνίσκοι Δέλτα / 2 ζεύγη



ΚΩΔ. 6806
myRing Forte / 2 τεμ.
myTines M / 2 ζεύγη
myTines S / 1 ζεύγος
myTines L / 1 ζεύγος



ΚΩΔ. 5712
Σωληνίσκοι Δέλτα /
15 ζεύγη



ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ.
	Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.025mm / 5mm ύψος	100	5735
	Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.025mm / 6.4mm ύψος	100	5736
	Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.04mm / 5mm ύψος	100	5705
	Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.04mm / 6.4mm ύψος	100	5706
	Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.025mm / 6.4mm + επέκταση	50	5756
	Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.04mm / 6.4mm + επέκταση	50	5746
ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ.
	Quickmat Διαφανή Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.075mm / 5mm ύψος	100	5765
	Quickmat Διαφανή Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.075mm / 6.4mm ύψος	100	5766
	Quickmat Διαφανή Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.075mm / 6.4mm + επέκταση	50	5776
ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ LUMI CONTRAST		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ.
	LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.025mm / 5mm ύψος	70	6735
	LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.025mm / 6.4mm ύψος	70	6736
	LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.04mm / 5mm ύψος	70	6705
	LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.04mm / 6.4mm ύψος	70	6706
	LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.025mm / 6.4mm + επέκταση	50	6756
	LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.04mm / 6.4mm + επέκταση	50	6746
ΣΦΗΝΕΣ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ.
	Pinky Ξύλινες Σφήνες, 11mm (XS)	200	5011
	Ξύλινες Σφήνες, 12mm (S)	100	5012
	Ξύλινες Σφήνες, 13mm (M)	100	5013
	Ξύλινες Σφήνες, 15mm (L)	100	5015
	myWedge, Πολύ μικρές (XS)	100	7101
	myWedge, Μικρές (S)	100	7102
	myWedge, Μεσαίες (M)	100	7103
	myWedge, Μεγάλες (L)	100	7104
ΕΡΓΑΛΕΙΑ			ΚΩΔ.
myQuickmatrix Forceps			5703
myForceps			5707

myjunior kit

Το πρώτο σύστημα τμηματικών τοιχωμάτων για την Παιδοδοντία.

Το myJunior Kit είναι το πρώτο σύστημα τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων για την Παιδοδοντία, ειδικά ανεπτυγμένο για να ταιριάζει στα μικρότερα νεογιλά δόντια και στα νέα μόνιμα δόντια.

Επιτρέπει στους οδοντιάτρους να επιτυγχάνουν προβλέψιμες αποκαταστάσεις και ιδανικές επιφάνειες επαφής.

Το σετ προσφέρει φιλικές προς τα παιδιά λύσεις που βοηθούν στην εξοικονόμηση χρόνου στην έδρα και μειώνουν τη δυσφορία των παιδιών επιτρέποντάς τους να επιστρέψουν γρήγορα στις αγαπημένες τους δραστηριότητες.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

myJunior Kit - REF 6330

1 τεμ.	myClip Junior
1 τεμ.	myRing Junior
5 ζεύγη	Κυλινδρικοί σιλικονούχοι σωληνίσκοι
5 ζεύγη	myTines Junior
40 τεμ.	Τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0,04 mm / 5 mm ύψος
40 τεμ.	Τμηματικά τοιχώματα Junior LumiContrast 0,04 mm / 3,75 mm ύψος
50 τεμ.	Τμηματικά τοιχώματα Quickmat προγομφίων 0,04 mm / 5 mm ύψος
50 τεμ.	Τμηματικά τοιχώματα Junior Quickmat 0,04 mm / 3,75 mm ύψος
50 τεμ.	Ξύλινες σφήνες Pinky 11 mm (XS)
50 τεμ.	Ξύλινες σφήνες 12 mm S
50 τεμ.	myWedge XS
50 τεμ.	myWedge S

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
2 τεμ.	myClip Junior	6335
2 τεμ.	myRing Junior	6336
15 ζεύγη	Κυλινδρικοί σιλικονούχοι σωληνίσκοι	5711
15 ζεύγη	myTines Junior	6333
70 τεμ.	Τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0,04 mm / 5 mm ύψος	6705
70 τεμ.	Τμηματικά τοιχώματα Junior LumiContrast 0,04 mm / 3,75 mm ύψος	6708
100 τεμ.	Τμηματικά τοιχώματα Quickmat προγομφίων 0,04 mm / 5 mm ύψος	5705
100 τεμ.	Τμηματικά τοιχώματα Junior Quickmat 0,04 mm / 3,75 mm ύψος	5708
200 τεμ.	Ξύλινες σφήνες Pinky 11 mm Extra Small (XS)	5011
100 τεμ.	Ξύλινες σφήνες 12 mm Small (S)	5012
100 τεμ.	myWedge Extra Small (XS)	7101
100 τεμ.	myWedge Small (S)	7102



myTines Junior

Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο και αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα τα οποία τοποθετούνται πάνω από τη σφήνα και προσφέρουν εξαιρετική προσαρμογή του τεχνητού τοιχώματος.



Junior Quickmat

Ατσάλινα Τοιχώματα



Junior LumiContrast

Σκούρα μπλε τεχνητά τοιχώματα τα οποία αυξάνουν σημαντικά την αντίθεση και μειώνουν την αντανάκλαση του φωτός.



Σιλικονούχοι σωληνίσκοι

Μαλακά άκρα που προσφέρουν επιπλέον κράτημα και προσαρμογή.



Ξύλινες σφήνες

myWedge

Σχήματος V, υψηλής τεχνολογίας πλαστική σφήνα.

myClip junior / myRing junior

Το myClip Junior και myRing Junior είναι παιδιατρικοί δακτύλιοι για τμηματικά τοιχώματα. Προσφέρουν ελάχιστα επεμβατικές, ασφαλείς στη χρήση και με φωτεινά χρώματα, λύσεις που επιτρέπουν ευκολότερη αποκαταστατική θεραπεία σε νεαρά δόντια με χαμηλό ύψος μύλης.

Οι δακτύλιοι Junior συνδυάζουν σταθερότητα με τη σωστή δύναμη διαχωρισμού που καθιστά εφικτό στους οδοντιάτρους να επιτύχουν ιδανικές επιφάνειες επαφής.

Επιπλέον, το εξαιρετικό κράτημα που προσφέρεται από τα εύκαμπτα άκρα myTines Junior και αποστρογγυλεμένους σιλικονούχους σωληνίσκους, εξασφαλίζει καλύτερη προσαρμογή του τμηματικού τοιχώματος κι αποτρέπει τη δημιουργία προεξοχών και περισσειών ρητίνης, εξοικονομώντας χρόνο στην έδρα.

myClip junior

Όλα σε ένα - παιδιατρικός δακτύλιος συγκράτησης τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων, με ενσωματωμένη λαβίδα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Όλα σε ένα - δακτύλιος τμηματικών τοιχωμάτων. Δεν χρειάζεται εκφοβιστικές λαβίδες
- Μακράς διάρκειας δακτύλιος, κατασκευασμένος από Νικέλιο-Τιτάνιο
- Ιδανική δύναμη διαχωρισμού για την επίτευξη άψογων επιφανειών επαφής
- Εύκολη, γρήγορη τοποθέτηση του δακτυλίου με το ένα χέρι
- Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα myTines Junior



Για περισσότερες πληροφορίες



myRing junior

Παιδιατρικός δακτύλιος συγκράτησης τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων, που ταιριάζει σε μια μεγάλη ποικιλία κλινικών περιπτώσεων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ιδανικό μέγεθος για να ταιριάζει σε νεογιλά δόντια σε παιδικά στόματα
- Μακράς διάρκειας δακτύλιος, κατασκευασμένος από Νικέλιο-Τιτάνιο
- Ιδανική δύναμη διαχωρισμού για την επίτευξη άψογων επιφανειών επαφής
- Εξαιρετική προσαρμογή του τεχνητού τοιχώματος και συγκράτηση
- Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα myTines Junior




Για περισσότερες πληροφορίες



Unica anterior / Unica minideep anterior

Καινοτόμα τεχνητά τοιχώματα, για όλες τις αποκαταστάσεις προσθίων.

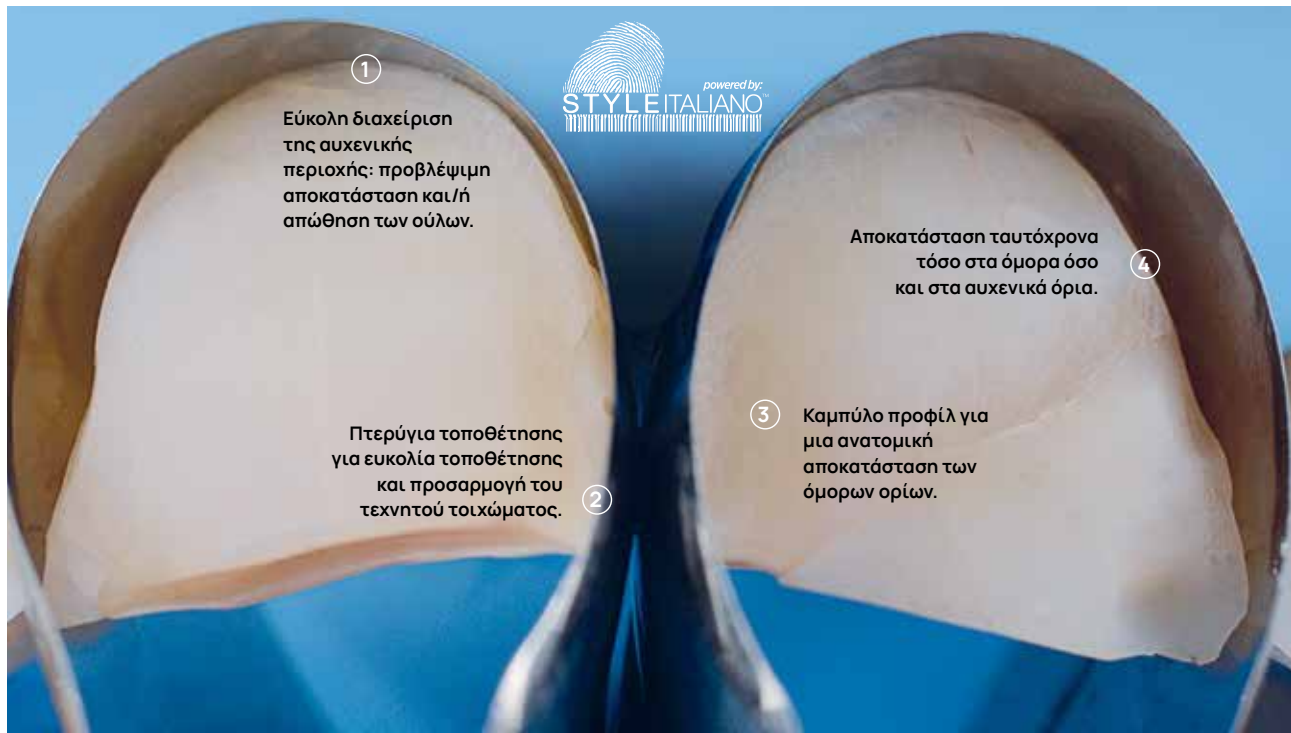

Το Unica anterior και το Unica minideep anterior είναι τα ιδανικά τεχνητά τοιχώματα για αποκαταστάσεις προσθίων όπως οι ομάδες III, IV, V, οι άμεσες διαστρωμάτωσης όψεις σύνθετης ρητίνης και οι τροποποιήσεις σχήματος.

Χάρη στο διαμορφωμένο σχήμα τους, τα τμηματικά τοιχώματα Unica anterior και Unica minideep anterior, προσαρμόζονται σωστά στις διαφορετικές μορφολογίες όλων των πρόσθιων δοντιών.

Επιτρέπουν να αποκαθίστανται ταυτόχρονα τα όμορα κι αυχενικά όρια, ακόμα και με την παρουσία ελαστικού απομονωτήρα ή νημάτων απώθησης των ούλων, μειώνοντας έτσι τον απαιτούμενο χρόνο για την αποκατάσταση.

Επιπλέον, όταν τα τοιχώματα Unica τοποθετηθούν, επιτρέπουν να οπτικοποιηθεί το τελικό σχήμα της αποκατάστασης, πριν να ξεκινήσει η διαδικασία.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Unica anterior Introkit Περιλαμβάνει: - 20 τεμ. τοιχώματα Unica anterior - 20 τεμ. τοιχώματα Unica minideep anterior - 40 τεμ. σφήνες myWedge πολύ μικρές (XS) - 40 τεμ. σφήνες myWedge μικρές (S) - 40 τεμ. σφήνες myWedge μεσαίες (M) - 1 λαβίδα myQuickmatrix Forceps	6900


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
12 τεμάχια Unica anterior	6912
50 τεμάχια Unica anterior	6950
12 τεμάχια Unica minideep anterior	6911

Unica anterior

Το κλασικό για πρόσθια αποκατάσταση



- Πολύ λεπτό (0,03 mm) ανοξειδωτο ασάλι για σφικτές επιφάνειες επαφής
- Πτερύγια τοποθέτησης για εύκολη χωροθέτηση
- Διαμορφωμένο σχήμα για ανατομικά σωστές αποκαταστάσεις

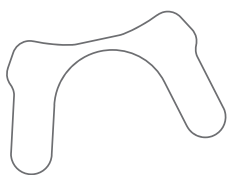

Επιλέξτε Unica anterior για:

- άνω κεντρικούς τομείς
- άνω πλάγιους τομείς
- κυνόδοντες

Unica minideep anterior

Ακόμα καλύτερη προσαρμογή σε μικρότερα πρόσθια δόντια



- Πολύ λεπτό (0,03 mm) ανοξειδωτο ασάλι για σφικτές επιφάνειες επαφής
- Καλύτερη αυχενική προσαρμογή σε κάτω κεντρικούς και πλάγιους τομείς
- Πτερύγια τοποθέτησης για εύκολη χωροθέτηση
- Ανατομικά διαμορφωμένο για σωστές αποκαταστάσεις με φυσική ανατομία



Επιλέξτε Unica minideep anterior για:

- άνω και κάτω πλάγιους τομείς
- κάτω κεντρικούς τομείς
- κωνικά δόντια
- τριγωνικά δόντια
- δόντια με στενή αυχενική διάμετρο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

**Άνω κεντρικοί τομείς
Ώφεις σύνθετης ρητίνης**

*Dr. Jordy Manauta,
Ιταλία*



Για περισσότερες πληροφορίες

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

**Κλείσιμο διαστήματος
σε κεντρικούς τομείς
και αποκατάσταση
σε κωνικούς πλάγιους
τομείς (peg incisors).**

*Dr. Osama Shaalan,
Παλαιστίνη*




Για περισσότερες πληροφορίες

Unica Proximal

Τμηματικά τοιχώματα προσθίων, με εστίαση στην όμορη περιοχή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πιστή αναπαραγωγή του χειλικού, υπερώου και όμορου περιγράμματος των προσθίων δοντιών
- Γενικό σχήμα και περίγραμμα για άνω και κάτω δόντια, εγγύς και άπω επιφάνειες, που απλοποιεί σημαντικά κι επιταχύνει τις αποκαταστάσεις προσθίων δοντιών
- Επιτρέπουν ανεμπόδιστη ορατότητα και πρόσβαση στο πεδίο εργασίας, ακόμα και εάν τοποθετηθούν πολλαπλά τοιχώματα ταυτόχρονα
- Αυτοσταθεροποιούμενα
- Πιο επιμήκεις αυχενικές επεκτάσεις απ' ό,τι αυτές στα τμηματικά τοιχώματα οπισθίων.
- Διατίθενται σε δύο μεγέθη εξασφαλίζοντας ιδανική εφαρμογή σε διαφορετικές μορφολογίες τομέων

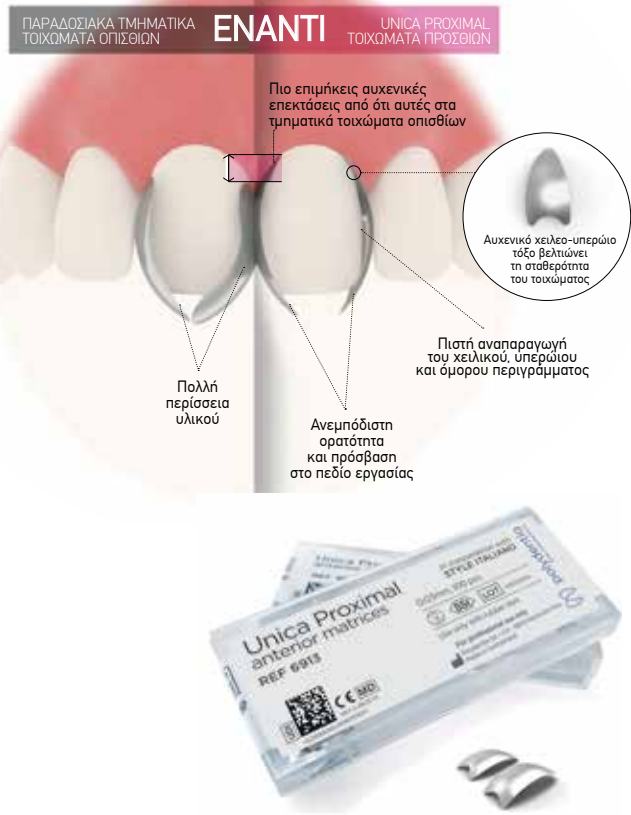

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	Unica Proximal anterior matrices - στάνταρ 0.03 mm	100	6913
	Unica Proximal anterior matrices +- στάνταρ 0.03 mm	50	6914
	Unica Proximal deep anterior matrices - βαθύ 0.03 mm	100	6952
	Unica Proximal deep anterior matrices - βαθύ 0.03 mm	50	6953

NEO Unica Master Kit

Κιτ που προσφέρει μια επιλογή από τα απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη πλήρους ελέγχου των πρόσθιων αποκαταστάσεων.

Το σύστημα περιλαμβάνει τα τοιχώματα προσθίων **Unica** και **Unica minideep**, **Unica Proximal** και **Unica Proximal deep**, καθώς και μια ποικιλία από τις σφήνες myWedges που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες.

Η επιλογή προϊόντων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενδείξεων: από άμεση διαστρωμάτωση όψεων σύνθετης ρητίνης, τροποποίηση σχήματος (π.χ. κλείσιμο διαστήματος και διαμόρφωση νάνων πλάγιων τομέων) έως πρόσθετες αποκαταστάσεις III έως V ομάδας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καθαρή και ασφαλής αποθήκευση επιλεγμένων προϊόντων
- Επαναχρησιμοποιήσιμοι και καθαριζόμενοι δίσκοι
- Ταιριάζει σε τυπικά συρτάρια



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Unica Master Kit Περιλαμβάνει: 12 τεμ. τοιχώματα προσθίων Unica 12 τεμ. τοιχώματα προσθίων Unica minideep 50 τεμ. τοιχώματα προσθίων Unica Proximal 50 τεμ. τοιχώματα προσθίων Unica Proximal Deep 100 τεμ. σφήνες myWedge ασορτί	6901

Tofflemire Contoured Matrices 0.04 mm

Ανατομικά προσχηματισμένα τεχνητά τοιχώματα, από ανοξείδωτο ατσάλι, για την ανασύσταση οπισθίων δοντιών.

Προσφορά

Αγοράζοντας
3 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΠΛΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
6,3 mm	30 τεμάχια	6106
5,5 mm	30 τεμάχια	6107

Tofflemire Contoured Matrices Microthin 0,025 mm

Ανατομικά προσχηματισμένα Tofflemire τεχνητά τοιχώματα, εξαιρετικά λεπτά.

- Ανοξείδωτο ατσάλι
- Ανατομικά προσχηματισμένα
- Για αποκαταστάσεις σε οπίσθια δόντια
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε συγκρατητήρα
- Πάρα πολύ λεπτά (0,025 mm, .001") για στενά μεσοδόντια διαστήματα

Προσφορά

Αγοράζοντας
3 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΠΛΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
6,3 mm	30 τεμάχια	6108
5,5 mm	30 τεμάχια	6109

Tofflemire Matrices 0,03 – 0,04 mm

Οικονομικά τεχνητά τοιχώματα από ανοξείδωτο ατσάλι.

Προσφορά

Αγοράζοντας
3 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	6.3 mm (0,04 mm)	50 τεμ.	6101
	6.3 mm (0,03 mm)	50 τεμ.	6102
	5.5 mm (0,04 mm)	50 τεμ.	6103
	5.5 mm (0,03 mm)	50 τεμ.	6104

Tofflemire Matrices 0,025 mm

Εξαιρετικά λεπτά τεχνητά τοιχώματα.

- Χωρίς μνήμη
- Για τα πιο στενά σημεία επαφής



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	6.3 mm	50 τεμ.	5920
	5.5 mm	50 τεμ.	5921


Stainless Steel Matrices 0,03 mm

Προσχηματισμένα τεχνητά τοιχώματα.

- Ανοξειδωτο ασάλλι
- 3 διαφορετικά σχήματα



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

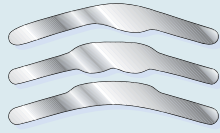


προγόμφιοι

50 τεμ. Κωδ. 5713

50 τεμ. Κωδ. 5714

50 τεμ. Κωδ. 5715

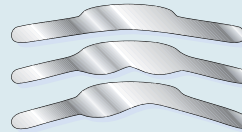

γομφίοι

50 τεμ. Κωδ. 5717

50 τεμ. Κωδ. 5718

50 τεμ. Κωδ. 5719

Matrix Strip ST 0,03 mm

Μεταλλικό τεχνητό τοίχωμα, σε ρολό.

Προσφορά

ΔΩΡΟ

Με την αγορά
3 συριγγών ρητίνης
των εταιρειών
Yamakin ή SDI

- Ανοξειδωτο ασάλλι
- Πρακτικός διανομέας



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	5 mm	3 m	5235
	6 mm	3 m	5236
	7 mm	3 m	5237

Matrix Strip 0,05 mm

Μεταλλικό τεχνητό τοίχωμα, σε ρολό.

Προσφορά

ΔΩΡΟ

Με την αγορά
3 συριγγών ρητίνης
των εταιρειών
Yamakin ή SDI

- Ανοξειδωτο ασάλλι
- Πρακτικός διανομέας



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	5 mm	3 m	5255
	6 mm	3 m	5256
	7 mm	3 m	5257

Matrix Strip Soft 0,05 mm

Μεταλλικό τεχνητό τοίχωμα, σε ρολό.

Προσφορά

ΔΩΡΟ

Με την αγορά
3 συριγγών ρητίνης
των εταιρειών
Yamakin ή SDI

- Ανοξειδωτο ασάλλι
- Πολύ μαλακό
- Πρακτικός διανομέας



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	5 mm	3 m	5275
	6 mm	3 m	5276
	7 mm	3 m	5277

Dispens-O-Mat Anterior 0,05 mm

Αυτοκόλλητα διαφανή τεχνητά τοιχώματα για πρόσθια δόντια.

- Πρακτικός διανομέας



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	6 mm	100 τεμ.	5221
	7 mm	100 τεμ.	5222
	8 mm	100 τεμ.	5223

Clearmat Matrices 0,075 mm

Προσχηματισμένα τεχνητά τοιχώματα, για ομορομασπτικές αποκαταστάσεις σε πίσω δόντια.

- Διαφανή, πολυεστερικά.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Προγόμφιοι	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	50 τεμ.	5913
	50 τεμ.	5914
	50 τεμ.	5915

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Γομφίοι	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	50 τεμ.	5917
	50 τεμ.	5918
	50 τεμ.	5919

Stripmat 0,05 mm

Διαφανές τεχνητό τοίχωμα, σε ρολό.

- Πολύ ανθεκτικό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	6 mm	15 m	5006
	8 mm	15 m	5008
	10 mm	15 m	5010



Stripmat Anatomic 0,05 mm

Ανατομικά σχηματισμένο, διαφανές τεχνητό τοίχωμα, σε ρολό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	9 mm	15 m	5225



Interdental Wood Wedges

Ανατομικά σχεδιασμένες ξύλινες σφήνες.

- Τετράγωνο τέλος για καλύτερη λαβή
- Πρώτης ποιότητας ξύλο σφενδάμου



Προσφορά

Με την αγορά
2 συριγγών ρητίνης
των εταιρειών
Yamakin ή SDI

ΔΩΡΟ

οποιαδήποτε
συσκευασία
ξύλινων σφηνών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	Pinky 11 mm (XS)	200 τεμ.	5011
	12 mm (S)	100 τεμ.	5012
	13 mm (M)	100 τεμ.	5013
	15 mm (L)	100 τεμ.	5015
	17 mm (XL)	100 τεμ.	5017
Ασσορτί	(XS, S, M, L)	100 τεμ.	5001
	12 mm (S) κλασική πορτοκαλί σφήνα	200 τεμ.	5018

myWedge

Μεσοδόντια σφήνα με κοίλο σχήμα V, από πλαστικό υλικό υψηλής τεχνολογίας.

Έχει καινοτόμο κοίλο σχήμα V που της επιτρέπει να συμπιέζεται και να προσαρμόζεται στην ανατομία των μεσοδόντιων διαστημάτων. Εμποδίζει τον τραυματισμό των ούλων ενώ καθοδηγεί και διαμορφώνει το τεχνητό τοίχωμα στην ανατομία της αυχενικής περιοχής του δοντιού.

- Καινοτόμο κοίλο σχήμα V
- Κεφαλή με ανασχετικά σημεία που εμποδίζουν την ολίσθηση
- Έντονα χρώματα για εύκολη ταυτοποίηση



Προσφορά

Αγοράζοντας
3 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	Πολύ μικρό (XS)	100 τεμ.	7101
	Μικρό (S)	100 τεμ.	7102
	Μεσαίο (M)	100 τεμ.	7103
	Μεγάλο (L)	100 τεμ.	7104
ασσορτί	(XS, S, M, L)	100 τεμ.	7100

Abrasive Polishing Strips

Ταινίες με οξείδιο του αργιλίου για τη λείανση και στίλβωση των όμορων επιφανειών των εμφράξεων ρητίνης.

- 3 διαφορετικές, χρωματικά κωδικοποιημένες, αδρότητες.



Προσφορά

Με την αγορά
2 συριγγών ρητίνης
των εταιρειών Yamakin ή SDI

ΔΩΡΟ

οποιαδήποτε συσκευασία
Abrasive Polishing Strips


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	Αδρότητα	Πλάτος	Περιεχόμενα	Κωδικός
	30 μικρά	4 mm	10 m	5511
	40 μικρά	4 mm	10 m	5501
	60 μικρά	4 mm	10 m	5502

Tria-Shine Abrasive Strips

Ταινίες με οξείδιο του αργιλίου για τη λείανση και στίλβωση των όμορων επιφανειών των εμφράξεων ρητίνης.

- 2 διαφορετικές αδρότητες, χρωματικά κωδικοποιημένες
- Τριγωνικό σχήμα

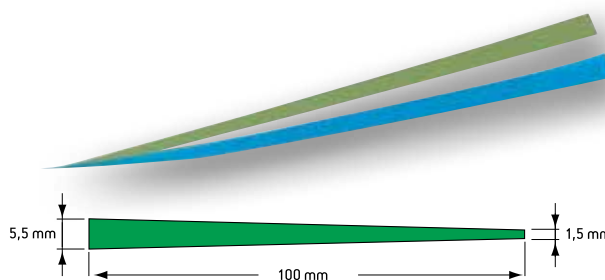

Προσφορά

Αγοράζοντας
2 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	Αδρότητα	Περιεχόμενα	Κωδικός
	30 μικρά	100 τεμ.	5504
	40 μικρά	100 τεμ.	5505

ID - Rings

Ελαστικοί δακτύλιοι για τη χρωματική κωδικοποίηση των εργαλείων.

- 9 χρώματα
- Αποστειρώσιμοι



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	καφέ	50	5311
	λευκό	50	5312
	κίτρινο	50	5313
	κόκκινο	50	5314
	μπλε	50	5315
	πράσινο	50	5316
	μαύρο	50	5317
	πορτοκαλί	50	5318
	γκρι	50	5319
	ασσορτί	120	5320

Vista-Tec

Ασπίδα προστασίας του προσώπου.

Το εξαιρετικά ελαφρύ σύστημα προστασίας προσώπου Vista-Tec περιλαμβάνει μια ανθεκτική, αντικαταστάσιμη πολυκαρβονική ασπίδα που προσφέρει κορυφαία οπτικά χαρακτηριστικά για ξεκούραστη όραση, μειώνοντας την περιττή καταπόνηση των ματιών κατά την πολύωρη εργασία.

Η Vista-Tec διαθέτει ένα σιλικονούχο κεφαλόδεσμο που προσφέρει σταθερότητα και άνεση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εργονομικός σχεδιασμός
- Κορυφαία οπτική ποιότητα
- Ανθεκτικές ασπίδες που απολυμαίνονται και αντικαθίστανται
- Εξαιρετικά ελαφρύ σχέδιο
- CE EN 166:2001 πιστοποιημένο Class II PPE
- Κεφαλόδεσμος για μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Vista-Tec kit - 1 σκελετός - 5 ασπίδες - 1 κεφαλόδεσμος	5621N
Vista-Tec ανταλλακτικό - 5 πολυκαρβονικές ασπίδες	5626N

Vista-Tec Lupon

Ασπίδες προστασίας του προσώπου για χρήση με μεγεθυντικούς φακούς.

Ευρεία και ανθεκτική πολυκαρβονική ασπίδα που προστατεύει τους μεγεθυντικούς φακούς. Διατίθεται σε δύο μεγέθη μεσαίο (M) και μεγάλο (L).

Η ασπίδα μεγέθους M χρησιμοποιείται με μεγεθυντικούς φακούς Galilean.

Η ασπίδα μεγέθους L χρησιμοποιείται με μεγεθυντικούς φακούς Prismatic.

Τοποθετείται στα κλιπ στήριξης που προσαρμόζονται στον σκελετό με σιλικονούχους δακτυλίους, oRings.

Τα Vista-Tec LupOn κλιπ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για γυαλιά με βραχίονες ύψους πάνω από 1 cm.

Οι ασπίδες Vista-Tec LupOn απολυμαίνονται και αντικαθίστανται.

Τα LupOn κλιπ και oRings είναι αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Vista-Tec LupOn kit - 1 ζεύγος LupOn κλιπ - 1 ασπίδα M - 1 ασπίδα L - 3 ζεύγη oRings S, M, L	5633
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
5 ασπίδες μεγέθους M	5635
5 ασπίδες μεγέθους L	5636
3 ζεύγη oRings S, M, L	5634

ARH2 και ARL2

Ημιπροσαρμοζόμενοι αρθρωτήρες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ARH2

- Ρυθμιζόμενη κλίση της Κονδυλικής Ατραπού από -20° έως $+60^{\circ}$
- Πλήρης έκταση της κίνησης Bennett 0° έως 40°
- Ο κονδυλικός μηχανισμός μπορεί να ρυθμιστεί από ατομικές καταγραφές
- Ρυθμιζόμενη άμεση πλάγια κίνηση
- Σταθερή διακονδυλική απόσταση: 95 mm
- Ανοίγει $180^{\circ}+$
- Η διάταξη της κονδυλικής ατραπού είναι εξοπλισμένη με Ειδικές Ακουστικές ακίδες για προσάρτηση στο Ear Bow AEE της Dentatus.
- Συμπαγής τομική τράπεζα, μπορεί να κλίνει πρόσθια-οπίσθια και είναι αφαιρούμενη - μπορεί να εναλλάσσεται με την πλήρως ρυθμιζόμενη Τμηματική τομική τράπεζα.
- Ανθεκτικός στη διάβρωση
- Συνολικό ύψος: 105 mm
- Βάρος 1010 g



Dentatus

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ARL2

Έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά του ARH2 κι επιπρόσθετα διαθέτει:

Ένα προσαρμόσιμο στέλεχος άνω γνάθου κι ένα εξάρτημα, το Gauge Block με το οποίο ο αρθρωτήρας μπορεί να προσαρμοστεί και να εξασφαλίσει σωστές βασικές ρυθμίσεις όταν συνεργάζονται οδοντίατρος και οδοντοτεχνίτης, ο καθένας με τον δικό του αρθρωτήρα ARL2.

Βάρος 1038 g.

Face Bow Type AEB

Προσωπικό τόξο με κλασικούς ρυθμιζόμενους κονδυλικούς άξονες.

Συνδυάζεται με τους αρθρωτήρες ARH2 & ARL2.



Twin Luscent Anchor™

Άξονας υαλονημάτων-ρητίνης με ειδικό σχέδιο για διπλάσια συγκράτηση.

Οι Twin Luscent Anchors διατίθενται σε 4 μεγέθη:

- **Extra Small (πολύ μικρό):** διάμετρος 1,26 mm, μήκος 16,7 mm
- **Small (μικρό):** διάμετρος 1,40 mm, μήκος 16,7mm
- **Medium (μεσαίο):** διάμετρος 1,54 mm, μήκος 16,7 mm
- **Large (μεγάλο):** διάμετρος 1,68 mm, μήκος 16,7 mm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

LUT-KI

Περιλαμβάνει:

- 15 Twin Luscent Anchors (5 από τα μεγέθη, μικρό, μεσαίο, μεγάλο)
- 3 αντίστοιχα τρύπανα,
- 1 Probos I
- 1 Probos II
- 15 φόρμες διαμόρφωσης κολοβώματος

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ανταλλακτικό 15 αξόνων

15 άξονες ενός μεμονωμένου μεγέθους και 15 φόρμες διαμόρφωσης κολοβώματος

Ανταλλακτικό 5 αξόνων

5 άξονες ενός μεμονωμένου μεγέθους και 5 φόρμες διαμόρφωσης κολοβώματος

Surtex

Ενδορριζικοί άξονες τιτανίου και επίχρυσοι.

Έχουν ειδική επεξεργασία επιφάνειας που προσφέρει λιγότερη αντανάκλαση και 200% περισσότερη συγκράτηση των επανορθωτικών υλικών.

Είναι έτοιμοι προς χρήση.

Δεν χρειάζονται αδροποίηση ή αμμοβολή, καθώς η επιφάνειά τους είναι προεπεξεργασμένη.

Η επεξεργασμένη επιφάνειά τους αντανακλά το φως λιγότερο απ' ό,τι η επιφάνεια ενός απλού άξονα και καλύπτονται καλά με τα αισθητικά επανορθωτικά υλικά χωρίς την ανάγκη στρώματος αδιαφάνειας.



ΜΗΚΗ ΑΞΟΝΩΝ


Μεγέθν	Short (7,8 mm)	Medium (9,3 mm)	Long (11,8 mm)	Extra Long (14,2 mm)	Super Long (17 mm)
1	ø 1,05 mm	ø 1,05 mm	ø 1,05 mm		
2	ø 1,20 mm	ø 1,20 mm	ø 1,20 mm		
3	ø 1,35 mm	ø 1,35 mm	ø 1,35 mm	ø 1,35 mm	ø 1,35 mm
4	ø 1,50 mm	ø 1,50 mm	ø 1,50 mm	ø 1,50 mm	ø 1,50 mm
5	ø 1,65 mm	ø 1,65 mm	ø 1,65 mm	ø 1,65 mm	ø 1,65 mm
6	ø 1,80 mm	ø 1,80 mm	ø 1,80 mm	ø 1,80 mm	ø 1,80 mm

Τα τρύπανα των αξόνων διατίθενται στις ίδιες διαμέτρους, στα μήκη: short (28mm) και Long (33mm).



Οι άξονες Surtex διατίθενται σε μια πλήρη συλλογή αξόνων, τρυπάνων και εξαρτημάτων, μέσα στον πατενταρισμένο διανομέα τους, One-Stop, με ενσωματωμένους μετρητές.

Όλα τα μεγέθη των αξόνων και των τρυπάνων διατίθενται επίσης σε ανταλλακτικά.

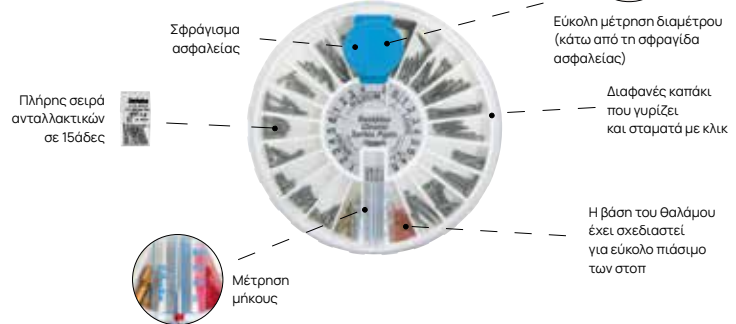

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Άξονες Surtex Επίχρυσοι

Συσκευασία RST-60: 60 άξονες και 6 τρύπανα

Συσκευασία RST: 120 άξονες

Άξονες Surtex Τιτανίου

Συσκευασία TST-60: 60 άξονες και 6 τρύπανα

Συσκευασία TST: 120 άξονες

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Η 15άδα άξονες επίχρυσοι

Η 15άδα άξονες τιτανίου



Profin® Directional System

Σύστημα χειρολαβής και άκρων με παλινδρομική κίνηση, για το φινίρισμα και τη στίλβωση όλων των τύπων αποκαταστάσεων και όλων των οδοντικών επιφανειών.

Το Profin Directional System, με την ακριβή κι ελεγχόμενη παλινδρομική κίνηση κατά 1.2 mm, είναι ιδανικό για λεπτεπίλεπτη κι ασφαλή διαμόρφωση, δημιουργία περιγράμματος και στίλβωση τόσο των φυσικών δοντιών όσο και των αποκαταστάσεων όλων των τύπων.



Προσφορά

Με πληρωμή
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ


ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Η χειρολαβή, σε συνδυασμό με μια ευρεία συλλογή λειαντικών άκρων, προσφέρει απεριόριστη πρόσβαση σε δυσπρόσιτες ενδοστοματικές περιοχές, επιτρέποντας την αναδιαμόρφωση της αδαμαντίνης, καθώς και αποκαταστάσεων από πορσελάνη, μέταλλο, σύνθετη ρητίνη και αμάλαμα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το σύστημα Profin είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο:

- για τελειοποίηση των μεσοδόντιων, ουλικών και κοπτικών προεξοχών σε ένα φυσικό σχήμα
- για δημιουργία περιγράμματος κι εξατομίκευση προσθίων αποκαταστάσεων
- για αναδιαμόρφωση οδοντικών επιφανειών που έρχονται σε επαφή
- για λεπτό φινίρισμα ορίων κεραμικών ή μεταλλικών αποκαταστάσεων, πριν τη συγκόλληση
- για εξάλειψη υποσκαφών σε παρασκευές για CAD/CAM αποκαταστάσεις

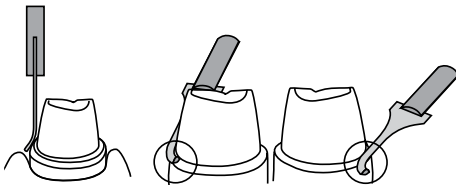

- για ασφαλή μείωση όμορων επιφανειών (δημιουργία χώρου στην Ορθοδοντική)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ PROFIN

- Σκληρή ανοδιωμένη επιφάνεια με μεγάλη αντίσταση στις εκδορές
- Κεφαλή μινιατούρα για καλύτερη πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές
- Λεία επιφάνεια που δεν γυαλίζει, με χρώμα χαμηλής αντίθεσης
- Εργονομικό σχέδιο με καλό κράτημα



LTA: σετ Laminier Tips

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Profin PDX Starter Kit

Περιλαμβάνει:






μια χειρολαβή Profin PDX, 5 Laminier Tips διαμόρφωσης και φινιρίσματος (LTA-150, LTA-30, LTA-39, LTA-S100, LTA-S50), 30 πλαστικά άκρα για στίλβωση, 1 έμβολο για τα άκρα και μια βάση για τα άκρα.



LTA Σετ Laminier Tips


Περιλαμβάνει 10 άκρα Laminier: LTA-150, LTA-S100, LTA-75, LTA-S50, LTA-30, LTA-S15, LTA-39, LTA-S36, LTA-C50, LTA-E50 και μια βάση με χρωματική κωδικοποίηση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ LAMINEER TIPS

ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΕΠΤΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ Επίστρωση διαμαντιού	ΑΔΡΟΤΗΤΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
LTA-150/2 	150 μικρά	Κόκκινο	Αφαίρεση μεγάλων περισσειών και διαμόρφωση όλων των υλικών αποκατάστασης - χρήση αδρόκοκκων άκρων
LTA-100/2	100 μικρά	Πράσινο	
LTA-75/2	75 μικρά	Χρυσό	Για διαμόρφωση και στίλβωση όλων των υλικών αποκατάστασης και της αδαμαντίνης
LTA-50/2	50 μικρά	Κίτρινο	
LTA-30/2	30 μικρά	Λευκό	
LTA-15/2	15 μικρά	Βιολετί	Τελική στίλβωση - χρήση λεπτόκοκκων άκρων
LTA-39/2 Καρβίδιο του Βολφραμίου		Μαύρο	Το καρβίδιο του βολφραμίου δεν προκαλεί φθορά στην αδαμαντίνη. Για τελικό φινίρισμα των ορίων των εμφράξεων σύνθετης ρητίνης.
ΑΚΜΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ, ΚΟΝΤΟ Επίστρωση διαμαντιού	ΑΔΡΟΤΗΤΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
LTA-S150/2	150 μικρά	Κόκκινο	Ίδια συνιστώμενη χρήση όπως παραπάνω.
LTA-S100/2	100 μικρά	Πράσινο	
LTA-S75/2	75 μικρά	Χρυσό	Μικρότερο και λεπτότερο άκρο με ακμή μαχαιριού για καλύτερη πρόσβαση σε στενά διαστήματα και κοντά στα σημεία επαφής
LTA-S50/2	50 μικρά	Κίτρινο	
LTA-S30/2	30 μικρά	Λευκό	
LTA-S15/2 	15 μικρά	Βιολετί	
LTA-S36/2 Καρβίδιο του Βολφραμίου		Μαύρο	Το καρβίδιο του βολφραμίου δεν προκαλεί φθορά στην αδαμαντίνη. Για τελικό φινίρισμα των ορίων των εμφράξεων σύνθετης ρητίνης.
FLEXIBLE Επίστρωση διαμαντιού	ΑΔΡΟΤΗΤΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
LTA-F100/2	100 μικρά	Πράσινο	Ίδια συνιστώμενη χρήση όπως παραπάνω. Άκρα με διπλάσια ευκαμψία για δυσπρόσιτες περιοχές, 2 mm μακρύτερο άκρο.
LTA-F75/2	75 μικρά	Χρυσό	
LTA-F50/2 	50 μικρά	Κίτρινο	
ΚΟΙΛΟ ΑΚΡΟ Επίστρωση διαμαντιού	ΑΔΡΟΤΗΤΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
LTA-E50/2 	50 μικρά	Κίτρινο	Για μαστικές και κοίλες επιφάνειες
ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΑΥΧΕΝΕΣ/ΛΟΞΟΤΟΜΕΣ Επίστρωση διαμαντιού	ΑΔΡΟΤΗΤΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
LTA-C50/2 	50 μικρά	Κίτρινο	Για αναδιαμόρφωση κλίσεων ακριβείας και γωνιών αυχένων και λοξοτομών

EVA POLISHING TIPS Πλαστικά άκρα	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
EVA-2000/100 	Πράσινο	Γενικής χρήσης πλαστικά άκρα στίλβωσης. Σχήμα σφηνοειδές, για καθαρισμό όλων των όμορων περιοχών
EVA-5000/100 	Μπλε	Πλαστικά άκρα στίλβωσης. Λεπτή σπάτουλα.

LAMINEER TIPS IPR Επίστρωση διαμαντιού	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Σετ LTA-P/SK2 	Άκρα για μείωση όμορων επιφανειών

Τυπικά χειρουργικά πεδία

Surgical Line

Τα πεδία από μη υφασμένο υλικό (NWF) δύο στρώσεων διαθέτουν μία απορροφητική και μία αδιάβροχη στρώση. Έτσι εξασφαλίζουν ταχεία απορρόφηση των σωματικών υγρών η οποία δεν γίνεται σε βάρος της δομής και της αδιαπερατότητας της αδιάβροχης στρώσης.



12.T1386.00	Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο 50x75 cm	NWF + πολυαιθυλένιο	Γαλάζιο
-------------	---------------------------------------	---------------------	---------

Χειρουργικά πεδία με κολλητική πλευρά

Η πρακτική αυτοκόλλητη ταινία ιατρικού βαθμού, πλάτους 5 cm, που είναι τοποθετημένη στη μικρή πλευρά του πεδίου, χρησιμοποιείται για την ασφαλή στερέωση του πεδίου σε επιφάνειες στήριξης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μετατόπιση ή τυχαία επιμόλυνση.

Η προστατευτική μεμβράνη της αυτοκόλλητης ταινίας μπορεί επίσης να αφαιρεθεί κατά τμήματα, καθώς διαθέτει προτεμαχισμένες περιοχές.



12.T2368.00	Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο με αυτοκόλλητη πλευρά 50*x75 cm	NWF + πολυαιθυλένιο	Γαλάζιο	75 τεμάχια
-------------	--	---------------------	---------	------------

* Με έντονους χαρακτήρες επισημαίνεται η κολλητική πλευρά

Βασικό σετ εμφυτευμάτων

Surgical Line

12.S5621.00

Το Βασικό σετ εμφυτευμάτων έχει σχεδιαστεί για όλες τις χειρουργικές δραστηριότητες ρουτίνας στις οποίες είναι απαραίτητη η εφαρμογή πρωτοκόλλου που εξασφαλίζει επαρκή βαθμό αποστείρωσης και εγγυάται την ασφάλεια των χειρουργών και των ασθενών.

Χάρη στη λογική τιμή του, είναι ιδιαίτερος κατάλληλο για όλες τις χειρουργικές διαδικασίες άμεσης φόρτισης ή για επεμβάσεις όπως εκ νέου διάνοιξη εμφυτευμάτων, χειρουργεία με κρημνούς ή επεμβάσεις σε χειρουργικά μικροτραύματα.



1	Χειρουργικά διπλωμένα ποδιά Special Plus (μέγεθος L) και 2 πετσέτες χεριών τυλιγμένες σε ιατρικό χαρτί	Μικροΐνες SMS	Γαλάζιο
1	Ποδιά με βαμβακερές μανσέτες	NWF	Γαλάζιο
2	Χειρουργικοί σκούφοι με σταθερά κορδόνια	Απορροφητικό NWF	Γαλάζιο
1	Στρογγυλός χειρουργικός σκούφος για τον ασθενή	Απορροφητικό NWF	Γαλάζιο
1	Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο 50*75 cm με αυτοκόλλητη πλευρά	NWF + Πολυαιθυλένιο	Γαλάζιο
1	Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο 75x90 cm με κολλητική σχισμή σχήματος U 11x9* cm	NWF + Πολυαιθυλένιο	Γαλάζιο
1	Θήκη Omnisleeve 120x7 cm	Πολυαιθυλένιο	Διαφανές
1	Σάκος απορριμμάτων για μολυσμένα υλικά	PVC	Κόκκινο

* Με έντονους χαρακτήρες επισημαίνεται η κολλητική πλευρά

Σετ στοματικής χειρουργικής - Setris

12.T0105.00

Αποστειρωμένο σετ πεδίων, ιδανικό για όλες τις μικροεπεμβάσεις, όπως εξαγωγή φρονιμιτών και χειρουργεία δεύτερου σταδίου. Η ειδική αυτοκόλλητη σχισμή σχήματος U στην μία πλευρά του πεδίου επιτρέπει την αποτελεσματική οριοθέτηση του περιοχής του χειρουργείου.

Η πρακτική αφαιρούμενη ετικέτα επιτρέπει την εύκολη ικνηλασιμότητα της επέμβασης.



1	Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο 50x75 με κολλητική σχισμή σχήματος U 11x9* cm	NWF + Πολυαιθυλένιο	Γαλάζιο
2	Απορροφητικά/αδιάβροχα πεδία 50x75 cm	NWF + Πολυαιθυλένιο	Γαλάζιο

* Με έντονους χαρακτήρες επισημαίνεται η κολλητική πλευρά

Σετ ασθενούς - Setpaz

12.T0002.00

Αυτό το αποστειρωμένο σετ έχει σχεδιαστεί για την ένδυση του ασθενούς. Είναι ιδανικό για όλες τις επεμβάσεις οδοντιατρικής εμφύτευσης, περιοδοντολογίας και γναθοχειρουργικής.

Το σετ παρέχεται σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία, τυλιγμένο σε ιατρικό χαρτί. Η ποδιά διαθέτει λάστιχο στους καρπούς για μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς. Η πρακτική αφαιρούμενη ετικέτα επιτρέπει την εύκολη ικνηλασιμότητα της επέμβασης.



1	Υγροαπωθητική ποδιά με λάστιχο	NWF	Λευκό
1	Στρογγυλός σκούφος με λάστιχο	NWF	Λευκό
2	Αδιάβροχα καλύμματα παπουτσιών	PVC	Γαλάζιο

Υγροαπωθητικές χειρουργικές ποδιές από μη υφασμένο υλικό

Οι υγροαπωθητικές χειρουργικές ποδιές της Omnia αποτελούν την ιδανική λύση για συνθησμένες δραστηριότητες μικρής διάρκειας, όπως η εξαγωγή φρονιμιτών και τα χειρουργεία δευτέρου σταδίου, ή για τη συμπλήρωση της προστασίας και της απομόνωσης του ασθενούς και του βοηθού από παθογόνα.

Διατίθενται σε ένα μόνο μέγεθος.



22.D1004.00	Ποδιά με λάστιχο στους καρπούς (μήκος 120 cm)	πράσινο	50 τμχ.
22.D1307.00	Ποδιά με λάστιχο στους καρπούς (μήκος 120 cm)	γαλάζιο	50 τμχ.
22.D1303.00	Ποδιά με λάστιχο στους καρπούς (μήκος 120 cm)	κίτρινο	50 τμχ.

Χειρουργικοί σκούφοι

Οι σκούφοι και τα καλύμματα κεφαλής είναι απαραίτητα στοιχεία για την ορθή διαχείριση των πρωτοκόλλων υγιεινής στις οδοντιατρικές επεμβάσεις.

Είναι διαθέσιμα σε διάφορα μοντέλα, χρώματα και υλικά, τόσο για χειρουργική όσο και για κλινική χρήση.

10.M0019.00	Χειρουργικός σκούφος με σταθερά κορδόνια	γαλάζιο	100 τμχ.
30.M0001.00	Στρογγυλός σκούφος με λάστιχο	πράσινο	500 τμχ.
30.M0002.00	Στρογγυλός σκούφος με λάστιχο	λευκό	500 τμχ.
30.M0040.00	Στρογγυλός σκούφος με λάστιχο	γαλάζιο	500 τμχ.
30.M0041.00	Στρογγυλός σκούφος με λάστιχο	κίτρινο	500 τμχ.



10.M0019.00



30.M0001.00



30.M0002.00



30.M0040.00



10.M0041.00

Αποστειρωμένες γάζες



32.Z1101.00	Αποστειρωμένες γάζες 25x16 cm σε 20 συσκευασίες των 5 τεμαχίων έκαστη (βαμβάκι)	20 τμχ.
-------------	---	---------

Κιτ μηχανικής έκπλυσης: επεμβάσεις με Physiodispenser και πιεζοηλεκτρικές χειρουργικές επεμβάσεις

Surgical Line





Η Omnia προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συστημάτων μηχανικής έκπλυσης, τα οποία είναι συμβατά με τις περισσότερες συσκευές physiodispenser που είναι διαθέσιμες προς πώληση.

Τα συστήματα έκπλυσης περιλαμβάνουν διατηρητήρα, κύλινδρο ή σφικκτήρα ελέγχου ροής, εξαρτήματα και ένα ολοκληρωμένο τμήμα περισταλτικής αντλίας. Τα συστήματα μηχανικής έκπλυσης της OMNIA προσφέρουν τις ακόλουθες επιλογές:


- α. Εσωτερική έκπλυση μόνο
- β. Εξωτερική έκπλυση μόνο
- γ. Εσωτερική και εξωτερική έκπλυση

Το πρακτικό τερματικό καπάκι διευκολύνει τη σύνδεση της γραμμής έκπλυσης στο εργαλείο χειρός και επιτρέπει τη σύνδεση των σωλήνων μας με όλες τις βελόνες ψύξης των διαφόρων εργαλείων χειρός, οι οποίες έχουν συχνά διαφορετικό διάμετρο.

32.F0001.00	Σετ έκπλυσης		1/2Y	Suni Satelec 2000/3000, Expert, Suni Max, Surgi set basic, Surgi set pro 500, Dental Surgery Unit, Dental Unit DSC Electronic, Sweden&Martina, Sky unit, Dental Unit Teseo, Miniuniko Surgery, Blue Rocket BR3000, BR4000
32.F0105.00	Σετ έκπλυσης		1/2Y	Aseptico Aeu 6000 series, Aseptico Aeu 7000 series, Saeyang Ki-20, Impla6000 Sweden&Martina
32.F0106.00	Σετ έκπλυσης		1/2Y	Aseptico Aeu 1000 -70/V, Aseptico Aeu 1070-70V
32.F0112.00	Σετ έκπλυσης		1/2Y	De Giorgi Steri Implant, INTRAMATIC 2, INTRAMAX PLUS, Solujet
32.F0134.00	Σετ έκπλυσης		1/2Y	NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg, SurgicPro, Kyocera Implantor Neo, Bonart Piezo surgical system, Dentium iCTmotor, NSK 3i Osseocision, Delfine Intra-Lock
32.F0139.00	Σετ έκπλυσης		1/2Y	Nobel Biocare80/ W&H Implantmed/ Implant Med new design 2005/ Implantmed SI 923/ Astratech Implant SI 923/ Surgical Motor System/Ace/ Straumann/InnovaCorp. 3i/Centerpulse/Lifecore/ DU 900/FRIOS® UNIT S/ FRIOS® UNIT S/I, Osseoset 100/Osseoset 200/Osseocare, Elcomed SA 310/ SA2006, Piezomed, W&H SI 1023
32.F0159.00	Σετ έκπλυσης		1/2Y	Elcomed SA 200 W&H αντλία 19 cm Innova Corp-Strauman Frioss Unit E, Drilltech BTI
32.F0170.00	Σετ έκπλυσης		1/2Y	Bien Air Chiropro 980 / EMS PIEZON® MASTER surgery / Esacrom Surgisonic I / UBSUltrasonic bone surgery/ Surgybone - Acrobone - Easybone Silfradent, BioSAFin Easy Surgery, MyTUTOR, Heracle Sweden&Martina, Cefla dental Chair, Osseodoc BienAir
32.F1200.00	Σετ έκπλυσης		1/2Y	Implantmed SI-95/SI-923/SI-915/SI-1023/SI-1015/SI-1010, Elcomed SA-310, Piezomed SA-320

• **1/2Y** = εσωτερική και εξωτερική έκπλυση με σύνδεσμο Y



•  = κάνουλα για τη σύνδεση δεύτερης γραμμής έκπλυσης στο δεύτερο εργαλείο τύπου contra-angle ή για τη σύνδεση της συσκευής Omnirrigator

Όλα τα σήματα που αναφέρονται παραπάνω είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα (Trademarks®) των αντίστοιχων κατασκευαστών.

Σύστημα αναρρόφησης

Surgical Line

Χάρη στην εργονομική λαβή του ρύγχους αναρρόφησης, ο αναρροφητήρας ASP51/F επιτρέπει την πραγματοποίηση των διαδικασιών αναρρόφησης εύκολα και με ακρίβεια, ακόμα και παρουσία υλικού οστικού μοσχεύματος.

Ο ελαφρύς σωλήνας από PVC ιατρικού βαθμού παρέχει δυνατότητα κίνησης και άνεση κατά τη διάρκεια μεγάλων χειρουργικών επεμβάσεων.

Οι ειδικοί, ανθεκτικοί στην κάμψη, εύκαμπτοι σύνδεσμοι εμποδίζουν την ακούσια αποσύνδεση του σωλήνα κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.

Ο σωλήνας διαθέτει σειρά από συνδέσμους Luer Lock για τη σύνδεση της οστεοπαγίδας OsteoTrap. Χάρη σε αυτή τη σχεδίαση, δεν είναι απαραίτητη η χρήση δεύτερου σωλήνα αναρρόφησης.

Έχει διάταξη ελέγχου κενού στη λαβή του ρύγχους αναρρόφησης, η οποία επιτρέπει τη ρύθμιση του ρυθμού αναρρόφησης κατά τη χρήση.



32.F5051.00	Αναρροφητήρας, 2,50 m, με ρύγχος αναρρόφησης με εργονομική λαβή, κατάλληλος και για χρήση με την παγίδα συλλογής αυτόλογων οστών (κάθε πακέτο περιέχει 1 προσαρμογέα Adat. 05)	PVC
--------------------	--	-----

Ρύγχη αναρρόφησης

Τα ρύγχη αναρρόφησης μίας χρήσης για χειρουργικούς αναρροφητήρες της Omnia είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό ιατρικού βαθμού.



32.F6565.00	Αποστειρωμένο ρύγχος αναρρόφησης Omnia (κάθε πακέτο περιέχει 1 προσαρμογέα Adat. 08) (μήκος ρύγχους: 20 cm)	PVC	20 τμχ.
--------------------	---	-----	---------

Θήκες με ελαστικές ταινίες τοποθέτησης

Αποστειρωμένες προστατευτικές θήκες μίας χρήσης για την κάλυψη των σωλήνων κατά τη διάρκεια επεμβάσεων τοποθέτησης εμφυτευμάτων και πιεζοηλεκτρικών χειρουργικών επεμβάσεων.

Η συσκευασία περιλαμβάνει ελαστικές ταινίες χωρίς λάτεξ.



12.U0004.00	Θήκη, 120x7 cm, με ελαστικές ταινίες τοποθέτησης	Πολυαιθυλένιο	50 τμχ.
12.U0006.00	Θήκη, 240x7 cm, με ελαστικές ταινίες τοποθέτησης	Πολυαιθυλένιο	50 τμχ.

Θήκες με αυτοκόλλητες ταινίες τοποθέτησης

Αποστειρωμένες προστατευτικές θήκες μίας χρήσης για την κάλυψη των σωλήνων κατά τη διάρκεια επεμβάσεων τοποθέτησης εμφυτευμάτων και πιεζοηλεκτρικών χειρουργικών επεμβάσεων.

Η συσκευασία περιλαμβάνει την αυτοκόλλητη ταινία.



12.U0008.00	Θήκη, 120x7 cm, με αυτοκόλλητα τοποθέτησης	Πολυαιθυλένιο	50 τμχ.
12.U0009.00	Θήκη, 240x7 cm, με αυτοκόλλητα τοποθέτησης	Πολυαιθυλένιο	50 τμχ.

Παγοκύστες άμεσης χρήσης Iceberg®

Η παγοκύστη άμεσης χρήσης Iceberg® είναι εξαιρετικά πρακτική και εύχρηστη και δεν χρειάζεται ειδική διαδικασία ψύξης. Πιέστε απλώς τη συσκευασία με τα δύο χέρια σας για άμεση ενεργοποίηση.

Είναι κατασκευασμένη από μαλακό μη υφασμένο υλικό, το οποίο παραμένει μαλακό και προσαρμόζεται στο μέρος του σώματος που χρειάζεται ανακούφιση.

Μείγμα αζωτούχων αλάτων και νερού (σύμφωνα με τον κανονισμό CE 1907/2006 και τις τροποποιήσεις του)



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Έτοιμο προς χρήση
- Άμεση χρήση
- Αυτόματη ενεργοποίηση με απλή πίεση
- Ιδανικό για χρήση στο πρόσωπο· ανακουφίζει από τον πόνο και το πρήξιμο μετά από μια οδοντιατρική επέμβαση.

30.V0001.00	Παγοκύστη άμεσης χρήσης Iceberg® σε περίβλημα από NWF	NWF + Πλαστικό σύνθετο υλικό
--------------------	---	---------------------------------

Τάπητας απολύμανσης

Οι τάπητες απολύμανσης Omnia κατασκευάζονται με τη χρήση βακτηριοκτόνου γέλης ειδικής σύνθεσης που αφαιρεί τα βακτήρια από τις σόλες των παπουτσιών των ασθενών σας και τα απενεργοποιεί.

Αποτελούνται από 30 αριθμημένες στρώσεις κολλητικής μεμβράνης και διαθέτουν κολλητική ταινία στερέωσης στην κάτω πλευρά για τοποθέτηση είτε στο δάπεδο είτε σε αφαιρούμενη βάση.



Βάση Flex με λογότυπο της Omnia και τάπητα απολύμανσης (15 φύλλα)



Ανταλλακτικά για τον τάπητα απολύμανσης (30 φύλλα) με κολλητικές ταινίες στερέωσης



30.V1000.00	Βάση Omnia FLEX με τάπητα απολύμανσης (15 φύλλα επίδειξης) 50x100 cm
30.V1001.00	Ανταλλακτικά LIGHT για τον τάπητα απολύμανσης (4 πακέτα των 30 φύλλων) 45x95 cm

Σάκος απορριμμάτων για μολυσμένα υλικά

Ο σάκος για μολυσμένα υλικά είναι ένα προϊόν μίας χρήσης που επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό μολυσμένων υλικών.

Είναι ιδανικός για χρήση σε εργαστήρια και για τον χειρισμό αποβλήτων στους νοσοκομειακούς θαλάμους.

Ο σάκος για τα μολυσμένα υλικά διαθέτει κολλητική ταινία για ταχεία στερέωση σε τραπέζι Mayo ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά μολυσματικού υλικού, όπως μεμβρανών, χρησιμοποιημένων γαζών ή στοιχείων εξαγωγής.



30.U0023.00	Σάκος απορριμμάτων για μολυσμένα υλικά με κολλητική ταινία, σε διανομέα 50 τεμαχίων	PVC	50 τμχ.
--------------------	---	-----	---------

Special Plus Model - ποδιές από μικροΐνες



Safety Line

Το υδροαπωθητικό υλικό μικροΐνων SMS που «αναπνέει» χρησιμοποιείται για την παραγωγή αυτών των ποδιών, παρέχοντας εξαιρετική σχέση μεταξύ άνεσης και απόδοσης. Οι βαμβακερές μανσέτες, η ζώνη στη μέση που δένει στο πλάι, η χειρουργική πτυχή και η εσωτερική πετσέτα τις καθιστούν την ιδανική επιλογή για κλινικές εργασίες. Διαθέτουν κλείσιμο με velcro στο λαιμό.



30.D2171.00	Μοντέλο ποδιάς Special Plus με χειρουργική πτυχή και πετσέτα διπλωμένη προς τα επάνω σε χαρτί ιατρικής χρήσης (μήκος: 112 cm) M	12 τμχ.
30.D2172.00	Μοντέλο ποδιάς Special Plus με χειρουργική πτυχή και πετσέτα διπλωμένη προς τα επάνω σε χαρτί ιατρικής χρήσης (μήκος: 115 cm) L	12 τμχ.

Isolation - ποδιές από μη υφασμένο υλικό

Οι ποδιές απομόνωσης της Omnia είναι ιδανικές για σύντομες διαδικασίες ρουτίνας, όπως η απομάκρυνση οδοντικής πλάκας με ξέστρο ή ως συμπλήρωμα στην προστασία των ασθενών και τη μόνωση από παθογόνα. Παρέχονται με ελαστικές μανσέτες και είναι ένα μέγεθος.



30.D1004.00	Ποδιά με λάστιχο (μήκος: 120 cm)	πράσινο	50 τμχ.
30.D1307.00	Ποδιά με λάστιχο (μήκος: 120 cm)	μπλε	50 τμχ.

Γυαλιά προστασίας

Τα Omnishield είναι ελαφριά, διαφανή πλαστικά γυαλιά με πλαϊνά προστατευτικά, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη διασφάλιση της απόλυτης προστασίας χωρίς παρεμβολή στο οπτικό πεδίο.

Αυτό το αξεσουάρ είναι απολύτως απαραίτητο στις οδοντιατρικές διαδικασίες.



30.M0245.00

Καλύμματα ερεισικέφαλου

Καλύμματα ερεισικέφαλου από αδιάβροχο και απορροφητικό προστατευτικό υλικό NWF.

20.O1301.00	Στρογγυλό απορροφητικό κάλυμμα ερεισικέφαλου \varnothing 28 cm με λάστιχο	πράσινο	200 τμχ.
20.O1300.00	Στρογγυλό απορροφητικό κάλυμμα ερεισικέφαλου \varnothing 28 cm με λάστιχο	λευκό	200 τμχ.



Καλύμματα καθίσματος/πλάτης

Για την εξασφάλιση υγιεινών συνθηκών τόσο για το ιατρικό προσωπικό όσο και για τους ασθενείς, η Omnia σχεδίασε αδιάβροχα προστατευτικά τα οποία παρέχουν ένα πραγματικό φράγμα για τα καθίσματα και τα καλύμματα της οδοντιατρικής καρέκλας, καθώς και για το κάθισμα του χειρουργού.



20.00041.00	Καλύμματα καθίσματος/πλάτης καθολικού μεγέθους	λευκό	15 τμχ.
10.00042.00	Καλύμματα καθίσματος/πλάτης καθολικού μεγέθους	πράσινο	15 τμχ.
10.00112.00	Κάλυμμα πλάτης καθολικού μεγέθους	πράσινο	30 τμχ.

Καλύμματα λαβής προβολέα



20.01091.00	Στρογγυλό κάλυμμα λαβής ø 17 cm με λάστιχο	λευκό	120 τμχ.
--------------------	--	-------	----------

Ιατρικά περιβλήματα

Το Tublex είναι ένα περιβλήμα μίας χρήσης, που έχει σχεδιαστεί για την κάλυψη των σωληνών αναρρόφησης και την αποτροπή μόλυνσης.

Η ειδική κόλλα στο ακραίο τμήμα του χρησιμεύει για τη στερέωση.

30.00001.00	Tublex αυτοκόλλητο κάλυμμα σωληνώσεων μήκους 31 cm	500 τμχ.
30.00002.00	Tublex αυτοκόλλητο κάλυμμα σωληνώσεων μήκους 90 cm	250 τμχ.
30.00006.00	Tublex 1, ιδανικό φράγμα για σωλήνες και στροβίλους - 4,5x45 cm (σε ρολό)	250 τμχ.
30.00007.00	Tublex 2, ιδανικό φράγμα για σύριγγες αέρα/ νερού και σωληνώσεις σύνδεσης - 5,5x45 cm (σε ρολό)	250 τμχ.



Περιβλήματα για εργαλεία χειρός και σύριγγες αέρα-νερού

Το κάλυμμα Omnitex U (γενικής χρήσης) ενδείκνυται για την προστασία στροβίλων, μικρομετέρ, γωνιακών χειρολαβών, ξέστρων απομάκρυνσης οδοντικής πλάκας, ηλεκτρικών νυστεριών κ.λπ.

Το κάλυμμα Omnitex C (κωνικό) ενδείκνυται για την προστασία συριγγών αέρα-νερού, σωληνίσκων αναρρόφησης, κ.λπ.



30.Z0010.00	Περιβλημα γενικής χρήσης Omnitex U - Χωρίς λάτεξ	πράσινο	500 τμχ.
30.Z0011.00	Κωνικό περίβλημα Omnitex C - Χωρίς λάτεξ	πράσινο	500 τμχ.
30.Z0131.00	Κωνικό περίβλημα Omnitex C - Χωρίς λάτεξ	λευκό	500 τμχ.
30.Z0130.00	Περιβλημα γενικής χρήσης Omnitex U - Χωρίς λάτεξ	λευκό	500 τμχ.

Κιτ μηχανικής έκπλυσης

Σύστημα σωλήνα με συσκευή διάτρησης, τροχίσκο ελέγχου ροής και ενσωματωμένη περισταλτική αντλία.

Το τελικό μπλε άκρο συνδέει το σύστημα σωλήνα στο εργαλείο χειρός ευκολότερα, επιτρέποντας τη σύνδεση όλων των συστημάτων σωλήνα μας με όλες τις βελόνες ψύξης των διαφόρων εργαλείων χειρός που συχνά έχουν διαφορετικές διαμέτρους.

32.F1201.00	Σετ έκπλυσης	1/2 Y	Σωλήνωση έκπλυσης για τα χειρουργικά συστήματα NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision, Vario Surg, Kyocera Implantor Neo, Aseptico Aeu 6000 series, Aseptico Aeu 7000 series, Bonart Piezo
32.F1204.00	Σετ έκπλυσης	1/2 Y	Nobel Biocare80/ W&H Implantmed/ Implant Med νέο σχέδιο 2005/ Implantmed SI 923/ Astratech Implant SI 923/ Surgical Motor System/ Ace/Strauman/InnovaCorp. 3I/ Centerpulse/ Lifecore/ DU 900/FRIOS® UNIT S/ FRIOS® UNIT S/I, Drilltech/ Osseoset 100/ Osseoset 200/Osseocare

Essentialline
by Omnia



32.F1201.00



32.F1204.00



Light Sleeves for T-Style Handle

Διαφανή πλαστικά “μανίκια”, μιας χρήσεως, για χειρολαβές προβολών τύπου T.

Είναι σχεδιασμένα για εύκολη τοποθέτηση και δεν πέφτουν κατά τη χρήση.

Διαστάσεις: 10 cm x 14,5 cm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί-διανομέας 500 τεμαχίων

Chair Sleeve

Διαφανές πλαστικό “μανίκι” για τη ράχη της οδοντιατρικής καρέκλας.

Καλύπτει ολόκληρη τη ράχη της οδοντιατρικής καρέκλας και εμποδίζει τη διασταυρούμενη μόλυνση από τα σταγονίδια των σπρέι και από τα πιτσιλίσματα.

Επίσης προστατεύει την καρέκλα από την πιθανότητα κάποιας φθοράς της από τα απολυμαντικά επιφανείας.

Γλιστράει εύκολα και όταν τοποθετείται και όταν αφαιρείται.

Διαστάσεις: 70 cm x 61 cm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό 225 τεμαχίων

Digital Sensor Sleeve

“Μανίκι” προστασίας για τον αισθητήρα της ψηφιακής ακτινογραφίας.

Διατίθεται σε 2 βολικά μεγέθη:

- **Μικρό:** 3,49 x 20,96 cm
- **Μεγάλο:** 4,29 x 21,59 cm

Χρώμα: διαφανές.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί-διανομέας 500 τεμαχίων, σε κάθε μέγεθος

X-Ray Sleeves

Διαφανή πλαστικά “μανίκια” προστασίας για τις περισσότερες ακτινογραφικές κεφαλές.

Εμποδίζουν τη διασταυρούμενη μόλυνση από τα σταγονίδια των σπρέι και τα πιτσιλίσματα.

Προστατεύουν επίσης από την πιθανή φθορά της κεφαλής από απολυμαντικά επιφανείας.

Δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της κεφαλής.

Διαστάσεις: 38 cm x 66 cm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί-διανομέας 250 τεμαχίων

Barrier Films

Φιλμ προστασίας επιφανειών, με ελαφρύ αυτοκόλλητο.

Χρώματα: διαφανές και μπλε.

Διαστάσεις φιλμ: 10 cm x 15 cm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό 1.200 φύλλων

Tray Sleeves


Διαφανή πλαστικά «μανίκια», μιας χρήσεως, για δίσκους εργαλείων / ορθοδοντικών αγκίστρων.

Διπλώνουν στο τέλος τους για καλύτερη εφαρμογή.

Εμποδίζουν τη διασταυρούμενη μόλυνση.

Απλά αφαιρείτε το καθένα μετά από κάθε ασθενή και το αντικαθιστάτε.

Διατίθενται σε 4 βολικά μεγέθη για να προσαρμόζονται στους περισσότερους δίσκους.

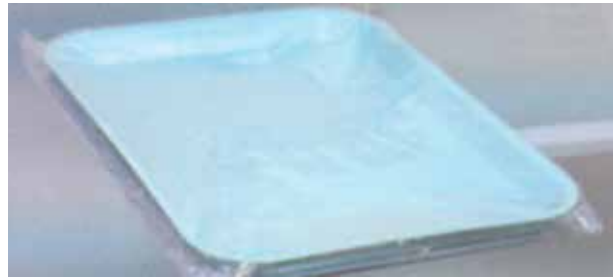

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μεγέθη	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
27 x 36 cm	Κουτί-διανομέας 500 τεμαχίων
19 x 27 cm	
30 x 37 cm	

Syringe Sleeves

Διαφανή πλαστικά «μανίκια», μιας χρήσεως, για αερο-υδροσύριγγες, χειρολαβές υψηλών/ χαμηλών ταχυτήτων, χειρολαβές ξέστρων υπερήχων και χειρολαβές αεροαποτριβής.

Χωρίς άνοιγμα, διαφανή.

Διαστάσεις: 6,4 cm x 25,4 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί-διανομέας 500 τεμαχίων



Comfort Plus® Premium Saliva Ejector


Η ηπιότερη σιελαντλία.
Αναρροφή υγρά, όχι ιστό.

Διατίθεται και με άρωμα τσιχλόφουσας και μέντας.

- Πατενταρισμένο σχέδιο άκρου το οποίο μειώνει τη δυσφορία του ασθενή
- Βελτιώνει την απομάκρυνση υγρών
- Ελαχιστοποιεί τον τραυματισμό του στοματικού βλεννογόνου
- Εμποδίζει το μπλοκάρισμα της αναρρόφησης από τους ιστούς



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Comfort Plus λευκή 100 τεμάχια
Comfort Plus λευκή/ροζ 100 τεμάχια με άρωμα τσιχλόφουσας
Comfort Plus λευκή/πράσινη 100 τεμάχια με άρωμα μέντας

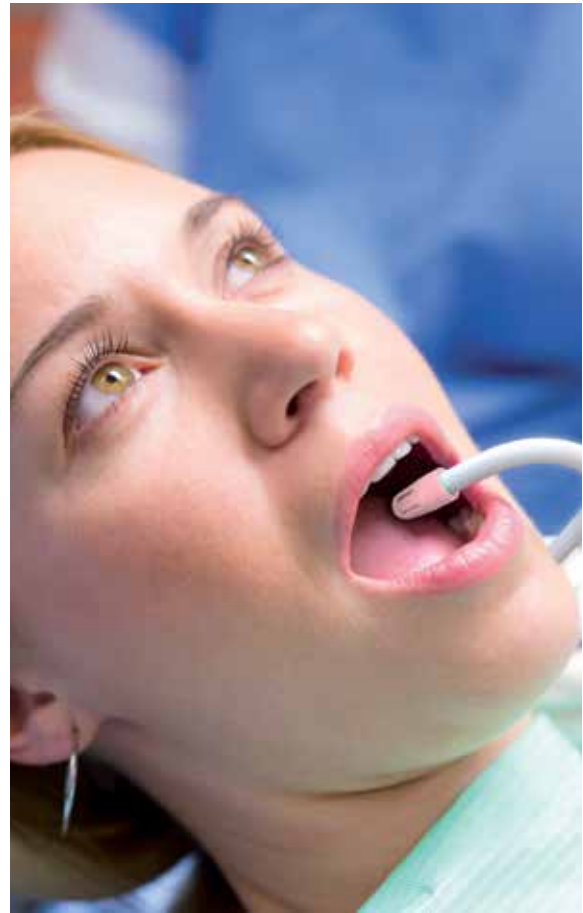

Sterilization Pouches Self-Sealing

Σακούλες για την αποστείρωση εργαλείων στο αυτόκαυστο.

Κλείνουν με αυτοκόλλητο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	
Sterilization Pouches Self-Sealing	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
6 x 10 cm	200 τεμ.
7 x 23 cm	200 τεμ.
8 x 23 cm	200 τεμ.
9 x 13 cm	200 τεμ.
9 x 23 cm	200 τεμ.
11 x 28 cm	200 τεμ.
13 x 25 cm	200 τεμ.
19 x 33 cm	200 τεμ.
25 x 38 cm	100 τεμ.
30 x 46 cm	100 τεμ.



**4+1
δωρό**

Ultra™ Earloop with SecureFit® Technology

Μάσκες με τεχνολογία SecureFit®.

- Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Βακτηριδίων =99,9% στα 3 μ.
- Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Σωματιδίων =99,8% στα 0,1 μ.
- Πατενταρισμένο σχέδιο με αλουμινένιο έλασμα κάτω από το πηγούνι για σφικτή, εξατομικευμένη εφαρμογή
- Ανθεκτικό στα υγρά, εσωτερικό στρώμα
- Ανθεκτικό στα υγρά, εξωτερικό στρώμα
- Εξαιρετικά μακρύ αλουμινένιο έλασμα μύτης
- Χωρίς λάτεξ
- Χρώμα: μπλε

ASTM ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Ιδανικό για διαδικασίες όπου παράγονται μεγάλα έως μέτρια ποσά υγρών, σπρέι και/ή αεροζόλ.

Συμφωνεί με EN 14683 Rating - Type IIR Standard



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί 50 τεμαχίων

Procedural Earloop with SecureFit® Technology

Μάσκες με τεχνολογία SecureFit®.

- Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Βακτηριδίων =99,9% στα 3 μ.
- Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Σωματιδίων =99,7% στα 0,1 μ.
- Πατενταρισμένο σχέδιο με αλουμινένιο έλασμα κάτω από το πηγούνι για εξατομικευμένη εφαρμογή
- Ανθεκτικό στα υγρά, εξωτερικό στρώμα
- Ανθεκτικό στα υγρά, λευκό εσωτερικό στρώμα
- Εξαιρετικά μακρύ αλουμινένιο έλασμα μύτης
- Χωρίς λάτεξ
- Χρώμα: μπλε, ροζ

ASTM ΕΠΙΠΕΔΟ 2

Ιδανικό για διαδικασίες όπου παράγονται μέτρια έως μικρά ποσά υγρών, σπρέι και/ή αεροζόλ.

Συμφωνεί με EN 14683 Rating - Type IIR Standard



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί 50 τεμαχίων

Isofluid® Earloop with SecureFit® Technology

Μάσκες με τεχνολογία SecureFit®.

- Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Βακτηριδίων =98,4% στα 3 μ.
- Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Σωματιδίων ≥95% στα 0,1 μ.
- Πατενταρισμένο σχέδιο με αλουμινένιο έλασμα κάτω από το πηγούνι για εξατομικευμένη εφαρμογή
- Ανθεκτικό στα υγρά, εξωτερικό στρώμα
- Λευκό εσωτερικό στρώμα
- Εξαιρετικά μακρύ αλουμινένιο έλασμα μύτης
- Χωρίς λάτεξ
- Χρώμα: μπλε

ASTM ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Ιδανικό για διαδικασίες όπου παράγονται μικρά ποσά υγρών, σπρέι και/ή αεροζόλ.

Συμφωνεί με EN 14683 Rating - Type II Standard



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί 50 τεμαχίων

Isofluid Fogfree with Splash Visor


Μάσκες για εργασίες όπου παράγονται μικρά ποσά υγρών, σπρέι και αεροζόλ.

Έχουν προστατευτική μεμβράνη στην περιοχή των ματιών.

Δεν περιέχουν latex.

Χρώμα: μπλε

ASTM ΕΠΙΠΕΔΟ 1

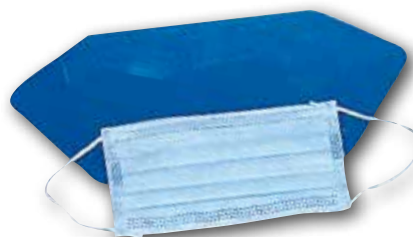

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25 τεμάχια

Patient Safety Mask with Shield

Μάσκα για τον ασθενή, με ασπίδα προστασίας των ματιών.

- Καλύπτει τα μάτια και τη μύτη του ασθενή, χωρίς να εμποδίζει την όρασή του
- Είναι ανθεκτική στα υγρά
- Δεν έχει latex

Χρώμα: λευκό.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25 τεμάχια

Cotton Filled Dental Sponges

Γάζες με ίνες 100% αγνού βαμβακιού
στο εσωτερικό τους.

Διαστάσεις: 5x5 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πακέτο 200 τεμαχίων



Non-Woven 4-Ply Sponges

Γάζες μη πλεγμένες, 4 φύλλων.

Διαστάσεις: 5x5 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πακέτο 200 τεμαχίων



8-Ply Gauze Sponges

Γάζες 8 φύλλων.

Διαστάσεις: 5x5 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πακέτο 200 τεμαχίων



Perfecto Napkins

Πετσέτες ασθενών από αγνή κυτταρίνη με ένα φύλλο πολυαιθυλενίου.

Είναι εξαιρετικά απορροφητικές και αδιάβροχες.

Είναι ανθεκτικές στο σκίσιμο.

Χρώματα: Λευκό, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, ροζ, ροδακινί, μπλε, μπλε της Μεσογείου, γαλάζιο, λιλά, ανοικτό πράσινο.

Διαστάσεις: 33x45 cm.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500 τεμάχια σε ένα χρώμα

Perfecto Bibs

Πετσέτες ασθενών σε διάτρητο ρολό, υψηλής απορροφητικότητας κυτταρίνη επικαλυμμένη από τη μία πλευρά με πολυαιθυλένιο.

Έχουν λωρίδες δεσίματος στο λαιμό του ασθενή.

Διαστάσεις: 50 x 60 cm.

Χρώματα: Λευκό, πράσινο, μπλε, λιλά, πορτοκαλί, ροζ, κίτρινο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

80 τεμάχια ανά ρολό

Perfecto Napkin Dispenser

Θήκη - διανομέας πετσετών.

Κατασκευάζεται από πλεξιγκλάς και έχει καπάκι.




Perfecto Ejectors

Μη αποστειρωμένη σιελαντλία κατασκευασμένη από μη τοξικό PVC.

Σιελαντλία με σύρμα στο εσωτερικό της για να διατηρεί το σχήμα της και ειδικό σχήμα του τμήματός της που φιλτράρει ώστε να επιτρέπει μια εξαιρετική αναρρόφηση χωρίς να ερεθίζει το βλεννογόνο.

Χρώματα: διαφανές, πράσινο, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, μωβ και πορτοκαλί.

Μήκος: 15 cm.

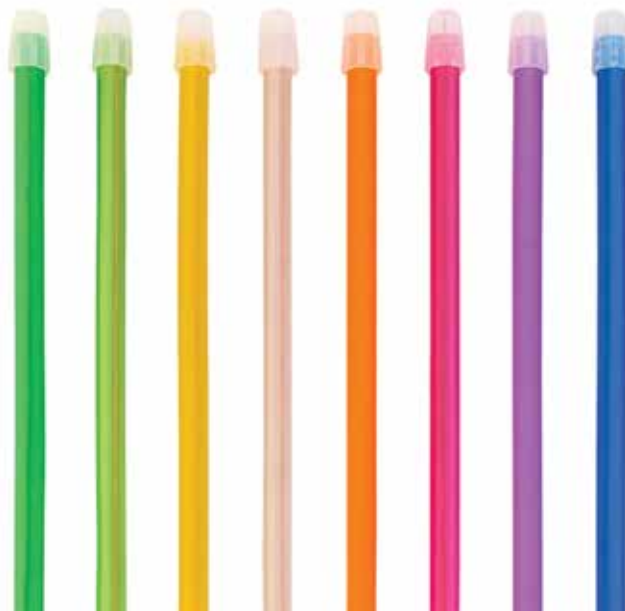

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακούλα των 100 τεμαχίων ενός χρώματος

Perfecto Cups

Κύπελλα μιας χρήσης, πολύ ανθεκτικά.

Χρώματα: Σκούρο πράσινο, ανοικτό πράσινο, μπλε, λευκό, κίτρινο, ροζ, μπλε της Μεσογείου, πορτοκαλί, λιλά.

Περιεχόμενο: 180 cc.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

1.000 τεμάχια σε κάθε ένα από τα διαθέσιμα χρώματα.

Mix Color

1.000 τεμάχια. Περιέχει 200 κύπελλα σε καθένα από τα χρώματα: πορτοκαλί, λιλά, μπλε, πράσινο, κίτρινο.

Perfecto Rolls

Πολύ απορροφητικά τούμπια βαμβακιού.

Κατασκευάζονται από αγνό, μη χλωρωμένο βαμβάκι μακράς ίνας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΑΚΟΥΛΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
No 1 Ø 8 mm	300 g
No 2 Ø 10 mm	300 g
No 3 Ø 12 mm	300 g



Perfecto Drapes

Αποστειρωμένα καλύμματα.

Κατασκευάζονται από ένα στρώμα μη πλεγμένου υφάσματος κι ένα στρώμα PE.

Είναι απορροφητικά και αδιάβροχα.

Διατίθενται ατομικά συσκευασμένα σε αποστειρωμένες σακούλες, για μέγιστη ασφάλεια.

Χρώμα: Ανοικτό γαλάζιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50 x 50 cm	50 τεμάχια
50 x 75 cm	50 τεμάχια
75 x 100 cm	50 τεμάχια



Perfecto Chair Cover

Καλύμματα έδρας, μιας χρήσης.

Πρακτικά καλύμματα έδρας κατασκευασμένα από μαλακό, υποαλλεργικό, μη υφασμένο πανί, με ελαστικά πρακτικά κορδόνια τόσο στο κάλυμμα του καθίσματος όσο και στο κάλυμμα της πλάτης.

Χρώματα: άσπρο, μπλε, πράσινο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25 σετ καλυμμάτων πλάτης-καθίσματος & ερεισικήφαλου



Perfecto Headrest Cover

Μη αποστειρωμένα, μιας χρήσης καλύμματα ερεισικήφαλου.

Κατασκευάζονται από ένα φύλλο αδιάβροχου πολυαιθυλενίου στο εσωτερικό τους και ένα απορροφητικό φύλλο κυτταρίνης στην εξωτερική επιφάνειά τους.

Χρώματα: μπλε, σκούρο μπλε, πράσινο, πορτοκαλί, ανοικτό πράσινο, λιλα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
25 x 33 cm	500 τεμάχια



Perfecto Surgical Gown

Χειρουργική ρόμπα.

Άνετη χειρουργική ρόμπα, κατασκευασμένη από υλικό SMS 45g/m².

Σταθεροποιείται με ζώνη μέσης και velcro κλείσιμο στο κολλάρο.

Έχει βαμβακερές μανσέτες.

Είναι υδρο-απωθητική, έχει εξαιρετικές ιδιότητες εξερισμού και αντοχής.

Μεγέθη: M, L.

Χρώμα: γαλάζιο



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

80 τεμάχια σε ένα μέγεθος

Perfecto Elastic Caps

Στρογγυλά σκουφάκια με λάστιχο.

Κατασκευάζονται από TNT 12g/m² και είναι ιδανικά για την κάλυψη των μαλλιών του ασθενή ή του ιατρικού προσωπικού.

Χρώματα: γαλάζιο και πράσινο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100 τεμάχια σε ένα χρώμα

Perfecto Mat

Αντιβακτηριδιακό, απολυμαντικό χαλί που εξασφαλίζει ολοκληρωμένη υγιεινή κατά την είσοδο στο χώρο του χειρουργείου.

Αντιβακτηριδιακό, απολυμαντικό χαλί το οποίο αποτελείται από 30 διαδοχικά φύλλα.

Κάθε φύλλο είναι επικαλυμμένο με μια κολλώδη ουσία που περιέχει βακτηριοκτόνο συστατικό.

Το χαλί στερεώνεται με μια ταινία στο πάτωμα.

Διαστάσεις: 115 x 45 cm

Χρώμα: μπλε



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4 τεμάχια των 30 φύλλων



Perfecto Barrier Film

Φιλμ προστασίας με ελαφριά κόλλα.

Διατίθεται σε ρολό 1.200 φύλλων με διάτρηση και με πρακτικό διανομέα.

Είναι ιδανικό για προστασία επιφανειών και δεν αφήνει κατάλοιπα κατά την αφαίρεσή του.

Χρώμα: μπλε

Διαστάσεις φύλλου: 100 x 150 mm

Συσκευασία: ρολό 1.200 φύλλων



Perfecto Pack Rolls & Pouches

Σακούλες και ρολά για την αποστείρωση των εργαλείων στο αυτόκαυστο.

Κατασκευάζονται από ένα φύλλο φιλμ πολυεστέρα/ πολυπροπυλενίου κι ένα φύλλο χαρτιού ιατρικής βαθμίδας.

Έχουν πάνω τους δείκτες που επιβεβαιώνουν ότι η διαδικασία αποστείρωσης ήταν αποτελεσματική.

Συμφωνούν με όλα τα διεθνή κι ευρωπαϊκά πρότυπα.

Χρώμα: Ανοιχτό γαλάζιο.



PERFECTO



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

50 mm x 200 m

75 mm x 200 m

100 mm x 200 m

150 mm x 200 m

200 mm x 200 m

250 mm x 200 m

300 mm x 200 m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

90 mm x 230 mm

140 mm x 250 mm

190 mm x 330 mm

330 mm x 440 mm

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

200 τεμάχια

200 τεμάχια

200 τεμάχια

200 τεμάχια

Perfecto Tray Paper

Χαρτί – φίλτρο για κάλυψη των αλουμινένιων δίσκων εργαλείων.

Διαστάσεις: 18x28 cm.

Χρώματα: Πράσινο, μπλε, λευκό, κίτρινο, ροζ, πορτοκαλί, λιλά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250 τεμάχια



Perfecto Tray

Μη αποστειρωμένοι, μιας χρήσης δίσκοι εργαλείων, με διαιρέσεις, κατασκευασμένοι από πολυστυρένιο.

Είναι βιοδιασπώμενοι και ανακυκλώσιμοι.

Είναι βολικοί και βοηθούν στην εξοικονόμηση χρόνου καθώς αποφεύγεται η διαδικασία απολύμανσης και αποστείρωσης.

Έχουν σαγρέ αντιολισθητική επιφάνεια.

Διαστάσεις: 28x18 cm.

Χρώματα: λευκό, γαλάζιο, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, λιλά.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

400 τεμάχια σε καθένα από τα χρώματα:
λευκό, γαλάζιο, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, λιλά

Mix Color

400 τεμάχια.

Περιέχει 100 δίσκους σε καθένα από τα χρώματα:
γαλάζιο, πράσινο, κίτρινο και πορτοκαλί.



Easy Ice

Μιας χρήσης σακούλα στιγμιαίου πάγου.

Σακούλα από πολυαιθυλένιο η οποία με τον κατάλληλο χειρισμό παγώνει άμεσα (-4°C).

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.

Μπορείτε να την έχετε οπουδήποτε μπορεί να χρειαστεί: στο σπίτι, το ιατρείο, το γυμναστήριο, το αυτοκίνητο κτλ. Έχει έγκριση CE.

Διαστάσεις: 14 x 18 cm.



20+5
δώρα

DispoGel

Επαναχρησιμοποιήσιμη σακούλα με ζελατίνη που μπορεί να θερμανθεί ή να ψυχθεί.

Πλαστική σακούλα η οποία περιέχει ζελατίνη.

Μπορεί να θερμανθεί ή να ψυχθεί και να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα για θερμό ή ψυχρό επίθεμα.

Τοποθετείται και σε φούρνο μικροκυμάτων.

Έχει έγκριση CE.

Διαστάσεις: 14 x 18 cm.



Cutanplast™ Fast

Αιμοστατικός σπόγγος Ζελατίνης με ταχύτερη και μεγαλύτερη απορρόφηση.

Το Cutanplast® Fast είναι ένα προϊόν Ζελατίνης Ζωικής προέλευσης.

Χάρη στην ιδιαίτερη δομή του μπορεί, χρησιμοποιούμενο στεγνό, να απορροφήσει μια μεγάλη ποσότητα υγρών.

Έτσι, το Cutanplast® Fast μπορεί να ελέγξει και να σταματήσει τις περισσότερες αιμορραγίες που δύσκολα διαχειρίζονται με παραδοσιακές αιμοστατικές μεθόδους, κατά τις οδοντιατρικές διαδικασίες.

- Ταχύτερος από άλλους σπόγγους της αγοράς
- 10% περισσότερη απορρόφηση από άλλα όμοια προϊόντα
- Διατίθεται έτοιμο προς χρήση σε συσκευασία φυσαλίδας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χρόνος αιμόστασης μεταξύ 2-8 λεπτών
- Ρυθμός διάλυσης 2-4 εβδομάδες
- Ο σπόγγος Cutanplast® Fast απορροφά μέσα στο πρώτο λεπτό ποσότητα υγρού ίση με **60 φορές το βάρος του**
- Υψηλή βιοσυμβατότητα
- Ουδέτερο pH καθιστά το προϊόν κατάλληλο να συνδυαστεί με όλες τις φαρμακευτικές ουσίες που πιθανόν να είναι απαραίτητες για το χειρουργείο
- Υψηλή πλαστικότητα τόσο σε στεγνή όσο και σε εμπλουτισμένη με αίμα χρήση, δεν κολλά σε χειρουργικά γάντια
- Προσφέρει καλύτερο έλεγχο της χειρουργικής αιμορραγίας



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί 24 τεμαχίων
(Διαστάσεις σπόγγου ζελατίνης: 10x10x4 mm)

Dental Needles

Βελόνες μιας χρήσης, αποστειρωμένες με οξείδιο του αιθυλενίου και σφραγισμένες με ετικέτα.

Διατίθενται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων στους εξής τύπους:

Πράσινη	30G 0,3 x 16 mm	παιδική
Πράσινη	30G 0,3 x 21 mm	για εμπότιση
Κίτρινη	27G 0,4 x 21 mm	για εμπότιση
Κίτρινη	27G 0,4 x 35 mm	για στελεχειαία



4+1 δώρο ή **10+5** δώρο


NIPRO

D-Vac Depro

Ρύγχη αναρρόφησης, μιας χρήσεως.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100 τεμάχια

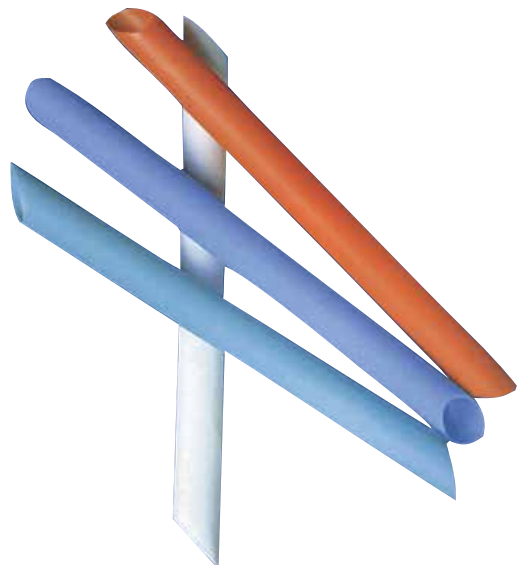

Γάντια Απλά

Γάντια υποαλλεργικά, ελαφρά πουδραρισμένα.

Προσφορά

Αγοράζοντας
10 πακέτα

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πακέτο των 100 τεμαχίων

Γάντια χωρίς πούδρα

Έχουν στην επιφάνειά τους μικροσκοπικούς κόμπους για καλύτερη συγκράτηση των εργαλείων.

Είναι ειδικά επεξεργασμένα ώστε να γλιστρούν εύκολα τα χέρια στο εσωτερικό τους και έτσι φοριούνται πολύ εύκολα.

Προσφορά

Αγοράζοντας
10 πακέτα

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πακέτο των 100 τεμαχίων

DENTASEPT® Tri-Enzymatic

Καθαριστικό & απολυμαντικό οδοντιατρικών εργαλείων πριν την αποστείρωση

Σκεύασμα τριπλού ενζύμου: Πρωτεάση / Λιπάση / Αμυλάση

- Δεν περιέχει χλωρίδια
- 1 λίτρο παρέχει 200 λίτρα διαλύματος έτοιμου προς χρήση
- Αποτελεσματικό σε μόλις 7 λεπτά
- Δραστικό κατά των ελυτροφόρων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λουτρά υπερήχων
- Ουδέτερο pH, όταν είναι αραιωμένο, συμβατό με ένα ευρύ φάσμα υλικών



**3+1
δωρο**

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο* - Σύμφωνα με EN 13727/EN 14561*	0.5%	5 λεπτά
Μυκητοκτόνο* (Ζυμομύκητες) - Σύμφωνα με EN 13624/EN 14562*	0.5%	5 λεπτά
Ενεργό κατά ελυτροφόρων ιών* - Σύμφωνα με EN 14476/EN 17111*	0.5%	7 λεπτά

* Ακάθαρτες συνθήκες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Προπιονικό τεταρτοταγές αμμώνιο, διγλυκονική χλωρεξιδίνη, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, σύμπλοκο ενζύμων (πρωτεάση, λιπάση και αμυλάση), άρωμα, χρωστική, έκδοχα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

- Φιάλη 1 λίτρου με ενσωματωμένο δοσομετρητή
- Δοχείο 5 λίτρων με δοσομετρική αντλία

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

DENTASEPT® Special Rotative

Απορρυπαντικό απολυμαντικό για φρέζες, περιστροφικά ρεγαλεία και εργαλεία ριζικού σωλήνα, πριν από την αποστείρωση.

- Έτοιμο προς χρήση
- Συμβατό με μεγάλο εύρος υλικών: νικέλιο, τιτάνιο, καρβίδιο βολφραμίου, αλουμίνιο κ.λπ.
- Χρόνος επαφής από 5 λεπτά
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λουτρό υπερήχων



**3+1
δωρό**

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο* - Σύμφωνα με EN 13727/EN 14561	5 λεπτά
Μυκητοκτόνο* (ζυμομύκητες) - Σύμφωνα με EN 13624/EN 14562	5 λεπτά
Κατά του μυκοβακτηρίου της φυματίωσης* - Σύμφωνα με EN 14348/EN 14563	60 λεπτά
Αποτελεσματικό κατά ελυτροφόρων ιών* - Σύμφωνα με EN 14476/EN 17111	15 λεπτά

* Ακάθαρτες συνθήκες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ανθρακικό και όξινο ανθρακικό Ν, Ν-διεκυλ-Ν, Ν-διμεθυλαμμώνιο, μη ιοντικά επιφανειοδραστικά, απομονωτικά μέσα, άρωμα, χρωστική και έκδοχα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 2 λίτρων

ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ

DENTASEPT® Aspiration AF+

Καθαρισμός και απολύμανση συστημάτων αναρρόφησης, διαχωριστικών αμαλγάματος και πτυελοδοχείων

Ένα υγρό συμπυκνωμένο υψηλής απόδοσης σχεδιασμένο για τον καθημερινό καθαρισμό και την απολύμανση όλων των τύπων συστημάτων αναρρόφησης, διαχωριστών αμαλγάματος και πτυελοδοχείων.

- Μη αφριστικό
- Πολύ οικονομική αραίωση 2% - 5 λίτρα παρέχουν 250 λίτρα διαλύματος έτοιμου προς χρήση
- Αποτελεσματικό από μόλις 15 λεπτά - ενεργό ενάντια σε όλους τους ελυτροφόρους ιούς



ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο* - Σύμφωνα με EN 13727/EN 14561	1%	15 λεπτά
Μυκητοκτόνο* (ζυμομύκητες) - Σύμφωνα με EN 13624/EN 14562	1%	15 λεπτά
Κατά του μυκοβακτηρίου της φυματίωσης* - Σύμφωνα με EN 14348/EN 14563	1,6%	60 λεπτά
Ενεργό κατά ελυτροφόρων ιών* - Σύμφωνα με EN 14476/EN 17111	2%	15 λεπτά

* Ακάθαρτες συνθήκες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ν-(3-αμινοπροπυλ)-Ν-δωδεκυλπροπανο-1,3-διαμίνη, τασιενεργά, παράγοντας απομόνωσης, χρωστική και έκδοχα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 5 λίτρων με δοσομετρική αντλία

DENTASEPT® SH PRO

Απολυμαντικό καθαριστικό προϊόν για καθαρισμό κι απολύμανση ιατρικών μη επεμβατικών και χωρίς δυνατότητα εμβάπτισης συσκευών στο οδοντιατρείο.

- Για επιφάνειες ευαίσθητες στην αλκοόλη
- Χωρίς αλκοόλη, άρωμα και χρώμα
- Ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα και βέλτιστος χρόνος επαφής
- Η φόρμουλα εξασφαλίζει συμβατότητα με ένα ευρύ φάσμα υλικών, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών (π.χ. πολυανθρακικό, πλεξιγκλάς)
- Πυκνός αφρός για καλύτερη πρόσφυση
- pH 6



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Χλωριούχο διδεκυλδιμεθυλαμμώνιο, έκδοχα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιάλη ψεκασμού 750 ml

DENTASEPT® SH PRO Wipes

Έτοιμα προς χρήση μαντηλάκια για τον καθαρισμό και την απολύμανση ιατρικών συσκευών στο οδοντιατρείο.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συσκευές ευαίσθητες στο οινόπνευμα. Η φόρμουλά τους εξασφαλίζει συμβατότητα με ένα ευρύ φάσμα υλικών, συμπεριλαμβανομένων πολυμερών (π.χ. πολυανθρακικό, πλεξιγκλάς)

- Αποτελεσματική φόρμουλα χωρίς άρωμα και βαφή
- Καθαρισμός και απολύμανση σε ένα βήμα
- 100% βιοδιασπώμενα μαντηλάκια βισκόζης
- Περιέχουν αντιμικροβιακό ευρέος φάσματος και με σύντομο χρόνο επαφής
- pH 6



2+1
δωρο

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διάλυμα εμποτισμού: χλωριούχο διδεκυλδιμεθυλαμμώνιο, έκδοχα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακούλα 100 τεμαχίων (180 x 200mm)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ DENTASEPT® SH PRO και DENTASEPT® SH PRO Wipes

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ DENTASEPT® SH PRO και DENTASEPT® SH PRO Wipes	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο* - Σύμφωνα με EN 16615 (2 min), EN 13727 (1 min)	2 λεπτά
Μυκητοκτόνο* (Ζυμομύκητες) - Σύμφωνα με EN 13624, EN 16615	2 λεπτά
Κατά του μυκοβακτηρίου της φυματίωσης* - Σύμφωνα με EN 14348	60 λεπτά
Ενεργό κατά ελυτροφόρων ιών* - Σύμφωνα με EN 14476	1 λεπτό
Ενεργό κατά του Polyomavirus SV 40* - Σύμφωνα με EN 14476	5 λεπτά
Ενεργό κατά του Rotavirus* - Σύμφωνα με EN 14476	30 δευτ.
Ιοκτόνο περιορισμένου φάσματος* - Σύμφωνα με EN 14476	30 λεπτά
Adenovirus	30 λεπτά
Norovirus (MNV)	15 λεπτά

* Ακάθαρτες συνθήκες

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

DENTASEPT® SPRAY 60 PRO

Γρήγορη απολύμανση προηγουμένως καθαρισμένων, μη βυθιζόμενων, μη επεμβατικών, ανθεκτικών στην αλκοόλη, ιατρικών συσκευών κι εξοπλισμού στο οδοντιατρείο.

- Σύνθεση με βάση την Αλκοόλη
- Ευρύ φάσμα δραστηριότητας σε σύντομο χρόνο επαφής
- Δεν αφήνει ίχνη κατά το στέγνωμα
- Ευχάριστο άρωμα



**2+1
δωρο**

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Αιθανόλη, Ν,Ν-Διτεκυλ-Ν-μεθυλπολυ(οξυαιθυλ) προπιονικό αμμώνιο, άρωμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

- Φιάλη ψεκασμού 1 L
- Δοχείο 5 L

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο* - Σύμφωνα με EN 13697/EN 13727	30 δευτ.
Μυκητοκτόνο* (Ζυμομύκητες) - Σύμφωνα με EN 13697/EN 13624	30 δευτ.
Μυκητοκτόνο* (Fungi) - Σύμφωνα με EN 13697/EN 13624	5 λεπτά
Κατά του μυκοβακτηρίου της φυματίωσης* - Σύμφωνα με EN 14348	30 δευτ.
Μυκοβακτηριοκτόνο* - Σύμφωνα με EN 14348	5 λεπτά
Ενεργό κατά ελυτροφόρων ιών* - Σύμφωνα με EN 14476/EN 16777	30 δευτ.
Ιοκτόνο περιορισμένου φάσματος* - Σύμφωνα με EN 14476/EN 16777	5 λεπτά
Adenovirus	30 δευτ.
Norovirus (MNV)	5 λεπτά

* Καθαρές συνθήκες

ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ

DENTASEPT® Glycériné

Απαλό σαπούνι χεριών σχεδιασμένο για συχνή χρήση.

- Εμπλουτισμένο με ενυδατική γλυκερίνη και μαλακτικούς παράγοντες
- Κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες
- Ουδέτερο pH
- Χωρίς άρωμα και χρώμα
- Δερματολογικά ελεγμένο
- Εύκολο ξέπλυμα



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Νερό, γλυκερίνη, λαυροαμφοδιοεξικό δινάτριο, λαυρυλοθειικό νάτριο, PEG- 4 κραμβιδαμίδη, εξυλενογλυκόλη, PEG-200 υδρογονωμένο γλυκερυλικό παλαμικό άλας, δινάτριο PEG-5 λαυρυλοκτιρικό σουλφοηλεκτρικό νάτριο, βενζυλοαλκοολικό οξύ, βενζοϊκοαλκοολικό οξύ, συνοεξικό νάτριο, αιθεροθειικό νάτριο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιάλη 1 L

Ormament Putty

Σιλικόνη συμπύκνωσης, βασισμένη στην πολυσιλοξάνη, στοκώδους σύστασης.

Για πρώτο αποτύπωμα σε αποτύπωση δύο φάσεων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Βάζο 1.500 g



Ormamax Light

Σιλικόνη συμπύκνωσης, βασισμένη στην πολυσιλοξάνη, λεπτόρρευση.

Για διορθωτικό αποτύπωμα σε αποτύπωση δύο φάσεων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληνάριο των 150 ml



Ormactivator Gel

Καταλύτης για τα δύο προηγούμενα υλικά.
Διατίθεται σε ζελέ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληνάριο των 60 ml



Προσφορά

Αγοράζοντας
Παχύρρευστο
+
Λεπτόρρευστο
+
ΚΑΤΑΛΥΤΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

Algeniux

Κορυφαίας ποιότητας αλγινικό με νέα και ραφινάριση σύνθεση, για αναπαραγωγή λεπτομερειών υψηλού επιπέδου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ISO 1563
- Διάρκεια ζωής: 6 χρόνια
- Εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων που επιτρέπει τη δημιουργία εκμαγείου από το αποτύπωμα μετά από 5 μέρες (εφόσον αυτό αποθηκευτεί σωστά σε σφραγισμένο δοχείο)
- Υψηλή αντοχή στη συμπίεση κι επαναφορά μετά την παραμόρφωση 97,1%
- Algeniux ταχείας πήξης: Χρόνος ανάμειξης 35", χρόνος εργασίας 1'30", χρόνος πήξης 2'30" (στους 23°C).
- Σταθεροποιημένη υποαλλεργική φόρμουλα
- Άρωμα μέντα, τελικό χρώμα ροζ



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν δημιουργεί σκόνη, για ασφαλή εργασία κι ευκολία καθαρισμού
- Έχει σύντομο χρόνο εφύγρανσης για να αποκτήσει ομαλή και πλαστική σύσταση, για εύκολη ανάμειξη
- Παρουσιάζει εξαιρετική συμβατότητα γύψων
- Snap-setting για άνεση του ασθενή
- Ελεύθερο καδμίου και μολύβδου. Εξαιρετικά βιοσυμβατό
- Πιστοποιημένο από ΝΙΟΜ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Algeniux Fast Setting, Σακούλα 453 g

Alginkid

Αλγινικό το οποίο πήζει πολύ γρήγορα, για ορθοδοντικά αποτυπώματα.

Η εξαιρετική του σταθερότητα διαστάσεων επιτρέπει τη δημιουργία εκμαγείου από το αποτύπωμα μετά 5 μέρες (εφόσον αυτό αποθηκευτεί σωστά σε σφραγισμένο δοχείο).

Το Alginkid ξεπερνά τις απαιτήσεις ISO 1563: 1990 και έχει πιστοποίηση CE και ΝΙΟΜ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ γρήγορος χρόνος πήξης και ευχάριστη γεύση για την άνεση των νεαρών ασθενών
- Μικρός χρόνος διαβροχής
- Εξαιρετική συμβατότητα γύψων
- Πολύ υψηλή αντοχή στη θλίψη και επαναφορά από παραμόρφωση
- Χωρίς κάδμιο και μολύβδο
- Εξαιρετική βιοσυμβατότητα

5+1
δωρό



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γεύση: Φρούτο

Χρώμα: Κίτρινο

Χρόνος πήξης:

- 1' 25" στους 23°C με πόσιμο νερό
- 1' 50" στους 23°C με απεσταγμένο νερό


Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακούλα 453 g

Spatulas

Πλαστικές σπάτουλες για αλγινικά.

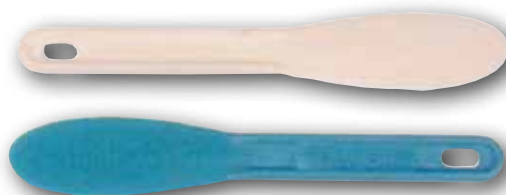

Jet Tooth Shade Acrylic

Αυτοπολυμεριζόμενο ακρυλικό για κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυρών.
Αποτελείται από σκόνη και υγρό.

- Πήζει σε 6-9 λεπτά
- Διατίθεται στις αποχρώσεις:
59/B1, 60/A1, 61/B2, 62/A2, 65/D3, 66/A3, 67/B3, 69/C2, 77/B4, 81/A3.5, 87/A4, C3, C4, D4, ανοικτό κοπτικό, σκούρο κοπτικό, OM1 (λεύκανσης), OM2 (λεύκανσης), διαφανή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

6/1 kit: 6 σκόνες και 1 υγρό

1 φιάλη σκόνης των 45 g, σε καθεμιά από τις αποχρώσεις

1 φιάλη υγρού των 120 ml



Flexacryl

Αυτοπολυμεριζόμενο ακρυλικό για την αναγόμεση των τεχνητών οδοντοστοιχιών στο ιατρείο.

Διατίθεται σε 2 τύπους:

- **Hard** που σκληραίνει αμέσως
- **Soft** που παραμένει μαλακό στο στόμα για 12 μήνες.

Χρώμα: ροζ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100 g σκόνη, 118 ml υγρό και 10 ml Acrylic Primer



Tempo

Αυτοπολυμεριζόμενο ακρυλικό για προσωρινή μαλακή αναγόμεση των οδοντοστοιχιών και για λειτουργικά αποτυπώματα.

Χρώματα: λευκό και ροζ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100 g σκόνη, 118 ml υγρό



Ceivitron

Έτοιμο προς χρήση υλικό για προσωρινή έμφραξη του δοντιού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σκληραίνει με το σάλιο.
Ακόμα και σε μια γρήγορη επαφή με το σάλιο, σκληραίνει καλά
- Δεν ερεθίζει τα ούλα, ούτε τον πολφό
- Τοποθετείται εύκολα χωρίς πόνο και πίεση
- Είναι αδιαπέραστο σε όλους του τύπους φαρμάκων
- Έχει μεγάλη αντοχή στη μάσηση
- Αφαιρείται εύκολα
- **Χρώμα:** λευκό.




ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικό βαζάκι των 30g

3+1
δώρα

Luxator® Forte Elevator

Μοχλός με εξαιρετική αντοχή και εργονομικό σχεδιασμό.

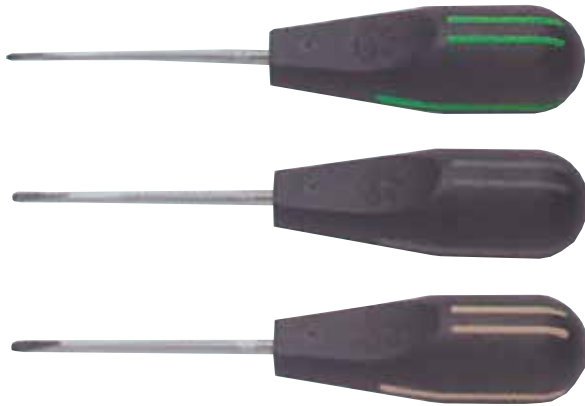

DIRECTA
directadental.com

Luxator® Forte F32C με καμπύλη λεπίδα

Νέος μοχλός με κεκαμμένη λεπίδα 3,2 mm.

Βελτιώνει την πρόσβαση στο προς εξαγωγή δόντι, για ελεγχόμενη κι ασφαλέστερη εκμόχλευση.

Έχει εργονομική λαβή που ελαχιστοποιεί την κόπωση.



Luxator® Root Picker

Εργαλείο που προσφέρει σταθερό πιάσιμο κι αφαίρεση των σπασμένων ριζών και τεμαχίων τους.

Το άκρο του προσφέρει σταθερό κράτημα των θραυσμάτων τα οποία βγάζει προς τα έξω με ασφαλή τρόπο.



Luxator® Periotome

Ένα ειδικού σχεδιασμού χειρουργικό κοπτικό εργαλείο.

Η χρήση του αποτελεί ένα αξιόλογο εναλλακτικό της τραυματικής εξαγωγής με οδοντάγρα και είναι σχεδιασμένο ειδικά ώστε η λεπίδα του να κόβει την περιοδοντική μεμβράνη ενώ απαλά διευκολύνει το δόντι να βγει από το φατνίο.



Το σχήμα και το μέγεθος της λαβής είναι σχεδιασμένο να ελαχιστοποιεί τη δύναμη που χρειάζεται και το άκρο του είναι εξαιρετικά λεπτό ώστε να μπορεί να εισέλθει εύκολα μεταξύ οστού και ρίζας με την ελάχιστη ζημιά.

Το ειδικά επεξεργασμένο Σουηδικό ατσάλι που χρησιμοποιείται στη λεπίδα του Luxator είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και διατηρεί την αντοχή του και την κοπτική του ικανότητα ακόμα και μετά από επαναλαμβανόμενες αποστειρώσεις.

Το Luxator αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο.

Το Luxator διαθέτει και εργαλείο ακονισμού της λεπίδας του.

Κωδ.	Περιγραφή	Χρωματική Κωδικοποίηση	Μέγεθος λεπίδας	Ενδείξεις
L-2S	Ευθεία λεπίδα	Πράσινο	2mm	Ακρορριζικά και/ή μεσοδόντια
L-3C	Κεκαμμένη λεπίδα	Μαύρο	3mm	Γενική χρήση/ Για εκκίνηση
L-3S	Ευθεία λεπίδα	Γκρι	3mm	Μεσοδόντια
L-3CA	Γωνιώδες	Μπλε	3mm	Γλωσσικά και/ή Άπω Γομφίοι
L-3IC	Ανάποδος καμπύλης	Γαλάζιο	3mm	Γενικά, Γλωσσικά και/ή Άπω
L-5C	Καμπύλη λεπίδα	Καφέ	5mm	Μεγάλες ρίζες γομφίων- Γενική χρήση
L-5S	Ευθεία λεπίδα	Καφέ ανοικτό	5mm	Μεσοδόντια
DE3	Διπλής Ακμής/ Ευθύ	Γκρι	3mm/ 1.5mm	Θραυσμένες σε βάθος και τερηδονισμένες ρίζες
DE5	Διπλής Ακμής/ Ευθύ	Καφέ	5mm/ 3mm	Θραυσμένες σε βάθος και τερηδονισμένες ρίζες
L-10	Ακόνι			

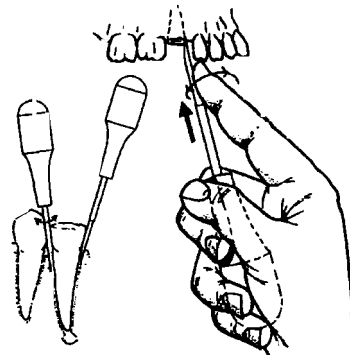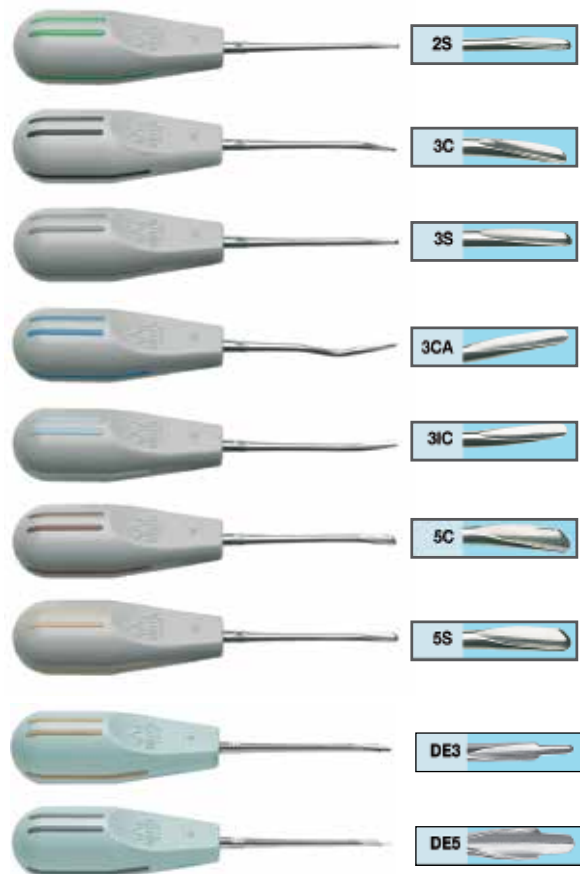

Luxator 3S Titanium

Νέο εργαλείο Luxator Periotome με επικάλυψη τιτανίου.

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι με επικάλυψη τιτανίου.

Η επικάλυψη τιτανίου:

- Κάνει ευκολότερη την είσοδο του εργαλείου στο φατνίο
- Κάνει τη λεπίδα του εργαλείου ανθεκτικότερη και δεν απαιτεί ακόνισμα

Το Luxator 3S Titanium έχει λεπίδα ευθεία, πλάτους 3 mm.



CCS Prophy Paste

Φθοριούχος πάστα στίλβωσης.

Διατίθεται στις εξής χρωματικά κωδικοποιημένες αδρόπτητες:

Μπλε - Αδρόκοκκη για πολύ τραχειά και αποχρωματισμένη αδαμαντίνη. 125 μικρά. Σωληνάριο 60ml/96g.

Πράσινη - Μέτρια για παχύ στρώμα πλάκας και τραχειά, αποχρωματισμένη αδαμαντίνη. 70 μικρά. Σωληνάριο 60 ml/97g.

Κόκκινη - Λεπτόκοκκη για λεπτομερή απομάκρυνση της πλάκας και ελαφρύ αποχρωματισμό. 20 μικρά. Σωληνάριο 60ml/84g.

Κίτρινη - Υπερλεπτόκοκκη για τελική στίλβωση δοντιών και εμφράξεων. Αποδίδει μια λεία επιφάνεια. 2 μικρά. Σωληνάριο 60ml/84g.

Έχει απαλή γεύση μέντας.



ProphyCare™ Prophy Paste Pro

Πάστα που καθαρίζει, στιλβώνει και απευαισθητοποιεί τα δόντια.

- **Διαδικασία ενός βήματος**
Η ίδια πάστα χρησιμοποιείται για αφαίρεση χρωστικών και για τελική στίλβωση. Η καθαριστική της δράση μετατρέπεται σε απαλή στιλβωτική, καθώς κατά τη διαδικασία, οι κόκκοι της διασπώνται σε μικρότερους.
- **Απευαισθητοποίηση**
Περιέχει έναν απευαισθητοποιητικό παράγοντα που κλείνει τα οδοντινοσωληνάκια και ανακουφίζει τα υπερευαίσθητα δόντια. Είναι ιδανική για μετά τη ριζική απόξεση.
- Περιέχει 0,1% φθόριο, που ενισχύει την επαναμεταλλικοποίηση
- Περιέχει καστορέλαιο - ενυδατώνει το ξηρό στόμα
- Δεν διαχωρίζεται, δεν πιτσιλά, δεν υγροποιείται
- Έχει απαλή γεύση μέντας
- Έχει pH 5-6



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληνάριο 60ml/84 g

FixyDap

Κυπελλάκια μιας χρήσης για διανομή της πάστας στίλβωσης.

Έχουν κλιπ στο πλαϊνό τους και **συγκολλητικό στη βάση τους** για να στερεώνονται στο γάντι του οδοντιάτρου ή σε οποιαδήποτε επιθυμητή επιφάνεια.

Χρώμα: Μπλε.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250 τεμαχία

Rondell Blue Disclosing Pellets

Αποκαλυπτικά της οδοντικής πλάκας, βύσματα μπλε, προεμποτισμένα, έτοιμα προς χρήση.

Χρωματίζουν κόκκινη την πλάκα που είναι νεώτερη των 3 ημερών και μπλε την πλάκα που είναι στο στόμα για περισσότερο από 3 ημέρες.




ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Βάζο των 100 τεμαχίων

FenderWedge®

Πλαστική σφήνα με ενσωματωμένο μεταλλικό τοίχωμα για προστασία του διπλανού δοντιού κατά την παρασκευή όμορου κιβωτιδίου, σε κοιλότητες II ομάδας.

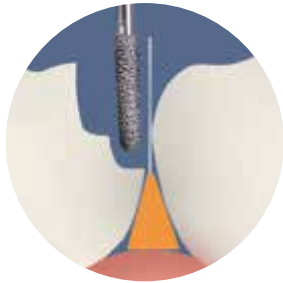

ΠΛΑΤΟΣ ΣΦΗΝΑΣ

Μεγάλο		
Μεσαίο		
Μικρό		
Πολύ μικρό		

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Ασορτί συσκευασία:

4 μεγέθη FenderWedge x 36 τεμάχια, σύνολο 144 τεμάχια

Ανταλλακτικά:

36 τεμάχια σε καθένα από τα μεγέθη:
X-Small, Small, Medium, Large

FenderWedge Prep®

Συνδυασμός σφήνας και μεταλλικού ελάσματος που προστατεύει το διπλανό δόντι και τα ούλα σε μεγάλες παρασκευές.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί των 36 τεμαχίων. Χρώμα σφήνας: γκρι.

FenderMate® Matrix

Το γρηγορότερο σε εφαρμογή, τεχνητό τοίχωμα!

Συνδυασμός σφήνας και τεχνητού τοιχώματος με προδιαμορφωμένο σημείο επαφής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Ασορτί συσκευασία:

4 είδη FenderMate x 18 τεμάχια, σύνολο 72 τεμάχια

Ανταλλακτικά:

18 τεμάχια FenderMate σε καθένα από τα 4 είδη τους

Το FenderMate διατίθεται σε δύο πλάτη σφήνας, χρωματικά κωδικοποιημένα



Fender Prime™

Μοναδικός συνδυασμός τμηματικού τεχνητού τοιχώματος και σφήνας, για εμφράξεις II ομάδας σε παιδικά δόντια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Ασορτί: περιλαμβάνει 2 μήκη x 18 τεμάχια

Κοντό: 18 τεμάχια, χρώμα νέον κίτρινο

Μακρύ: 18 τεμάχια, χρώμα νέον πράσινο



Cheek Retractor

Παρειοκάτοχο από πολυκαρβονικό πλαστικό, αποστειρώσιμο στο αυτόκαυστο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 τεμάχια, ξεχωριστά για ενήλικους και για παιδιά

Napkin Holders

A. Πετσετοκάτοχα με ατσάλινη αλυσίδα.



B. Πετσετοκάτοχα με κορδόνι από σιλικόνη αποστειρώσιμη στο αυτόκαυστο, σε ποικιλία χρωμάτων.



DryDent® Parotid / DryDent® Sublingual

Υπερ-απορροφητικά επιθέματα για εξαιρετικό έλεγχο της υγρασίας στο στόμα και μεγάλη άνεση για τον ασθενή.

Τα DryDent είναι μαλακά, άνετα και υψηλής αποτελεσματικότητας επιθέματα που αντικαθιστούν τα τούλιπα βαμβακιού κι ενισχύουν την απορρόφηση του σάλιου με τη λεπτή αλλά υπερ-απορροφητική ενίσχυσή τους. Αποδίδουν ένα στεγνό περιβάλλον εργασίας κάθε φορά.

- Κανονική έκκριση σάλιου: 0,25-0,35 ml/λεπτό
- Διεγερμένη έκκριση σάλιου: 1-3 ml/λεπτό
- Για τους ενήλικες, ένα μεγάλο DryDent Sublingual και δύο DryDent Parotid απορροφούν περίπου 16 ml σάλιου στη διάρκεια μιας θεραπείας 30 λεπτών.

Διακρίνονται σε 2 τύπους:



DryDent® Parotid

Ειδικού σχεδιασμού επιθέματα που τοποθετούνται πάνω από τους πόρους των παρωτίδων.

Το υπερ-απορροφητικό αφρώδες υλικό τους, παγιδεύει την ανεπιθύμητη υγρασία αποδίδοντας ένα στεγνό πεδίο για εμφράξεις, συγκολλήσεις προσθετικών εργασιών και λήψη αποτυπωμάτων.

Η μεγάλη χωρητικότητά τους επιτρέπει τη διατήρηση του ελέγχου της υγρασίας ακόμα κι όταν είναι πλήρως διαβρεγμένα.

Επίσης, το μαλακό υλικό τους προσφέρει μέγιστη άνεση στον ασθενή.

DryDent® Sublingual

Ειδικού σχεδιασμού επιθέματα τα οποία απορροφούν και ελέγχουν το σάλιο που παράγεται από τους υπογλώσσους και υπογνάθιους αδένες.

Τοποθετούνται κάτω από τη γλώσσα και προσφέρουν ένα στεγνό στοματικό περιβάλλον για μια ποικιλία οδοντιατρικών εργασιών.

Η άνεση του ασθενή βελτιώνεται σημαντικά χάρη στο απαλό και μαλακό υλικό του DryDent Sublingual που ελαττώνει το ανατακλαστικό της κατάποσης.

Η σιελαντλία μπορεί να τοποθετηθεί επάνω του, ελαχιστοποιώντας την εκμύζηση του μαλακού ιστού.

Η μεγάλη χωρητικότητά του διατηρεί τον έλεγχο της υγρασίας ακόμα κι όταν αυτό είναι πλήρως διαβρεγμένο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ
DryDent Parotid, μικρά	40 x 36 x 2 mm δισεταλμένα: 40 x 36 x 10 mm	50 τεμάχια
DryDent Parotid, μεγάλα	50 x 43 x 2 mm δισεταλμένα: 50 x 43 x 10 mm	50 τεμάχια
DryDent Sublingual, μικρά	30 x 50 x 2 mm δισεταλμένα: 30 x 50 x 10 mm	50 τεμάχια
DryDent Sublingual, μεγάλα	38 x 60 x 2 mm δισεταλμένα: 38 x 60 x 10 mm	50 τεμάχια

Endo Access Bur

Φρέζα ενδοδοντικής πρόσβασης, ασφαλούς άκρου.

Από καρβίδιο του τουγκστενίου.



3+1
δώρα



Κωδικός	FG26GK
Διάμετρος 1/10 mm	016
Ύψος/Μήκος (mm)	9.0

Predator® Accu-Prep

Φρέζα παρασκευών για στεφάνες και γέφυρες.

Η γεωμετρία των λεπίδων της φρέζας Predator® Accu-Prep, της προσδίδει την ικανότητα να κόβει γρήγορα και απαλά, για εξαιρετική παρασκευή για στεφάνες και γέφυρες.



Κωδικός	379	847	856	856
Διάμετρος 1/10 mm	023	016	016	018

3+1
δώρα

30 Bladed Esthetic Finishing Burs

Φρέζες 30 λεπίδων για αισθητικό φινίρισμα των αποκαταστάσεων.

- Ιδανικές για χρήση σε όψεις ρητίνης.
- Οι φρέζες έχουν ασφαλές (μη κοπτικό) τέλος.



Αριθμός	EF3	EF4	EF6	EF9	OF1	OF2
Διάμετρος 1/10 mm	008	010	014	014	023	009
Ύψος/Μήκος (mm)	3.0	4.0	6.0	9.0	4.3	3.2

3+1
δώρα

Predator Zirconia

Διαμάντια για εύκολη και αποτελεσματική κοπή ζιρκονίας.

- Υψηλή διείδυση, χαμηλή δόνηση και λείο φινίρισμα στη ζιρκονία
- Σημαντική μείωση στην τριβή και την έκλυση θερμότητας, προστατεύουν από τη δημιουργία μικρορωγμών.
- Ενδείκνυνται για αφαίρεση στεφάνης, ενδοδοντική πρόσβαση και ρύθμιση της σύγκλεισης



Κωδικός	801	801	801	807	856	856	862	878K	368
Διάμετρος 1/10 mm	014	018	023	018	018	022	014	021	023
Ύψος/Μήκος (mm)	-	-	-	5.0	9.0	9.0	7.0	8.0	5.0
Λεπτόκοκκο	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Μεσαίου κόκκου	•	•	•	•	•	•	•	•	•

3+1
δώρα

Predator® Turbo

Φρέζες κοπής μετάλλου, οι πιο δυνατές και πιο ανθεκτικές.

Κόβουν απαλότερα και γρηγορότερα από τις ανταγωνιστικές.

Μονοκόμματη κατασκευή 100% από καρβίδιο.



Κωδικός	PR 2T	PR 1557T	PR 1T	PR 330T	PR 245T	PR 557T	S1
Διάμετρος 1/10 mm	012	010	010	008	009	010	012
Μήκος κεφαλής (mm)	4.0	3.9	1.9	2.0	2.7	3.7	

3+1
δώρα



Carbide burs

Φρέζες carbide του αερότορ από την καλύτερη ποιότητα καρβιδίου του τουγκστενίου.



Lindemann Bur

Φρέζα οστού Lindemann.

• 100% carbide

3+1
δώρα




162

Κωδικός	161	162 οδοντωτή
Διάμετρος 1/10 mm	016	016
Μήκος κεφαλής (mm)	10.0	10.0
FG Μήκος (mm)	25.0	25.0
HP Μήκος (mm)	44.5	44.5

Prima® Crown & Veneer Preparation

Σετ διαμαντιών για παρασκευές ακριβείας για στεφάνες, γέφυρες, όψεις και επένθετα.

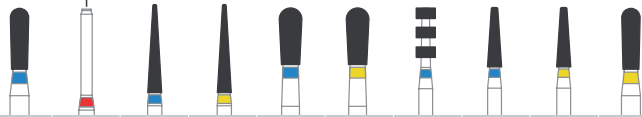

No. Είδους	830	840	859	859	830L	830L	834	846	846	830
Διάμετρος (1/10 mm)	016	012	016	016	021	021	016	016	016	016
Μήκος κεφαλής (mm)	3.0	END CUT	10.0	10.0	5.0	5.0	4.5	7.0	7.0	3.0
Εξαιρετικά λεπτόκοκκο				●		●			●	●
Λεπτόκοκκο		●								
Μεσαίο	●		●		●		●	●		



(Συνέχεια πίνακα)

No. Είδους	834	848	848	811
Διάμετρος (1/10 mm)	021	016	016	032
Μήκος κεφαλής (mm)	4.7	10.0	10.0	4.5
Εξαιρετικά λεπτόκοκκο			●	
Λεπτόκοκκο				
Μεσαίο	●	●		●



Prima® Veneer Prep

Σετ με προσεκτικά επιλεγμένα διαμάντια, για ελεγχόμενες παρασκευές ακριβείας, για κεραμικές όψεις.



No. Είδους	834	834	830	848	861	879	879	879	837
Διάμετρος (1/10 mm)	016	021	016	018	014	010	012	012	014
Μήκος κεφαλής (mm)									
Εξαιρετικά λεπτόκοκκο			●		●				
Λεπτόκοκκο								●	
Μεσαίο	●	●		●		●	●		●



Twinkles

Μικροσκοπικά κοσμήματα
τα οποία συγκολλούνται στα δόντια.



Κατασκευάζονται από καθαρό χρυσό 24Κ και 22Κ καθώς και από λευκόχρυσο 18Κ με ή χωρίς διαμαντάκια, ρουμπίνια ή ζαφείρια.

Διατίθενται σε διάφορα σχέδια, μεγέθους 2-4 mm.

Τα διαμάντια των κοσμημάτων Twinkles έχουν κόψιμο μπριγιάν 56 εδρών 0,01 ct.

Τα Twinkles συγκολλούνται εύκολα πάνω στα δόντια, από τον οδοντίατρο, με την τεχνική της αδροποίησης και τη χρήση συγκολλητικού παράγοντα και ρευστής φωτοπολυμεριζόμενης σύνθετης ρητίνης.

Αφαιρούνται επίσης εύκολα από τον οδοντίατρο εάν είναι επιθυμητό.

Τα Twinkles διατίθενται μεμονωμένα.

Χρυσός 24Κ & 22Κ Διαμάντι 0,01 ct	
	ΚΩΔΙΚΟΣ
	101 Heart Small
	102 Heart Large
	103 Star Small
	104 Star Large
	105 Droplet Small
	106 Droplet Large
	107 Moon
	108 Cross
	113 Yin Yang
	116 Dolphin
	121 Heart Diamond
	122 Star Diamond
	124 Droplet Diamond
	126 Round Diamond
	129 Star Sapphire
	132 At-Mark
	133 Round Diamond 0,02 CT
	134 Horseshoe
	135 Scorpion
	136 Treble-Clef
	137 Smiley
	139 Dollar Sign
	149 Bolt
	155 Musical Note

Λευκόχρυσος 18Κ Διαμάντι 0,01 ct	
	ΚΩΔΙΚΟΣ
	201 Heart Small
	202 Heart Large
	204 Star Large
	206 Droplet Large
	207 Moon
	208 Cross
	210 Soccerball
	212 Clover
	216 Dolphin
	221 Heart Diamond
	222 Star Diamond
	224 Droplet Diamond
	226 Round Diamond
	227 Heart Ruby
	228 Star Ruby
	229 Star Sapphire
	233 Round Diamond 0,02 CT
	234 Horseshoe
	235 Scorpion
	236 Treble-Clef
	238 Alien
	239 Dollar Sign
	243 Evil Eye Sapphire
	244 Bunny

Περίπου αληθινό μέγεθος των κοσμημάτων

Κρύσταλλοι Precioca Βοημίας

Crystal clear
1,8 mm

Crystal clear
2,7 mm

Aurore Boreale
2,3 mm

Vintage Rose
1,8 mm

Light Amethyst
1,8 mm

Light Sapphire
1,8 mm

Crystal clear
2,3 mm

Aurore Boreale
1,8 mm

Light Rose
1,8 mm

Pale Lilac
1,8 mm

Peridot
1,8 mm

Aquamarine
1,8 mm

Stik - N - Place® DIRECTA directadental.com

Μιας χρήσης, λεπτό στέλεχος με μικρή ποσότητα κόλλας στο άκρο του, για τη μετακίνηση μικροσκοπικών αντικειμένων όπως ένθετα, επένθετα κ.λπ.

- Έχει πρακτικό σύστημα διανομής.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές στην ίδια συνεδρία.
- Το κολλώδες άκρο του συγκρατεί με ασφάλεια ένθετα, επένθετα, όψεις, δακτυλίους, ορθοδοντικά άγκιστρα και κοσμήματα δοντιών.
- Κάμπτεται εύκολα για καλύτερη πρόσβαση.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50 τεμάχια

Rubber Dam clamps

Αρπάγες ελαστικού απομονωτήρα

Όλες οι αρπάγες ελαστικού απομονωτήρα της Aseptico έχουν τους αριθμούς τους εντυπωμένους με αδροποίηση επάνω στο ανοξειδωτο ασάλι για εύκολη ταυτοποίηση. Καθεμιά είναι σχεδιασμένη με ακριβή τάση ελατηρίου για χρήση στο κατάλληλο δόντι.



Aseptico

Gauze Clamps

- Αρπάγες όχι για ελαστικό απομονωτήρα
- Χρησιμοποιούνται με γάζα ή τολύπια βαμβακιού
- Πολύ μεγάλο πτερύγιο, λειτουργεί σαν γλωσσοπίεστρο



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρπάγες ελαστικού απομονωτήρα	
#3	Για μικρούς κάτω γομφίους, με επίπεδα άκρα συγκράτησης
#W3	Όμοια με την #3 αλλά χωρίς πτερύγιο
#4	Όμοια με την #3 αλλά με καμπύλα άκρα συγκράτησης
#5	Για κάτω γομφίους
#56	Όμοια με την #5 αλλά με καμπύλα άκρα συγκράτησης
#56A	Για μεγαλύτερους κάτω γομφίους, όμοια της #56 αλλά με μεγαλύτερα άκρα συγκράτησης
#7	Για κάτω γομφίους, με επίπεδα άκρα συγκράτησης
#7A	Για πολύ μεγάλους κάτω γομφίους
#8	Για κάτω γομφίους, με στρογγυλά άκρα συγκράτησης
#8A	Για κάτω γομφίους, με δυνατά, καμπύλα άκρα συγκράτησης
#W8A	Όμοια με την #8A αλλά χωρίς πτερύγιο
#10	Για μικρούς γομφίους με κοντές μύλες, αριστερή και δεξιά
#11	
#12A	Για φρονιμίτες, αριστερή και δεξιά
#13A	
#14	Για γομφίους που έχουν ημι-ανατείλλει
#14A	Όμοια με την #14 αλλά με μεγάλα άκρα συγκράτησης
#15	Για μεγάλους κάτω γομφίους, με πλατιά άκρα συγκράτησης και δυνατή δράση ελατηρίου
#18	Για άνω και κάτω γομφίους, με στρογγυλού τύπου άκρα συγκράτησης
#24	Για βαθιές παρειακές κοιλότητες γομφίων, με ευρύτερο περιθώριο στην παρειακή πλευρά, αριστερή και δεξιά
#25	
#26	Για άνω γομφίους, ειδικά για δόντια που ανατέλλουν
#28	Για άνω και κάτω γομφίους, με πολύ πλατύ περιθώριο για ευρύ οπτικό πεδίο
#30	Για γομφίους με έντονες καμπύλες παρειακά, αριστερή και δεξιά
#31	
#51	Για γομφίους με έντονες καμπύλες παρειακά και γλωσσικά
#138	Για φρονιμίτες, με σκληρό ελατήριο, οδοντωτά άκρα συγκράτησης, αριστερή και δεξιά
#139	
#200	Για κάτω γομφίους, με πτερύγιο, ευρύ περιθώριο
#201	Όμοια με την #200 αλλά με καμπύλα άκρα συγκράτησης
#202	Για ευμεγέθεις γομφίους, όμοια με την #200 αλλά με μεγάλα άκρα συγκράτησης
#203	Για μικρούς κάτω γομφίους και τους πρώτους παιδικούς γομφίους, αριστερή και δεξιά
#204	
#205	Για άνω γομφίους, με σκληρό ελατήριο
#22	Όμοια με την #207, αλλά χωρίς πτερύγιο
#27	Όμοια με την #206, αλλά χωρίς πτερύγιο και με καμπυλότητα
#29	Για άνω και κάτω προγομφίους, με πλατιά άκρα συγκράτησης
#206	Για άνω και κάτω προγομφίους, με καμπύλα άκρα συγκράτησης
#207	Για άνω και κάτω προγομφίους, με επίπεδα άκρα συγκράτησης
#208	Για μεγάλους προγομφίους, με παρόμοιο σχέδιο με την #207
#209	Για κάτω προγομφίους, με πλατιά άκρα συγκράτησης
#0	Για μικρούς προγομφίους και κεντρικούς παιδιών
#00	Για πολύ μικρούς προγομφίους και κεντρικούς παιδιών
#1	Για ρίζες, με βαθειά, καμπύλα άκρα συγκράτησης
#2	Για κάτω προγομφίους, με επίπεδα άκρα συγκράτησης
#2A	Όμοια με την #2 αλλά με μεγάλα άκρα συγκράτησης
#W2A	Όμοια με την #2A αλλά χωρίς πτερύγιο
#P-1,2	Για παιδικούς πρώτους γομφίους
Χειλικές αρπάγες	
#210	Για κεντρικούς
#211	Διεθνής για χειλικές κοιλότητες σε πρόσθια
#212	Αυθεντική αρπάγη για χειλικές κοιλότητες, Ferrier
#6	Όμοια με την #9
#9	Η δημοφιλέστερη αρπάγη πρόσθιων
#90N	Δυνατές αρπάγες πρόσθιων

ΑΕΥ-6000 - 70 V

Βασικό σύστημα εμφυτευματολογίας και ενδοδοντίας.

- Δυνατό μικρομότορ 40.000 rpm, χωρίς καρβονάκια, αποστειρώσιμο στο αυτόκαυστο
- Η αλλαγή μεταξύ EndoMode (ρυθμίσεις ενδοδοντίας) και Implant Mode (ρυθμίσεις εμφυτευματολογίας) γίνεται με το άγγιγμα ενός κουμπιού
- Αναλογία στο Endo Mode 8:1
- Ρυθμιζόμενη ροπή:
 - Στο Implant Mode, η ροπή φτάνει έως 50 Ncm γεγονός που καθιστά δυνατή τη χρήση μιας μόνο, αποτελεσματικής μειωτικής χειρολαβής 20:1 για όλη τη διαδικασία τοποθέτησης εμφυτεύματος
 - Στο Endo Mode, η ροπή φτάνει έως 1000 g-cm χρησιμοποιώντας 8:1 μειωτική χειρολαβή
- Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας αυτόματου σταματήματος στο Implant Mode και αυτόματου σταματήματος-αναστροφής στο Endo Mode όταν φτάσει η επιλεγμένη τιμή ροπής.
- Κονσόλα με δυνατότητα ρύθμισης αναλογίας χειρολαβής, ταχύτητας, ροπής και ροής του υγρού καταϊωνισμού
- 5 κουμπιά προκαθορισμένων προγραμμάτων (5 για τη λειτουργία Endo και 5 για τη λειτουργία Implant) για αποθήκευση και χαρακτηρισμό των εξατομικευμένων ρυθμίσεων στη μνήμη
- Διαθέσιμες αναλογίες χειρολαβών 1:5, 1:2, 1:1, 8:1, 20:1
- Αναβαθμίσιμο λογισμικό για μακροχρόνια απόδοση της επένδυσης
- Σύμφωνα με FDA, UL και CE
- Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α.



Aseptic

ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΤΕ

με την εταιρεία μας
για να ενημερωθείτε
για τα πακέτα προσφορών:

- Εμφυτευμάτων
- Μοσχευμάτων
- Χειρουργικών μοτέρ Aseptic

STATIM G4 2000 & 5000

Αυτόκαυστα κασέτας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αυτόκαυστα κύκλου S.
- Ταχύτητα. Το Statim αποστειρώνει εργαλεία για άμεση χρήση **μέσα σε 8 λεπτά**, μειώνοντας τον αριθμό των απαιτούμενων εργαλείων καθώς αυτά μπορούν να αποστειρωθούν ανάμεσα στους ασθενείς.
- Υψηλή τεχνολογία ατμού, ιδιαίτερα απαλή για τα ευαίσθητα εργαλεία όπως οι χειρολαβές.
- Άμεση παραγωγή ατμού.
- Πατενταρισμένη τεχνολογία PPPD αφαιρεί αποτελεσματικά τον αέρα από το εσωτερικό της κασέτας επιτρέποντας την αποστείρωση συμπαγών και κοίλων εργαλείων.
- Σύστημα κασέτας. Τα λεπτά, ανοξειδωτα τοιχώματα της κασέτας Statim επιτρέπουν τη γρήγορη θέρμανση κι επίσης το γρήγορο κρύωμα του εσωτερικού της.
- Το Statim συμφωνεί πλήρως με το πρότυπο EN 13060 για την αποστείρωση εργαλείων και είναι ενισχυμένο με προηγμένο μικροϋπολογιστή που ελέγχει τους κύκλους αποδίδοντας επικυρωμένη αποστείρωση 5 φορές γρηγορότερα από τα περισσότερα συμβατικά αυτόκαυστα.



Τα αυτόκαυστα G4 προσφέρουν επιπλέον:

- Καινοτόμο τεχνολογία στεγνώματος. Τα αυτόκαυστα G4 προσφέρουν γρήγορη αποστείρωση συνοδευόμενη από ένα γρήγορο στέγνωμα.



Το Statim 2000 G4 δεσμεύει τη θερμότητα που μένει στο σύστημα μετά την αποστείρωση και την απελευθερώνει μέσα στην κασέτα, στεγνώνοντας τα συσκευασμένα εργαλεία μέσα σε 10 λεπτά.



Το Statim 5000 G4 χρησιμοποιεί τη θερμότητα που παράγεται από τον κύκλο αποστείρωσης η οποία "απορροφάται" από μοναδικές πλάκες στεγνώματος που βρίσκονται μέσα στο θάλαμο αποστείρωσης. Η θερμότητα μεταφέρεται από τις πλάκες κατευθείαν στα εργαλεία, προσφέροντας επιταγυμένο στέγνωμα όλου του φορτίου σε 15 λεπτά.

- Μεγάλη, 3,5" υψηλής ανάλυσης οθόνη αφής προσφέρει συνεχή πληροφόρηση για τους κύκλους.
- Δικτυακή πύλη, σας επιτρέπει πρόσβαση στο ιστορικό του κύκλου, την εκτύπωση, την επικυρωμένη πληροφόρηση και στα αρχεία αποστείρωσης.
- Ενσωματωμένο καταγραφικό αποθηκεύει τις πληροφορίες όλων των κύκλων που είναι προσβάσιμες μέσω:
 - α) USB πύλης για χειροκίνητη ανάκτηση
 - β) Ethernet σύνδεσης για αρχειοθέτηση βασισμένη στο διαδίκτυο ή επιτραπέζια εκτύπωση
 - γ) RS232 πύλης για την επιλογή εξωτερικού εκτυπωτή



Statim 2000 G4

Statim 5000 G4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	2000 G4	5000 G4
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	49,5 x 41,5 x 15 cm	60 x 41 x 19 cm
Εσωτερικές διαστάσεις κασέτας	28 x 18 x 3,5 cm	38 x 18 x 7,5 cm
Βάρος χωρίς νερό	21 kg	33 kg
Κατανάλωση ενέργειας	220-240V, 50/60 Hz, 6A	220-240V, 50/60 Hz, 6A

Συνολικός χρόνος κύκλου χωρίς στέγνωμα	Συμπαγή μη συσκευασμένα	Κοίλα μη συσκευασμένα	Κοίλα μη συσκευασμένα	Κοίλα συσκευασμένα	Κοίλα συσκευασμένα	Ελαστικά/ Πλαστικά	Ελαστικά/ Πλαστικά
Χρόνος αποστείρωσης/ Θερμοκρασία	3,5 min 134°C	3,5 min 134°C	18 min 134°C	3,5 min 134°C	18 min 134°C	15 min 121°C	30 min 121°C
STATIM 2000 G4	6:45	8:05	22:35	10:40	25:10	18:40	33:40
STATIM 5000 G4	8:45	10:50	25:20	15:30	30:00	20:20	35:20

SciCan Hydrim C61WG4

Πλυντήριο εργαλείων.

Εκτελεί αυτοματοποιημένο πλύσιμο εργαλείων: το πρώτο βήμα στη διαδικασία αποστείρωσης

Αποδοτικό

Ο χρόνος που εξοικονομείται από το αυτοματοποιημένο πλύσιμο σε σύγκριση με τον χειροκίνητο καθαρισμό είναι περίπου 1 ώρα εργασίας για κάθε εννέα διαδικασίες ρύθμισης.

Οι χρόνοι κύκλου HYDRIM C61W G4 είναι μόλις 40 λεπτά από την έναρξη έως το στέγνωμα.

Το HYDRIM εξασφαλίζει ότι κάθε σετ εργαλείων λαμβάνει την ίδια επικυρωμένη διαδικασία καθαρισμού.

Τεχνολογία G4

Η μεγάλη οθόνη αφής παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες κύκλου και επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν τις τρέχουσες λειτουργίες.

Από την πύλη δικτύωσης, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ιστορικό κύκλων και στις πληροφορίες επικύρωσης. Εάν υπάρξει ποτέ σφάλμα κύκλου, το λογισμικό G4 θα στείλει ένα email στο γραφείο και τον τεχνικό σέρβις, επιτρέποντας την απομακρυσμένη αντιμετώπιση προβλημάτων.

Ασφαλές

Το αυτοματοποιημένο πλύσιμο εργαλείων μειώνει τον φυσικό χειρισμό μολυσμένων εργαλείων.

Η χρήση του πλυντηρίου εργαλείων HYDRIM G4 είναι η ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική επιλογή, μειώνοντας τον κίνδυνο έκθεσης και τραυματισμών.

Χωρητικότητα

Το HYDRIM C61W G4 έχει χωρητικότητα 6 κασετών πλήρους μεγέθους, επιτρέποντας στο ιατρείο να αντικαθιστά 120 εργαλεία σε μόλις 40 λεπτά.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HYDRIM C61W G4

ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 598 x 520 x 526mm

Βάθος με ανοιχτή πόρτα: 829 mm

Βάρος: 44 kg

ΧΡΟΝΟΙ ΚΥΚΛΟΥ*

Ξέβγαλμα και Αναμονή 5 λεπτά

Κανονικό Πλύσιμο + Στέγνωμα 26 λεπτά + 10 λεπτά

Πλύση Βαρέως Τύπου + Στέγνωμα 30 λεπτά + 10 λεπτά

-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ

Ξέβγαλμα και Αναμονή 7,6 L

Κανονικό Πλύσιμο 11,5 L

Πλύση Βαρέως Τύπου 11,5 L

-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Βόρεια Αμερική 208-240 V, 12 A, 60 Hz

Θόρυβος Λειτουργίας 65 dB

-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ζεστό και Κρύο Βρύση Νερού: Σύνδεση Σωλήνα Κήπου 3/4", Αρσενικό

Συνιστώμενη Θερμοκρασία Ζεστού Νερού: 60° C

Θερμοκρασία Κρύου Νερού: < 30° C

Πίεση Εισόδου Νερού: 1-10 bar / 14,5-145 psi

Αποστράγγιση: 2 cm / 3/4"

**Οι πραγματικοί χρόνοι κύκλου θα διαφέρουν ανάλογα με τη θερμοκρασία και την πίεση του εισερχόμενου νερού*

PRIME LINE - Χειρολαβές Αερότορ

PRIME LINE

έως 25 Watt | μέγ. 55 dB | περίπου 350k rpm
ΙΣΧΥΣ | ΕΝΤΑΣΗ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ

- Αεροακουστική λεπίδα
- Υποδοχή φρέζας από καρβίδιο
- Επεξεργασμένα κεραμικά ρουλεμάν
- Αυτόματη ρύθμιση πίεσης
- Ανθεκτική επίστρωση τιτανίου
- Προστασία αντίστροφης ροής
- Γυάλινη ράβδος οπτικών ινών
- Αποστειρώσιμο 135° C



MK-DENT



PRIME LINE TURBINE HP21L ΜΕ ΦΩΣ, ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΕΦΑΛΗ

Τύποι σύνδεσης: Kavo, NSK, Sirona, W&H
Μέγεθος κεφαλής (MM): Ø 12,5 x Y14.3
Ισχύς (W): Έως 25
Επίπεδο ήχου (DB): Μέγ. 55
Έξοδοι σπρέι: 4 ασύμμετρες μικτές
Βάρος (G): 69
Εγγύηση (μήνες): 24



PRIME LINE TURBINE HP22L ΜΕ ΦΩΣ, ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΗ

Τύποι σύνδεσης: Kavo, NSK, W&H
Μέγεθος κεφαλής (MM): Ø 10,8 x Y12
Ισχύς (W): Έως 18
Επίπεδο ήχου (DB): Μέγ. 60
Έξοδοι σπρέι: 3 ασύμμετρες μικτές
Βάρος (G): 67
Εγγύηση (μήνες): 24

PRIME LINE - Χειρολαβές Μικρομότορ



PRIME LINE

ΓΩΝΙΑΚΗ με ΦΩΣ LP15L

1:5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ



Τύπος σύνδεσης: ISO
Μέγεθος κεφαλής (MM): $\varnothing 10,3 \times Y15,3$
Κατάλληλες φρέζες: FG-BURS ($\varnothing 1,6$ MM)
Έξοδοι σπρέι: 3 ασύμμετρες μικτές
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM): 200.000
Βάρος (G): 80
Εγγύηση (μήνες): 24

PRIME LINE

ΓΩΝΙΑΚΗ με ΦΩΣ LP11L

1:1 ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ & ΣΤΙΛΒΩΣΗ



Τύπος σύνδεσης: ISO
Μέγεθος κεφαλής (MM): $\varnothing 9,8 \times Y14,3$
Κατάλληλες φρέζες: CA-BURS ($\varnothing 2,35$ MM)
Έξοδοι σπρέι: 1 ασύμμετρη μικτή
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM): 40.000
Βάρος (G): 78
Εγγύηση (μήνες): 24

PRIME LINE

ΕΥΘΕΙΑ με ΦΩΣ LP01L

1:1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ



Τύπος σύνδεσης: ISO
Κατάλληλες φρέζες: HP-BURS ($\varnothing 2,35$ MM)
Έξοδοι σπρέι: 1 ασύμμετρη μικτή
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM): 40.000
Βάρος (G): 92
Εγγύηση (μήνες): 24

ECOLINE - Χειρολαβές Αερότορ

ECO LINE

έως
28 Watt
ΙΣΧΥΣ

μέγ.
60 dB
ΕΝΤΑΣΗ

περίπου
320k rpm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ



Aeroperformance



Υποδοχή φρέζας από καρβίδιο



Επεξεργασμένα κεραμικά ρουλεμάν



Λείο σώμα με επίστρωση χρωμίου



Γυάλινη ράβδος οπτικών ινών



Αποστειρώσιμο



ECO LINE TURBINE HE21L

ΜΕ ΦΩΣ, ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΕΦΑΛΗ

ECO LINE HE21

ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ, ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΕΦΑΛΗ

Τύποι σύνδεσης: Kavo, NSK, Sirona, W&H

Μέγεθος κεφαλής (MM): Ø 12,5 x Y14,3

Ισχύς (W): Έως 24

Επίπεδο ήχου (DB): Μέγ. 62

Έξοδοι σπρέι: 4 ασύμμετρες μικτές

Βάρος (G): 62

Εγγύηση (μήνες): 18



ECO LINE TURBINE HE17

ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ, ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΕΦΑΛΗ

Τύπος σύνδεσης: 4 τρυπών Midwest

Μέγεθος κεφαλής (MM): Ø 12,5 x Y14,3

Ισχύς (W): 18

Επίπεδο ήχου (DB): Μέγ. 65

Έξοδοι σπρέι: 4 ασύμμετρες μικτές

Βάρος (G): 63

Εγγύηση (μήνες): 18

ECO LINE - Χειρολαβές Μικρομότορ

- Εναλλάξιμες κεφαλές
- Γρανάζια μακράς ζωής
- Νέο σώμα με επίστρωση χρωμίου
- Ελαφριές
- Αποστειρώσιμες



ECO LINE LE11L

ΓΩΝΙΑΚΗ, ΜΕ ΦΩΣ

ECO LINE LE11

ΓΩΝΙΑΚΗ, ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ

1:1 ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ & ΣΤΙΛΒΩΣΗ

Τύπος σύνδεσης: ISO

Μέγεθος κεφαλής (MM): Ø 9,8 x Υ14,3

Κατάλληλες φρέζες: CA-BURS (Ø 2,35 MM)

Έξοδοι σπρέι: 1 ασύμμετρη μικτή

Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM): 40.000

Βάρος (G): 80

Εγγύηση (μήνες): 24

ΔΩΡΟ

Μία χειρολαβή μικρομότορ
χωρίς φως
ECOLINE
με αγορά υλικών
από τον κατάλογο
αξίας **900 €**



ECO LINE LE01L

ΕΥΘΕΙΑ, ΜΕ ΦΩΣ

ECO LINE LE01

ΕΥΘΕΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ

1:1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τύπος σύνδεσης: ISO

Κατάλληλες φρέζες: HP-BURS (Ø 2,35 MM)

Έξοδοι σπρέι: 1 ασύμμετρη μικτή

Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM): 40.000

Βάρος (G): 100

Εγγύηση (μήνες): 24

Ταχυσύνδεσμοι

QC6016KW με LED*

6 τρυπών ταχυσύνδεσμος με σύστημα ρύθμισης σπρέι, για χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων

Σύνδεση: MK-dent & KaVo Multiflex®



QC6016K με LED*

6 τρυπών ταχυσύνδεσμος για χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων

Σύνδεση: MK-dent & KaVo Multiflex®



QC4014K χωρίς φως

4 τρυπών ταχυσύνδεσμος για χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων

Σύνδεση: MK-dent & KaVo Multiflex®



QC5016W 6 τρυπών με τροφοδοτικό QC4014W 4 τρυπών χωρίς τροφοδοτικό

Ταχυσύνδεσμοι για χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων

Σύνδεση: W&H Roto Quick®



QC6016NT 6 τρυπών με LED*

QC4014NT 4 τρυπών χωρίς φως

Ταχυσύνδεσμοι για χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων

Σύνδεση: NSK MachLite®



* Οι παραπάνω ταχυσύνδεσμοι με φως, διατίθενται και με φως XENON.

LU1011 Premium Service Oil

Πλήρως συνθετικό λάδι, με άρωμα μέντας.

Για συντήρηση των χειρολαβών υψηλών και χαμηλών ταχυτήτων, των airmotors και των χειρολαβών αεροστίλβωσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιάλη 500 ml



Air polishing device PR1011

PROPHY LINE

Συσκευή αεροστίλβωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συσκευή εργονομικά σχεδιασμένη, ελαφριά και συμπαγής
- Το άκρο της περιστρέφεται κατά 360° και το μοναδικό RotoGrip® κράτημά του επιτρέπει απλό και ξεκούραστο χειρισμό
- Είναι αποστειρώσιμη στο αυτόκαυστο στους 135°C
- Διατίθεται σε σύνδεση για KaVo, Sirona, W&H, NSK και Bien-Air



Ultrasonic Scalers

PROPHY LINE

Χειρολαβές υπερήχων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εργονομικός σχεδιασμός για εξαιρετικό κράτημα
- Ατσάλινο προστόμιο για αντοχή μακράς διάρκειας
- Κορυφαίας ποιότητας, ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό περίβλημα, επιτρέπει την αποστείρωση της χειρολαβής στο αυτόκαυστο στους 135°C
- Διατίθενται και με δακτύλιο φωτός 6 Led για ιδανικό φωτισμό
- Ανώδυνη θεραπεία για τον ασθενή χάρη στις γραμμικές κινήσεις του εργαλείου



Χωρίς ΦΩΣ



Με ΦΩΣ

Τύποι	SC21E	SC21EL	SC21S	SC21SL
Φως	-	✓	-	✓
Συχνότητα	24-33 kHz	24-33 kHz	24-33 kHz	24-33 kHz
Προστόμιο	Ατσάλι	Ατσάλι	Ατσάλι	Ατσάλι
Σύνδεση	EMS®	EMS®	Acteon®-Satelec®	Acteon®-Satelec®

Airmotors

Μικρομότορ αέρα.



AM 1004

Σπρέι: Εσωτερικό

Φως: -

Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM): 20.000

Διεύθυνση περιστροφής: Δεξιά και αριστερή

Πίεση αέρα (BAR): 2,2 - 2,8

Βάρος (G): 86

Σωληνώσεις: 4 ακίδων

Εγγύηση (μήνες): 24



AM 1006

Σπρέι: Εσωτερικό ή εξωτερικό

Φως: LED διαθέσιμο

Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM): 20.000

Διεύθυνση περιστροφής: Δεξιά και αριστερή

Πίεση αέρα (BAR): 2,2 - 2,8

Βάρος (G): 78

Σωληνώσεις: 6 ακίδων

Εγγύηση (μήνες): 24

DIAPOL

DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM

Σύστημα στίλβωσης 3 βημάτων για κεραμικά αστρίου, διπυριτικό λίθιο και ζirkονία



Set RA 307 **ΚΩΔ** 9061

W16Dg | OF-Dg | W17Dg | W18Dg
W16Dmf | OF-Dmf | W17Dmf | W18Dmf
W16D | OF-D | W17D | W18D

Set RA 308 **ΚΩΔ** 9060

OF-Dg | OF-Dmf | OF-D



Set RA 306 **ΚΩΔ** 9088

2x DT-W14Dg |
2x DT-W14Dmf | 2x DT-W14D



1 ΑΔΡΟΚΟΚΚΟ
Λείανση

2 ΜΕΣΑΙΟ
Προστίλβωση

3 ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ
Στίλβωση υψηλής στιλπνότητας

7.000 - 12.000 min⁻¹
* 3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



Είδος:	DT-W14Dg	OF-Dg	W11Dg	W16Dg	W17Dg	RA
Κωδικός:	7084	7075	7081	7086	7087	
Διαστάσεις (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	

7.000 - 12.000 min⁻¹
* 3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



Είδος:	DT-W14Dmf	OF-Dmf	W11Dmf	W16Dmf	W17Dmf	RA
Κωδικός:	7184	7175	7181	7186	7187	
Διαστάσεις (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	

7.000 - 12.000 min⁻¹
* 3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



Είδος:	DT-W14D	OF-D	W11D	W16D	W17D	RA
Κωδικός:	7284	7275	7281	7286	7287	
Διαστάσεις (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	

EVE

Σύστημα στίλβωσης 2 βημάτων για Ζιρκονία.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Set RA 322 (μέχρι εξάντλησης του αποθέματος)

Περιλαμβάνει 8 τεμάχια. (2 αδρόκοκκα Diasynt Plus RA για διαμόρφωση, 3 Diacera RA μεσαίου κόκκου για προστίλβωση και 3 Diacera RA λεπτόκοκκα για στίλβωση).

Diacera Twist Set RA 323.

Περιλαμβάνει 6 τεμάχια Twist. (3 Twist μεσαίου κόκκου για προστίλβωση και 3 Twist λεπτόκοκκα για στίλβωση).

1 ΜΕΣΑΙΟ
Προστίλβωση

2 ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ
Στίλβωση υψηλής στιλπνότητας

EVE

7.000 - 10.000 min⁻¹
* 3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



Είδος:	DT-W14DCmf	0F-DCmf	W11DCmf	W16DCmf	W17DCmf	RA
Κωδικός:	7684	7675	7681	7686	7687	
Διαστάσεις (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	

7.000 - 10.000 min⁻¹
* 3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



Είδος:	DT-W14DC	0F-DC	W11DC	W16DC	W17DC	RA
Κωδικός:	7784	7775	7781	7786	7787	
Διαστάσεις (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	

DIAPRO

DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM

Σύστημα στίλβωσης 2 βημάτων για διπυριτικό λίθιο.



7.000 - 10.000 min⁻¹
* 3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



Είδος:	W11DPmf	W16DPmf	W17DPmf	RA
Κωδικός:	7881	7886	7887	
Διαστάσεις (mm):	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	

7.000 - 10.000 min⁻¹
* 3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



Είδος:	W11DP	W16DP	W17DP	RA
Κωδικός:	7981	7986	7987	
Διαστάσεις (mm):	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	

EVE

ECOCERAM

Σύστημα στίλβωσης 3 βημάτων για κεραμικά αστρίου.



7.000 - 15.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹



Είδος:	W2BVK	W7VK	W2BNK	W7NK	W2BSK	W7SK	RA
Κωδικός:	1592	1577	1692	1677	1792	1777	
Διαστάσεις (mm):	5 x 10	7 x 10	5 x 10	7 x 10	5 x 10	7 x 10	

DIACOMP® PLUS

DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM

Σύστημα στίλβωσης 2 βημάτων για σύνθετες ρητίνες, υβριδικά κεραμικά, υβριδικά υλικά 3D εκτύπωσης.

Set RA 343 REF 9087

3 x DT-DCP10m
3 x DT-DCP10f Ø 10 mm



Set RA 342 REF 9086

3 x DT-DCP14m
3 x DT-DCP14f Ø 14 mm



Set RA 344 REF 9094

DCP-W11m | DCP-Ofm |
DCP3m | DCP2m
DCP-W11f | DCP-Off | DCP3f | DCP2f



3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



Είδος:	DT-DCP14m	DCP-Ofm	DCP-W11m	DCP1m	DCP3m	RA
Κωδικός:	6184	6175	6181	6171	6173	
Διαστάσεις (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	

3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



Είδος:	DT-DCP14f	DCP-Off	DCP-W11f	DCP1f	DCP3f	RA
Κωδικός:	6284	6275	6281	6271	6273	
Διαστάσεις (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	

FLEXI-D

DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM

Σύστημα εύκαμπτων δίσκων, 4 αδροτήτων, για φινίρισμα και στίλβωση σύνθετων ρητινών.



RPM: 7.000 – 10.000 min⁻¹,
μεγ. 20.000 min⁻¹

Είδος:	FD-10g	FD-10m	FD-10f	FD-10sf	95RA
Διαστάσεις (mm):	10 x 0,21	10 x 0,17	10 x 0,14	10 x 0,11	1 τεμάχιο
100 τεμάχια					

Είδος:	FD-14g	FD-14m	FD-14f	FD-14sf	
Διαστάσεις (mm):	14 x 0,21	14 x 0,17	14 x 0,14	14 x 0,11	
100 τεμάχια					

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

Αρχική Συσκευασία

Περιλαμβάνει 25 δίσκους από κάθε αδρότητα κι ένα μαντρέλ. Διατίθεται σε:

Flexi-D (10 mm): 16325P100

Flexi-D (14 mm): 16315P100

EVE FLEXISTRIPS

Ταινίες φινιρίσματος και στίλβωσης σύνθετης ρητίνης.

λεπτόκοκκη (20μ)

εξαιρετικά λεπτόκοκκη (7μ)

Είδος:	FS-20/7
Διαστάσεις (mm):	4 x 150
Πάχος (mm):	0,14/0,11
50 τεμάχια	

ECOCOMP

DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM

Σύστημα στίλβωσης 2 βημάτων για ρητίνες.

Set RA 210 REF 9071

EC11m | EC7m | EC3Km | EC18m
EC11f | EC7f | EC3Kf | EC18f



1 ΜΕΣΑΙΟ Προστίλβωση

2 ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ Στίλβωση

7.000 - 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



Είδος:	EC11m	EC3Km	EC7m	EC11f	EC3Kf	EC7f	RA
Κωδικός:	5181	5173	5177	5281	5273	5277	
Διαστάσεις (mm):	3 x 7,5	6,5 x 9,5	5 x 10	3 x 7,5	6,5 x 9,5	5 x 10	

UNIVERSAL

Σύστημα στίλβωσης ενός βήματος για ρητίνες, κεραμικά αστρίου, αμάλαγα και χρυσό.

ΑΔΡΟΚΟΚΚΟ Λείανση

7.000 - 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



Είδος:	W11	W1	W5	W7	RA
Κωδικός:	1081	1071	1075	1077	
Διαστάσεις (mm):	3 x 7,5	5,5 x 15	9 x 8,5	7 x 10	

BRACKET PLUS

Σύστημα στίλβωσης της αδαμαντίνης μετά την αποκόλληση των brackets

5.000 - 7.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



Είδος:	BRP11	BRP7	BRP3	BRP6	RA
Κωδικός:	5681	5677	5673	5676	
Διαστάσεις (mm):	3 x 7,5	5 x 10	5,5 x 8,5	10 x 0,7	

Μπορείτε να δείτε την ποικιλία
διαμαντιών & φρεζών
καθώς και να κατεβάσετε τον κατάλογο
της εταιρείας

frank.dental

στο site μας **www.vitsaropoulos.gr**



Καλέστε μας για να σας αποστείλουμε
τον **κατάλογο ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ** της εταιρείας



**CATALOGUE
2025**
ustomed.de



Prophy cups CA

Ελαστικά κυπελλοειδή χωρίς λάτεξ,
με μεταλλικό στέλεχος.

ΚΑΝΟΝΙΚΑ (8.5 mm)



1.500 - 3.000
r.p.m

ΚΑΝΟΝΙΚΑ				
Χρώματα	Λευκό	Γαλάζιο	Λεβάντα	Πορτοκαλί
Κωδικός	M222 WT	M222 LB	M222 LV	M222 OR



ΜΑΛΑΚΑ (8.5 mm)



1.500 - 3.000
r.p.m

ΜΑΛΑΚΑ				
Χρώματα	Ροζ	Λάιμ	Πράσινο	Σκούρο μπλε
Κωδικός	M222PK	M222LM	M222GR	M222DB



Prophy cups CA turbine blades

Ελαστικά κυπελλοειδή χωρίς λάτεξ,
με μεταλλικό στέλεχος.

Έχουν ειδική εξωτερική διαμόρφωση για καλύτερο καθαρισμό των μεσοδόντιων και εσωτερικό σαν τουρμπίνα για καλύτερη συγκράτηση της πάστας στίλβωσης.

ΚΑΝΟΝΙΚΑ (8.5 mm)



1.500 - 3.000
r.p.m

ΚΑΝΟΝΙΚΑ				
Χρώματα	Λευκό	Γαλάζιο	Λεβάντα	Πορτοκαλί
Κωδικός	T-M222 WT	T-M222 LB	T-M222 LV	T-M222 OR



Prophy points CA

Ελαστικά κωνικά άκρα, χωρίς λάτεξ,
με μεταλλικό στέλεχος.

ΚΑΝΟΝΙΚΑ


1.500 - 3.000
r.p.m

ΚΑΝΟΝΙΚΑ				
Χρώματα	Λευκό	Γαλάζιο	Λεβάντα	Πορτοκαλί
Κωδικός	225 WT	225 LM	225 LV	225 OR



PROPHY brushes

Νάιλον βουρτσάκια στίλβωσης, χωρίς λάτεξ,
με μεταλλικό στέλεχος

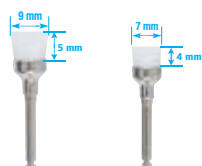

ΚΑΝΟΝΙΚΑ

1.500 - 3.000
r.p.m

ΚΑΝΟΝΙΚΑ		
Χρώματα	Junior Cup	Mini Cup
Κωδικός	R-M268N	R-M269N

ΜΑΛΑΚΑ

1.500 - 3.000
r.p.m



ΜΑΛΑΚΑ		
Χρώματα	Junior Cup	Mini Cup
Κωδικός	S-268	S-269

Disposable air-water “a” syringe tips

Μιας χρήσης ρύγχη για την αεροϋδροσύριγγα.



018S Spectrum
Χρωματιστά ρύγχη/
Λευκός πυρήνας



018C Clear
Διαφανή ρύγχη/
Χρωματιστοί
πυρήνες



018OS Opaque Colour
Χρωματιστά οπάκ
ρύγχη/
Λευκός πυρήνας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250 τεμάχια

Disposable X-Ray Head Sleeves

Μιας χρήσης προστατευτικά κεφαλής ακτινογραφικού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Small (μικρά) 20 cm + 17 cm x 60 cm	250 τεμάχια	108
Large (μεγάλα) 35 cm + 24 cm x 75 cm	250 τεμάχια	109



Disposable syringe/ HVE sleeves

Μιας χρήσης “μανίκια” προστασίας για αεροϋδροσύριγγες, σιελαντλίες και χειρουργικές αναρροφήσεις.

Με προ-κομμένο άνοιγμα.

Διαστάσεις: 26 x 6,5 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Μπλε	500 τεμάχια	100B
Διαφανή	500 τεμάχια	100C



Disposable brush tips and handles

Μιας χρήσης άκρα πινελάκια και λαβή εφαρμογής τους.



ΚΑΝΟΝΙΚΟ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Κανονικό. Διατίθενται σε μπλε, πράσινο, λεβάντα	100 τεμάχια σε κάθε χρώμα μεμονωμένα	7501
Λαβή για τα πινελάκια, αποστειρώσιμη στο αυτόκαυστο: λευκή.		7502W

Disposable brush applicators

Μιας χρήσης πινελάκια ενσωματωμένη σε λαβή με δυνατότητα κάμψης.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Κανονικό. Διατίθενται σε μπλε, πράσινο, λεβάντα	100 τεμάχια σε κάθε χρώμα μεμονωμένα	7500

Autoclavable HVE suction tubes

Ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης, αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο.

Χρώματα: λεβάντα, γαλάζιο, ανοικτό πράσινο, λάιμ, κίτρινο

Συσκευασία: 10 τεμάχια ασορτί χρώματα

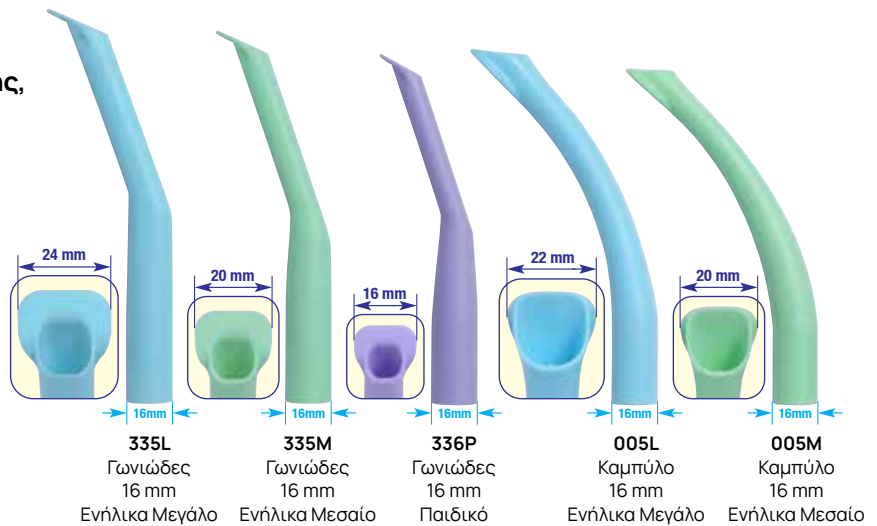

Autoclavable suction tube adaptors

Αντάπτορες για ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης, αποστειρώσιμοι στο αυτόκαυστο.

Σιελαντλία 6,5 mm



Ρύγχος αναρρόφησης 11 mm



Disposable 3-IN-1 trays

Μιας χρήσης δισκάρια αποτύπωσης 3 σε 1, με πολυεστερικό πλέγμα.

Χρώμα: μπλε

Συσκευασία: 36 τεμάχια σε κάθε τύπο.



18-N401
Οπίσθια

18-N402
Τεταρτημόριο

18-N403
Χωρίς πλαινό

18-N404
Πρόσθια

Disposable 3-IN-1 trays with wire connectors

Μιας χρήσης δισκάρια αποτύπωσης 3 σε 1, με πολυεστερικό πλέγμα και σύνδεσμο από ανοξείδωτο σύρμα, για καλύτερη πρόσβαση σε περιορισμένο χρόνο.

Χρώμα: μπλε

Συσκευασία: 36 τεμάχια σε κάθε τύπο.




18-S401
Οπίσθια

18-S402
Τεταρτημόριο

18-S403
Χωρίς πλαινό

Disposable impression trays with rim lock

Μιας χρήσης δισκάρια αποτύπωσης με περιφερικό χείλος, για γενικά αποτυπώματα και εμφυτευμάτων.

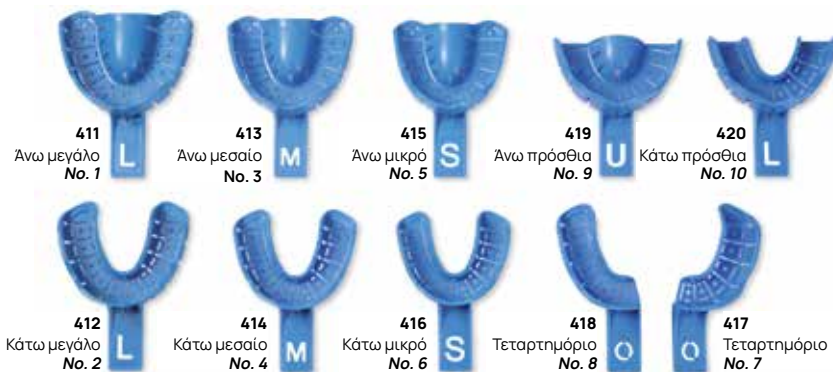

Τα τμήματα βάσης μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με μια φρέζα, για άξονες αποτύπωσης εμφυτευμάτων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Intro (ένα από κάθε μέγεθος)	10 τεμάχια	410
Single pack	10 τεμάχια σε ένα μέγεθος	411-420

Disposable micro applicators

Μιας χρήσης, μικρο-διανομέας σφουγγαράκι για την τοποθέτηση υγρών οδοντιατρικών υλικών.



**4+1
δώρο**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Κανονικό (γαλάζιο ή μπλε)	100 τεμάχια	901T
Λεπτό (πράσινο ή ανοικτό πράσινο)	100 τεμάχια	902T
Υπερλεπτό (λεβάντα σκούρο ή ανοικτό)	100 τεμάχια	903T
Κυλινδρικό (Λευκό ή μαύρο)	100 τεμάχια	904T

premium plus

Disposable Fluoride Trays



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διπλού τόξου small (μικρό) πράσινο χρώμα.	50 τεμάχια	7800S
Διπλού τόξου medium (μεσαίο) κίτρινο χρώμα.	50 τεμάχια	7800M
Διπλού τόξου large (μεγάλο) μπλε χρώμα.	50 τεμάχια	7800L

Autoclavable cheek retractors

Παρειοκάτοχα, αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο.

Για Ενήλικες: (2 τεμάχια/συσκευασία).
Κωδ.: 2050A.


Για Παιδιά: (2 τεμάχια/συσκευασία).
Κωδ.: 2050C.



**4+1
δώρο**

Flexible mixing bowls

Εύκαμπτα μπολ ανάμειξης,
για ανάμειξη αλγινικού και γύψου.

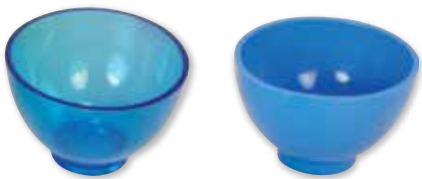

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Μικρό (Ø 11 cm x Υ 8 cm).
Χρώμα: μπλε οπάκ.

7460

Μεσαίο (Ø 12,5 cm x Υ 10 cm).
Χρώμα: μπλε διαφανές, μπλε οπάκ.


7470

Disposable mixing pads

Μπλοκ ανάμειξης μιας χρήσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Μικρό 35 x 45 mm	1 x 100 φύλλα	3220
Μεγάλο 70 x 80 mm	1 x 100 φύλλα	3225

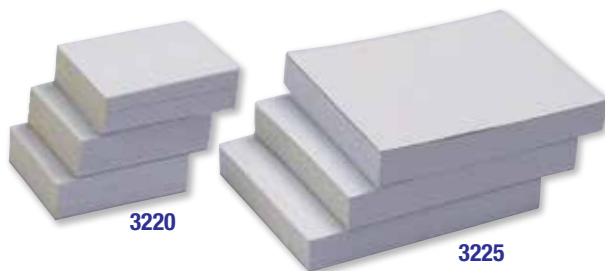

Autoclavable acrylic mixing cups

Κύπελα ανάμειξης ακρυλικού, αποστειρώσιμα
στο αυτόκαυστο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Μικρό Ø 25 mm.

280

Μεσαίο Ø 35 mm.

281

Μεγάλο Ø 50 mm.

282

Autoclavable brass bur brush

Βούρτσα φρεζών από μπρούτζο,
αποστειρώσιμη στο αυτόκαυστο.

- Τηλεσκοπική λαβή
- **Μήκος:** 12 cm
- **Κωδ.:** 1110



Cotton roll dispenser

Διανομέας τολυπίων.

Συρόμενο συρτάρι διανέμει 4 τολύπια τη φορά

- **Χρώμα:** Λευκό
- **Κωδ.:** 1140



Deluxe acrylic composite organiser

Θήκη οργάνωσης σύνθετων ρητινών και συγκολλητικών παραγόντων.

Διαφανές υλικό.

Mini: Για 12 σύριγγες ρητίνης.

- **Διαστάσεις:** πλάτος 19,5 cm, Ύψος 9,5 cm Βάθος 14,5 cm
- **Κωδ.:** M060

ΔΩΡΟ

Με την αγορά
5 σύριγγών ρητίνης
TMR-Z Fill Universal
της εταιρίας Yamakin



Acrylic composite dispenser

Ακρυλική Θήκη-διανομέας σύνθετων ρητινών και συγκολλητικών παραγόντων.

Διαφανές υλικό.

Χωρά 20 σύριγγες ρητίνης.

Κωδ.: H060

ΔΩΡΟ

Με την αγορά
7 σύριγγών ρητίνης
TMR-Z Fill Universal
της εταιρίας Yamakin



Plastic cup dispenser

Διανομέας πλαστικών ποτηριών.

Συγκρατεί 50 ποτηράκια των 150 ml - 200 ml

Αυτοκόλλητο

Διαστάσεις: Ø 100 mm x Μήκος 280 mm

Κωδ.: 1280



Acrylic bib dispenser

Ακρυλικός διανομέας πετσετών.

Διαστάσεις: Πλάτος 15 cm x Βάθος 11 cm x Ύψος 12 cm

Κωδ.: 057



Acrylic barrier film dispenser

Ακρυλικός διανομέας ρολού φιλμ προστασίας.

Διαστάσεις: Πλάτος 14 cm x Βάθος 23 cm x Ύψος 19 cm

Κωδ.: 1155



Autoclavable alginate and plaster spatula

Σπάτουλα για αλγινικό και γύψο, αποστειρώσιμη στο αυτόκαυστο.

Μήκος: 190 mm

Χρώμα: μπλε

Κωδ.: 450 R



Disposable multi-purpose dappen dishes

Μιας χρήσης ιγδύα πολλαπλών εφαρμογών.

Χρώματα: λευκό, λεβάντα, πράσινο, γαλάζιο και κίτρινο.

Συσκευασία:

Standard pack 1.000 τεμάχια σε ασορτί χρώματα.

Κωδ.: 004B.



Autoclavable napkin holders

Πετσετοκάτοχα από σιλικόνη, αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο.

Για Ενήλικες: Μήκος 47 cm, στα χρώματα: μπλε, πράσινο, λεβάντα. **Κωδ.:** 090.

Για Παιδιά: Μήκος 41 cm, στα χρώματα: μπλε και ροζ. **Κωδ.:** 090C.



Autoclavable rubber dam frame

Πλαίσιο ελαστικού απομονωτήρα, αποστειρώσιμο στο αυτόκαυστο.

Κωδ.: 4866



Ξέστρα υπερήχων από ανοξείδωτο ατσάλι

5+1
δώρα

Αφαίρεση υπερουλικής τρυγίας




G1 (EMS, WOODPECKER)
GD1 (SATELEC, DTE)
Υπερουλική τρυγία
σε όλα τα τεταρτημόρια



G4 (EMS, WOODPECKER)
GD4 (SATELEC, DTE)
Εναποθέσεις τρυγίας υπερουλικά
και όμορα



G2 (EMS, WOODPECKER)
GD2 (SATELEC, DTE)
Μεγάλες εναποθέσεις υπερουλικής
τρυγίας στα πρόσθια

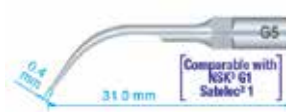

G5 (EMS, WOODPECKER)
GD5 (SATELEC, DTE)
Υπερουλικές εναποθέσεις
τρυγίας σε όλα τα τεταρτημόρια



G3 (EMS, WOODPECKER)
GD3 (SATELEC, DTE)
Υπερουλικές εναποθέσεις
τρυγίας σε όλα τα τεταρτημόρια
συμπεριλαμβανομένων
των μεσοδοντίων και της
ουλοδοντικής σχισμής




G6 (EMS, WOODPECKER)
GD6 (SATELEC, DTE)
Ογκώδεις εναποθέσεις τρυγίας
υπερουλικά

Αφαίρεση υποουλικής τρυγίας



P1 (EMS, WOODPECKER)
PD1 (SATELEC, DTE)
Υποουλικές εναποθέσεις τρυγίας
σε ρηχούς θυλάκους

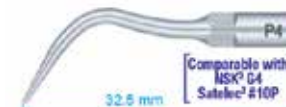

P4 (EMS, WOODPECKER)
PD4 (SATELEC, DTE)
Υποουλικές εναποθέσεις τρυγίας
σε ρηχούς θυλάκους



P3 (EMS, WOODPECKER)
PD3 (SATELEC, DTE)
Υποουλικές εναποθέσεις τρυγίας
σε βαθείς θυλάκους



P3D (EMS, WOODPECKER)
PD3D (SATELEC, DTE)
Εργαλείο με επίστρωση
διαμαντιού για λείανση της ρίζας
σε περιοδική επέμβαση με
κρημό

Ενδοδοντία




E1 (EMS, WOODPECKER)
ED1 (SATELEC, DTE)
120° συγκρατητήρας ρίνης U
για καθαρισμό ριζικού σωλήνα
προςθίων



E3D (EMS, WOODPECKER)
ED3D (SATELEC, DTE)
Εργαλείο με επίστρωση
διαμαντιού για διεύρυνση ριζικού
σωλήνα



E2 (EMS, WOODPECKER)
ED2 (SATELEC, DTE)
95° συγκρατητήρας ρίνης U
για καθαρισμό ριζικών σωλήνων
γομφίων

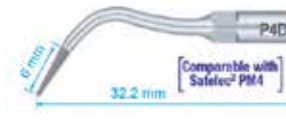

P4D (EMS, WOODPECKER)
PD4D (SATELEC, DTE)
Εργαλείο με επίστρωση
διαμαντιού για διεύρυνση ριζικού
σωλήνα



E3 (EMS, WOODPECKER)
ED3 (SATELEC, DTE)
Τήξη γουταπέρκας

CO1-X

Ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού LED με οδηγό φωτός οπτικών ινών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **4 λειτουργίες:** turbo, πλήρης, εκθετική και ήπιος πολυμερισμός
- **Διπλό μήκος κύματος:** παράγει πολλαπλό μήκος κύματος 390 - 430 nm | 440 - 480 nm για πολυμερισμό όλων των σύνθετων ρητινών της αγοράς
- Ένταση φωτός έως 2000 mW/cm²
- Οδηγός φωτός από οπτικές ίνες. Μπορεί να περιστραφεί κατά 360° και είναι αποστειρώσιμος στο αυτόκαυστο (διάμετρος 11 mm)
- Απλές, διαισθητικές λειτουργίες με προκαθορισμένους χρόνους πολυμερισμού, επιτρέπουν γρήγορη και αποτελεσματική χρήση, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο στην καρέκλα και μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα
- Φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας
- Λεία επιφάνεια χειρολαβής για βελτιωμένο έλεγχο μόλυνσεων, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης
- Αυτόματο κύκλωμα αντιστάθμισης για σταθερή ισχύ εξόδου ακόμα και όταν η μπαταρία είναι χαμηλή
- Σταθμός φόρτισης με ενσωματωμένο μετρητή έντασης φωτός
- Αντικαταστάσιμη μπαταρία
- Βάρος: 173 g
- 7 χρώματα (μαύρο, λευκό, ροζ, μπλε, γαλάζιο, ανοικτό πράσινο, λεβάντα)
- 24μηννη εγγύηση



premium plus

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (MODES)

- **ΠΛΗΡΗΣ**
Για γενική εφαρμογή 1.200 mW/cm²
- **ΗΠΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ**
Για πιο ήπια επεξεργασία, εκθετική αύξηση της έντασης
0-5 δευτ./ 0-900 mW/cm²
5-20 δευτ. 900 mW/cm²
- **TURBO**
Υπερταχύς πολυμερισμός. 2.000 mW/cm² για 4 δευτ.
- **RAMP**
Για γενική εφαρμογή, εκθετική αύξηση της έντασης
0-5 δευτ./ 0-1.200 mW/cm²
5-20 δευτ. 1.200 mW/cm²

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Περιλαμβάνει:

- Χειρολαβή φωτός φωτοπολυμερισμού με σταθμό φόρτισης
- Οδηγός φωτός οπτικών ινών 11mm
- Κάτω μισό χειρολαβής με μπαταρία
- Ασπίδα προστασίας ματιών •
- Καλώδιο USB τύπου-c
- Τροφοδοτικό USB
- Μανίκια προστασίας μιας χρήσης (100 τεμάχια/κουτί)

Disposable self-sealing sterilization pouches



Σακούλες αποστείρωσης με αυτοκόλλητο.

- Έχουν εσωτερικούς και εξωτερικούς δείκτες ατμού
- Έχουν τριπλή σφράγιση που εξασφαλίζει αποστειρωμένη αποθήκευση

External dimensions	Internal dimensions	Κωδικός
Standard Pack, 200 τεμ./κουτί		
57 x 90mm	33 x 57mm	6000
57 x 130 mm	33 x 86mm	6001
90 x 145mm	66 x 98mm	6003
70 x 230mm	46 x 183mm	6005
90 x 230mm	66 x 182mm	6007
135 x 260mm	107 x 209mm	6009
190 x 330mm	280 x 162mm	6011
Standard Pack, 100 τεμ./κουτί		
250 x 380mm	325 x 222mm	6015

Palatal Mirror AE with handle - Lateral Mirror T1 with handle

Καθρέφτες με λαβή, για ενδοστοματική φωτογράφιση.

Έχουν επένδυση επιφανείας από καθαρό χρώμιο.



Υπερώια
ΚΩΔ. 190792

Διαστάσεις καθρέφτη:
10 x 7 cm

Πλάγια
ΚΩΔ. 190791


Διαστάσεις καθρέφτη:
11.7 x 4.5 cm



Glass mirrors

Καθρέφτες για ενδοστοματική φωτογράφιση.

Κατασκευάζονται από γυαλί επίπλευσης, πάχους 3 mm. Έχουν επένδυση από καθαρό χρώμιο και στις δύο επιφάνειές τους.

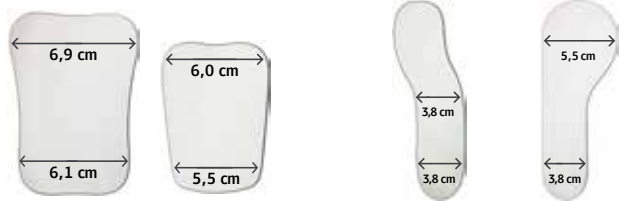

ΥΠΕΡΩΙΑ
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Ύψος: 10 cm
ΚΩΔ. 190 760

ΥΠΕΡΩΙΑ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ύψος: 8,2 cm
ΚΩΔ. 190 761

ΠΛΑΓΙΑ
Ύψος: 15 cm
ΚΩΔ. 190 762

ΓΛΩΣΣΙΚΑ
Ύψος: 15 cm
ΚΩΔ. 190 764




Universal Mirrors

Καθρέφτες ενδοστοματικής φωτογράφισης, για γενική χρήση.

Κατασκευάζονται από γυαλί επίπλευσης, πάχους 3 mm

- Μεγάλος: ΚΩΔ. 190785
- Μικρός: ΚΩΔ. 190786

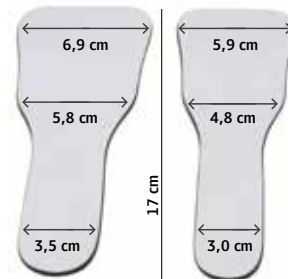

Metallic Blades for Photo

Καθρέφτες για ενδοστοματική φωτογράφιση.

Η μεγάλη επιφάνειά τους είναι για φωτογραφίες σύγκλεισης και η μικρή για γλωσσικές φωτογραφίες.

No 1: μικρό μέγεθος, ΚΩΔ. 190711

No 2: μεγάλο μέγεθος, ΚΩΔ. 190712




Photo kit no2

Κιτ φωτογράφισης.

Περιλαμβάνει κασέτα φύλαξης από ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη, 4 καθρέφτες ενδοστοματικής φωτογράφισης (μεγάλο υπερώια, μικρό υπερώια, πλάγιο και γλωσσικό) και 2 πλαστικά παρειοκάτοχα.

Διαστάσεις: 29x18,3x3,7 cm

Κωδ.: 182735

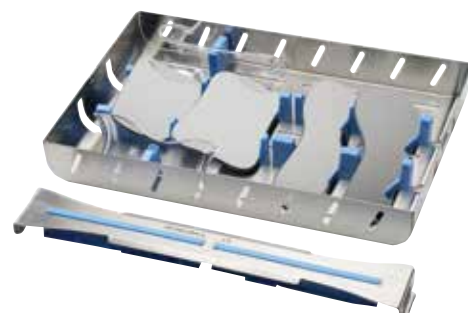

Silicone Palatal Contrastors

Αντικείμενα με αντιχαρακτική επικάλυψη από μαύρη σιλικόνη.

Διατίθενται σε δύο μεγέθη:

Palatal large contrastor: Μεγάλο, ΚΩΔ. 190781

Palatal small contrastor: Μικρό, ΚΩΔ. 190782



ALU Contrastor

Αντικείμενο από μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στην ενδοστοματική φωτογράφιση για να δημιουργεί αντίθεση στην εικόνα και να κρύβει τα άχρηστα στοιχεία.

Διατίθεται σε σετ δύο τεμαχίων: 1 πλατύ και 1 στενό.
Κωδ. 190780



ALU Upper Contrastor

Αντικείμενο από μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στην ενδοστοματική φωτογράφιση για να δημιουργεί αντίθεση στην εικόνα.

Διατίθεται σε σετ δύο τεμαχίων: 1 πλατύ και 1 στενό.
Κωδ. 190776



Silicone Mirror Handle

Εύκαμπτη λαβή για καθρέφτες ενδοστοματικής φωτογράφισης.

Λεπίδα ατσάλιου πλήρως καλυμμένη από σιλικόνη.

Χρώμα: μπλε

Κωδ. 190796




Aluminium Trays

Δίσκοι από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Χρώματα:

1 2 3 4 5 6

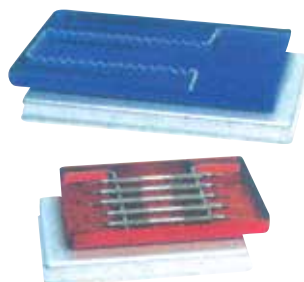

Μικρό Μέγεθος

Βάση: 18 x 14 cm

Κωδ. 181460

Καπάκι: 18 x 14 cm.

Κωδ. 181461

Συγκρατητήρας εργαλείων (10)

Κωδ. 181462

Μεγάλο μέγεθος

Βάση: 28 x 18 cm

Κωδ. 181450

Καπάκι: 28 x 18 cm

Κωδ. 181451

Συγκρατητήρας εργαλείων (16)


Κωδ. 181452

Aluminium Perforated Trays



Δίσκοι διάτρητοι,
από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Χρώματα:

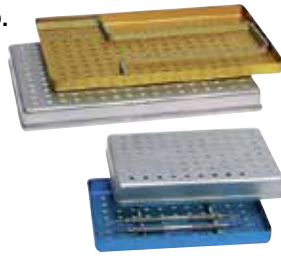

Μικρό Μέγεθος

Βάση: 18 x 14 cm

Κωδ. 184460

Καπάκι: 18 x 14 cm

Κωδ. 184461

Μεγάλο μέγεθος

Βάση: 28 x 18 cm

Κωδ. 184450


Καπάκι: 28 x 18 cm

Κωδ. 184451

Aluminium Trays 20x10 & 20x15

Δίσκοι εργαλείων από αλουμίνιο.

Χρώματα:

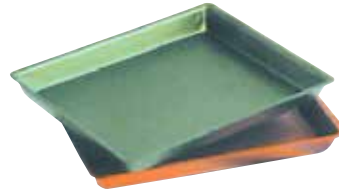

Κωδ. 181470, 20x10 cm, το τεμάχιο

Κωδ. 181480, 20x15 cm, το τεμάχιο

Συγκρατητήρας εργαλείων (10), Κωδ. 181462

Aluminium Boxes

Δοχεία εργαλείων.

Κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο.



Διαστάσεις	Χρώματα	Κωδικός
5x4x3 cm	1 2 3	180004
10x3x2 cm	1	180005
13x5x3 cm	1 2	180007
17x7x3 cm	1 2 3 4 5	180014
18x9x3 cm	1 2 3 4 5	180016

Διαστάσεις	Χρώματα	Κωδικός
18x9x4 cm	1	180017
21x10x3 cm	1 2 3 4 5	180019
21x10x4 cm	1	180020
21x10x5 cm	1 2 3 4 5	180021

Stainless Steel Trays

Δίσκοι εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι.

Βάση 28 x 18 cm

Κωδ. 182450

Καπάκι 28 x 18 cm.

Κωδ. 182451

Συγκρατητήρας εργαλείων (11)

Κωδ. 182452



Stainless steel perforated trays

Δίσκοι εργαλείων διάτρητοι,
από ανοξείδωτο ατσάλι.

Βάση 28 x 18 cm


Κωδ. 185450

Καπάκι 28 x 18 cm

Κωδ. 185451

Συγκρατητήρας εργαλείων (11)

Κωδ. 182452

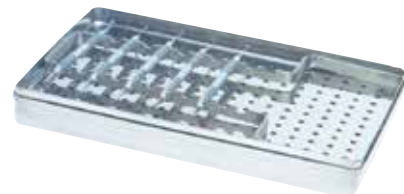

Aluminium Trays 20x10 & 20x15

Εξαιρετικά ελαφριά κασέτα 12 εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι, με σιλικονούχα ένθετα.

Διαστάσεις: 28x18x3,4 cm

Κωδ.: 182037



134 °C
111
111

Ultralight Cassette 18x14

Εξαιρετικά ελαφριά κασέτα 10 εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι, με σιλικονούχα ένθετα.

Διαστάσεις: 18,5x14x3,4 cm

Κωδ.: 182036



134 °C
111
111

Ultralight Cassette 18x7

Εξαιρετικά ελαφριά κασέτα 5 εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι, με σιλικονούχα ένθετα.

Διαστάσεις: 18,5x7,5x3,4 cm

Κωδ.: 182039



134 °C
111
111

Ergo Clip 3, 5 και 10

Δίσκοι εργαλείων κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη.

Διατίθενται:

Ergo Clip 3

Έχει συγκρατητήρα 3 εργαλείων.

Διαστάσεις: 18,4 x 8 x 2,7 cm.

Μπλε σιλικόνη **2** Κωδ. 182703-2

Πράσινη σιλικόνη **4** Κωδ. 182703-4

Ergo Clip 5

Έχει συγκρατητήρα 5 εργαλείων.

Διαστάσεις: 18,4 x 11 x 2,7 cm

Μπλε σιλικόνη **2** Κωδ. 182700-2

Πράσινη σιλικόνη **4** Κωδ. 182700-4

Ergo Clip 10

Έχει συγκρατητήρα 10 εργαλείων.

Διαστάσεις: 18,4 x 15 x 2,7 cm

Μπλε σιλικόνη **2** Κωδ. 182710-2

Πράσινη σιλικόνη **4** Κωδ. 182710-4



134 °C
111
111

Easy clip 10

Κασέτα 10 εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι, με σιλικονούχα ένθετα.

Χρώματα ενθέτων:

1 2 3 4 5 7 8 9 13

Διαστάσεις: 18 x 12,8 x 3 cm

Κωδ. 182910



Galaxy cassettes

Κασέτες εργαλείων inox με υψηλής ποιότητας πλέγμα για αποτελεσματικότερο καθαρισμό των εργαλείων.

Έχουν ένθετα σιλικόνης κι εργονομικό κλείδωμα.

Διατίθενται σε:

- Galaxy Cassette 28 x 18 με αποσπώμενο καπάκι

Διαστάσεις: 28,5 x 18 x 3,4 cm

Για 12 εργαλεία + ελεύθερη περιοχή

Κωδ. 182027



Χρώματα ενθέτων σιλικόνης:

2 3 4 5 7 13

- Galaxy Cassette 18 x 14

Διαστάσεις: 18,5 x 14 x 3,4 cm

Για 10 εργαλεία

Κωδ. 182046



Micro Cassette 1, 2, 3

Θήκες καθαρισμού και αποστείρωσης για όλα τα εργαλεία και εξαρτήματα που δεν έχουν ειδικές θήκες συγκράτησης όπως: τα ξέστρα, οι αρπάγες, εξαρτήματα εμφυτευματολογίας κλπ.

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
Micro Cassette 1	7,4 x 4 x 1,4	182060
Micro Cassette 2	7,4 x 5,9 x 2,4	182070
Micro Cassette 3	4 x 5,5 x 2	182040



ALU sterilization containers

134 °C
111
111

Αλουμινένια δοχεία για φύλαξη κασετών εργαλείων.

Στοιβαζόμενα. Μπορούν να εξοπλιστούν με φίλτρο τεφλόν (σποτελεσματικό για έως 2000 κύκλους) ή φίλτρο χαρτιού μιας χρήσης.

Έχουν σύστημα σφράγισης ασφαλείας κι ετικέτα ταυτοποίησης εργαλείων.

Διατίθενται:

- Για κασέτες **18 x 14 με αποσπώμενο καπάκι** - Κωδ. 300350

Διαστάσεις:

- εξωτερικές 22,4 x 16,8 x 5,5 cm

- εσωτερικές 20,2 x 15,9 x 4 cm

Φίλτρο Τεφλόν, Κωδ. 187447

Φίλτρα χαρτιού, 100 τεμ. Κωδ. 187468

- Για κασέτες **28 x 18** - Κωδ. 300300

Διαστάσεις:

- εξωτερικές 32,2 x 20,8 x 5,5 cm

- εσωτερικές 29,9 x 19,9 x 4 cm

Φίλτρο Τεφλόν, Κωδ. 187446

Φίλτρα χαρτιού, 100 τεμ. Κωδ. 187458

Χρώματα:



Plug' in 20 holes

Φρεζοθήκη από ανοξείδωτο ατσάλι και ασορτί χρωματιστούς σιλικονούχους σωληνίσκους. Συγκρατεί 20 φρέζες.

134 °C
111
111

Διαστάσεις: 9,7 x 2,5 x 3,4 cm

- εσωτερικές 29,9 x 19,9 x 4 cm

Κωδ. 190214



Plug' in 16 holes

Φρεζοθήκη από ανοξείδωτο ατσάλι και χρωματιστούς σιλικονούχους σωληνίσκους. Συγκρατεί 16 φρέζες.

134 °C
111
111

Χρώματα σιλικονούχων σωληνίσκων: 2 3 4 5

Διαστάσεις: 8,6 x 2,5 x 3 cm

Κωδ. 190 212



Plug' in 8 Holes

Φρεζοθήκη από ανοξείδωτο ατσάλι και χρωματιστούς σιλικονούχους σωληνίσκους. Συγκρατεί 8 φρέζες.

Χρώματα σιλικονούχων σωληνίσκων: **2 3 4 5**

Διαστάσεις: 4,6 x 2,5 x 3 cm

Κωδ. 190 210



134 °C
111
111
111

Endo Pro 8/ Endo Pro 12 with Sterimeter

Θήκες από ανοξείδωτο ατσάλι και τεφλόν για 8 & για 12 εργαλεία ενδοδοντίας.

Διατίθενται σε:

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Endo Pro8	7,7 x 5,8 x 2 cm	182350
Endo Pro12	9,2 x 5,8 x 2 cm	182360




134 °C
111
111
111

Endo Star

Θήκες από ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη για εργαλεία ενδοδοντίας και φρέζες.

Διατίθενται σε:

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Endo Star 8 θέσεων	7,3 x 2,5 x 5 cm	182170
Endo Star 12 θέσεων	9,4 x 2,5 x 5 cm	182180

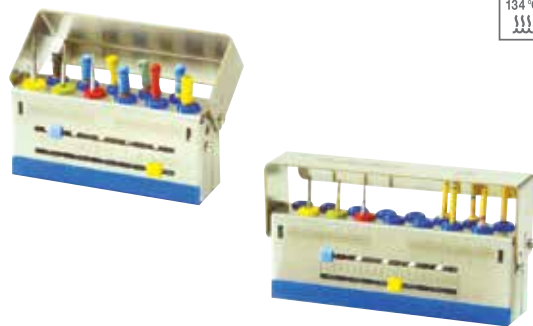

134 °C
111
111
111

Endo Flash

Θήκη από τεφλόν και ανοξείδωτο ατσάλι για εργαλεία ενδοδοντίας.

Διατίθενται σε:

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Endo Flash 8 θέσεων	7,3 x 1,3 x 4,8 cm	182108
Endo Flash 12 θέσεων	9 x 1,3 x 4,8 cm	182112
Κέρσορες	(Σετ των 12 για κάθε χρώμα) 2 3 4 5	182370




134 °C
111
111
111

Mini Endo

Θήκη από ανοδιωμένο αλουμίνιο για 60 εργαλεία ενδοδοντίας.

Διατίθεται στα χρώματα: **1 2 3 4**

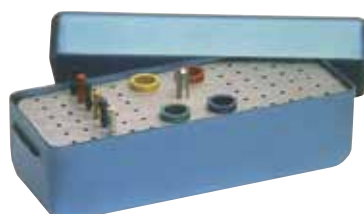

Διαστάσεις: 14 x 5,5 x 5 cm

Κωδ. 180 193

134 °C
111
111
111

Mini Endo with Clean Grripp

Θήκη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
για 36 εργαλεία ενδοδοντίας.

Διατίθεται στα χρώματα: **1 2 3 4**

Διαστάσεις: 14 x 5,5 x 5 cm

Κωδ. 180 192



Endo Total

Θήκη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
για 30 εργαλεία ενδοδοντίας.

Διατίθεται στα χρώματα: **1 2**

Δεν μπαίνει σε λουτρό υπερήχων.

Διαστάσεις: 12 x 9 x 6 cm

Κωδ. 180 193



Endo Cassettes

Εργονομικές θήκες εργαλείων ενδοδοντίας
από ανοξείδωτο ατσάλι, με ένθετο τεφλόν.



ENDO CASSETTE 1

με 16 θέσεις για εργαλεία ενδοδοντίας

Διαστάσεις: 3,5 x 3,9 x 5 cm

Κωδ. 182 151



ENDO CASSETTE 2

με 32 θέσεις για εργαλεία ενδοδοντίας

Διαστάσεις: 6,5 x 4,3 x 5 cm

Κωδ. 182 150



Endo ECO

Μεγάλου μεγέθους θήκη από ανοδιωμένο
αλουμίνιο, για 180 εργαλεία και υλικά
ενδοδοντίας.

Χρώματα: **1 2 3 4 5**

Διαστάσεις: 22 x 10,5 x 5 cm

Κωδ. 180 195














Occlusion Foil 12μ.

Συνθετικό φύλλο ελέγχου σύγκλεισης, πάχους 12μ.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

		 22 mm x 25 m No. Είδους	 80 mm x 25 m No. Είδους
ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ		480 021	480 031
		480 022	480 032
		480 023	480 033
			480 037
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ		480 041	480 051
		480 042	480 052
		480 043	480 053
			480 057
		480 165	

HANEL

Occlusion Foil 12μ. White

Συνθετικό φύλλο ελέγχου σύγκλεισης, λευκό.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πλάτος 22mm μονής όψης	25 m	480 028
Πλάτος 80 mm μονής όψης	25 m	480 038
Πλάτος 22 mm διπλής όψης	25 m	480 048
Πλάτος 80mm διπλής όψης	25 m	480 058

Χαρτί άρθρωσης 80μ. και 40μ. για μέτριας ευαισθησίας έλεγχο των επαφών



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

		80 μ.	40 μ.	
		Φύλλα	No. Είδους	No. Είδους
	72		480 367	480 337
	72		480 364	
	72			480 332
	144		480 377	
			480 374	
	144 (20 mm x 105 mm)		480 387	
			480 384	
	120 (22 mm x 110 mm)			480 352
				480 357
				480 354
	15m (22 mm εύρος)			480 322
				480 327

Shimstock Foil 8μ.

Μεταλλικό φύλλο ελέγχου σύγκλισης.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ρολό πλάτους 8 mm x 5 m	480 180

Θερμοπλαστικά φύλλα

Essix® Ace® Plastic

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Aligners και συσκευές διατήρησης αποτελέσματος.

- Ειδικά σχεδιασμένο για μικρή οδοντική μετακίνηση χρησιμοποιώντας το σύστημα Hilliard
- Τέλειο για προσωρινές γέφυρες με ενσωμάτωση ακρυλικών δοντιών
- Δέχεται ακρυλικά/συγκολλητικούς παράγοντες
- Διαυγές φύλλο με προστατευτικό φιλμ και στις δύο πλευρές
- Μέση διάρκεια ζωής του νάρθηκα: 18-24 μήνες
- **Πάχνη:** .030" (3/4 mm) , .035" (7/8 mm), .040" (1 mm)



Προσφορά

Αγοράζοντας
100 τεμαχία

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Essix® Plus® Plastic

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Συσκευές διατήρησης αποτελέσματος και συσκευές βρουξισμού.

- Εξαιρετική διαύγεια κι αντοχή
- Εύκολο στη διαμόρφωση και την κοπή, εξαιρετική αντοχή στην αποτριβή και την κρούση
- Δέχεται ακρυλικά/συγκολλητικούς παράγοντες
- Έχει προστατευτικό φιλμ και στις δύο πλευρές
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για aligners και προσωρινές γέφυρες
- **Πάχνη:** .035" (7/8 mm), .040" (1 mm)



Προσφορά

Αγοράζοντας
100 τεμαχία

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Τύπος C+

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Aligners και συσκευές διατήρησης αποτελέσματος για βρουξιστές.

- Μέση διάρκεια ζωής: 24 μήνες
- Δεν δέχεται ακρυλικά / συγκολλητικούς παράγοντες
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για bite planes
- **Πάχος:** .040" (1 mm)



Προσφορά

Αγοράζοντας
100 τεμαχία

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Essix® Tray Rite® Plastic

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Δισκάρια λεύκανσης

- Εμποδίζει τη διαρροή του υλικού λεύκανσης στο στόμα
- Δεν χρειάζονται θέσεις ρεζερβουάρ όταν κατασκευάζεται σε συσκευή κενού
- **Πάχος:** .020" (1/2 mm)



Προσφορά

Αγοράζοντας
100 τεμαχία

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

MI Stainless Burs

Στρογγυλές φρέζες γωνιακής μικρομότορ, για ασφαλέστερη αφαίρεση της τερηδόνας.

Κάνουν επιλεκτική κοπή της απασβεστωμένης οδοντίνης.

Οι στρογγυλές φρέζες της MANI σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν να αφαιρούν επιλεκτικά μαλακή, τερηδοποιημένη οδοντίνη χωρίς να αποκόπτουν υγιή οδοντίνη.


Μεγέθη

- Διατίθενται σε 3 μήκη και σε 7 μεγέθη κεφαλής.
- Οι φρέζες μήκους 28 mm προσφέρουν μήκος για πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές.
- Οι φρέζες μήκους 34 mm προσφέρουν βελτιωμένη ορατότητα κεφαλής και είναι ιδανικές για χρήση με το **μικροσκόπιο**.

Μέγεθος	Διάμετρος Κεφαλής Φρέζας
1/2	0.6 mm
1	0.8 mm
*2	1.0 mm
3	1.2 mm

Μέγεθος	Διάμετρος Κεφαλής Φρέζας
4	1.4 mm
5	1.6 mm
*6	1.8 mm

Μέγιστο R.P.M.: 22, 28 mm: 1200 r.p.m.
34 mm: 800 r.p.m.

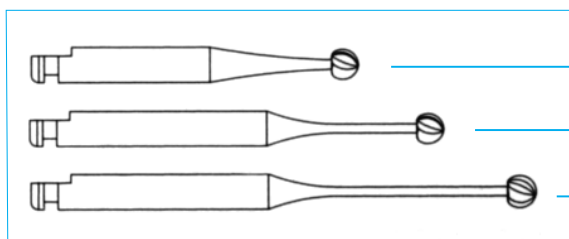

Οι MI Stainless Burs:

- Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι και μπορούν να αποστειρώνονται στο αυτόκαυστο επανειλημμένα χωρίς κίνδυνο διάβρωσης.



Πριν την αποστείρωση

Μετά 10 κύκλους στο αυτόκαυστο

- Έχουν λεπίδες κοπής με εξαιρετική αντοχή στη φθορά, λόγω της σκληρότητας του ανοξείδωτου ατσαλιού.



Μετά την πρώτη χρήση


Μετά 10 χρήσεις

MANI®

Εργαλεία ριζικού σωλήνα

MANI RT FILES

Ρίνες από ανοξείδωτο ατσάλι με υψηλή κοπτική ικανότητα και ευλιγυσία.

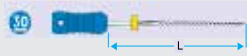


- Έχουν βελτιωμένη ελαστικότητα
- Έχουν υψηλή ικανότητα κοπής
- Με τον σχεδιασμό τους λιγοστεύουν τις πιθανότητες ώθησης των ξεσμάτων προς το ακρορριζίο
- Προκάμπνεται
- Αντέκουν στην θραύση

Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μεμονωμένα :	15, 20, 25, 30, 35, 40
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6), 45(7) ~ 80(12)

MANI FLARE FILES

Ρίνες με αναλογία κωνικότητας 5/100 (οι ISO files έχουν 2/100) οι οποίες αποδίδουν ένα σωστό κωνικό σχήμα στον ριζικό σωλήνα, μόνο με την χρήση τους. Με τις Flare Files η διαδικασία συντομεύει σημαντικά, συγκριτικά με την κλασική τεχνική step-back.

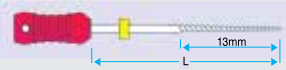

Το τριγωνικό σχήμα της διατομής των Flare Files βελτιώνει την ευκαμψία και την ικανότητα κοπής τους. Οι ρίνες αυτές είναι χρήσιμες στην επεξεργασία κεκαμμένων ριζικών σωλήνων.

Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασσορτί :	15 ~ 40

MANI D FINDERS

Ρίνες από ανοξείδωτο ατσάλι για την αρχική διεύθυνση του ριζικού σωλήνα.




- Έχουν εξαιρετική αντοχή και αντίσταση στη διάβρωση
- Έχουν σχήματος D διατομή του τμήματος εργασίας η οποία επιτρέπει να φτάσει η άκρη του εργαλείου εύκολα στο ακρορριζίο, προλαμβάνοντας υπερβολική κοπή σε ενασβεστωμένους ή κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες
- Παρουσιάζουν αντίσταση στη θραύση

Μήκος (L) :	21 mm, 25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	08, 10


MANI SHORT BARBED BROACHES

Κοντοί πολφουλκοί με μεταλλική λαβή.

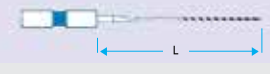


Μήκος (L) :	21mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	1 (xxxf), 2 (xxf), 3 (xf), 4 (f), 5 (m), 6 (c)
Ασσορτί :	2 (xxf) - 4 (f)

MANI REAMERS

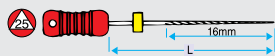

Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	06(000)~ 140(18)
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6), 45(7) ~ 80(12), 90(13) ~ 140(18)

MANI K FILES

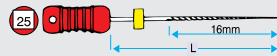


Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	06(000)~ 140(18)
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6), 45(7) ~ 80(12), 90(13) ~ 140(18)

MANI H FILES



Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	08(00)~ 80(12)
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6), 45(7) ~ 80(12)

MANI APICAL REAMERS

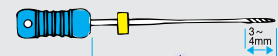

Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασσορτί :	20(2) ~ 70(11)

MANI ENGINE REAMERS




Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6)

MANI ENGINE H-FILES



Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6)

MANI FLEXILE FILES

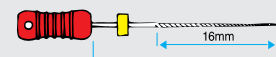


Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6)

MANI ULTRASONIC FILES




Μήκος (L) :	33mm
Διάμετρος στελέκους :	0.8, 1.0mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6)

MANI PASTE CARRIERS

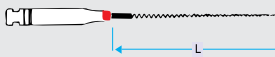


Lentulo.	
Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	4 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	25,30,35,40
Ασσορτί :	25 ~ 40

MANI SEC-O FILES

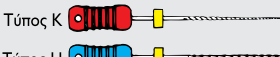


Τύπος K	
Τύπος H	
Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασσορτί :	15 ~ 40

MANI SUPER FILES

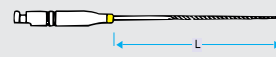

Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασσορτί :	15 ~ 40

MANI GATES DRILLS

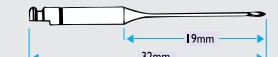

Μήκος (L) :	32mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	1,2,3,4,5,6
Ασσορτί :	1~ 6

MANI SPREADERS



Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	15,20,25,30,35,40
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6)

MANI PLUGGERS



Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6)

8+2
δώρα

Paper Points Length Marked

Κώννοι χάρτου με σήμανση μήκους.

Σήμανση μήκους στα 16mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm, 24mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Paper Points Standard Length Marked.


Συρταρωτό κουτί των 200 τεμαχίων στα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 και σε ασορτί: 15-40, 45-80.

Paper Points Taper 0,04 Length Marked.

60 τεμάχια στα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 και σε ασορτί: 15-40, 45-80.

Paper Points Taper 0,06 Length Marked.

60 τεμάχια στα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 και σε ασορτί: 15-40.

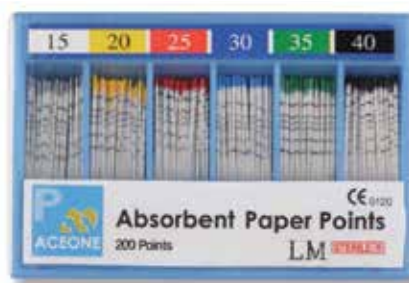

4+1 ή **10+5**
δώρα δώρα

Guttapercha Points Length Marked

Κώννοι γουταπέρκας με σήμανση μήκους.

Έχουν σήμανση μήκους στα 16, 18, 19, 20, 22, και 24 mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Guttapercha Points ISO Standard Length Marked.

Συρταρωτό κουτί των 120 τεμαχίων στα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 και σε ασορτί: 15-40, 45-80.

Guttapercha Points Taper 0,04 Length Marked.

60 τεμάχια στα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 και σε ασορτί: 15-40.

Guttapercha Points Taper 0,06 Length Marked.

60 τεμάχια στα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 και σε ασορτί: 15-40.



4+1 ή **10+5**
δώρα δώρα



Calxyl Πάστα



Πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου για αντισηψία και προσωρινή έμφραξη των ριζικών σωλήνων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σύριγγα των 3g και 5 ρύγχη μιας χρήσης



OrthoMTA

Υλικό επιδιόρθωσης ρίζας και έμφραξης του ριζικού σωλήνα.

Το OrthoMTA είναι ένα υλικό έμφραξης του ριζικού σωλήνα. Η σύνθεσή του έχει ως ενεργό συστατικό το συσσωμάτωμα τριοξειδίων μετάλλων μέσω μιας **εμβιο-κεραμικής διαδικασίας παρασκευής**.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Επιδιόρθωση διάτρησης στο ακρορριζικό τριτημόριο
- Ρωγμές
- Διαχωρισμός ρίνης εντός του ριζικού σωλήνα
- Εσωτερική απορρόφηση ρίζας
- Ακρορριζιογένεση
- Προκλητή απόφραξη ακρορριζίου
- Έμφραξη του ριζικού σωλήνα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική εμφρακτική ιδιότητα
- Αντιβακτηριακή δράση χάρη στο υψηλό αρχικό του pH (12,5) και τον ενταφιασμό των βακτηρίων μέσω της δημιουργίας C-S-H και υδροξυαπατίτη εντός των οδοντινοσωληναρίων
- Βιοσυμβατότητα με τους περιβάλλοντες ιστούς
- Καλή ακτινοσκιερότητα
- Καθόλου βαρέα μέταλλα (Καθόλου CR6+, As, Ni, Fe)
- Καθόλου διαστολή (0,09%)
- Αρχική πήξη: 180 λεπτά
- Τελική πήξη: 360 λεπτά
- Εύκολες μέθοδοι χειρισμού
- Δυνατότητα επανάληψης Θεραπείας
- Αποδεδειγμένο, αξιολογημένο ποσοστό μακροχρόνιας κλινικής επιτυχίας
- Χρώμα: λευκό



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

• Biofilling Starter Kit

Περιλαμβάνει:

- 1 μεταφορέα
- 1 συμπτικνωτήρα
- 2 συμπτιστήρες 21 mm
- 2 συμπτιστήρες 25 mm
- 1 ρίνη K
- 1 εργαλείο κάμψης βελονών
- 1 έμβολο
- 4 φιαλίδια OrthoMTA 0,2g
- 3 άκρα βελόνας
- 3 μπατονέτες
- 2 αμπούλες απεσταγμένο νερό
- 3 ρητινώδη μπλοκ με ομοίωμα ριζικού σωλήνα για εξάσκηση.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

5 φιαλίδια OrthoMTA των 0,2 g

50 φιαλίδια OrthoMTA των 0,2 g

Pluggers

Εργαλεία κάθετης συμπίκνωσης κατά την έμφραξη του ριζικού σωλήνα.



Pluggers OMP-02

Διάμετροι άκρων: 0,3 mm (NiTi) και 1,0 mm (ατσάλι)



Pluggers OMP-03

Διάμετροι άκρων: 1,0 mm και 0,25 mm (ατσάλι)



Pluggers OMP-04

Διάμετροι άκρων: 0,5 mm και 0,8 mm (ατσάλι)



Pluggers OMP-05

Διάμετροι άκρων: 0,25 mm και 1,0 mm (ατσάλι)

RetroMTA

Υλικό επιδιόρθωσης ρίζας και θεραπείας ζωντανού πολφού.

Το RetroMTA είναι ένα υδραυλικό βιοκεραμικό υλικό για επιδιόρθωση ρίζας και θεραπεία ζωντανού πολφού. Το RetroMTA αποτελείται από μικρά, υδρόφιλα σωματίδια τα οποία πηζουν με την παρουσία νερού.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Επιδιόρθωση διάτρησης στο μυλικό τριτημόριο της ρίζας και μεσορριζικά
- Εξωτερική απορρόφηση ρίζας
- Ανάστροφη έμφραξη
- Αναφύτευση δοντιού
- Κάλυψη πολφού
- Πολφοτομή
- Πολφεκτομή
- Ουδέτερο στρώμα
- Υλικό βάσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική έμφραξη
- Εξαιρετική αντιβακτηριακή δράση: Το αρχικό του pH είναι 11,5 και την 4η εβδομάδα μειώνεται έως 7,8-8,0
- Γρήγορη πήξη σε 180 δευτερόλεπτα
- Αντοχή στη θλίψη που φθάνει τα 105 MPa
- Δεν αποχρωματίζει το δόντι
- Δεν περιέχει βαρέα μέταλλα (καθόλου Cr, As, Ni, Bi, Fe, Cd)
- Μη κυτταροτοξικό
- Έχει καλή ακτινοσκιερότητα
- Χρώμα λευκό



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

2 κάψουλες των 0,3 g

8 κάψουλες των 0,3 g



Neoniti

Μηχανοκίνητο σύστημα ενός εργαλείου, από κράμα νικελίου-τιτανίου (NiTi) για την επεξεργασία των ριζικών σωλήνων.



Η πρωτοποριακή κατεργασία EDM (Electrical discharge machining - Επεξεργασία με Ηλεκτρική Εκφόρτιση) επιτρέπει την κατασκευή ενός καινοτόμου εργαλείου NiTi με μοναδική και αξιόπεραστη απόδοση στην κλινική χρήση.

Το εργαλείο είναι εξαιρετικά εύκαμπτο, παρόλο που η επιφάνειά του εμφανίζει υψηλή επιφανειακή σκληρότητα και αδρότητα.

Χάρη στο μοναδικό αυτό συνδυασμό χαρακτηριστικών και στην ορθογώνια διατομή του, το NEONITI διαθέτει αποτελεσματικές κοπτικές αιχμές, επιφάνειες λειοτρίβησης και προοδευτική ευκαμψία, με αποτέλεσμα την απαραίτητη ΚΟΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ και ΑΝΤΟΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν “βιδώνει” εντός του ριζικού σωλήνα
- Μεγάλη κοπτική ικανότητα
- Υψηλή αντοχή ενάντια στη θραύση
- Αποτελεσματικός καθαρισμός μέχρι το ακρορρίζιο
- Κατάλληλο και για την επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας (retreatment)
- Επίσης κατάλληλο για δύσκολες ρίζες (λειπτές, κεκαμμένες, ενασβεστωμένες)
- Παραγωγή ριζισμάτων μικρού μεγέθους ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος μπλοκαρίσματος του ριζικού σωλήνα
- Δυνατότητα να δοθεί πρόκαμψη στο εργαλείο, για περιπτώσεις με δύσκολη πρόσβαση ή σωλήνες με σκαλοπάτια (ledge)
- Σεβασμός στην ανατομία του ριζικού σωλήνα (χωρίς ευθυσασμούς, χωρίς σκαλοπάτια)

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Παγκοσμίως μοναδική διαδικασία κατασκευής, βασισμένη σε Επεξεργασία με Ηλεκτρική Φόρτιση. (EDM Electrical discharge machining).



Η διαδικασία EDM χαρακτηρίζεται από τους σπινθήρες που παράγονται από ηλεκτρικές εκκενώσεις υψηλής ενέργειας και υψηλής συχνότητας μεταξύ του μεταλλικού στοιχείου (π.χ. του εργαλείου neoniti) και ενός ηλεκτροδίου (π.χ. του σύρματος κοπής).

Αυτό οδηγεί σε τοπική τήξη και εξάτμιση του υλικού του εργαλείου με αποτέλεσμα την επίτευξη της επιθυμητής γεωμετρίας στο τελικό προϊόν.



Προοδευτική ευκαμψία



Σκληρές κοπτικές αιχμές



Αδρή/αποτριπτική επιφάνεια

Απλή διαδικασία

1 Δημιουργία glidepath:

- Παρασκευάστε την κοιλότητα διάνοιξης
- Μετά τον υπολογισμό του μήκους εργασίας, προχωρήστε σε διεύρυνση του ριζικού σωλήνα με εργαλεία K6, K8, K10 ή K15.




2 Διεύρυνση του στομίου του ριζικού σωλήνα

- Αφαιρέστε την υπερκείμενη του στομίου οδοντίνη.
- Προγραμματίστε κινήσεις περιφερικού ριναμού.




3 Διαμόρφωση/Επανασχηματισμός/Αποκατάσταση

- Χρησιμοποιήστε το A1 μέχρι το μέσο τριτομόριο χρησιμοποιώντας 3 ή 4 κινήσεις περιφερικού ριναμού.
- Επιβεβαιώστε εκ νέου το μήκος εργασίας με μια ρίλη K.
- Φορέστε με το A1 στο μήκος εργασίας κάνοντας κινήσεις πάνω-κάτω.

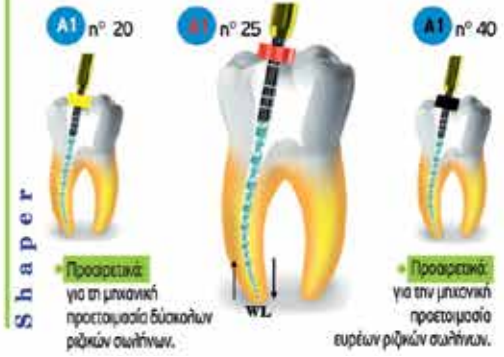

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Βαθμιαία παρασκευή του ριζικού σωλήνα από τη μύλη προς το ακρορρίζιο (Crown down technique)
- Συνεχής περιστροφή
- Ταχύτητα 300-500 rpm
- Όριο ροπής 1,5 N cm
- Να χρησιμοποιείτε συνεχώς υγρά διακλυσμών
- **Να σκουπίζετε τακτικά το εργαλείο.**

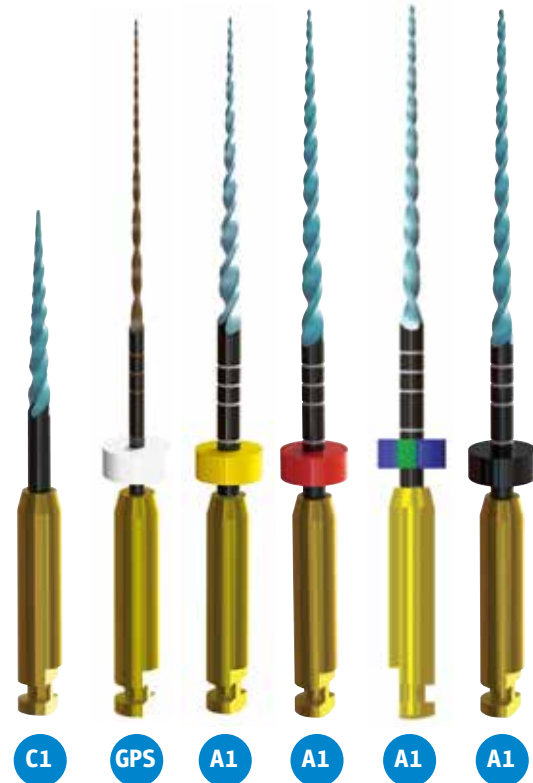

Μέγεθος	25	15	20	25	30	40
Κωνικότητα	.12	.03	.04	.04	.04	.04
	-	-	.06	.06	-	-
Μήκος	15 mm	21 mm, 25 mm & 31 mm				

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		Μήκος (mm)	ΚΩΔΙΚΟΙ	
			5 ρίβες/κουτί	3 ρίβες/κουτί
ΑΝΤΑΝΤΑΚΤΙΚΑ	Neoniti C1 n°25/.12 Orifice opener	15	NXA 01 002 01 005	NXA 01 002 01 003
	Neoniti GPS n°15/.03 Glide path	21 25 31	NXA 01 007 02 005 NXA 01 007 01 005 NXA 01 007 03 005	NXA 01 007 02 003 NXA 01 007 01 003 NXA 01 007 03 003
	Neoniti A1 n°20/.04 Shaper	21 25 31	NXA 01 008 02 005 NXA 01 008 01 005 NXA 01 008 03 005	NXA 01 008 02 003 NXA 01 008 01 003 NXA 01 008 03 003
	Neoniti A1 n°20/.06 Shaper	21 25 31	NXA 01 005 02 005 NXA 01 005 01 005 NXA 01 005 03 005	NXA 01 005 02 003 NXA 01 005 01 003 NXA 01 005 03 003
	Neoniti A1 n°25/.04 Shaper	21 25 31	NXA 01 009 02 005 NXA 01 009 01 005 NXA 01 009 03 005	NXA 01 009 02 003 NXA 01 009 01 003 NXA 01 009 03 003
	Neoniti A1 n°25/.06 Shaper	21 25 31	NXA 01 003 02 005 NXA 01 003 01 005 NXA 01 003 03 005	NXA 01 003 02 003 NXA 01 003 01 003 NXA 01 003 03 003
	Neoniti A1 n°30/.04 Finisher	21 25 31	NXA 01 010 02 005 NXA 01 010 01 005 NXA 01 010 03 005	NXA 01 010 02 003 NXA 01 010 01 003 NXA 01 010 03 003
	Neoniti A1 n°40/.04 Finisher	21 25 31	NXA 01 006 02 005 NXA 01 006 01 005 NXA 01 006 03 005	NXA 01 006 02 003 NXA 01 006 01 003 NXA 01 006 03 003

ΑΣΙΟΠΤΙ - 5 ρίβες/κουτί				Μήκος	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΕΣΥΦΑΤΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	no. 1	C1 - 25/.12	GPS - 15/.03	21 25 31	no. 1 NXA 01 004 08 005 NXA 01 004 04 005 NXA 01 004 09 005
		GPS - 15/.03	A1 - 20/.04		
		A1 - 20/.06	A1 - 25/.04		
		A1 - 25/.06	A1 - 30/.04		
	no. 2	A1 - 25/.06	A1 - 20/.06	21 25 31	no. 2 NXA 01 004 18 005 NXA 01 004 16 005 NXA 01 004 20 005
		A1 - 40/.04	A1 - 25/.04		
		A1 - 25/.06	A1 - 30/.04		
		A1 - 40/.04	A1 - 25/.06		
	no. 3	A1 - 25/.06	A1 - 20/.06	21 25 31	no. 3 NXA 01 004 19 005 NXA 01 004 17 005 NXA 01 004 21 005
		A1 - 40/.04	A1 - 25/.04		
		A1 - 25/.06	A1 - 30/.04		
		A1 - 40/.04	A1 - 25/.06		
	no. 4	A1 - 25/.06	A1 - 20/.06	21 25 31	no. 4 NXA 01 004 27 005 NXA 01 004 24 005 NXA 01 004 26 005
		A1 - 40/.04	A1 - 25/.04		
		A1 - 25/.06	A1 - 30/.04		
		A1 - 40/.04	A1 - 25/.06		

3+1
δωρο

EDMAX

Μηχανοκίνητες ρίνες (NiTi) με υψηλή κοπτική ικανότητα και αντίσταση στην κυκλική κόπωση.

- Έχουν ραβδωτές, αιχμηρές ακμές κοπής για υψηλή κοπτική ικανότητα.
- Έχουν υποστεί την πρωτοποριακή κατεργασία EDM.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		NiTi Files		Μήκος	4 ρίνες/κουτί
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	EDMax Opener 20/.10			15 mm	NXE 03 002 01 004
	EDMax Glide path 15/.03			21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 007 02 004 NXE 03 007 01 004 NXE 03 007 03 004
	EDMax Shaper 20/.04			21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 008 02 004 NXE 03 008 01 004 NXE 03 008 03 004
	EDMax Shaper 20/.06			21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 005 02 004 NXE 03 005 01 004 NXE 03 005 03 004
	EDMax Shaper 25/.04			21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 009 02 004 NXE 03 009 01 004 NXE 03 009 03 004
	EDMax Shaper 25/.06			21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 003 02 004 NXE 03 003 01 004 NXE 03 003 03 004
	EDMax Finisher 30/.04			21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 010 02 004 NXE 03 010 01 004 NXE 03 010 03 004
	EDMax Finisher 40/.04			21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 006 02 004 NXE 03 006 01 004 NXE 03 006 03 004
ΑΣΣΟΡΤΙ	Assorted #1			21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 012 02 004 NXE 03 012 01 004 NXE 03 012 03 004
	Assorted #2			21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 004 02 004 NXE 03 004 01 004 NXE 03 004 03 004
	Assorted #3			21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 013 02 004 NXE 03 013 01 004 NXE 03 013 03 004
	Assorted #4			21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 014 02 004 NXE 03 014 01 004 NXE 03 014 03 004

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Crown Down • Ταχύτητα 500 rpm • Όριο ροπής 1,5 N.cm | <ul style="list-style-type: none"> • Συνεχής περιστροφή • Κίνηση βουρτσίματος προς τα οδοντικά τοιχώματα | <ul style="list-style-type: none"> • Διαρκώς κάνετε διακλυσμούς στο ριζικό σωλήνα και καθαρίζετε τη ρίνη από ξέσματα | <ul style="list-style-type: none"> • Σταματήστε την επεξεργασία αμέσως μόλις συναντήσετε αντίσταση στο μήκος εργασίας. |
|---|--|---|---|

Τύπος σωλήνα	Opener	Glide Path	Shaper				Finisher	
	20/.10	15/.03	20/.04	20/.06	25/.04	25/.06	30/.04	40/.04
Ευρύς	●	●	○	○	●	○	●	○
Μεσαίος	●	●	○	●	○	●	○	○
Στενός	●	●	●	○	○	○	○	○

Για επαναλήψεις, το EDMax 20/0.6 επιτρέπει επίσης να αφαιρέσετε αποτελεσματικά τη γουταπέρκα.

Isodam®

Βραβευμένος ελαστικός απομονωτήρας, χωρίς λάτεξ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Συνθετικό πολυισοπρένιο, μη κατασκευασμένο με λατέξ από φυσικό καουτσούκ
- 100% μη τοξική χρωστική ουσία
- Μη αποστειρωμένο / Μίας χρήσης

4+1
δωρό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μεγέθη	Χρώμα	Πάχος	Τεμάκια
5" x 5"	Γαλάζιο	Medium 0,18 - 0,23 mm	20
6" x 6"	Γαλάζιο	Medium 0,18 - 0,23 mm	15
6" x 6"	Γαλάζιο	Heavy 0,23 - 0,28 mm	15



Βραβείο
από το
Dental Advisor
+++++

Σχόλια Συμβούλων

«Εύκολη τοποθέτηση και χρήση οδοντικού νήματος χωρίς να χρειάζεται λίπανση του απομονωτήρα».

«Είναι ίσως ο καλύτερος οδοντιατρικός απομονωτήρας που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ».

Συνολική βαθμολογία

96%

Είναι εξαιρετικά
ευέλικτο και
δεν σκίζεται ποτέ
τεντώνοντάς το.

4D RUBBER

Biodam®

Ελαστικός απομονωτήρας λάτεξ από φυσικό καουτσούκ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 100% λάτεξ από φυσικό καουτσούκ
- 100% μη τοξική χρωστική ουσία
- Χαμηλή πρωτεΐνη
- Χωρίς πούδρα
- Μη αποστειρωμένο / Μίας χρήσης
- Διατίθεται σε μπλε ή πράσινο

4+1
δωρό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μεγέθη	Χρώμα	Πάχος	Τεμάκια
5" x 5"	Μπλε	Medium 0,18 - 0,23 mm	52
6" x 6"	Μπλε	Medium 0,18 - 0,23 mm	36
6" x 6"	Μπλε	Heavy 0,23 - 0,28 mm	36
6" x 6"	Πράσινο	Medium 0,18 - 0,23 mm	36
6" x 6"	Πράσινο	Heavy 0,23 - 0,28 mm	36



HyFlex™ CM NiTi Files

Εξαιρετικά ευλύγιστες, μηχανοκίνητες ρίνες NiTi, με ελεγχόμενη μνήμη σχήματος.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ HYFLEX™ CM					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ (ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΕΓΕΘΟΣ)			ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
60011064	HyFlex™ CM NiTi Ακολουθία Ρινών, 21 mm	.04/20 21 mm .04/40 21 mm	.04/25 21 mm .06/20 21 mm	.04/30 21 mm .08/25 19 mm	1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο
60011079	HyFlex™ CM NiTi Ακολουθία Ρινών, 25 mm	.04/20 25 mm .04/40 25 mm	.04/25 25 mm .06/20 25 mm	.04/30 25 mm .08/25 19 mm	
60018294	HyFlex™ CM NiTi Ακολουθία Ρινών, 31 mm	.04/20 31 mm .04/40 31 mm	.04/25 31 mm .06/20 31 mm	.04/30 31 mm .08/25 19 mm	
	Ανταλλακτικά Ρινών. Μεγέθη: 08/25, 04/15, 04/20, 04/25, 04/30, 04/35, 04/40, 04/45, 04/50, 04/60, 06/20, 06/25, 06/30, 06/35, 06/40, σε μήκη 21, 25, 31 mm				6 ρίνες/πακέτο



HyFlex™ EDM

Η νέα γενιά ρινών HyFlex, κατασκευασμένες με μηχανική κατεργασία ηλεκτρικής εκκένωσης. Έως 700% υψηλότερη αντοχή στη θραύση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ HYFLEX™ EDM					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ (ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΕΓΕΘΟΣ)			ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
6001 9363	HyFlex™ EDM Ακολουθία ρινών NiTi Σετ ρινών διαμόρφωσης	10/.05 25 mm 25/~ 25 mm 25/.12 15 mm			1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο
6001 9364	HyFlex™ EDM Ακολουθία ρινών NiTi Σετ φινιρίσματος	40/.04 25 mm 50/.03 25 mm 60/.02 25 mm			
6002 3495	HyFlex™ EDM Shaping Set Max Curve Σετ για πολύ κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες	15/.03 25 mm 10/.05 25 mm 20/.05 25 mm			

HYFLEX EDM ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΙΝΕΣ				
6001 9596	Ρίνη διάνοιξης στομίου	25/.12	15 mm	<p>3 ρίνες/πακέτο</p>
6001 9594	Ρίνη αρχικής διεύθυνσης	10/.05	25 mm	
6004 1082	Ρίνη αρχικής διεύθυνσης	10/.05	31 mm	
6002 3492	Ρίνη αρχικής διεύθυνσης	15/.03	25 mm	
6004 1083	Ρίνη αρχικής διεύθυνσης	15/.03	31 mm	
6002 2276	Ρίνη παρασκευής	20/.05	25 mm	
6004 1084	Ρίνη παρασκευής	20/.05	31 mm	
6001 9595	HyFlex™ OneFile	25/~	25 mm	
6004 1085	HyFlex™ OneFile	25/~	31 mm	
6001 9597	Ρίνη φινιρίσματος	40/.04	25 mm	
6004 1087	Ρίνη φινιρίσματος	40/.04	31 mm	
6001 9598	Ρίνη φινιρίσματος	50/.03	25 mm	
6004 1088	Ρίνη φινιρίσματος	50/.03	31 mm	
6001 9599	Ρίνη φινιρίσματος	60/.02	25 mm	
6004 1089	Ρίνη φινιρίσματος	60/.02	31 mm	



COLTENE

HyFlex™ Remover

Μηχανοκίνητη ρίνη για την αφαίρεση της έμφραξης του ριζικού σωλήνα.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
5 τεμάχια Remover File 30/.07 σε μήκος 19 mm	6002 3649
5 τεμάχια Remover File 30/.07 σε μήκος 23 mm	6002 3648

HyFlex™ EDM - Αλληλουχία OGSF

Ρίνες Hyflex EDM που χρησιμοποιούνται σε αλληλουχία για βέλτιστα αποτελέσματα στην επεξεργασία των ριζικών σωλήνων.

Η αλληλουχία HyFlex EDM OGSF περιλαμβάνει μια νέα ρίνη διάνοιξης στομίου και δημιουργίας διαβατότητας για το άνοιγμα της διαβατότητας, καθώς και μια ρίνη διαμόρφωσης για τη διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα σε όλο το μήκος του. Η καθορισμένη διαδικασία θεραπείας καθιστά την παρασκευή εύκολη και διατηρεί την καμπύλη εκμάθησης σύντομη.

Χάρη στη βελτιστοποιημένη αντιστοίχιση των μεγεθών άκρου και των κωνικότητων, που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με τον Καθ. Pedullà, οι ρίνες παρέχουν ομαλή αίσθηση κατά τη μετάβαση από τη μία ρίνη στην άλλη και σας βοηθούν να διατηρείτε τον έλεγχο της θεραπείας.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	18 mm	21 mm	25 mm	31 mm
HyFlex EDM OGSF Σετ, 4 τεμ.		60036141	60036142	60041090
HyFlex EDM OGSF Ανταλλακτικά, 3 τεμ.				
Εργαλείο διάνοιξης στομίου 18/.11	60036140	-	-	-
Ρίνη δημιουργίας διαβατότητας 15/.3	-	60023493	60023492	60041082
Ρίνη διαμόρφωσης 18/.045	-	60036136	60036137	60041083
Ρίνη φινιρίσματος 30/.04	-	60036138	60036139	60041086

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποτελεσματική θεραπεία με υψηλή απόδοση κοπής
- Υψηλή αντοχή στη θραύση και ευκαμψία
- Κεντραρισμένη παρασκευή του ριζικού σωλήνα
- Μόνο μία ρίνη διαμόρφωσης
- Αποστειρωμένη καρτέλα
- 3 μήκη: 21, 25 και 31 mm

1
Opener

400 rpm
Μέγ. ροπή στρέψης
2,5 Ncm

2
Glider

300 rpm
Μέγ. ροπή στρέψης
1,8 Ncm

3
Shaper

400 rpm
Μέγ. ροπή στρέψης
2,5 Ncm

4
Finisher

400 rpm
Μέγ. ροπή στρέψης
2,5 Ncm

— Μήκος εργασίας

CanalPro EDTA 17%

Διάλυμα EDTA 17% για διακλυσμούς ριζικών σωλήνων.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
17%	500 ml	6001 9651

CanalPro CHX 2%

Διάλυμα διγλυκονικής χλωρεξιδίνης 2% για διακλυσμούς ριζικών σωλήνων.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
2%	500 ml	6001 9658

CanalPro Slotted-End Tips

Βελόνες διακλυσμού με πλαϊνό άνοιγμα.

Μήκος: 25 mm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
27 ga (0,4 mm)	100 τεμ. γκρι	6001 1167
30 ga (0,3 mm)	100 τεμ. ανοικτό κίτρινο	6001 1168

CanalPro Side-Port Tips

Βελόνες διακλυσμού με πλαϊνή οπή.

Μήκος: 25 mm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
27 ga (0,4 mm)	100 τεμ. γκρι	6001 1169
30 ga (0,3 mm)	100 τεμ. ανοικτό κίτρινο	6001 1170

Color Syringes

Χρωματιστές σύριγγες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Κόκκινες	50 σύριγγες/κουτί	6001 1173
Μπλε		6001 1174
Κίτρινες		6001 1175
Άσπρες		6001 1176



Paper Points **Top color**

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

Κώνιοι χάρτου με χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Συρταρωτό κουτί των 200 τεμαχίων.

Διατίθεται σε ασορτί συσκευασία 15-40 και σε μεμονωμένα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40

Συρταρωτό κουτί των 500 τεμαχίων.

Διατίθεται σε ασορτί συσκευασία 15-40 και σε μεμονωμένα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40

Συρταρωτό κουτί των 120 τεμαχίων.

Διατίθεται σε ασορτί συσκευασία 45-80 και σε μεμονωμένα μεγέθη: 45, 50, 55, 60, 70, 80

Συρταρωτό κουτί των 300 τεμαχίων.

Διατίθεται σε ασορτί συσκευασία 45-80 και σε μεμονωμένα μεγέθη: 45, 50, 55, 60, 70, 80



5+1
δωρο

Paper Points **conventional**

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

Κώνιοι χάρτου περισσότερο κωνικοί από τους ISO κώνους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Συρταρωτό κουτί των 200 τεμαχίων.

Διατίθεται σε ασορτί συσκευασία XXF-XL και σε μεμονωμένα μεγέθη XXF, XF, F

Συρταρωτό κουτί των 120 τεμαχίων.

Διατίθεται σε μεμονωμένα μεγέθη: M, L, XL



Paper Points Greater Taper 0.04

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

Κώνιοι χάρτου κωνικότητας 0.04

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συρταρωτό κουτί των 100 τεμαχίων.

Διατίθεται σε ασορτί συσκευασία 20-45 και σε μεμονωμένα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60.



Paper Points Greater Taper 0.06

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

Κώνιοι χάρτου κωνικότητας 0.06

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συρταρωτό κουτί των 100 τεμαχίων.

Διατίθεται σε ασορτί συσκευασία 20-45 και μεμονωμένα στα μεγέθη 20, 25, 30, 35, 40, 45



Guttapercha Points **Top color**

Κώννοι γουταπέρκας με χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συρταρωτό κουτί των 100 τεμαχίων.

Διατίθεται σε ασορτί συσκευασίες: 15-40 & 45-80 και σε μεμονωμένα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80.



Προσφορά

Αγοράζοντας
4 κουτιά

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Guttapercha Points HyFlex EDM Assortment

Ασορτί συσκευασία κώννων γουταπέρκας ειδικά φτιαγμένη για την έμφραξη ριζικών σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία με τις ρίνες HyFlex EDM.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συρταρωτό κουτί των 60 τεμαχίων.

Περιλαμβάνει κώννους γουταπέρκας στα μεγέθη: 20/.05, 25/~, 40/.04, 50/.03, 60/.02

ΚΩΔΙΚΟΣ

6002 2705

Guttapercha Points Greater Taper

Κώννοι γουταπέρκας κωνικότητας 0,04 και 0,06.



Προσφορά

Αγοράζοντας
4 κουτιά

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 0,04

Συρταρωτό κουτί 60 τεμαχίων.

Διατίθεται σε ασορτί συσκευασία 20-45 και σε μεμονωμένα μεγέθη: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 0,06

Συρταρωτό κουτί 60 τεμαχίων.

Διατίθεται σε ασορτί συσκευασία 20-45 και σε μεμονωμένα μεγέθη: 20, 25, 30, 35, 40, 45

Guttapercha Points HyFlex EDM OneFile 0.0~#25

Κώννοι γουταπέρκας για ριζικούς σωλήνες που έχουν υποστεί επεξεργασία με τη ρίνη OneFile 25/~



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συρταρωτό κουτί των 60 τεμαχίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ

6002 2707

Guttapercha Points Greater Taper 0.03#50

Κώννοι γουταπέρκας που αντιστοιχούν στο μέγεθος του ριζικού σωλήνα που αποδίδει η ρίνη HyFlex EDM 50/.03



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συρταρωτό κουτί των 60 τεμαχίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ

6002 2709

GuttaFlow[®] 2

Δύο σε ένα - Ρευστό σύστημα έμφραξης ριζικών σωλήνων χωρίς θέρμανση.

Συνδυάζει δύο προϊόντα σε ένα: γουταπέρκα σε σκόνη, με μέγεθος κόκκων μικρότερο των 30 μm και φύραμα.

Χρόνος εργασίας: 10 λεπτά

Χρόνος πήξης: 25-30 λεπτά



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
GuttaFlow[®] 2 Automix Standard Set 1 διπλή σύριγγα 5 ml, 12 ρύγχη ανάμειξης και 1 μπλοκ ανάμειξης.	6002 6870
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
24 ρύγχη ανάμειξης για τη σύριγγα	6001 3719

GuttaFlow[®] 2 Bioseal

Πρωτοπόρο σύστημα έμφραξης των ριζικών σωλήνων με ψυχρή γουταπέρκα, 3 σε 1: γουταπέρκα, φύραμα, βιοκεραμικά.

Χρόνος εργασίας: 5 λεπτά

Χρόνος πήξης: 12-16 λεπτά



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1 διπλή σύριγγα 5 ml, 12 ρύγχη ανάμειξης και 1 μπλοκ ανάμειξης	6001 9560

Spreader

Εργαλείο πλάγιας συμπίκνωσης γουταπέρκας.

Μεγέθη: 20, 30, 40.



Plugger

Εργαλείο κάθετης συμπίκνωσης γουταπέρκας.

Μεγέθη: 0.6 mm, 0.8 mm, 1.0 mm 1.2 mm.



Endo Frost

Σπρέι ψυχρού.

Αποδίδει θερμοκρασία -50°C

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Φιάλη 200 ml	240 000



Hysolate Flexi Dam non latex

Ελαστικός απομονωτήρας, χωρίς latex, ασφαλής και αποτελεσματικός.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ				
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΑΧΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
περίπου 15 x 15 cm	0.50 mm	βιολετί	30 τεμάχια	H09945



Surgitip

Ρύχη χειρουργικής αναρρόφησης.


Είναι αποστειρωμένα και ατομικά συσκευασμένα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ			
ΑΝΟΙΓΜΑ ΡΥΓΧΟΥΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΕΛΟΥΣ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ø 2,5 mm	Ø 6,5 mm	20 τεμ. *	462 025
Ø 4,8 mm		100 τεμ.**	462 048
Ø 2,5 mm		100 τεμ.**	462 026
Ø 4,8 mm		100 τεμ.**	462 049

* συμπτ. 1 διπλός αντάπτορας

** συμπτ. 5 διπλοί αντάπτορες για προσαρμογή σε υποδοχές Ø 11mm και Ø 16mm

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

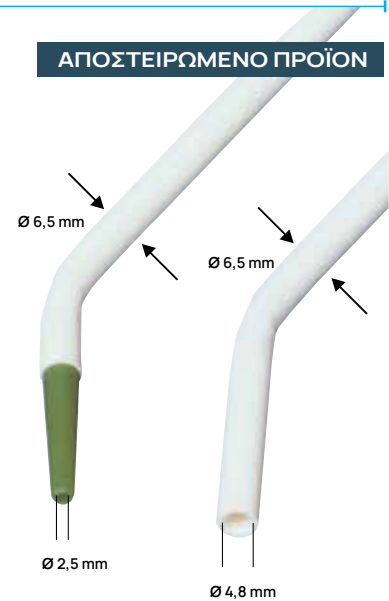

Surgitip-Micro

Μικροχειρουργικά ρύχη αναρρόφησης για χρήση με μικροσκόπιο ή μεγεθυντικούς φακούς.

Είναι αποστειρωμένα και ατομικά συσκευασμένα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			
ΑΝΟΙΓΜΑ ΡΥΓΧΟΥΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΕΛΟΥΣ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ø 1,2 mm	Ø 6,5 mm	20 τεμ. *	462 012

* συμπτ. 1 διπλός αντάπτορας

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ



Surgitip-Endo

Ρύγχος αναρρόφησης ειδικά σχεδιασμένο για το στέγνωμα των ριζικών σωλήνων.

Είναι αποστειρωμένο και ατομικά συσκευασμένο.




ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
20 Surgitip-endo κι ένας διπλός αντάπτορας	6001 8280

Aspirator Tips

Ρύγχη αναρρόφησης.

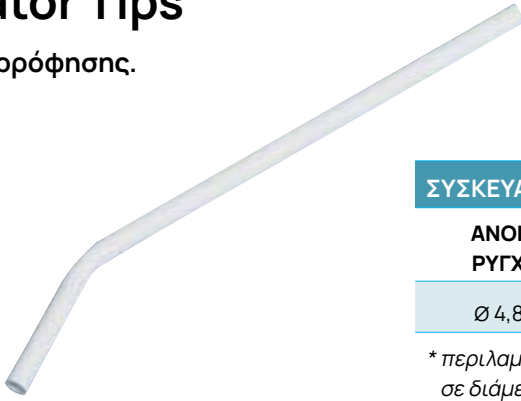

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΡΥΓΧΟΥΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΕΛΟΥΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ø 4,8 mm	Ø 6,5 mm	100 τεμ. *	461 048

* περιλαμβάνεται ένας διπλός αντάπτορας για προσαρμογή σε διάμετρο 11 mm και 16 mm

Αντάπτορας

Είναι αποστειρώσιμος στο αυτόκαυστο μέχρι τους 134°C.

ΔΙΠΛΟΣ

Για προσαρμογή του Surgitip, του Surgitip-micro, του Surgitip-endo και του Aspirator Tip, σε υποδοχές Ø 11mm και Ø 16mm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ø 6.5 έως 11 mm	1 σετ	463 000
Ø 6.5 έως 16 mm		

roeko

Luna

Τολύπια βαμβακιού εξαιρετικά απορροφητικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ 500 τεμ.	ΚΩΔΙΚΟΣ 1.000 τεμ.
1	105 001	104 001
2	105 002	104 002



Luna Gold

Τολύπιο βαμβακιού με βλεννόφιλο κάλυμμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Περιεχόμενο 300 g	1	109 121
	2	109 122
	3	109 123
Περιεχόμενο 1.000 τεμ.	1	109 101
	2	109 102
	3	109 103



Roll-o-mat

Θήκη - διανομέας τολυπίων, αποστειρώσιμη στο αυτόκαυστο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πλαστική, λευκή	134 x 100 x 48,0 mm	120 004



Cotton Pellets

Στρογγυλά βύσματα βαμβακιού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
000	3.0	1.5 g	210 000
00	4.0	4.0 g	210 100
0	4.8	4.0 g	210 110
1	6.3	10.0 g	210 111
2	7.6	10.0 g	210 112



Parotisroll

Μακρύ τολύπιο πολλαπλών χρήσεων με δράση ελατηρίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ				
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1	9	80	100 τεμάχια	160 001
2	10	80		160 002
3	10	100		160 003
5	8	100		160 005



Comprecap & Comprecap Anatomic

Συμπιεστικό πώμα για καλύτερη αποτύπωση.



Anatomic: με ανατομικό σχήμα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ COMPRECAP

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Σετ 1 3 5	150 τεμ.	530 000
1	120 τεμ.	530 008
3	120 τεμ.	530 010
5	60 τεμ.	530 014

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ COMPRECAP ANATOMIC

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Σετ 1 3 5	120 τεμ.	531 299
1	120 τεμ.	531 201
3	120 τεμ.	531 203
5	60 τεμ.	531 205

Stay-Put

Νήμα απώθησης των ούλων με μεταλλικό πυρήνα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
0 υπερλεπτό	183 cm	521 000
1 λεπτό		521 001
2 μεσαίο		521 002
3 χονδρό		521 003



roeko

Retracto

Νήμα απώθησης των ούλων.

Διατίθεται πλεγμένο και μη εμποτισμένο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
0 υπερλεπτό	225 cm	511 000
1 λεπτό		511 001
2 μεσαίο		511 002
3 χονδρό		511 003



Retracto Cord Packer

Διπλού άκρου εργαλείο από ανοξείδωτο ατσάλι. Διευκολύνει την τοποθέτηση του νήματος απώθησης γύρω από το δόντι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
λείο	1 τεμάχιο	520 000
οδοντωτό	1 τεμάχιο	520 001



Steel Separating Strips

Μιας όψης, ταινίες διαχωρισμού από ατσάλι.

Πλάτη: 4 mm, 6 mm, 8 mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	
4 mm	570004
6 mm	570006
8 mm	570008



Gelatamp

Απορροφήσιμος σπόγγος Ζελατίνης με κολλοειδή άργυρο για αιμόσταση και πρόληψη της μόλυνσης.

Ο κολλοειδής άργυρος έχει μακράς διάρκειας μικροβιοκτόνο δράση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
14 x 7 x 7 mm	50 τεμάχια	274 007

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ



Gelatamp Blister Pak

Ο σπόγγος Ζελατίνης Gelatamp διατίθεται και σε συσκευασία φυσαλίδας για διανομή ένα προς ένα τεμάχιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
14 x 7 x 7 mm	20 τεμάχια	274 008

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ



NEO Gelatamp White

Αιμοστατικός σπόγγος Ζελατίνης.

Το Gelatamp White είναι ένας τυπικός κυβικός σπόγγος ζωικής προέλευσης, μεγέθους 10 x 10 x 10 mm.

Ο σπόγγος έχει ομοιόμορφο λευκωπό χρώμα και ομοιόμορφο πορώδες.

Το Gelatamp White έχει ως σκοπό να διευκολύνει τη διακοπή της αιμορραγίας και τον σχηματισμό ενός αιμοστατικού βύσματος.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Απορρόφηση υγρών και υποβοήθηση της πήξης
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνό ή εμποτισμένο με αποστειρωμένο φυσιολογικό διάλυμα.
- Απορροφάται εντός 3-4 εβδομάδων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
24 μεμονωμένοι σπόγγοι Gelatamp White, συσκευασμένοι σε blister.	6005 2842

Steri-Quick

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

Αποστειρωμένα καλύμματα.

Φύλλο πολυαιθυλενίου με επικάλυψη απορροφητικής κυτταρίνης.

Διατίθενται σε νέο χρώμα: ανοικτό πράσινο και νέα συσκευασία-διανομέα.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
350 x 500 mm	80 τεμ.	671 100
500 x 700 mm	50 τεμ.	671 101
700 x 1000 mm	25 τεμ.	671 102

Steri-Sleeve

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

Αποστειρωμένο «μανίκι» για τις σωληνώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
7.5 x 100 cm	25 τεμ.	670 101



Headrest covers

Καλύμματα ερεισικεφάλου σε ρολό.

Κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο με επικάλυψη απορροφητικής κυτταρίνης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1 27 x 28 cm	100 τεμάχια	670 007
2 27 x 31 cm		670 008
3 27 x 34 cm		670 009



Endomethasone N

Φύραμα ιδανικό για μόνιμη έμφραξη ριζικών σωλήνων, με αντιφλεγμονώδη δράση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1x 14 g φιαλίδιο σκόνης και 1 κουταλάκι μέτρησης



Biodentine™

Βιοενεργό υποκατάστατο της οδοντίνης που τοποθετείται όπου εκείνη έχει καταστραφεί.

Το Biodentine™ είναι το μοναδικό υποκατάστατο οδοντίνης που βασίζεται στην Τεχνολογία του Ενεργού Βιοπυριτίου σχεδιασμένο να θεραπεύει την κατεστραμμένη οδοντίνη σε αποκαταστάσεις μύλης και ενδοδοντικές θεραπείες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

Συσκευασία 5 καψουλών και 5 αμπούλων μονής δόσης

Συσκευασία 15 καψουλών και 15 αμπούλων μονής δόσης



Alveogyl

Πάστα ινώδους σύστασης που χρησιμοποιείται ως επίθεμα σε ξηρό φατνίο ανακουφίζοντας τον πόνο καθώς και ως επίθεμα μετεξακτικού φατνίου, για πρόληψη δημιουργίας ξηρού φατνίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Βάζο των 10 g



AH - 26 Silver Free

Φύραμα για εμφράξεις ριζικών σωλήνων.

Εποξυ-αμινική ρητίνη με άριστη πρόσφυση στα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Σετ 8 g σκόνη, 10 g πάστα.	60621101
10 g πάστα	60621102



AH Plus - AH Plus jet

Φύραμα για εμφράξεις ριζικών σωλήνων σε μορφή πάστα / πάστα και σε σύριγγα.

Βασίζεται στη χημεία των εποξυ-αμιδικών ρητινών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
AH plus σετ, πάστα A 4 ml και πάστα B 4 ml	60620110
AH plus jet kit, 1 σύριγγα 15 g, 20 ρύγχη, 1 χαρτί ανάμειξης, οδηγός	60620115
AH plus jet, 2x σύριγγα 15 g	60620118
AH plus jet ρύγχη ανάμειξης	60620116



Dycal

Ταχύηκτο σκεύασμα υδροξειδίου του ασβεστίου.



Labaraque

Υποχλωριώδες νάτριο.



Cavit™ G 3M ESPE

Υλικό για προσωρινές εμφράξεις με υψηλή επιφανειακή σκληρότητα, εύκολη τοποθέτηση κι εύκολη αφαίρεση.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Φιαλίδιο 28 g. Χρώμα γκρι.	44313G

myQuickmat *νέο!* Prime

Νέο σύστημα τμηματικών τοιχωμάτων και δακτύλιου συγκράτησης που απλοποιεί τη συνολική διαδικασία αποκατάστασης II ομάδας.

Δεν απαιτείται σφήνα.

- Απλοποιημένο σύστημα για τα πίσω δόντια το οποίο μειώνει τον χρόνο στην καρέκλα
- Κεκαμμένος δακτύλιος με αυτοκεντρούμενα σφηνοειδή άκρα τα οποία καθοδηγούν την εισαγωγή του τμηματικού τοιχώματος φυσικά, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικό αμφοτερόπλευρο διαχωρισμό των γειτονικών δοντιών με βέλτιστη προσαρμογή του τοιχώματος και αυθεντική σφράγιση.



myTines Prime

Άκρα με ενσωματωμένη σφήνα.

myRing Prime

Δακτύλιος από ανοξείδωτο ατσάλι

- κεκαμμένος δακτύλιος ώστε να μην παρεμβαίνει με τα παρακείμενα δόντια.



Quickmat Prime matrices


Ανατομικά τμηματικά τοιχώματα, που επιτρέπουν την ακριβή θέση του σημείου επαφής.



myQuickmat Prime Kit
REF 6890

2 τεμ. myRing Prime
10 Ζεύγη myTines Prime
100 τεμ. τοιχώματα Quickmat Prime


Ράμματα απορροφήσιμα **ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ**

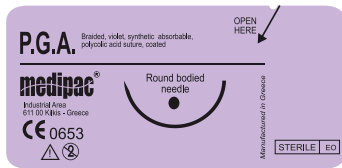

P.G.A.

Συνθετικό, απορροφήσιμο, πλεκτό, πολύκλωνο, ιώδες χειρουργικό ράμμα πολυγλυκολικού οξέος με επικάλυψη. Απορρόφηση: 60-90 ημέρες.


ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
9621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	Πακέτο 24 τεμαχίων
9622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
9623	3/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
9632	4/0	45 cm	19 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	

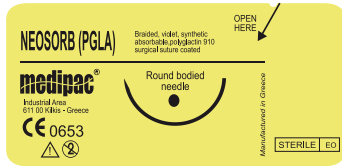

NEOSORB (PGLA)

Συνθετικό, απορροφήσιμο, πλεκτό, πολύκλωνο, ιώδες χειρουργικό ράμμα πολυλακτίνης 910 με επικάλυψη. Απορρόφηση: 56-70 ημέρες.


ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
N610	6/0	45 cm	12 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	Πακέτο 24 τεμαχίων
N621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
N622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
N632	4/0	45 cm	19mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	

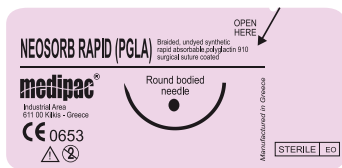

NEOSORB RAPID (RPGLA)

Ταχύτερης απορρόφησης, συνθετικό, πλεκτό, πολύκλωνο ιώδες χειρουργικό ράμμα πολυλακτίνης 910 με επικάλυψη. Απορρόφηση: 42 ημέρες.


ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
NR610	6/0	45 cm	12 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	Πακέτο 24 τεμαχίων
NR621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
NR622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
NR632	4/0	45 cm	19mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	

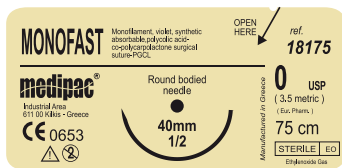

MONOFAST

Συνθετικό, απορροφήσιμο, μονόκλωνο, ιώδες χειρουργικό ράμμα πολυγλυκαπρόνης. Απορρόφηση: 90-110 ημέρες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
18610	6/0	45 cm	12 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	Πακέτο 24 τεμαχίων
18621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
18622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
18632	4/0	45 cm	19mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	

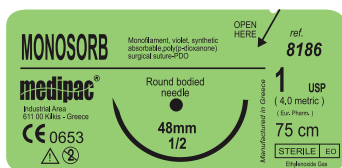

MONOSORB


Συνθετικό, απορροφήσιμο, μονόκλωνο, ιώδες χειρουργικό ράμμα πολυδιοξανόνης. Απορρόφηση: 180-220 ημέρες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
8611	5/0	45 cm	12 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	Πακέτο 24 τεμαχίων
8621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
8622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
8632	4/0	45 cm	19mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	

Όλα τα χειρουργικά ράμματα Medipac είναι διαθέσιμα σε ευρεία ποικιλία συνδυασμών μήκους-διαμέτρου και βελόνας.

Ράμματα μη απορροφήσιμα

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

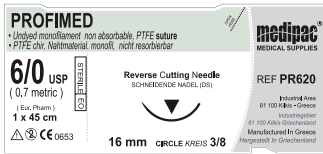


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

- Περιοδοντολογικές & εμφυτευματικές επεμβάσεις
- Αναγέννηση μαλακού ιστού
- Καθοδηγούμενη ιστική & οστική ανάπτυξη (GTR, GBR)


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100% καθαρό PTFE (χωρίς προσθήκη χρωστικών ουσιών ή πρόσθετα)
- Άριστη βιοσυμβατότητα. Το PROFIMED είναι βιολογικά και χημικά αδρανές. Επιπρόσθετα, η μονόκλωνη υφή του αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων η οποία σχετίζεται με τα πολύκλινα ράμματα.
- Ταίριαζει ιδανικά για την εφαρμογή των μοσχευμάτων
- Πολύ μαλακό, για την ευκολία χειρισμών και την αποφυγή τραυματισμών
- Υψηλή αντοχή στην έλξη

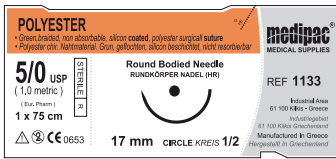


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεγάλη ισχύς
- Ελάχιστη αντίδραση ιστού
- Ευκολία χειρισμού
- Καμία απώλεια ισχύος (ενθάλκωση σε ιστό).

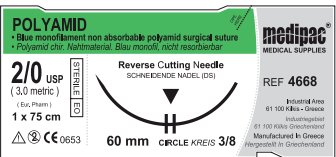

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μειωμένη αντίδραση
- Αδρανές
- Χάνει την ισχύ του 15-20% κάθε χρόνο
- Ευκολία χειρισμού
- Ομαλό πέρασμα απο τους ιστούς
- Ελαστικότητα.

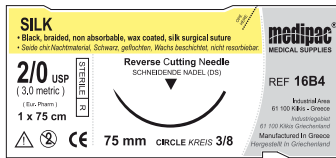

PROFIMED

Μη απορροφήσιμο, μονόκλωνο, άχρωμο χειρουργικό ράμμα PTFE.

ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
PR611 Z	5/0	45 cm	12 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	Πακέτο 24 τεμαχίων
PR620 Z	6/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
PR622 Z	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
PR623 Z	3/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
PR632 Z	4/0	45 cm	19mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	

Polyester

Μη απορροφήσιμο, πολύκλωνο, πράσινο χειρουργικό ράμμα από πολυεστέρα, επικαλυμμένο με σιλκόνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
5621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	Πακέτο 24 τεμαχίων
5622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
5632	4/0	45 cm	19 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
5633	3/0	75 cm	19 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	

ΧΡΗΣΗ

Καρδιοχειρουργικά, Αντικατάσταση βαλβίδας, Γενική χειρουργική, Ορθοπαιδική, Οδοντιατρικά.

Polyamid

Μη απορροφήσιμο, μονόκλωνο, γαλάζιο χειρουργικό ράμμα από πολυαμίδιο (νάιλον).

ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
4621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	Πακέτο 24 τεμαχίων
4622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
4623	3/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
4632	4/0	45 cm	19 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	

ΧΡΗΣΗ

Οφθαλμολογία, Οδοντιατρική, Δέρμα.

Silk


Μη απορροφήσιμο, πολύκλωνο, πλεκτό, μαύρο χειρουργικό ράμμα από μετάξι, επικαλυμμένο με κερί.

ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	Πακέτο 24 τεμαχίων
1622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
1623	3/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
1632	4/0	75 cm	19 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
1633	3/0	75 cm	19 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	

PROPYLEN

Μη απορροφήσιμο, μονόκλωνο, γαλάζιο χειρουργικό ράμμα από πολυπροπυλένιο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
6620	6/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	Πακέτο 24 τεμαχίων
6621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
6622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	
6632	4/0	45 cm	19 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	

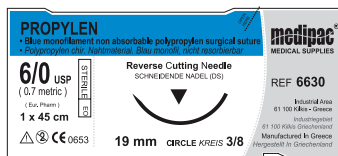

Η δύναμη της SprintRay βρίσκεται στην

Σάρωση, εκτύπωση και μετεπεξεργασία σχεδιασμένες να συνεργάζονται,

Midas Digital Press

Ιδανικό για:


-  Στεφάνες
-  Όψεις
-  Ένθετα
-  Επένθετα

Σάρωση >



Σαρωτής*

Σχεδιασμός >

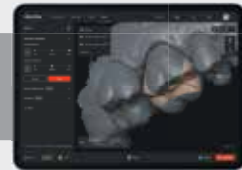











AI Studio

Digital Press

Pro 2 Digital Printer

Ιδανικό για:

-  Οδοντιατρικά Εκμαγεία
-  Απευθείας Εκτυπωμένα Retainer
-  Χειρουργικούς Νάρθηκες
-  Συμβατικές Οδοντοστοιχίες
-  Υβριδικές Οδοντοστοιχίες
-  Δοκιμαστικές Οδοντοστοιχίες
-  Στεφάνες και Γέφυρες
-  Όψεις
-  Νάρθηκες Σύγκλισης
-  Αθλητικούς Νάρθηκες

Σάρωση >



Σαρωτής*

Σχεδιασμός >



Σχεδιασμός Cloud


Ψηφιακή
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

*Σαρωτής τρίτων, δεν διατίθεται από την SprintRay



Ολοκληρωμένη Επικυρωμένη Ροή Εργασίας

για μια εμπειρία χωρίς προβλήματα.

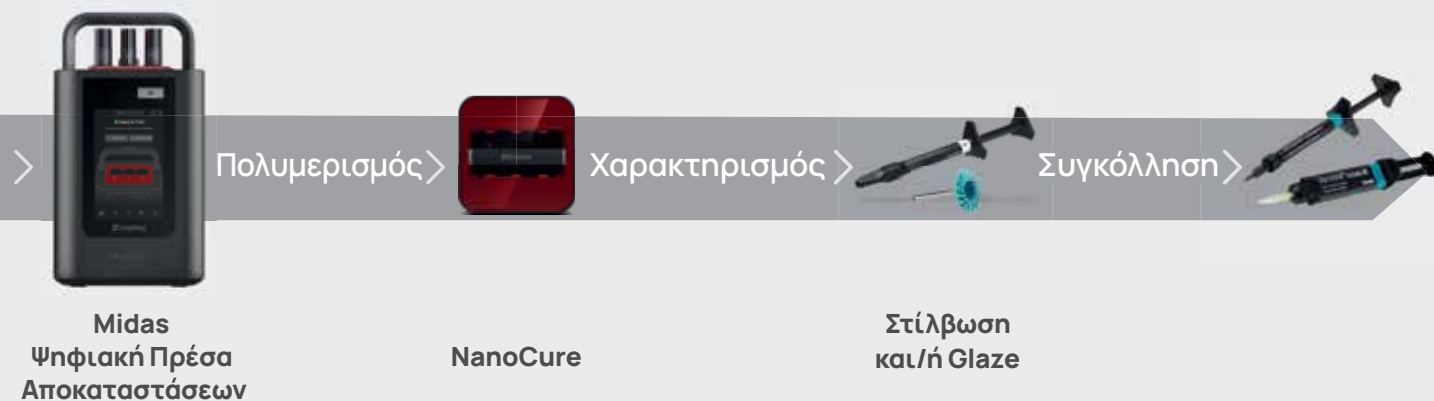

Gen-Os

Οστικό μόσχευμα σε κόκκους, με διατηρημένο κολλαγόνο.

Αρχικός ιστός

Μείγμα σπογγώδους και φλοιώδους ετερόλογου οστού

Κολλαγόνο ιστού

Διατηρημένο

Φυσική φόρμα

Κόκκοι ελαφρώς ακτινοσκιεροί

Μέγεθος κόκκου

Στάνταρ 250-1.000 μm

Χρόνος επανεισόδου

4/5 μήνες, εξαρτάται όμως από τα χαρακτηριστικά της περιοχής μεταμόσχευσης

Χαρακτηριστικά

Φυσική αναπαραγωγή του αυτόλογου οστού, το μόσχευμα **Gen-Os** διατηρεί τα ίδια ενδογενή χαρακτηριστικά (Θεμέλια ουσία και πορώδη δομή) και εμφανίζει υψηλή οστεοαγωγιμότητα. Είναι φυσικής προέλευσης και βιοσυμβατό όπως αποδεικνύεται από δοκιμασίες που έγιναν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10993 στο Università degli Studi di Torino.

Το μόσχευμα **Gen-Os** είναι απορροφήσιμο και υποστηρίζει την οστική ανάπτυξη διατηρώντας το αρχικό σχήμα και όγκο του μοσχεύματος (οστεοκαθοδήγηση). Επιπλέον, χάρη στο κολλαγόνο που περιέχει το προϊόν διευκολύνει το σχηματισμό θρόμβου και την επακόλουθη εισβολή κυττάρων επούλωσης και ανάπτυξης τα οποία μέσα από τη διαδικασία υποκατάστασης και ενσωμάτωσης του μοσχεύματος, προάγουν την ανάπτυξη του ελλείποντος οστού.

Εξαιτίας της χαρακτηριστικής "υγροσκοπικότητας", το μοσχευματικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεταφορέας για επιλεγμένα σκευάσματα και φάρμακα υγρής σύστασης.

Κλινικές εφαρμογές

Χειρουργική στόματος, Περιοδοντολογία, Εμφυτευματολογία.

Χειρισμός

Πρέπει να αναμειγνύεται με μερικές σταγόνες αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό ή με το αίμα του ασθενή.



Προσφορά

Αγοράζοντας
3 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ


Φιαλίδιο 0,5 gr

Φιαλίδιο 1,0 gr

Φιαλίδιο 2,0 gr



Πλάγια πρόσβαση κατά την Ανύψωση Ιγμορείου.

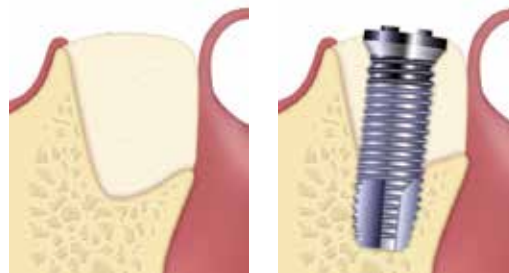

Μόσχευμα σε ελλείμματα 2 τοιχωμάτων με άμεση ή μεταγενέστερη τοποθέτηση εμφυτεύματος.



Ενδοοστικά ελλείμματα

GTO®

Έτοιμο προς χρήση, προενυδατωμένο βιοϋλικό, με ιδανική κολλώδη σύσταση.

Διατίθεται σε σύριγγα κι ενίεται κατευθείαν στην ελλειμματική περιοχή.

Αρχικός ιστός

Ετερόλογο οστικό μείγμα συμπαγούς-σπογγώδους οστού

Κολλαγόνο ιστού

Διατηρημένο

Φυσική φόρμα

Προενυδατωμένοι κόκκοι και OsteoBiol® TSV Gel

Σύνθεση

- 80% μείγμα οστικών κόκκων

- 20% OsteoBiol® TSV Gel

Κοκκομετρία

600-1.000 μm

Χρόνος επανεισόδου

περίπου 5 μήνες

Χαρακτηριστικά

Το **OsteoBiol® GTO®** είναι ένα ετερόλογο οστικό μόσχευμα. Είναι ένα μείγμα κολλαγονούχων κόκκων συμπαγούς και σπογγώδους οστού με κοκκομετρία που κυμαίνεται από 600 έως 1.000 μm, κατάλληλα αναμεμιγμένο με **OsteoBiol® TSV Gel** (μείγμα γέλης ετερόλογου, τύπου I και II κολλαγόνου με πολυακρόεστα λιπαρά οξέα και ένα βιοσυμβατό συνθετικό συμπολυμερές θερμοσχηματισμού ζελέ, αραιωμένο σε υδατικό διάλυμα).

Χειρισμός

Το **OsteoBiol® GTO®** διατίθεται σε σύριγγα κι ενίεται κατευθείαν στην ελλειμματική περιοχή.

Η παρουσία του **OsteoBiol® TSV Gel** εξασφαλίζει την ιδανικά κολλώδη σύσταση του υλικού το οποίο προσαρμόζεται εύκολα στη λήπτρια θέση και είναι εξαιρετικά σταθερό.



Προσφορά

Αγοράζοντας
3 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σύριγγα: 0,5 cc

OsteoBiol®
by Tecness



Ανοικτή ανύψωση ιγμορείου



Ενδοοστικά ελλείμματα



Περιεμφυτευματικές βλάβες



Οριζόντια αύξηση



Αναγέννηση ακρολοφίας

mp3

Οστικό μόσχευμα σε σύριγγα.
Είναι ιδανικό για τοποθέτηση κατά την
Ανύψωση Ιγμορείου με πλάγια πρόσβαση.

Αρχικός ιστός

Μείγμα ετερόλογου φλοιώδους - σπογγώδους οστού
με κολλαγόνο

Κολλαγόνο ιστού

Περίπου 10% (GEL 0)

Φυσική φόρμα

Προ-ενυδατωμένοι κόκκοι και γέλη κολλαγόνου

Μέγεθος κόκκου

600-1.000 μm

Χρόνος επανεισόδου

Περίπου 5 μήνες

Κλινικές εφαρμογές

- **Χειρουργική στόματος και Εμφυτευματολογία:**
Το **mp3** λόγω του μεγέθους των κόκκων και της σύστασής του είναι ιδανικό για απευθείας τοποθέτηση κατά την Ανύψωση Ιγμορείου με πλάγια πρόσβαση.
Οι μεμβράνες **OsteoBiol Evolution** συνιστάται να καλύπτουν την ανδροστομία.
- Το mp3 σε συνδυασμό με μεμβράνες **Evolution** χρησιμοποιείται επιτυχώς για τη διατήρηση της φατνιακής ακρολοφίας.
- Ενδείκνυται για οριζόντια αύξηση ακρολοφίας (σε ελλείμματα δύο τοιχωμάτων) σε συνδυασμό με αυτογενή μπλοκ οστού ή με το οστικό έλασμα **OsteoBiol Lamina**.

Χειρισμός

Είναι διαθέσιμο σε έτοιμες προς χρήση σύριγγες και τοποθετείται κατευθείαν στην περιοχή του ελλείμματος.



Προσφορά

Αγοράζοντας
3 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Αποστειρωμένη σύριγγα 1 cc
(εξωτερική διάμ. 7mm, εσωτερική διάμ. 6mm)



Putty

Οστικό μόσχευμα σε μορφή πάστας ζυμώδους σύστασης.

Αρχικός ιστός

Μείγμα συμπαγούς και σπογγώδους ετερόλογου οστού

Κολλαγόνο ιστού

Διατηρημένο

Φυσική φόρμα

Οστική πάστα ζυμώδους σύστασης αποτελούμενη από γέλη κολλαγόνου, εμπλουτισμένου κατά 80% από κόκκους οστικού μείγματος

Μέγεθος κόκκου

≤ 300 μm

Χρόνος επανεισόδου

Περίπου 4 μήνες

Χειρισμός

Το υλικό τοποθετείται και εφαρμόζεται στη μορφολογία της βλάβης χωρίς συμπίεση. Κάθε ανυποστήρικτο και ασταθές υπόλειμμα μόσχευματος πρέπει να απομακρύνεται πριν τη συρραφή των μαλακών ιστών.

Κλινικές εφαρμογές

Εμφυτευματολογία: Ευέλικτο οστικό μόσχευμα για τη διατήρηση του όγκου της φατνιακής ακρολοφίας και σε άμεσα, μετά την εξαγωγή, εμφυτεύματα για πλήρωση του περιεμφυτευματικού χώρου. Ιδανικό για τη θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας και διάσχισης της φατνιακής ακρολοφίας. Στην κλειστή ανύψωση ιγμορείου, το Putty μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το **Gen-Os** (1 μέρος Putty, 3 μέρη Gen-Os) για ευκολότερη τοποθέτηση.

Γναθοχειρουργική: Ιδανικό για την πλήρωση των μετεξακτικών φατνίων, σε κοκκώματα και οδοντογενείς κύστεις.



Προσφορά

Αγοράζοντας
3 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 σύριγγα 0,5 cc (1 gr)

OsteoBio[®]
by Tecness

Gel 40

Οστικό μόσχευμα λεπτόκοκκο, σε σύριγγα.

Αρχικός ιστός

Μείγμα ετερόλογου σπογγώδους και φλοιώδους οστού

Κολλαγόνο ιστού

Διατηρημένο

Φυσική φόρμα

Γέλη κολλαγόνου ενισχυμένη με 60% μείγμα οστού

Μέγεθος κόκκου

Λεπτό ≤ 300 μm

Χρόνος επανεισόδου

Περίπου 4 μήνες

Κλινικές εφαρμογές

Οι εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού του **Gel 40** το καθιστούν ιδανικό για κλειστή ανύψωση ιγμορείου, για αποκατάσταση βαθιών και στενών περιεμφυτευματικών ελαττωμάτων, ενδοοστικών ελαττωμάτων τριών τοιχωμάτων και - σε συνδυασμό με μεμβράνες **Evolution** - ουλικών υφιστάσεων.

Χειρισμός

Απευθείας τοποθέτηση στην περιοχή του ελλείμματος.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 σύριγγα 0,5 cc

Lamina

Οστικό μόσχευμα σε μορφή ελάσματος.

Αρχικός ιστός

Ετερόλογο συμπαγές οστό

Κολλαγόνο ιστού

Διατηρημένο

Φυσική φόρμα

Αποξηραμένο έλασμα, εύκαμπτο μετά από εφύγρυνση

Πάχος

Κανονικό (2-4mm) - λεπτό (0,4 - 0,6mm)

Χρόνος επανεισόδου

Κανονικό περίπου 8 μήνες - λεπτό περίπου 5 μήνες

Χειρισμός

Το μαλακό συμπαγές έλασμα μπορεί να διαμορφωθεί με αποστειρωμένο ψαλίδι στο επιθυμητό σχήμα και στη συνέχεια πρέπει να εφυγρυνθεί για 5-10 λεπτά σε αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό.

Όταν αποκτήσει την επιθυμητή πλαστικότητα μπορεί να προσαρμοστεί στη θέση του μοσχεύματος.

Κανονικά πρέπει να σταθεροποιηθεί με βίδες τιτανίου ή να συρραφεί απευθείας στους περιβάλλοντες ιστούς με μια τριγωνικής διατομής ατραυματική βελόνα.

Σε περίπτωση αποκάλυψης πρέπει να αφαιρεθεί μόνο αν υπάρχει φανερή επιμόλυνση επειδή η πλαστικότητα και η σύστασή του είναι τέτοιες που επιτρέπουν την επούλωση κατά δεύτερο σκοπό.



Κλινικές εφαρμογές

Στοματική χειρουργική και Τραυματολογία:

σταθεροποίηση και προστασία μεγάλων αναπλάσεων με κίνδυνο αποκάλυψης, όπου προσαρμόζεται τέλεια τόσο στο υποκείμενο οστό όσο και στους μαλακούς ιστούς.

Εμφυτευματολογία: ιδανικό για προστασία και σταθεροποίηση μοσχευμάτων δύο τοιχωμάτων ή περιεμφυτευματικές αναπλάσεις σε αισθητικές περιοχές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κανονικό 30x30 mm

Λεπτό 25x25 mm

Curved Cortical Lamina

Οστικό μόσχευμα σε μορφή προσηματισμένου καμπύλου ελάσματος.

Αρχικός ιστός

Ετερόλογο συμπαγές οστό

Κολλαγόνο ιστού

Διατηρημένο

Φυσική φόρμα

Σκληρό αποξηραμένο έλασμα

Πάχος

Μεσαίο 1,0 mm (±0.1)

Χρόνος επανεισόδου

Περίπου 6 μήνες

Χειρισμός

Το μόσχευμα **Curved Cortical Lamina** δεν πρέπει να εφυγραινεται και μπορεί να διαμορφωθεί με αποστειρωμένο ψαλίδι μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό μέγεθος. Όταν διαμορφωθεί για να καλύψει πλήρως το οστικό έλλειμμα, πρέπει να ακινητοποιείται με μικροβίδες τιτανίου: συστήνεται να γεμίζετε το έλλειμμα με **OsteoBiol mp3** ή **OsteoBiol Gen-Os**.


Σε περίπτωση αποκάλυψης, θα πρέπει να αφαιρείται μόνο όταν υπάρχει φανερή επιμόλυνση, γιατί η σύστασή του είναι τέτοια που επιτρέπει μια πλήρη επούλωση του τραύματος κατά δεύτερο σκοπό.

Κλινικές εφαρμογές

Στοματική χειρουργική και Τραυματολογία:

σταθεροποίηση και προστασία μεγάλων αναπλάσεων με κίνδυνο αποκάλυψης.

Εμφυτευματολογία: ιδανικό για προστασία και σταθεροποίηση μοσχευμάτων σε ελλείμματα δύο τοιχωμάτων.

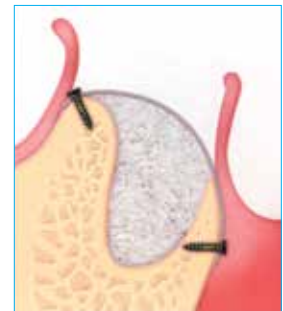

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 τεμάχιο 35 x 35 mm

Evolution

Αποξηραμένη μεμβράνη.

Αρχικός ιστός

Ετερόλογο περιτόναιο (χοίρεια), ετερόλογο περικάρδιο (ίππεια)

Κολλαγόνο ιστού

Διατηρημένο

Φυσική φόρμα

Αποξηραμένη μεμβράνη με μια λεία πλευρά και μια μικρο-αδρή πλευρά

Πάχος

Κανονικό (0,5 - 0,7 mm) - λεπτό (0,3 - 0,5 mm)

Εκτιμώμενος χρόνος απορρόφησης

Περίπου 4 μήνες (κανονική), 3 μήνες (λεπτή)

Κλινικές εφαρμογές

Χειρουργική στόματος, αντιμετώπιση τραυμάτων, Εμφυτευματολογία, Περιοδοντολογία.


Χειρισμός

Η μεμβράνη μπορεί να σχηματιστεί με αποστειρωμένο ψαλίδι. Θα πρέπει κατόπιν να επανενυδατωθεί με χλιαρό φυσιολογικό ορό. Όταν αποκτήσει την επιθυμητή πλαστικότητα, εφαρμόζεται στην περιοχή του μόσχευματος. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, η μεμβράνη **Evolution** αποκαλυφθεί, δεν πρέπει να αφαιρεθεί.

Η πυκνή μήτρα κολλαγόνου της Evolution προστατεύει το μόσχευμα από τη μόλυνση.

Επίσης, η ίδια η μεμβράνη δεν θα μολυνθεί, επιτρέποντας την επούλωση κατά δεύτερο σκοπό.

Τύποι

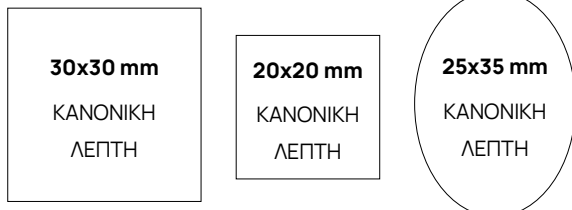

Προσφορά

Αγοράζοντας
3 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κανονική 20 x 20 mm

Κανονική 30 x 30 mm

Λεπτή 20 x 20 mm

Λεπτή 30 x 30 mm

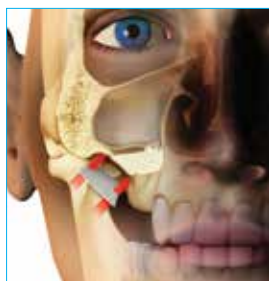

Κάλυψη ανδροστομίας.



Προστασία μόσχευματος σε έλλειμμα δύο τοιχωμάτων με άμεση ή μεταγενέστερη τοποθέτηση εμφυτεύματος.



Προστασία μόσχευματος σε ενδοστικό έλλειμμα.



Προστασία μόσχευματος τεμαχίου σπογγώδους οστού.

Derma

Αποξηραμένη μεμβράνη.

Αρχικός ιστός

Χοίρειο δέρμα

Κολλαγόνο ιστού

Διατηρημένο

Φυσική φόρμα

Αποξηραμένη μεμβράνη

Πάχος

Λεπτό: 0,9 mm (\pm 0,1 mm)

Κανονικό: 2,0 mm (\pm 0,2 mm)

Εκτιμώμενος χρόνος απορρόφησης

Λεπτή: περίπου 3 μήνες

Κανονική: περίπου 4 μήνες

Κλινικές εφαρμογές

Προστασία μοσχεύματος

Είναι μια απορροφούμενη κολλαγονούχα μεμβράνη για την προστασία και τη σταθεροποίηση οστικών μοσχευμάτων. Μόνο σε αυτήν την ειδική ένδειξη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε καταστάσεις ανοικτής επούλωσης, χάρη στην τέλεια ενσωμάτωσή της στους ιστούς.

Βελτίωση μαλακού ιστού

Εάν υπάρχει ακόμα υπολοιπόμενος κερατινοποιημένος ιστός γύρω από δόντια ή εμφυτεύματα, η μεμβράνη **Derma** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτικό του μοσχεύματος συνδετικού ιστού, για να βελτιώσει την ποιότητα του κερατινοποιημένου ιστού.

Υφιζήσεις ούλων

Ήπιες ουλικές υφιζήσεις μπορούν να θεραπευτούν με την **Derma** για να αποφευχθεί η δυσφορία και ταλαιπωρία του ασθενή από τη λήψη μοσχεύματος συνδετικού ιστού. Συστήνεται να αφήσετε τη μεμβράνη **Derma** πλήρως καλυμμένη από τον μυλικά κατευθυνόμενο κρημό και να αποφεύγεται η έκθεσή της. Μια κατάλληλα διαμορφωμένη μεμβράνη **Derma** με αποστρογγυλεμένα άκρα, ενδείκνυται επίσης για την τεχνική "τούνελ".

Χειρισμός

Η μεμβράνη **Derma** μπορεί να διαμορφωθεί με ψαλίδι μέχρι το επιθυμητό μέγεθος. Κατόπιν, πρέπει να ενυδατωθεί για 5 λεπτά σε αποστειρωμένο χλιαρό φυσιολογικό ορό. Όταν αποκτήσει την επιθυμητή πλαστικότητα, πρέπει να προσαρμοστεί στην περιοχή του μοσχεύματος. Συστήνεται πάντα να προετοιμάζετε μια υποδοχή με ένα μοχλό, με σκοπό να σταθεροποιήσετε τη μεμβράνη στην περιοχή μετά τη συρραφή του κρημού.



Προσφορά

Αγοράζοντας
3 συσκευασίες

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Λεπτή 25 x 25 mm

Κανονική 30 x 30 mm

Κανονική 15 x 5 mm



Αναγέννηση ακρολοφίας



Αναγέννηση περιodontίου



Αύξηση μαλακού ιστού

copaSKY

με κωνική-παράλληλη σύνδεση
και μικροδομημένο εξωτερικό κώνο


Λεπτό



3.0 mm




Υπό γωνία

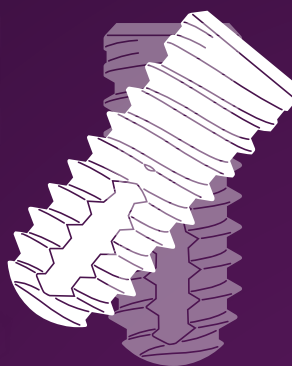

Up to 35°

Πολύ κοντό

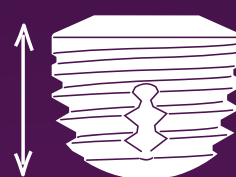

5.2 mm



SCAN ME

ΤΕΛΕΙΟ

- για κάθε κατάσταση οστού.
- για όλες τις ενδείξεις.
- για άμεση αποκατάσταση.
- για ψηφιακές ροές εργασίας.




Bone Growth Concept

Χάρη στον εξωτερικό κώνο με τη μικροδομημένη επιφάνειά του και την υποοστική τοποθέτηση του εμφυτεύματος, δημιουργείται νέο οστό, που περικλείει πλήρως το εμφύτευμα.

SDI | STELA

ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ

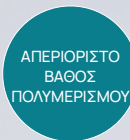

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ
ΡΗΤΙΝΩΝ



Vitsaropoulos
COMPLETE DENTAL SOLUTIONS

Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή • T: 210 65 41 340 F: 210 65 41 618 • ask@vitsaropoulos.gr

vitsaropoulos.gr facebook.com/vitsaropoulos instagram.com/vitsaropoulos_m_sa youtube.com/@mvitsaropoulos